

KATANA™ Cleaner

Pro intraorální i extraorální použití



Pro všechny záchovné procedury

Odstraňuje kontaminaci za účelem optimalizace vašich adhezivních postupů. Při zkoušce náhrady v ústech může dojít k její kontaminaci proteiny, které snižují vazebnou pevnost. KATANA™ Cleaner má vysoký čisticí účinek díky povrchově aktivní schopnosti soli MDP.

Na rozdíl od jiných čisticích prostředků má KATANA™ Cleaner hodnotu pH 4,51, což umožňuje použití nejen extraorálně, ale rovněž intraorálně. Jde tak o snadný způsob, jak optimalizovat vaše vazebná rozhraní, a to včetně procedur cementování.

1. Způsob měření: JIS Z 8802:2011


Široká škála indikací: intraorální i extraorální použití

Díky šetrné hodnotě pH 4,5 je možné používat KATANA™ Cleaner nejen extraorálně, ale rovněž intraorálně, díky čemuž máte k dispozici všestranný univerzální čisticí prostředek vhodný jak pro strukturu zubu, tak pro protetiku.



Intraorální použití:

Kavita, pahýl zubu, kořenový kanálek

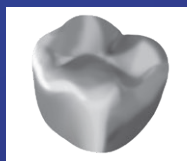

Protetika:

Keramika (zirkon, lithium disilikát, vrstvená keramika)

Materiály na bázi pryskyřice (CAD/CAM korunky, kompozitní pryskyřice)


Kovy (slitiny ušlechtilých/neušlechtilých kovů)

Čepy (čepy ze skleněných vláken, kovové čepy)




Snadná a rychlá procedura

Vetřete, opláchněte a osušte. To je vše, co musíte udělat, abyste optimalizovali svůj adhezivní postup. Na rozdíl od jiných čisticích prostředků, které vyžadují delší dobu vtírání a jsou omezeny pouze na extraorální použití, **KATANA™ Cleaner vyžaduje pouze 10 sekund a lze jej použít jak intraorálně, tak extraorálně.**

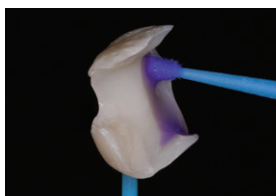

Naneste a vtírejte KATANA™ Cleaner po dobu nejméně 10 sekund. Naneste jak na protetickou práci, tak na strukturu zubu intraorálně.

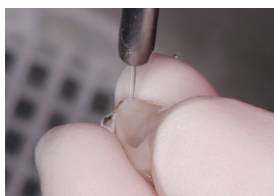

Opláchněte a osušte.



Nacementujte náhradu podle pokynů výrobce.

Obrázky zveřejněny
s laskavým svolením
Dr. Shoji Kato.

Porovnání čisticích prostředků*

	KATANA™ CLEANER	IVOCLEAN** (IVOCLAR VIVADENT)	ZIRCLEAN** (BISCO)
Intraorální použití na strukturu zubu	Ano	Ne	Ne
Intraorální použití na abutmenty implantátů	Ano	Ne	Ne
Extraorální použití	Ano	Ano	Ano
Aktivní složka	MDP sůl (povrchově aktivní látka)	Hydroxid sodný	Hydroxid draselný
pH	4,5	13-13,5	13
Doba nanášení	10 sekund	20 sekund	20 sekund
Manipulace	Bez protřepání	Protřepat před použitím	Bez protřepání

* Podle návodu k použití a oficiální dokumentace

** Není ochrannou známkou společnosti Kuraray Noritake Dental Inc.

Sortiment produktů

OBJ. ČÍSLO	POPIS VÝROBKU	OBSAH
#3970-EU	KATANA™ Cleaner	4,0 ml

**NASKENUJTE
A ZJISTĚTE VÍCE**

