

ODHALIT. ODSTRANIT. REKONSTRUOVAT.

CARIES DETECTOR:

Precizní pomocník pro konzervativní odstraňování kazu



VĚŘÍTE,

**ŽE MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ STOMATOLOGIE
JE TOU SPRÁVNOU VOLBOU?**

Pak vám CARIES DETECTOR
výrazně usnadní práci!



FAKTA PODPORUJÍCÍ KONZERVATIVNÍ TECHNIKY ODSTRAŇOVÁNÍ KAZŮ

Kariézní dentin má dvě vrstvy:

- ✓ Vnější, dekalcifikovanou, infikovanou vrstvu, která musí být odstraněna
- ✓ Vnitřní, částečně dekalcifikovanou, neinfikovanou vrstvu, která je schopná remineralizace a měla by být zachována

CARIES DETECTOR: JAK FUNGUJE

Zabarvením vnějšího, infikovaného dentinu do šarlatově červené barvy, ale ponecháním zdravého dentinu, sice postiženého kazem, avšak schopného remineralizace, nezabarveného, **poskytuje CARIES DETECTOR viditelnou, klinicky přesnou pomoc pro konzervativní odstranění kazů.**

CARIES DETECTOR lze použít dvěma různými způsoby v závislosti na velikosti kavity:


MĚLKÁ OTEVŘENÁ KAVITA

Naneste produkt na oblast kavity před jejím otevřením.

HLUBOKÁ KAVITA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KARIÉZNÍHO DENTINU

Naneste produkt po odstranění silně dyskolorovaného a velmi změkčeného dentinu, přičemž se vyhněte neopatrné hrubé redukci.


HLUBOKÁ KAVITA: KLINICKÝ POSTUP

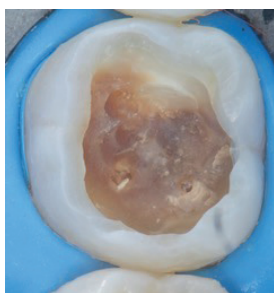

1. Kavita po umístění kofferdamu, odstranění silně diskolorovaného a velmi změkčeného dentinu, a po pečlivém očištění a osušení.




2. Jedna kapka CARIES DETECTOR nanesená na jednorázový kartáček a rozprostřená po kavitě.

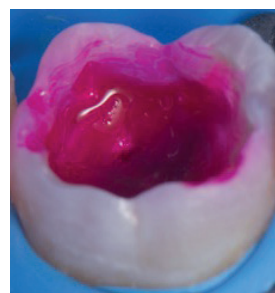


3. Vzhled zubu během desetisekundové čekací doby.



4. Vzhled zubu se zabarvenou kariézní tkání po opláchnutí vodou.

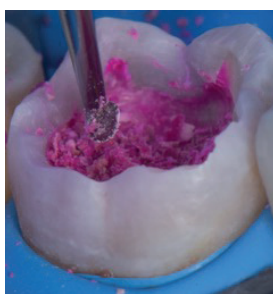

5. Odstranění infikovaného kariézního dentinu, který je zabarven červeně, pomocí nízkorychlostního rotačního nástroje. Zubní lékař by měl pečlivě dbát na to, aby neobrousil citlivou nezabarvenou tkáň.

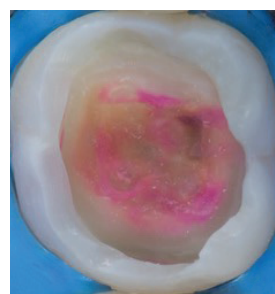

6. Kavita po opakované detekci a redukcí, připravená k výplňovému ošetření.

Fotografie zveřejněny s laskavým svolením Dr. Tazího

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ STOMATOLOGIE

CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ KROKY

CARIES DETECTOR je prvním krokem v konzervativním ošetření zubního kazu. Jako jeho vývojář nabízí společnost Kuraray Noritake Dental Inc. celou řadu doplňkových řešení navržených pro zefektivnění minimálně invazivních výplňových ošetření a zároveň podporu jejich estetiky a dlouhé životnosti.

VÍCE
INFORMACÍ



INFORMACE O PRODUKTECH

CARIES DETECTOR (detektor kazu)

#220-EU CARIES DETECTOR, 1 lahvička (6 ml)

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

JEDNOTLIVÉ BALENÍ CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

#4600-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (U)
#4601-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (UD)
#4620-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (U)
#4621-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (UD)
1 stříkačka (2,7 g/1,5 ml) 15 aplikačních hrotů



JEDNOTLIVÉ BALENÍ CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal Syringe

#3181-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal (U)
#3183-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Light (UL)
#3184-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Dark (UD)
#3182-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal White (UW)
1 stříkačka (2,0 ml/3,6 g)



JEDNOTLIVÉ BALENÍ CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal PLT

#3191-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal (U)
#3193-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Light (UL)
#3194-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Dark (UD)
#3192-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal White (UW)
20 kompulí (0,25 g)



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Needle Tip

#3331-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Needle Tip (N)
20 aplikačních hrotů



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

#4046-EU Unit Dose (jednotlivé dávky) standardní balení
0,1 ml balení Unit Dose x 50, aplikační štěteček jemný stříbrný x 50 ks
#4042-EU Doplnující balení, lahvička (5 ml)
#4044-EU Výhodné balení, lahvička (3 x 5 ml)



Dovozce do EU

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Německo
Telefon +48 662 281 282
www.kuraraynoritake.eu/cz
dental-EasternEurope@kuraray.com

- Před použitím tohoto produktu si přečtěte návod k použití dodaný s produktem.
- Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Vytisknutá barva se může mírně lišit od skutečné barvy.

„CLEARFIL“ a „CLEARFIL MAJESTY“ je registrovaná nebo ochranná značka společnosti KURARAY CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonsko
PD59-01 1/2022



10/2025/MKA00740