

OPDAG. FJERN. GENSKAB.

CARIES DETECTOR:

En præcis guide til konservativ cariesekskavering.



TROR DU PÅ

AT MINIMAL INVASIV TANDPLEJE ER VEJEN FREM?

Så vil CARIES DETECTOR gøre
dit arbejde meget nemmere!



FAKTA DER UNDERSTØTTER KONSERVATIV CARIESEKSKAVERINGSTEKNIKKER

Carieret dentin består af to lag:

- ✓ Det ydre demineraliserede, inficerede lag, som skal fjernes
- ✓ Det indre delvist demineraliserede, ikke-inficerede lag, som kan remineraliseres og bør bevares.

CARIES DETECTOR: HVORDAN FUNGERER DET

Ved at farve den ydre inficerede dentin skarlagensrød, mens den remineraliserbare cariesafficerede og sunde dentin efterlades ufarvet, giver **CARIES DETECTOR en synlig, klinisk præcis guide til konserverende cariesekskavering.**

CARIES DETECTOR kan bruges på to forskellige måder afhængigt af kavitets størrelse:

SUPERFICIEL KAVITET

Påfør produktet omkring kaviteten før den præpareres.

DYB KAVITET MED STORE MÆNGDER CARIERET DENTIN

Påfør produktet efter fjernelse af den stærkt misfarvede og tydeligt bløde dentin, men undgå skødesløs overekskavering.


DYB KAVITET: KLINISK PROCEDURE




1. Kavitet efter kofferdamanlæg.
Ekskavering af den kraftigt misfarvede og meget bløde dentin samt forsigtig skylning og tørring.




2. En dråbe CARIES DETECTOR placeret på en microbrush og påført kaviteten.

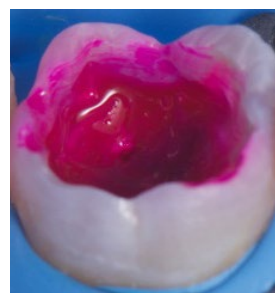


3. Tanden under 10 sekunders ventetid

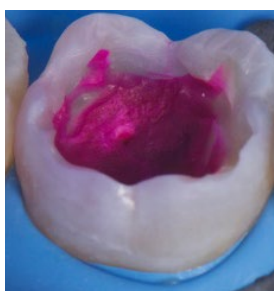

4. Tanden med farvet carieret dentin efter skylning med vand.

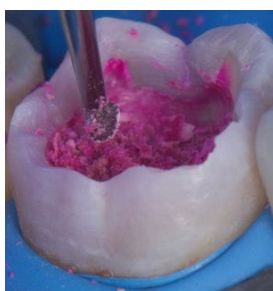

5. Fjernelse af den inficerede, carierede dentin som er farvet rød, med et vinkelstykke med lav hastighed. Behandleren bør være forsigtig for at undgå at ekskavere den sensitive ufarvede dentin.

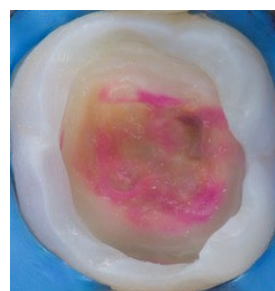

6. Kaviteten efter gentagen påføring af CARIES DETECTOR og ekskavering, klar til fyldningsproceduren.

Fotos venligst udlånt af Dr Tazi

MINIMAL INVASIV TANDPLEJE

SMARTE PRODUKTER TIL DE FØLGENDE TRIN

CARIES DETECTOR er det første trin i konserverende cariesbehandling. Som dets udvikler tilbyder Kuraray Noritake Dental Inc. en bred vifte af komplementære produkter, designet til at strømline minimalt invasive fyldningsprocedurer, mens æstetik og langtidsholdbarhed understøttes.

LÆR MERE



PRODUKT INFORMATION

Caries Detector

#220-EU Caries Detector, 1 flaske (6 ml)

KOMPLEMENTÆRE PRODUKTER

ENKELTPAKKET CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

- #4600-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (U)
 - #4601-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (UD)
 - #4620-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (U)
 - #4621-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (UD)
- 1 Sprøjte (2,7 g/1,5 ml) 15 Sprøjtespidser



ENKELTPAKKET CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal Syringe

- #3181-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal (U)
 - #3183-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Light (UL)
 - #3184-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Dark (UD)
 - #3182-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal White (UW)
- 1 Sprøjte (2,0 ml/3,6 g)



ENKELTPAKKET CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal PLT

- #3191-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal (U)
 - #3193-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Light (UL)
 - #3194-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Dark (UD)
 - #3192-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal White (UW)
- 20 Kapsler (0,25 g)



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Sprøjtespidser

- #3331-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Needle Tip (N)
- 20 Sprøjtespidser



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

- #4046-EU Unit Dose Standard Pack
- 0,1 ml Unit Dose x 50, microbrush lille sølv x 50 stk
- #4042-EU Flaske REFILL (5 ml)
- #4044-EU Flaske VALUE PACK (3 x 5 ml)



Din kontakt

Kuraray Europe Benelux, Nordics & Baltics.

Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nederlandene

Telefon +31 (0)255 523 701

infonordics@kuraray.com

Website www.kuraraynoritake.eu

EU-importør

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany

Telefonnummer +49 (0)69 305 35 835

Faks +49 (0)69 305 98 35 835

www.kuraraynoritake.eu

centralmarketing@kuraray.com



- Inden dette produkt tages i brug skal man sørge for at læse den brugsanvisning, der følger med produktet.
- Specifikationerne og produktets udseende kan ændres uden varsel.
- Det endelige farveresultat kan afvige en smule fra den trykte farve.

“CLEARFIL” og “CLEARFIL MAJESTY” er registrerede varemærker tilhørende KURARAY CO., LTD



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

PD59-01 1/2022



10/2025/MKA00740