

DETECTAR. ELIMINAR. RESTAURAR.

CARIES DETECTOR:

Una guía precisa para la eliminación conservadora
de la caries



¿CREES QUE

LA ODONTOLOGÍA DE MÍNIMA INTERVENCIÓN ES EL CAMINO A SEGUIR?

Entonces, CARIES DETECTOR
hará tu trabajo mucho más sencillo.



DATOS QUE RESPALDAN LAS TÉCNICAS DE ELIMINACIÓN CONSERVADORA DE CARIES

La dentina cariada presenta dos capas:

- ✓ La capa externa, descalcificada e infectada, que debe eliminarse.
- ✓ La capa interna, parcialmente descalcificada y no infectada, que es remineralizable y debe preservarse.

CARIES DETECTOR: CÓMO FUNCIONA

Al teñir de rojo escarlata la dentina externa infectada, y dejar sin teñir la dentina sana y la dentina afectada por caries remineralizable, **CARIES DETECTOR proporciona una guía visible y clínicamente precisa para la eliminación conservadora de la caries.**

CARIES DETECTOR puede utilizarse de dos maneras diferentes en función del tamaño de la cavidad:


CAVIDAD ABIERTA Y POCO PROFUNDA

Aplicar el producto en la zona de la cavidad antes de abrirla.

CAVIDAD PROFUNDA CON GRAN CANTIDAD DE DENTINA CARIADA

Aplicar el producto tras eliminar la dentina intensamente decolorada y muy reblandecida, evitando remoción descontrolada del tejido.

PROCEDIMIENTO CLÍNICO EN CAVIDAD PROFUNDA

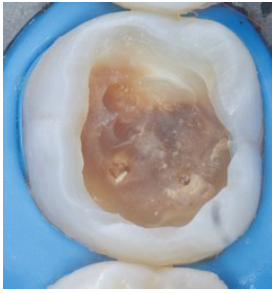

1. Cavity tras la colocación del dique de goma, eliminación de la dentina intensamente decolorada y muy reblandecida, seguida de un lavado y secado cuidadosos.



2. Aplicación de una gota de CARIES DETECTOR con un pincel desechable en la cavidad.




3. Aspecto del diente durante el tiempo de espera de diez segundos.



4. Aspecto del diente con el tejido cariado teñido tras el enjuague con agua.



5. Eliminación de la dentina cariada infectada, teñida de rojo, mediante un instrumento rotatorio de baja velocidad. El operador debe evitar cortar el tejido sensible no teñido.

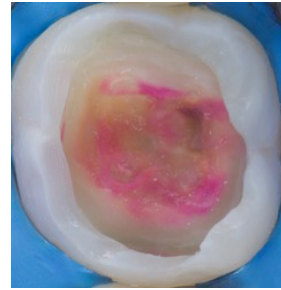

6. Cavity tras la detección y remoción repetida, lista para el procedimiento restaurador.

Fotografías por cortesía de Dr Tazi

ODONTOLOGÍA DE MÍNIMA INTERVENCIÓN

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA LOS SIGUIENTES PASOS

CARIES DETECTOR es el primer paso en el manejo conservador de la caries. Como desarrollador del producto, Kuraray Noritake Dental Inc. ofrece toda una gama de soluciones complementarias diseñadas para optimizar los procedimientos restauradores mínimamente invasivos, al tiempo que apoyan la estética y la longevidad.

MÁS INFORMACIÓN



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Caries Detector

#220-EU Caries Detector, 1 bottle (6 ml)

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

#4600-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (U)
#4601-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (UD)
#4620-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (U)
#4621-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (UD)
1 Syringe (2.7 g/1.5 ml) 15 Needle tips



SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal Syringe

#3181-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal (U)
#3183-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Light (UL)
#3184-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Dark (UD)
#3182-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal White (UW)
1 syringe (2.0 ml/3.6 g)



SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal PLT

#3191-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal (U)
#3193-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Light (UL)
#3194-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Dark (UD)
#3192-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal White (UW)
20 PLT (0.25 g)



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Needle Tip

#3331-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Needle Tip (N)
20 Needle tips



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

#4046-EU Unit Dose Standard Pack
0.1 ml Unit Dose x 50, applic. brush fine silver x 50 pcs
#4042-EU Bottle REFILL (5 ml)
#4044-EU Bottle VALUE PACK (3 x 5 ml)



EU Importer
Kuraray Europe Spain S.L.

Avda. del Tívoli, 17, Benalmádena,
Málaga, Spain

Phone +34 951 11 28 86

www.kuraraynoritake.eu/es

dental-iberia@kuraray.com

- Antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones de uso suministradas.
- Las especificaciones y el aspecto del producto pueden modificarse sin previo aviso.
- El color impreso puede diferir ligeramente del color real.

"CLEARFIL" and "CLEARFIL MAJESTY" are registered trademarks or trademarks of KURARAY CO., LTD



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

PD59-01 1/2022



10/2025/MKA00740