

DETECTAR. REMOVER. RESTAURAR.

CARIES DETECTOR:

Um guia preciso para a remoção conservadora da cárie



¿ACREDITA QUE

A ODONTOLOGIA DE MÍNIMA INVASIVA É O CAMINHO A SEGUIR?

Então, o **CARIES DETECTOR** tornará o seu trabalho muito mais fácil.



FACTOS QUE SUSTENTAM AS TÉCNICAS DE REMOÇÃO CONSERVADORA DA CÁRIE

A dentina cariada apresenta duas camadas:

- ✓ A camada externa, descalcificada e infetada, que deve ser removida.
- ✓ A camada interna, parcialmente descalcificada e não infetada, que é remineralizável e deve ser preservada.

CARIES DETECTOR: COMO FUNCIONA

Ao corar de vermelho a dentina externa infetada e não corar a dentina saudável e a dentina afetada por cárie remineralizável, o **CARIES DETECTOR** fornece um guia visível e clinicamente preciso para a remoção conservadora da cárie.

O **CARIES DETECTOR** pode ser utilizado de duas formas diferentes, consoante a dimensão da cavidade:

CAVIDADE ABERTA E SUPERFICIAL

Aplicar o produto na área da cavidade antes da sua abertura.

CAVIDADE PROFUNDA COM GRANDE QUANTIDADE DE DENTINA CARIADA

Aplicar o produto após a remoção da dentina fortemente descolorada e muito amolecida, evitando reduções grosseiras e descuidadas. remoción descontrola del tejido.


PROCEDIMENTO CLÍNICO EM CAVIDADE PROFUNDA



1. Cavidade após colocação do dique de borracha, remoção da dentina fortemente descolorada e muito amolecida, seguida de lavagem e secagem cuidadosas.




2. Aplicação de uma gota de CRIES DETECTOR com um pincel descartável na cavidade.

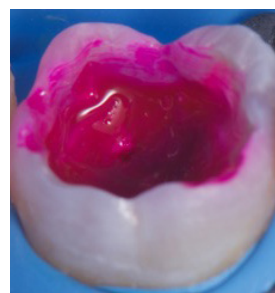


3. Aspeto do dente durante o tempo de espera de dez segundos.



4. Aspeto do dente com o tecido cariado corado após enxaguamento com água.

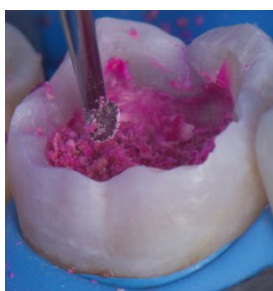

5. Remoção da dentina cariada infetada, corada de vermelho, com um instrumento rotatório de baixa velocidade. O dentista deve evitar cuidadosamente cortar o tecido sensível não corado.

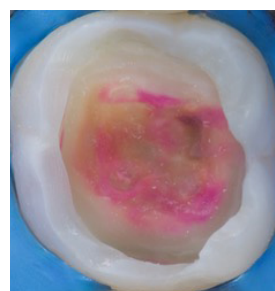

6. Cavidade após detecção e redução repetidas, pronta para o procedimento restaurador.

Fotos cortesia de Dr Tazi

ODONTOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA OS PASSOS SEGUINTES

O CRIES DETECTOR é o primeiro passo na gestão conservadora da cárie. Enquanto seu desenvolvedor, A Kuraray Noritake Dental Inc. disponibiliza uma gama completa de soluções complementares concebidas para otimizar procedimentos restauradores minimamente invasivos, apoiando simultaneamente a estética e a longevidade.

SABER MAIS



INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Caries Detector

#220-EU Caries Detector, 1 bottle (6 ml)

PRODUCTOS COMPLEMENTARES

SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

#4600-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (U)
#4601-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (UD)
#4620-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (U)
#4621-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (UD)
1 Syringe (2.7 g/1.5 ml) 15 Needle tips



SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal Syringe

#3181-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal (U)
#3183-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Light (UL)
#3184-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Dark (UD)
#3182-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal White (UW)
1 syringe (2.0 ml/3.6 g)



SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal PLT

#3191-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal (U)
#3193-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Light (UL)
#3194-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Dark (UD)
#3192-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal White (UW)
20 PLT (0.25 g)



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Needle Tip

#3331-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Needle Tip (N)
20 Needle tips



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

#4046-EU Unit Dose Standard Pack
0.1 ml Unit Dose x 50, applic. brush fine silver x 50 pcs
#4042-EU Bottle REFILL (5 ml)
#4044-EU Bottle VALUE PACK (3 x 5 ml)



EU Importer
Kuraray Europe Spain S.L.

Avda. del Tívoli, 17, Benalmádena,
Málaga, Spain

Phone +34 951 11 28 86

www.kuraraynoritake.eu/pt

dental-iberia@kuraray.com

- Antes de utilizar este produto, leia atentamente as Instruções de Utilização fornecidas.
- As especificações e o aspeto do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A cor impressa pode diferir ligeiramente da cor real.

"CLEARFIL" and "CLEARFIL MAJESTY" are registered trademarks or trademarks of KURARAY CO., LTD



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

PD59-01 1/2022



10/2025/MKA00740