

PRODUKTINFORMATION

Caries Detector

#220-EU Caries Detector, 1 flaska (6ml)

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

#4600-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (U)
 #4601-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (UD)
 #4620-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (U)
 #4621-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (UD)
 1 spruta (2,7 g/1,5 ml) 15 sprutspetsar



SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal Syringe

#3181-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal (U)
 #3183-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Light (UL)
 #3184-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Dark (UD)
 #3182-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal White (UW)
 1 spruta (2,0 ml/3,6 g)



SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal PLT

#3191-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal (U)
 #3193-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Light (UL)
 #3194-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Dark (UD)
 #3192-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal White (UW)
 20 PLT (0,25 g)



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Needle Tip

#3331-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Needle Tip (N)
 20 sprutspetsar



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

#4046-EU Unit Dose Standard Pack
 0,1 ml Engångsdos x 50, appliceringsborste, fine silver x 50 st
 #4042-EU Flaska REFILL (5ml)
 #4044-EU Flaska VALUE PACK (3 x 5 ml)



HITTA. TA BORT. LAGA

CARIES DETECTOR:

Exakt vägledning till sparsam exkavering av karies.



Contactinformation

Kuraray Europe Benelux, Nordics, Baltics, UK & Ireland

Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nederländerna
 Postbus 299, 1970 AG IJmuiden, Nederländerna
 Tel: +31 (0)255 523 701
 infonordics@kuraray.com
 www.kuraraynoritake.eu

EU-importör

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
 65795 Hattersheim am Main, Germany
 Phone +49 (0)69 305 35 835
 Fax +49 (0)69 305 98 35 835
 www.kuraraynoritake.eu
 centralmarketing@kuraray.com

- Läs Användarinstruktionerna som följer med produkten innan du använder den.
- Produktens specifikationer och utseende kan komma att ändras utan förvarning.
- De tryckta färgerna kan skilja sig något från de faktiska färgerna.

"CLEARFIL" och "CLEARFIL MAJESTY" är registrerade varumärken hos KURARAY CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.
 1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
 PD59-01 1/2022



10/2025/MKA00740

ANSER DU

ATT MINIMALINVASIV TANDVÅRD ÄR DEN BÄSTA METODEN?

Då kommer CARIES DETECTOR
göra ditt arbete mycket enklare!



FAKTA SOM STÖDGER MINIMALINVASIVA METODER FÖR KARIESBEHANDLING

Karierat dentin har två skikt:

- ✓ Det yttre, urkalkade och infekterade skiktet som måste tas bort
- ✓ Det inre, delvis urkalkade, icke-infekterade skiktet som kan remineraliseras och som bör bevaras

SÅ HÄR FUNGERAR CARIES DETECTOR:

CARIES DETECTOR färgar det yttre, infekterade dentinet sharlakansrött, men lämnar det friska dentinet ofärgat och ger på så sätt en visuell och kliniskt precis guide till sparsam avverkning.

CCARIES DETECTOR kan användas på två olika sätt beroende på kavitetens storlek.


GRUND OCH ÖPPEN KAVITET

Applicera produkten i området runt det angripna området innan du börjar borra.


DJUP KAVITET MED EN STOR MÄNGD KARIERAT DENTIN

Avverka bara det kraftigt missfärgade och mycket mjuka dentinet. Undvik att avverka onödigt mycket annan tandsubstans. Applicera därefter produkten.


DJUP KAVITET: KLINISK ARBETSGÅNG

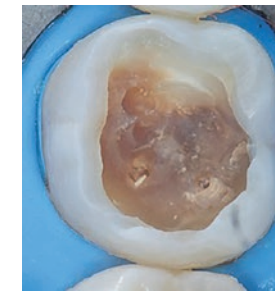


1. Kaviteten efter applicering av kofferdam, initial avverkning av missfärgat och mjukt dentin och efter försiktig rengöring och torkning.

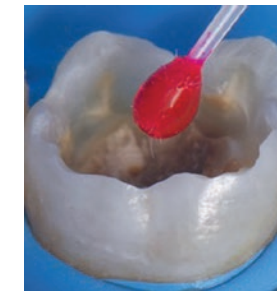

2. En droppe CARIES DETECTOR droppas på en engångsborste och appliceras i kaviteten.

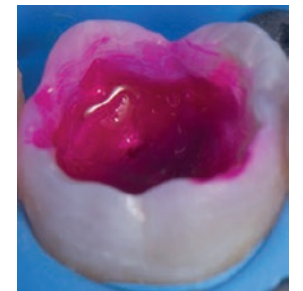


3. Låt verka i 10 sekunder.

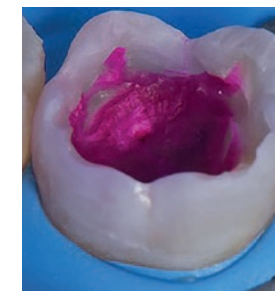

4. Tanden sköljs med vatten. Områdena med infekterat dentin är rödfärgade.



5. Det rödfärgade och infekterade dentinet avlägsnas med hjälp av låghastighetsborr. Undvik att borra i det känsliga och ofärgade dentinet.

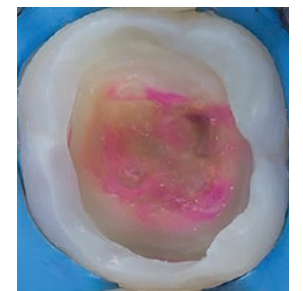

6. Kaviteten efter upprepad detektion och avverkning, nu redo för fyllning.

Bilderna publiceras med tillstånd från Dr Tazi

MINIMALINVASIV TANDVÅRD

SMARTA LÖSNINGAR FÖR FORTSATT BEHANDLING

CARIES DETECTOR är det första steget i en varsam kariesbehandling. Utvecklaren, Kuraray Noritake Dental Inc., erbjuder en lång rad kompletterande produkter som alla är gjorda för smidiga och minimalinvasiva metoder samt estetiska och hållbara resultat.

LÄR DIG MER

