

FINALIZE AS SUAS RESTAURAÇÕES MONOLÍTICAS FACILMENTE



CERABOND

FC Paste Stain

FINALIZE AS SUAS RESTAURAÇÕES ZERO CUTBACK FACILMENTE

Gostaria de acrescentar um brilho duradouro e um aspeto ainda mais natural às suas restaurações monolíticas de zircónia utilizando a técnica de microestratificação? O **CERABIEN™ ZR FC Paste Stain** é tudo o que precisa em combinação com zircónia estética, como a nossa série KATANA™ Zirconia multi-layered. Permite-lhe criar facilmente efeitos de cor e texturas individuais uniformemente previsíveis em restaurações monolíticas.



Photo: MDT Roberto Rossi



FC Paste Stain

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

1

DESEMPENHO CONSISTENTE

Propriedades mecânicas e de manuseamento consistentes devido à utilização de cerâmica feldspática sintética. A consistência em pasta permite a criação de textura de superfície e as partículas de cerâmica de efeito duradouro envolvem e protegem os componentes da cor contra o desgaste.

2

ESTÉTICA PURA

Fluorescência integrada em todas as cores e uma cor Fluoro adicional para aumentar este efeito. A ampla gama de cores permite a criação praticamente ilimitada de efeitos individuais (manchas brancas e escuras, linhas de fratura e fissuras).

3

FÁCIL DE USAR

Stains prontos a usar não é necessário misturar. A temperatura de queima é relativamente baixa de 750 °C (1.382 °F) e é mais tolerante à temperatura que os stains convencionais.

4

CONTROLO DA FINALIZAÇÃO

O aspeto visual durante a aplicação é muito semelhante ao resultado esperado após a queima.

27 CORES QUE IMITAM A NATUREZA

TRANSLUCENT



ENAMEL

Grayish Blue

Light Gray

Dark Gray

Blue

DENTINA

Cervical 1

Cervical 2

Cervical 3

A+

B+

C+


D+

A frequência de utilização de uma determinada cor é visualizada através da variação dos tamanhos dos círculos.

REALÇAR



AJUSTAR

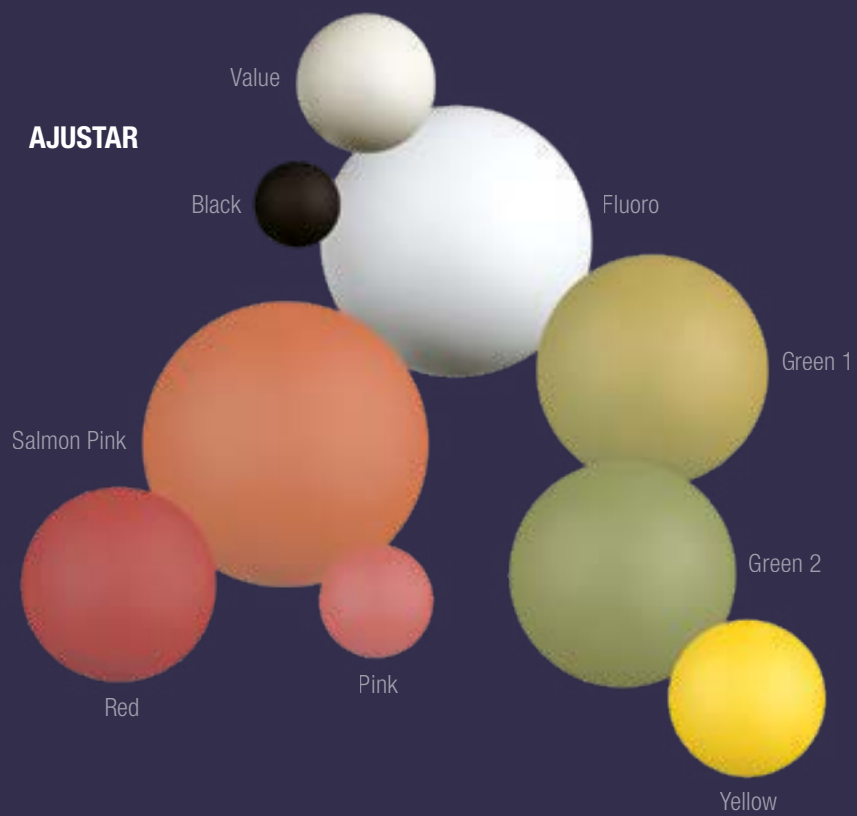

CONSISTÊNCIA UNIFORME

A série CERABIEN™ ZR, tal como todas as outras cerâmicas da Kuraray Noritake Dental Inc., baseia-se na tecnologia de cerâmica feldspática sintética desenvolvida pela NORITAKE CO., LIMITED há mais de 30 anos. A estrutura do material e a distribuição das partículas assemelham-se às dos dentes naturais, mas ao contrário dos materiais à base de feldspato natural, a formulação especial do CERABIEN™ ZR garante que a consistência se mantém uniforme. Graças a esta qualidade, os profissionais de medicina dentária podem confiar nas excelentes propriedades de manuseamento e em resultados sempre fiáveis.

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain contém partículas originais de cerâmica feldspática sintética CERABIEN™ ZR e óxidos metálicos combinados numa solução líquida. A consistência dos 27 pigmentos fluorescentes em pasta é tixotrópica e flexível o que lhe permite aplicá-los em camadas ultrafinas de até 0,1 mm de espessura. Como as partículas de cerâmica protegem os óxidos metálicos do desgaste, os efeitos da coloração resultante são duradouros. O processo de aplicação é altamente eficiente e controlável, conduzindo a resultados consistentes.





Photo: MDT Roberto Rossi

UTILIZE COM KATANA™ Zirconia

Combine CERABIEN™ ZR FC Paste Stain com KATANA™ Zirconia YML, UTML, STML ou HTML PLUS para otimizar a estética das suas restaurações monolíticas. Os discos inovadores KATANA™ Zirconia multi-layered são mundialmente reconhecidos pelas suas excelentes propriedades ópticas e mecânicas. Os materiais também são ideais para casos urgentes - podem ser sinterizadas restaurações até três elementos em 54 minutos.

MULTI
LAYERED



COMEÇAR A TRABALHAR

AS NOVE CORES ESSENCIAIS PARA OBTER RESULTADOS NATURAIS



MDT Roberto Rossi (Savona, Italy)

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain está disponível em 27 tonalidades diferentes, o que torna possível imitar praticamente todos os efeitos encontrados nos dentes naturais. Quando se trabalha com o sistema pela primeira vez, ou quando se procura simplificar os procedimentos, pode ser útil saber como são criados os efeitos mais comuns, utilizando um número mais reduzido de cores. Pedimos ao TPD Roberto Rossi para seleccionar as suas nove cores favoritas e descrever as suas funções, e isto é o que ele sugere quando se começa a utilizar o CERABIEN™ ZR FC Paste Stain.



Clear Glaze

- Cria um efeito vítreo em 3D durante a microestratificação em zircónia
- Misture com outros tons para reduzir os efeitos de croma de acordo com a sua proporção
- Aplique com um micropincel como capa final para criar a textura principal e aumentar a translucidez do esmalte



Grayish Blue

- Realça a opalescência no terço incisal
- Aumenta o efeito de transparência acinzentada e azulada do esmalte fino



Blue

- Utilize como cor primária para aumentar a opalescência entre os mamelões (desenho de cutback) ou realçar a opalescência (desenho de contorno total)
- Utilize como cor complementar na zona incisal para realçar o tom laranja de uma restauração
- Misture com Earth Brown para obter um cinzento complexo natural utilizado em toda a coroa para reduzir o valor ou numa parte para criar um efeito acinzentado



Value

- Aumenta o contraste do esmalte numa parte específica
- Aumenta ópticamente a espessura do esmalte
- Misture com Clear Glaze para modular a intensidade e o valor do esmalte



Mamelon Orange 1

- Aplique na parte incisal para reproduzir os efeitos mamelão laranja claro
- Misture com um dos tons Dentin para aumentar o efeito laranja-claro da dentina



Mamelon Orange 2

- Aplique na parte incisal para reproduzir os efeitos mamelão laranja intenso encontrados em pacientes idosos e na dentina infiltrada
- Misture com um dos tons Dentin para aumentar o efeito laranja intenso da dentina



Green 1

- Cria um efeito complementar numa restauração avermelhada (semelhante ao CERABIEN™ ZR Luster - Incisal Aureola)
- Aplique na zona incisal para reproduzir os efeitos mamelão e incisal
- Reduz o tom avermelhado de restaurações com tonalidades de B a D



Green 2

- Aplique na zona incisal para reproduzir os efeitos mamelão e incisal
- Reduz o tom avermelhado de restaurações com tonalidades de A a C



Yellow

- Aumenta o efeito amarelado da base da dentina ou dos mamelões
- Misture com Value para simular a opacidade encontrada na parte cervical da dentina

OS NOSSOS STAINS EM PASTA, UM CICLO DE QUEIMA

UM CONCEITO BÁSICO PARA UMA EFICIÊNCIA MÁXIMA

A utilização de apenas quatro tonalidades de CERABIEN™ ZR FC Paste Stain - Clear Glaze, A+, Value e Grayish Blue - é uma ótima opção para individualizar as suas restaurações monolíticas em zircônia com a máxima eficiência.

PROCEDIMENTO DE TRABALHO

Primeiro, aplica-se Clear Glaze em toda a superfície da restauração anterior ou posterior. Todas as restantes cores são idealmente pinceladas sobre o material de glaze. O A+ é o material de eleição para aumentar o croma na zona cervical e para retrair ou escurecer as fissuras. A pasta Value é aplicada nas pontas das cúspides ou nos bordos incisais, e a pasta Grayish Blue é colocada por baixo, nas encostas das cúspides ou à volta dos mamelões. Em conjunto, estas pastas criam um efeito natural de opalescência e translucidez.




CERABIEN™ ZR FC Paste Stain


apresenta uma camada de líquido transparente na parte superior do material; o objetivo é proteger do pó e da sujidade os pigmentos da pasta, pelo que é melhor deixá-la no sítio.

DICA: Quer diluir as pastas? Basta misturá-las com ES Liquid para obter a consistência desejada.

Anterior

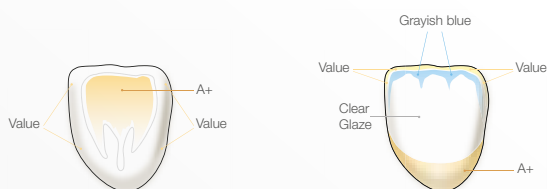

Posterior

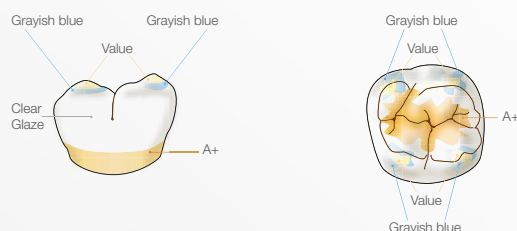

DESEJOS SEM LIMITES







Baseado em KATANA™ Zirconia YML A3 com CERABIEN™ ZR FC Paste Stain
Cortesia do DT Marco Stoppaccioni – L'Aquila, Itália

UMA BASE SÓLIDA

SÉRIE KATANA™ Zirconia MULTI-LAYERED

Está à procura de um material de base do mesmo fabricante? Todos os materiais da série KATANA™ Zirconia Multi-Layered são uma base sólida para individualizar com CERABIEN™ ZR FC Paste Stain. Está disponível com gradação de cor e translucidez uniforme unidas à resistência à flexão com vários níveis (KATANA™ Zirconia UTML, STML e HTML PLUS)) ou então com gradações de cor, translucidez e resistência à flexão (KATANA™ Zirconia YML).

			
UTML	STML	HTML PLUS	YML
Ultra Translucidez Multicamadas	Super Translucidez Multicamadas	Elevada Translucidez Multicamadas	Ítria Multicamadas
Translucidez* 51 % Resistência* 557 MPa	Translucidez* 49 % Resistência* 748 MPa	Translucidez* 45 % Resistência* 1150 MPa	Translucidez* 45-49 %** Resistência* 750-1100 MPa**



*Condições de medição: Avaliação do material de base (cor branca)

1 De acordo com a norma ISO 6872: 2015, tamanho da amostra: 3 x 4 x 40mm, 2 Toda a transmissão de luz, iluminante: D65, Espessura da amostra: 1,0 mm

**A translucidez e a resistência variam consoante as camadas.

Fonte de dados: Kuraray Noritake Dental Inc. Fotografia: MDT Roberto Rossi



OBTENHA EFEITOS DE PROFUNDIDADE ADICIONAIS

ESTHETIC COLORANT

Pretende adicionar alguns efeitos de cor internos como os que se encontram nos dentes naturais? Especificamente desenvolvido para a série KATANA™ Zirconia Multi-Layered, o Esthetic Colorant é a solução ideal. É um conjunto de líquidos de infiltração fáceis de utilizar que se difundem na estrutura da zircónia e permitem a imitação de uma grande variedade de estruturas internas de cor. É uma excelente escolha para criar as características iniciais da restauração antes do procedimento de sinterização e, ao fazê-lo, cria as bases para uma individualização final rápida e fácil.



GAMA DE PRODUTOS

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain 3g

#104-5601EU	BLACK	#104-5731EU	EARTH BROWN
#104-5611EU	LIGHT GRAY	#104-5741EU	REDDISH BROWN
#104-5621EU	DARK GRAY	#104-5751EU	SALMON PINK
#104-5631EU	GRAYISH BLUE	#104-5761EU	PINK
#104-5641EU	BLUE	#104-5771EU	RED
#104-5651EU	GREEN 1	#104-5781EU	A+
#104-5661EU	GREEN 2	#104-5791EU	B+
#104-5671EU	YELLOW	#104-5801EU	C+
#104-5681EU	MAMELON ORANGE 1	#104-5811EU	D+
#104-5691EU	MAMELON ORANGE 2	#104-5821EU	WHITE
#104-5701EU	CERVICAL 1	#104-5831EU	VALUE
#104-5711EU	CERVICAL 2	#104-5841EU	FLUORO
#104-5721EU	CERVICAL 3		

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain 5g

#104-5851EU	GLAZE
#104-5861EU	CLEAR GLAZE

#211-2389EU CERABIEN™ ZR FC Paste Stain COLOUR GUIDE

KITS



CERABIEN™ ZR FC Paste Stain KIT

#104-5590EU

O novo Stain de superfície para zircónia que permite uma fácil caracterização.
Contém 27 cores.

CONTÉM:

5g: Glaze, Clear Glaze.
3g: Light Gray, Dark Gray, Grayish Blue, Blue, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, A+, B+, C+, D+, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Earth Brown, Reddish Brown, Value, Black, Green 1, Green 2, Yellow, Salmon Pink, Pink, Red, Fluoro e White.
+ ES Liquid & Colour Guide



CERABIEN™ ZR FC Paste Stain BASIC KIT

#104-5870EU

Um kit essencial que inclui todas as cores básicas para obter restaurações de qualidade.

CONTÉM:

5g: Clear Glaze.
3g: Dark Gray, Grayish Blue, Cervical 2, Earth Brown, Salmon Pink, A+ e White.
+ ES Liquid & Colour Guide



Fotografia: MDT Roberto Rossi

CONTATOS

Kuraray Europe Italia S.r.l
Via G. Boccaccio 21,
20123 Milano

Telefone	0039 02 63471228 0034 634453983
Correio eletrónico	dental-iberia@kuraray.com
Web	www.kuraraynoritake.eu/pt

DESCUBRA MAIS
COM CÓDIGO QR



Importado para Europa por:

Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Germania
Telefono +49 (0)69 305 35 835
Fax +49 (0)69 305 98 35 835
www.kuraraynoritake.eu
centralmarketing@kuraray.com



Kuraray Noritake Dental Inc.
300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan

- Antes de utilizar este produto, certifique-se de que lê as instruções de utilização fornecidas com o produto.
- As especificações e o aspeto do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A cor impressa pode ser ligeiramente diferente da cor real.

KATANA e CERABIEN são marcas registadas ou marcas de NORITAKE CO., LIMITED.

