

CONTROL ECHILIBRAT AL NUANȚELOR

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

Un compozit cu o estetică excepțională
la un cost eficient.



IMAGINAȚI-VĂ UN CONCEPT DE COMPOZIT CARE FUNCȚIONEAZĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

CONCENTRAȚI-VĂ DOAR PE CE VĂ PLACE SĂ FACETI

Când începeți să lucrați cu noul compozit universal CLEARFIL MAJESTY™ ES-2, se întâmplă ceva surprinzător. Imaginați-vă restaurarea unei cavități de clasa a III-a cu o rășină compozită. Dificil de stratificat? Pur și simplu copiați straturile naturale de smalț și dentină cu nuanțele **Premium** de smalț și dentină. Timp limitat? Puteți alege, de asemenea, nuanța **Classic** într-un singur strat. Pentru a realiza o adaptare perfectă la dinte, am optimizat consistența pastei. Acest lucru vă va oferi o mare încredere în timpul stratificării. După ce ați terminat, veți fi pur și simplu uimit de efectul de integrare.

PRIMUL CONCEPT DE NUANȚĂ DIN LUME

Șapte ani de optimizare a fiecărui detaliu.

Puteți experimenta acest protocol unic de lucru încă de la prima restaurare. Primul concept de nuanță din lume pentru compozitele directe este posibil datorită a doar trei componente: nuanța **Classic** – un singur strat, nuanțe **Premium** multistrat (nuanțe de smalț, dentină și translucid) și un ghid intuitiv de culori, toate aprobate de VITA™.

În ultimii șapte ani, am optimizat fiecare detaliu, făcând restaurările dumneavoastră mai frumoase, mai predictibile și mai durabile. Prin introducerea CLEARFIL MAJESTY™ ES-2, este posibil să fi creat un nou standard de aur.



SISTEM INTUITIV DE NUANȚE

Calibrat conform standardului VITA™.

Alegerea nuanței potrivite nu a fost niciodată mai precisă. Cu CLEARFIL MAJESTY™ ES-2, este introdus primul sistem de nuanțe bazat pe luminozitate pentru compozitele directe - toate aprobate de VITA™. Această abordare este esențială pentru obținerea unui aspect natural pentru restaurările dumneavoastră.

Alegerea nuanței potrivite se face în câteva secunde, folosind doar 6 lamele de nuanță. Lamellele sunt aranjate de la deschis la închis (de la alb la A4) pentru a vă oferi cea mai mare precizie posibilă a nuanței. Dacă selectați grupa A2, puteți începe imediat să lucrați cu nuanțele noastre **Premium** A2E (smalt) și A2D (dentină). Dacă preferați tehnica cu o singură nuanță, selectați mai întâi grupa A2 și apoi alegeți cea mai potrivită nuanță **Classic** D2, A2 sau C1 în al doilea pas.

Niciodată până acum un ghid de culori nu a fost atât de compact, cu 18 nuanțe **Premium**, inclusiv 7 nuanțe de smalt, 7 nuanțe de dentină și 4 nuanțe translucide. Adăugați la acestea cele 18 nuanțe **Classic** și aveți un total de 36 de nuanțe care încap cu ușurință într-un buzunar.



DOAR DOI PAȘI SUNT NECESARI

Pasul 1 – Selectați luminozitatea

Selectați cea mai apropiată variantă de luminozitate dintre cele șase opțiuni expuse în Shade guide (Ghidul de culori).

Pasul 2 – Selectați tonul și saturația culorii

Scoateți lamela aleasă din suportul de nuanțe și selectați nuanța corespunzătoare.

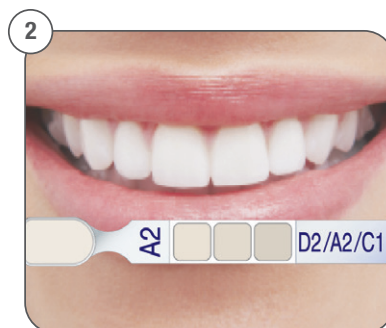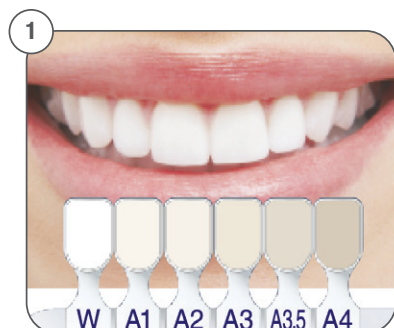

STRATIFICARE DUALĂ CU COMBINAȚII FIXE DE NUANȚE

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium va face din restaurările dumneavoastră un succes predictibil, datorită combinațiilor fixe de nuanțe de dentină și smalt.

Capacitatea de potrivire a nuanțelor CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium acoperă o gamă de nuanțe prin combinația fixă de nuanțe D + E. CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium este un compozit cu un concept unic de nuanțe, „aprobat” de VITA™.




ACOPERIRE IMPRESIONANTĂ A NUANTELOR

O combinație de nuanțe Premium acoperă acum trei nuanțe VITA™ Classic.

Este greu de crezut, dar cu conceptul nostru de compozit estetic puteți acoperi și trei nuanțe VITA™ cu o singură combinație de nuanțe **Premium** de smalț și dentină, cum ar fi A1E și A1D. Acest lucru este posibil datorită creării de grupe de nuanțe bazate pe luminozitate - bazate pe trei nuanțe.

Dacă aveți de restaurat trei dinți din grupa A2 într-o săptămână, puteți utiliza A2E și A2D pentru a restaura un dinte C1 Luni, poate un dinte D2 Miercuri și un dinte A2 Joi. Nu este pur și simplu incredibil? Și nu aveți nevoie de nicio rețetă complicată de nuanțe pentru a realiza acest lucru. Pur și simplu copiați cele două straturi naturale (smalț și dentină).

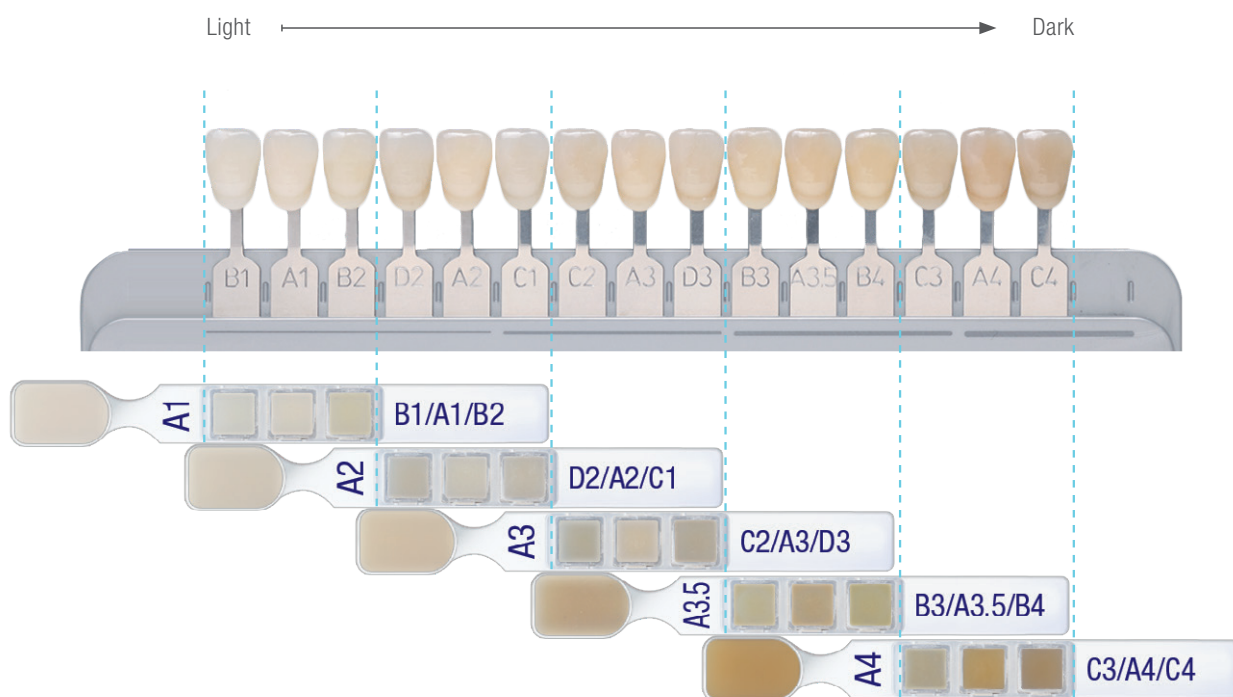


IATĂ DOVADA

Harvard School of Medicine (Școala de Medicină de la Harvard) a pus la încercare conceptul nostru.

În studiul lor, condus de Dr. Nagai, centrul a trei lamele de nuanțe VITA™ Classic (D2, A2, C1) au fost restaurate conform instrucțiunilor de nuanță de la trei producători. Cu combinația de culori A2E și A2D, CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 de la Kuraray Noritake Dental s-a dovedit a se potrivi nu numai cu nuanța A2, ci și cu nuanțele D2 și C1. Toate cele trei lamele de nuanță restaurate cu CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 nu au prezentat nicio diferență vizibilă față de lamelele VITA™ originale.

DIFERENȚA DE CULOARE (ΔE) ÎNTRE LAMELELE RESTAURATE ȘI CELE VITA™ CLASSIC ORIGINALE

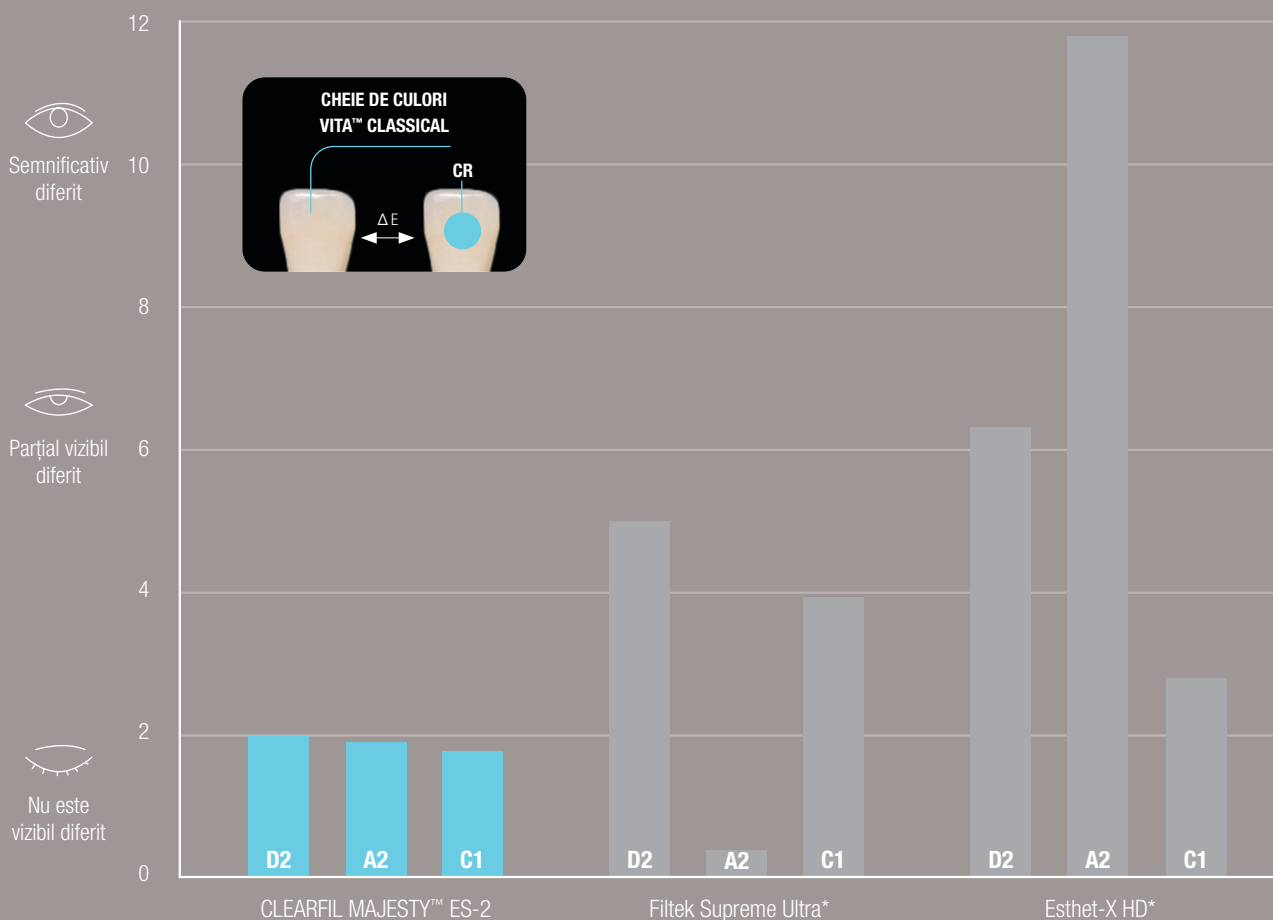

Notă: Unele rețete ale producătorilor necesită până la trei combinații diferite de nuanțe pentru fiecare nuanță VITA™. CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 se potrivește cu toate cele trei nuanțe VITA™ cu o singură combinație de nuanțe Premium (în acest caz A2E și A2D).

* Nu este o marcă înregistrată a KURARAY CO., LTD.

Sursa: Dr. Shigemi Nagai, Facultatea de Medicină Dentară Harvard, Statele Unite

INSPIRAT DE NATURĂ

Stratificare anatomică cu nuanțele Premium de smalț și dentină.

Experimentați intuitivitatea conceptului nostru de compozit. Puteți începe imediat fără a fi nevoie să acordați atenție schemelor dificile de nuanțe sau instrucțiunilor complicate. Singurul lucru pe care trebuie să îl faceți este să copiați straturile de smalț și dentină ale dintelui natural. Începeți proiectarea naturală cu nuanțele Premium selectate. Concentrați-vă doar pe ceea ce vă place să faceți!

Să vedem cum Dr. Hirofumi Tashiro poate realiza instinctiv o restaurare de clasa a IV-a pe dintele 2.1. Mai întâi, îndepărtează vechea restaurare și face prepararea. Alege nuanța potrivită cu ajutorul ghidului de culori VITA™ Classic și selectează A2. Pentru stratificarea anatomică, folosește A2E (smalț) și A2D (dentină). În acest caz, utilizează un ghid de silicon pentru a construi smalțul palatinal ca prim strat. Dentina internă (A2D) este aplicată deasupra, urmată de stratul exterior de smalț (A2E). La final, se poate observa integrarea perfectă.

CEA MAI BUNĂ ADAPTARE LA NATURĂ

Luminozitatea, stratificarea anatomică și tehnologia de difuzie a luminii fac totul.

Inspirat de acest caz clinic, imaginați-vă că deja comandați primele nuanțe. După ce finalizați prima restaurare, probabil vă veți gândi „uau, arată foarte bine. Nu mai văd limita smalț-compozit”.

Cum este posibil acest lucru? Să descoperim cele trei idei fundamentale.



Sursă: Dr. Hirofumi Tashiro, Japonia

1. DE LA NUANȚE DESCHISE LA NUANȚE ÎNCHISE

De ce să ne concentrăm pe luminozitate?

Intuitiv - așa ne place să numim noul nostru sistem de nuanțe bazat pe luminozitate. De ce luminozitate? Asta pentru că 90% dintr-o nuanță, bazată pe dimensiunile culorii: „luminozitate”, „ton” și „saturație cromatică”, este determinată de luminozitate. Cum arată gama de culori a dinților naturali la nivel mondial? Conform unui studiu VITA™ despre gama de culori, fiecare nuanță acoperă o gamă mai largă de luminozitate decât de ton și de saturație cromatică. Diferențele de luminozitate naturală sunt motivul din spatele formei eliptice. Acum înțelegeți de ce ar trebui să obțineți luminozitatea corectă.

2. CREAȚI O ADÂNCIME NATURALĂ


Transluciditate predeterminată a smalțului și opacitate a dentinei.

În mod surprinzător, opacitatea este un factor subestimat pentru integrarea reușită compozit-dinte. Fără o opacitate corectă, restaurarea nu se va potrivi. Noul CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 a fost conceput cu o transluciditate predeterminată a smalțului și o opacitate a dentinei. Trebuie doar să copiați grosimile naturale și să înlocuiți smalțul și dentina cu nuanțele noastre Premium.


3. O ARMONIE ÎNTRE COMPOZIT ȘI NATURĂ

Tehnologia de difuzie a luminii ajustează tonul și saturația cromatică.


Odată ce a fost aleasă nuanța potrivită și opacitățile predeterminate, tehnologia de difuzie a luminii adaugă nota finală. Adaptează tonul potrivit (de ex. galben sau roșu) și saturația culorii la țesutul dentar înconjurător. Această tehnologie face posibilă obținerea unor efecte de lumină foarte apropiate de cele ale dentinei și smalțului natural.

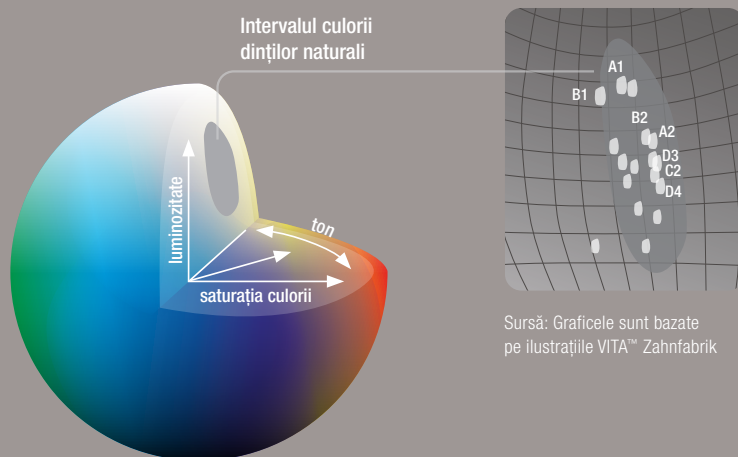

Sursă: Graficele sunt bazate pe ilustrațiile VITA™ Zahnfabrik

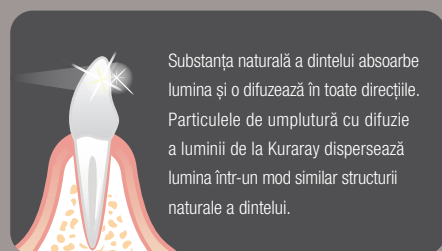

Sursa: Dr. Toshimoto Yamada, DDS, PhD, Spitalul Toranomon, Japonia.

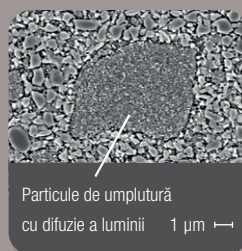

TEHNOLOGII DE NUANȚĂ INTEGRATE

Evidențiați potențialul fiecărei nuanțe.

Fluorescență naturală

Sunt incluse efecte de fluorescență naturală.

Opalescență naturală

Nuanțele noastre translucide, Clear, Amber, Blue și Grey, prezintă efecte opalescente deosebite. Acestea vă ajută să individualizați restaurările la un nivel superior.

Culoare constantă

Nuanțele CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 rămân practic identice înainte și după polimerizare.

TEHNOLOGII DE MANEVRARE ÎNCORPORATE

Simplificați-vă activitatea zilnică.

Utilizare universală

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 este un compozit nano-hibrid, ideal pentru utilizare în zona anterioară și posterioară, cu o umplutură de 66% vol. (78 gr.%).

Manipularea pastei de dentină


Pentru a face pasta nelipicioasă, am optimizat tipul și compoziția monomerului. Puteți decide unde trebuie să ajungă pasta.

Vâscozitatea pastei de smalț

Vâscozitatea pastei de smalț a fost concepută să funcționeze foarte precis. Adaptarea pastei de smalț la o margine bizotată sau la dentina cervicală se poate face cu instrumentul de modelare sau cu pensula.

Timp de lucru lung

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 are un timp de lucru foarte lung de 4,5 minute în condiții de iluminare ambientală. Chiar dacă mențineți lampa unitului deasupra restaurării, veți avea suficient timp pentru a stratifica pasta.

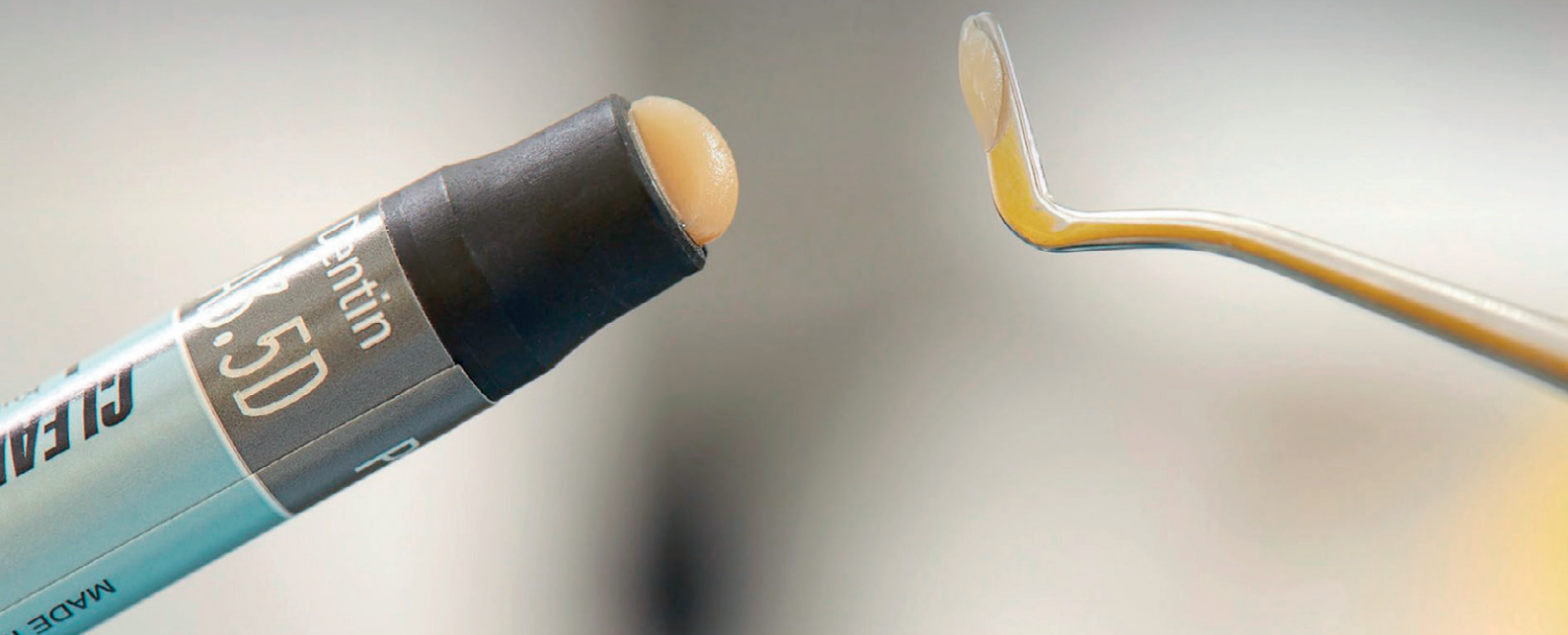

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ

Kit



#3010-EU Syringe Professional Kit

Classic A1, A2, A3, A3.5, Premium A1E, A2E, A3E, A3.5E, A1D, A2D, A3D, A3.5D:

1 seringă per nuanță (3,6 g/2,0 ml) + Clear, Amber, Blue, Gray

1 seringă per nuanță (1,8 g/0,9 ml) + Cheie de culori



#3100-EU PLT Professional Kit

Classic A1, A2, A3, A3.5, Premium A1E, A2E, A3E, A3.5E, A1D, A2D, A3D, A3.5D,

Clear, Amber, Blue, Gray:

5 capsule per nuanță (0,25 g) + Cheie de culori



#3012-EU Syringe Introductory Kit

Classic A2, Premium A2D, A2E:

1 seringă per nuanță (1,2 g/0,7 ml)



#3102-EU PLT Introductory Kit

Classic A2, Premium A2D, A2E:

5 capsule per nuanță (0,25 g)

Cheie de culori



#3000-EU Shade guide

Toate nuanțele













#3001-EU Cheie de culori compactă





A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, XW, W





REFILL SERINGI ȘI CAPSULE (PLT)

CLASSIC*

						
	A1	A2	A3	A3.5	A4	A6
Seringă	#3020-EU	#3021-EU	#3022-EU	#3023-EU	#3024-EU	#3025-EU
PLT	#3110-EU	#3111-EU	#3112-EU	#3113-EU	#3114-EU	#3115-EU





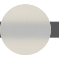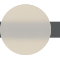


				
	B1	B2	B3	B4
Seringă	#3026-EU	#3027-EU	#3028-EU	#3029-EU
PLT	#3116-EU	#3117-EU	#3118-EU	#3119-EU

				
	C1	C2	C3	C4
Seringă	#3030-EU	#3031-EU	#3032-EU	#3033-EU
PLT	#3120-EU	#3121-EU	#3122-EU	#3123-EU








				
	D2	D3	XW	W
Seringă	#3034-EU	#3035-EU	#3036-EU	#3037-EU
PLT	#3124-EU	#3125-EU	#3126-EU	#3127-EU

PREMIUM**





Dentină

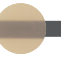							
	XWD	WD	A1D	A2D	A3D	A3.5D	A4D
Seringă	#3062-EU	#3063-EU	#3057-EU	#3058-EU	#3059-EU	#3060-EU	#3061-EU
PLT	#3152-EU	#3153-EU	#3147-EU	#3148-EU	#3149-EU	#3150-EU	#3151-EU

Smalt

							
	XWE	WE	A1E	A2E	A3E	A3.5E	A4E
Seringă	#3055-EU	#3056-EU	#3050-EU	#3051-EU	#3052-EU	#3053-EU	#3054-EU
PLT	#3145-EU	#3146-EU	#3140-EU	#3141-EU	#3142-EU	#3143-EU	#3144-EU

Translucid

				
	Clear	Blue	Gray	Amber
Seringă	#3064-EU	#3066-EU	#3067-EU	#3065-EU
PLT	#3154-EU	#3156-EU	#3157-EU	#3155-EU

Culorile din ghidul de culori real pot diferi de culorile imprimate.

* Fiecare seringă refill Classic conține 3,6 g/2,0 ml, iar fiecare Classic PLT refill conține 20 buc x 0,25 g.

** Fiecare seringă refill Premium pentru dinină și smalt conține 3,6 g/2,0 ml, iar fiecare seringă refill Premium translucid conține 1,8 g/0,9 ml. Fiecare Premium PLT refill conține 10 buc x 0,25 g.



Importator UE

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Germania
Telefon +48 662 281 282
www.kuraraynoritake.eu/ro
dental-EasternEurope@kuraray.com

- Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că ați citit Instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu produsul.
- Specificațiile și aspectul produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Culoarea imprimată poate fi ușor diferită de culoarea reală.

„CLEARFIL” și „CLEARFIL MAJESTY” sunt mărci comerciale înregistrate ale KURARAY CO., LTD.
„VITA” este o marcă comercială a VITA™ Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia

