

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

Dé universele
voorbehandelingsprimer




UNIVERSELE VOORBEHANDELINGS-PRIMER VOOR ALLE CEMENTEER-INDICATIES EN REPARATIES

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS is dé universele voorbehandelingsprimer. Gebruik de primer voor alle adhesieve cementeerprocedures en reparaties. Altijd dezelfde procedure: aanbrengen en direct droogblazen. Geen inwerktijd. CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS hecht direct aan glaskeramiek, hybride keramiek, composiet, metalen en metaaloxides

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS hecht direct aan keramiek*, hybridekeramiek, composiet of metaal. En gebruik het voor:



Oppervlaktebehandeling van prothetische restauraties.

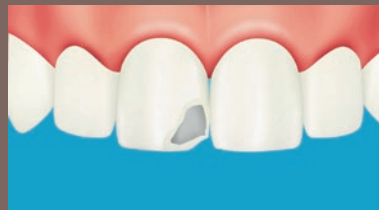

Intraorale reparatie van gefractureerde restauraties.

* Metaaloxide, glaskeramiek.



DE TECHNOLOGIEËN ACHTER EEN STERKE HECHTING

Hoe kan één enkel flesje primer een sterke hechting verzorgen aan de meest uiteenlopende restauratiematerialen? Alles draait om de chemie. Het originele MDP-monomeer staat garant voor een sterke hechting aan metalen en metaaloxides zoals zirkoniumoxide. En de silaan γ MPS doet hetzelfde aan composieten, hybridekeramiek, glaskeramiek en porselein.



GEWOON AANBRENGEN EN DROGEN

Geef het hechtoppervlak van de restauratie eerst de voorgeschreven voorbehandeling: breng CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS aan op elk restauratieoppervlak.

●	●	●	● OF ●*	●	● — ●
Metalen	Metaaloxide (Zirkonium)	Implantaat- kronen en abutments	Silica- gebaseerd keramiek	Glasvezel- stiften	Composieten

● Zandstralen, spoelen en drogen		
● Hydrofluoridezuur aanbrengen, spoelen en drogen*		
● K-ETCHANT Syringe aanbrengen, 5 seconden laten inwerken, spoelen en drogen		

* Als uw laboratorium al een behandeling met waterstoffluoride heeft toegepast, wordt aanbevolen om - net vóór het aanbrengen van CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS - te reinigen en activeren met K-ETCHANT Syringe, spoelen en drogen

VOORBEELD: IN COMBINATIE MET PANAVIA™ V5



Breng CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS aan op het hechtoppervlak van de restauratie met een applicatieborsteltje. Blaas het oppervlak droog.



Behandel het tandoppervlak zoals aanbevolen met PANAVIA™ V5 Tooth Primer (aanbrengen, 20 seconden wachten en drogen met een zachte luchtstroom).



De prothetische voorziening volgens de gebruiksaanwijzing cementeren met composietcement (PANAVIA™ V5 Paste).

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS gaat perfect samen met het adhesieve composietcement PANAVIA™ V5 voor betrouwbaar cementeren.



KATANA™ CLEANER is de eerste intra- en extraorale universele cleaner. Verwijdert contaminatie om uw adhesieve procedures te optimaliseren.



PRODUCTASSORTIMENT

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS - #3637-EU
(4 ml)



PANAVIA™ V5 PROFESSIONAL KIT - #3600-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Pasta één spuit per kleur (2,4 ml / 4,2 g): Universal (A2), Clear, Brown White, Opaque, PANAVIA™ V5 Try-in Paste één spuit per kleur (1,8 ml): Universal (A2), Clear, Brown White, Opaque; K-ETCHANT Syringe (3 ml), 30 mengtips, 10 endotips, 50 applicatieborsteltjes (fijn), 1 mengschaaltje, 20 needle tips



PANAVIA™ V5 STANDARD KIT - Universal (A2) #3601-EU - Clear #3602-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Pasta één spuit per kleur (4,6 ml / 8,1 g): Universal (A2) of Clear, K-ETCHANT Syringe (3 ml), 15 mengtips, 5 endotips, 50 applicatieborsteltjes (fijn), 1 mengschaaltje, 20 needle tips



PANAVIA™ V5 INTRODUCTORY KIT - Universal (A2) #3604-EU - Clear #3605-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Pasta één spuit per kleur (2,4 ml / 4,2 g): Universal (A2) of Clear, 10 mengtips, 50 applicatieborsteltjes (fijn), 1 mengschaaltje



CONTACTGEGEVENS

Kuraray Europe Benelux B.V.

Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden
Postbus 299, 1970 AG IJmuiden, Nederland
Telefoon: +31 (0)255 523 701
E-mail: info@kuraray.com
Website: www.kuraraynoritake.eu

België:
Olivier van Nieuwkerke: +32 (0) 483 99 37 70
E-mail: olivier.vannieuwkerke@kuraray.com

- Lees vóór gebruik van dit product de meegeleverde gebruiksinstructies.
- Specificaties en uiterlijk van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken van de echte kleuren.

'CLEARFIL' en 'PANAVIA' zijn handelsmerken van KURARAY CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Website www.kuraraynoritake.com



07/2020 MKA00623