

# ***CLEARFIL™ DC CORE PLUS BOND I ETT KIT***

---

Lättanvänd  
Enkel att applicera  
Dualhärdande



# DEN KOMPLETTA LÖSNINGEN FÖR PELARUPPBYGGNAD

## CLEARFIL™ DC CORE PLUS

1

### ENKEL OCH SMIDIG ARBETSGÅNG

Gör varje pelaruppbyggnad okomplicerad. Den är designad för att vara lättanvänd och strömlinjeformar ditt arbete från början till slut.

2

### PÅLITLIG DUALHÄRDNING

Ger komplett härdning i alla områden - också dit ljuset inte når - för en stabil grund.

3

### OPTIMAL HANTERING & PRECIS KONTROLL

Avancerad tixotropi ger produkten ett smidigt flöde vid tryck samtidigt som den blir kvar exakt där du placerat den.

4

### FORMSTABIL FORMILA, SJUNKER INTE IHOP

Behåller formen under applicering och skulptering och ger dig en exakt pelaruppbyggnad - varje gång.

5

### OPTIMERAD ARBETSTID

En arbetstid på ungefär tre minuter ger dig tid att både cementera stiftet och att göra en pelaruppbyggnad med samma blandningsspets.



# BYGGER STABILITET

## CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

### SNABB OCH SMIDIG PROCEDUR

Med CLEARFIL™ Universal Bond Quick blir arbetet smidigt, med snabb applicering och utan väntetid eller gnugging. Produkten förkortar behandlingstiden vid pelaruppbyggnad.

### ENKEL ATT APPLICERA


CLEARFIL™ Universal Quick 2 är väldigt enkel att använda. Den nya metoden för fillerdispersion ger produkten bättre flytbarhet, men med samma fyllnadgrad. Förbättrad flytbarhet ger ett jämnt och tunt bindningsskikt. Det minimerar risken för materialansamling, till och med i rotkanalerna.

### MÅNGSIDIGHET FÖR OLIKA ANVÄNDNINGSMRÅDEN


Den här adhesiven lämpar sig för pelaruppbyggnad, men också för direkta och indirekta ersättningar och ger den mångsidighet som krävs i en lång rad kliniska behandlingar. Den är också kompatibel med självadhesiva cement från andra tillverkare, vilket ger dig ännu fler valmöjligheter.



Applicera<sup>1</sup>

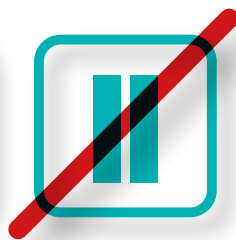

Ingen väntetid

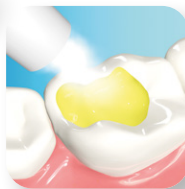

Torka



Ljushärda

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 ger enastående adhesion, vilket gör att produkten lämpar sig väl att användas tillsammans med CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Den adharar både till dentinet i rotkanalen och till stiftet. Ingen separat primer behövs.




<sup>1</sup> Applicera med en gnuggande rörelse

## STYRKA I SAMKLANG MED NATUREN

CLEARFIL™ DC CORE PLUS är skapad för att fungera i harmoni med naturligt dentin. Elasticitetsmodulen ligger nära dentinets vilket gör att de ocklusala krafterna fördelas i hela rotkanalen istället för att belasta en enda punkt.

Den höga mekaniska styrkan gör att pelaruppbyggnaden förblir stabil även under påfrestningar från tuggkrafter. Det minimerar risken för både rotfrakturer och frakturerade pelare. Resultatet är en enastående stabil grund för varje ersättning.

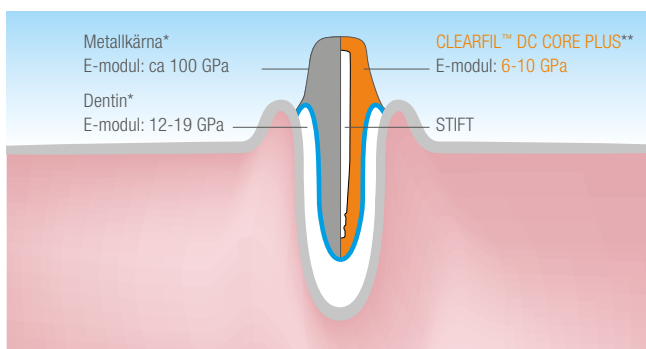


\* Källa: S. Takahashi, T.Hirasawa, et. al, J. J. Dent Material Vol. 16(6), 555-562, 1996.  
\*\* Källa: Kuraray Medical Inc.

## KONTROLLERAT FLYT

Tack vare fillerpartiklarnas unika ytbehandling i flyter pastan CLEARFIL™ DC CORE PLUS smidigt och är enkel att kontrollera.


### Pastans formbarhet

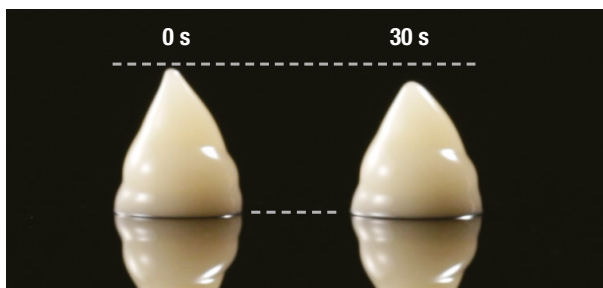


## DUALHÄRDANDE EGENSKAPER FÖR PELARUPPBYGGNAD

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 kan användas tillsammans med CLEARFIL™ DC CORE PLUS. CLEARFIL™ DC CORE PLUS innehåller en specifik accelerator för självhärdning vilket ger utmärkta resultat även i de områden som inte nås av ljus.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 ger en stark, kemisk bindning till hydroxylapatit. Det är tack vare Original MDP-monomeren, som är känd för sin höga bindingsstyrka och sina extremt hållbara bindningar till tandstruktur.

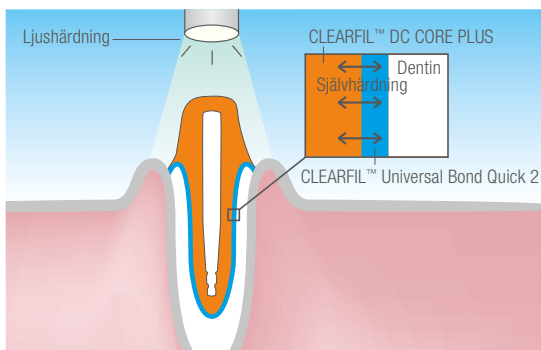


### STRUKTUREN HOS DEN ADHESIVA MONOMEREN MDP

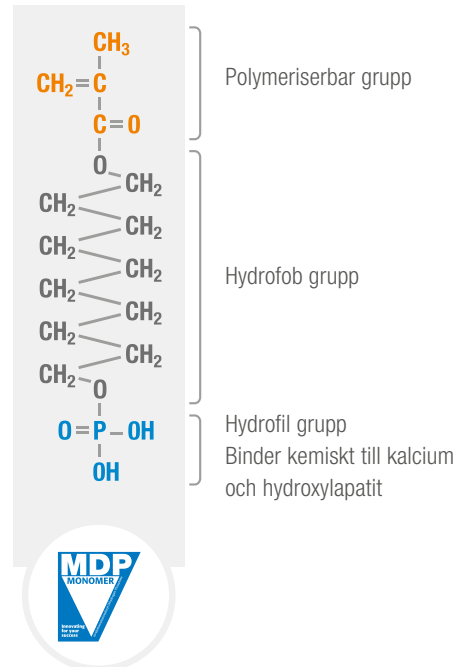

## DEN SLÄNDE BINDINGSSTYRKAN ÄR BEKRÄFTAD!

### Skjuvbindningsstyrka till bovina tänder

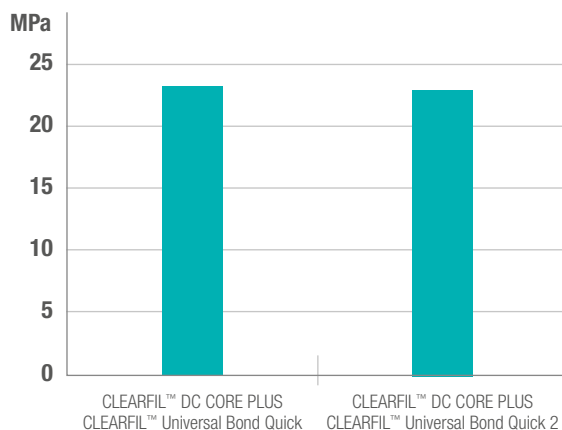

#### Testförhållanden:

Ahderande yta: bovina tänder, polerad yta, #600  
Behandlad yta: 2,38 mm diameter.  
Härldningslampa: Pen Cure 2000, standardinställningar.  
Förvaring i vatten, 37 °C, 24 timmar


Källa: Kuraray Noritake Dental Inc.

## LÄTTANVÄND FÖR EN KLINISK PROCEDUR UTAN STRESS


Cementering av stift och pelaruppbyggnad med CLEARFIL™ DC CORE PLUS enligt fabrikantens anvisningar.



Applicera BOND med en gnuggande rörelse.

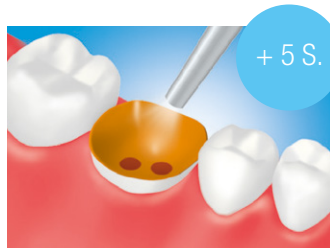


Blås torrt med mild luftstråle och papperspoint tills dess BOND "stannat".

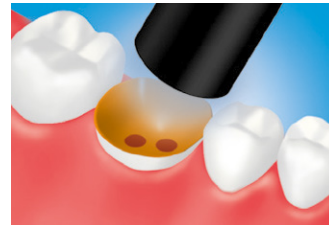


Ljushärda.



Applicera PASTE.

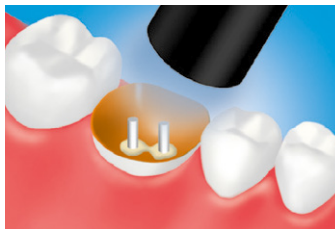

Sätt stiften på plats och ljushärda PASTE.

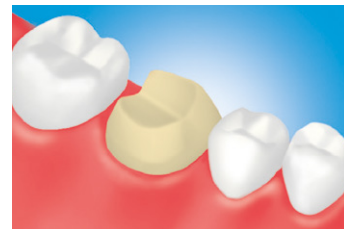

Bygg upp pelaren med hjälp av PASTE.

OBS: Det här är en förkortad version. Följ användarinstruktionerna som bifogas produkten.

## NYANSER

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & BOND Kit finns i två nyanser:



Dentin



Vit

## PRODUKTUTBUD

### CLEARFIL™ DC CORE PLUS & BOND Kit

1 Spruta (9 ml), CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2: 1 Flaska (1 ml)  
Tillbehör: 20 Blandningsspetsar, 10 Guidespetsar (L), 10 Guidespetsar (S),  
50 Applikatorpenslar (endo), 1 Blandningsplatta, 1 Platta för ljusblockering

**#4049-EU DENTIN**

**#4050-EU WHITE**



### CLEARFIL™ DC CORE PLUS Refill

1 Spruta (9 ml), 20 Blandningsspetsar, 10 Guidespetsar (L), 10 Guidespetsar (S)

**#2942-EU DENTIN**

**#2943-EU WHITE**



### CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 Bottle Refill

(5 ml)

**#4042-EU**



### CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 Unit Dose Standard Pack

Engångsdoser (50 st x 0.1 ml), Applikatorpenslar (x 50 st)

**#4046-EU**



### CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 Bottle Value Pack

(3 x 5 ml)

**#4044-EU**



### K-ETCHANT SPRUTA

K-ETCHANT Spruta (2 x 3 ml), Nålspetsar (x 40 st)

**#3252-EU**

### NEEDLE TIPS

Nålspetsar (x 20 st)

**#3253-EU**



Contactinformation

**Kuraray Europe Benelux, Nordics,  
Baltics, UK & Ireland**

Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nederländerna

Postbus 299, 1970 AG IJmuiden, Nederländerna

Tel: +31 (0)255 523 701

infordics@kuraray.com

www.kuraraynoritake.eu



EU-importör

**Kuraray Europe GmbH**

Philipp-Reis-Strasse 4,

65795 Hattersheim am Main, Tyskland

Phone +49 (0)69 305 35 835

Fax +49 (0)69 305 98 35 835

www.kuraraynoritake.eu

centralmarketing@kuraray.com

- Läs bifogade användarinstruktioner innan du använder den här produkten
- Produktens specifikationer och utseendet kan komma att ändras utan förvarning
- De tryckta färgerna kan skilja sig något från verkligheten

"CLEARFIL" är ett registrerat varumärke från KURARAY CO.; LTD.



**Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan  
Website www.kuraraynoritake.com



01/2026 MKA00551