
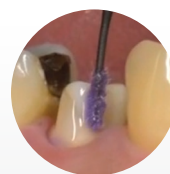


DENTAL CLEANING AGENT

 KATANA™ *Cleaner*

Skuteczne oczyszczanie powierzchni
zębów oraz uzupełnień protetycznych
przed każdą procedurą adhezyjną

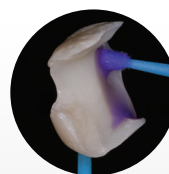


KONDYCJONOWANIE POWIERZCHNI GWARANCJĄ SILNEJ ADHEZJI

Dokładne oczyszczenie uzupełnienia protetycznego, ubytku czy filaru zęba z zanieczyszczeń, powstałych w trakcie preparacji tkanek oraz próbných przywiązek protetycznych, jest fundamentalne dla uzyskania właściwego połączenia adhezyjnego. **KATANA™ Cleaner** w prosty i skuteczny sposób oczyszcza wszystkie powierzchnie adhezyjne, przygotowując je do procedur bondingu czy cementowania.

KATANA™ Cleaner to jedyny w swoim rodzaju, nieabrazyjny środek dekontaminacyjny, pomagający w osiągnięciu najlepszych warunków adhezyjnych. Preparat zawiera aktywnie działające sole MDP, a dzięki pH o wartości 4,5¹ doskonale nadaje się do kondycjonowania wszystkich powierzchni w warunkach jamy ustnej oraz poza nią.

¹ Metoda pomiaru: JIS Z 8802:2011.

Siły łączenia z KATANA™ Zirconia HT (w teście wytrzymałości na ścinanie)

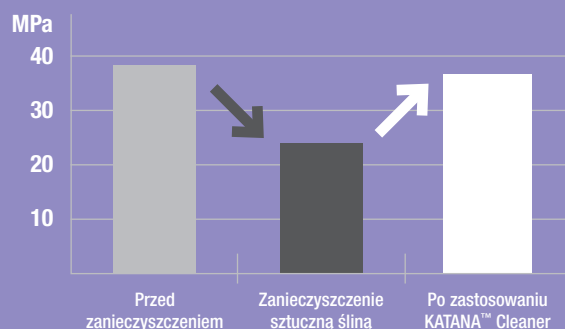

Warunki pomiarów:
substrat po szlifowaniu papierem ściernym # 1000 oraz piaskowaniu tlenkiem glinu. Obszar pokrycia ø 5 mm, pomiar w temp. 37°C, po przechowywaniu w wodzie przez 1 dzień.

Cement: PANAVIA™ V5

Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc.




ŁATWO, SZYBKO I SKUTECZNIE




Wetrzeć, spłukać i osuszyć. To wszystko, co musisz zrobić, aby osiągnąć maksymalną jakość i trwałość połączenia adhezyjnego.

KATANA™ Cleaner wymaga jedynie 10 sekund wcierania, aby skutecznie oczyścić powierzchnię zęba lub korony protetycznej po przymiarce i przygotować je do procedury adhezyjnej.

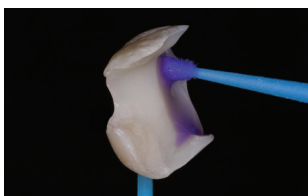

Wcierać przez 10 sekund.

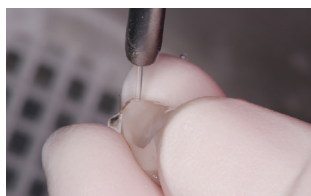

Spłukać i osuszyć.



Cementowanie adhezyjne
zgodnie z instrukcją producenta.

Zdjęcia zamieszczone
dzięki uprzejmości
dr Shoji Kato.


JAK TO DZIAŁA?



SZEROKI ZAKRES WSKAZAŃ

KATANA™ Cleaner wyróżnia się wartością pH 4,5 dzięki temu wpisuje się na listę łagodnych kondycjonerów, które mogą być stosowane zarówno wewnątrzustnie jak i zewnątrzustnie.

KATANA™ Cleaner to sposób na idealne przygotowanie powierzchni przed cementowaniem lub aplikacją systemu wiążącego.

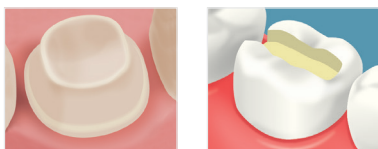

Wewnątrzustnie:

Ubytki, łączniki implantów, kanały korzeniowe, filary zębów.



Zewnątrzustnie:

Ceramika: tlenek cyrkonu, dwukrzemian litu, porcelana dentystyczna.

Materiały na bazie żywic: korony CAD/CAM, kompozyty.

Metale: stopy metali szlachetnych/nieszlachetnych.

Wkłady koronowo-korzeniowe: z włókien szklanych, ze stopów metali.

KONDYCJONOWANIE TLENKU CYRKONU

Zanieczyszczenie sztuczną śliną

Ocena zanieczyszczenia na podstawie stopnia przebarwienia barwnikiem, który wiąże białka obecne w ślinie.



Zanieczyszczenie krwią (ludzkie osocze)

Ocena zanieczyszczenia na podstawie stopnia przebarwienia barwnikiem, który wiąże białka obecne w ludzkim osoczu.


Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc.




WYSOKA SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA

Opracowanie, preparacja, przymiarki protetyczne – to sytuacje, które pogarszają warunki adhezji. Zanieczyszczenia powierzchni powstałe w trakcie pracy drastycznie zmniejszają jakość połączenia adhezyjnego. **KATANA™ Cleaner** idealnie oczyści daną powierzchnię i przygotuje ją do dalszej procedury. Umożliwia tym samym osiągnięcie najwyższych sił łączenia.

Siły połączenia adhezyjnego filaru zęba z KATANA™ Zirconia HT przy różnych metodach oczyszczania (test wytrzymałości na ścinanie)

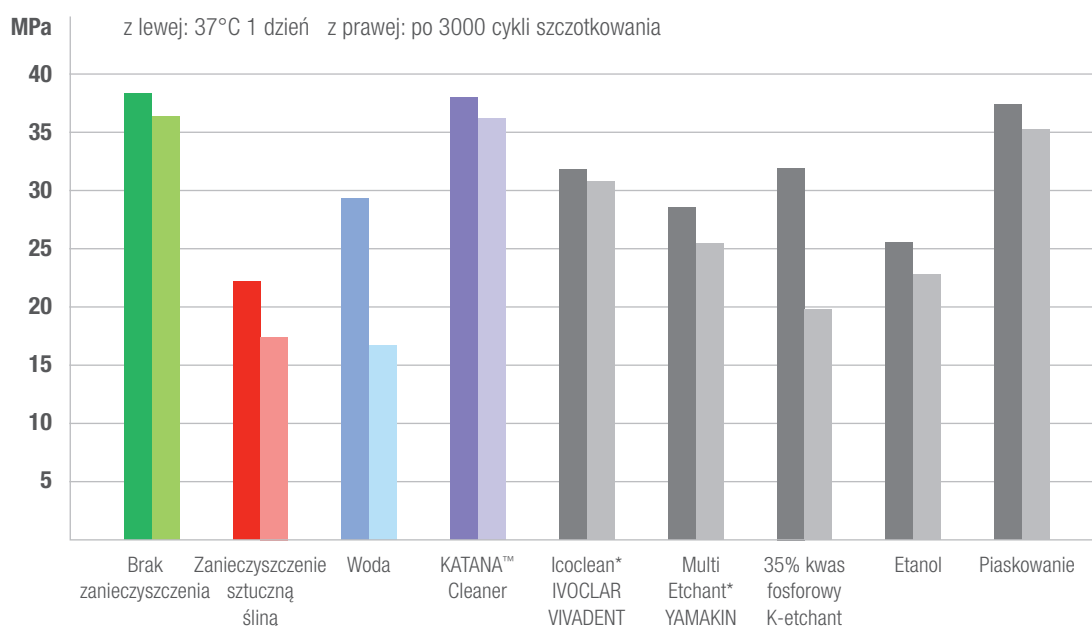

Siły łączenia z próbką bawolego szkliwa i zębina przy różnych metodach oczyszczania (test wytrzymałości na ścinanie)

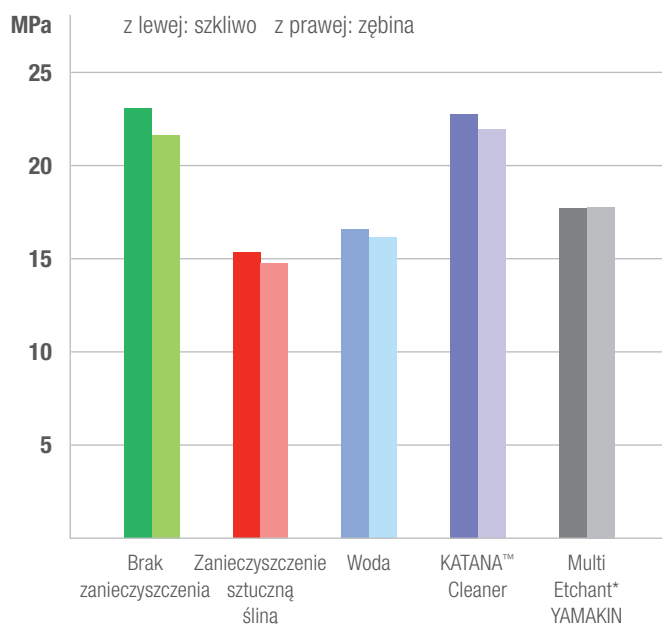

Cement: PANAVIA™ V5
Dane zamieszczone dzięki uprzejmości dr Shoji Kato,
„Wpływ różnych procedur oczyszczania powierzchni
na trwałość połączenia adhezyjnego”.
* Nie jest znakiem towarowym Kuraray Noritake Dental Inc.

PRZEGLĄD PREPARATÓW DO OCZYSZCZANIA*

	KATANA™ CLEANER	IVOCLEAN** (IVOCLAR VIVADENT)	ZIRCLEAN** (BISCO)
Wewnątrzustnie – tkanki zęba	Tak	Nie	Nie
Wewnątrzustnie – łączniki implantów	Tak	Nie	Nie
Zewnątrzustnie – uzupełnienia protetyczne	Tak	Tak	Tak
Składniki aktywne	Sole MDP (surfaktant)	Wodorotlenek sodu	Wodorotlenek potasu
Wartość pH	4,5	13-13,5	13
Czas aplikacji	10 sekund	20 sekund	20 sekund
Użytkowanie	Bez wstrząsania	Wstrząsnąć przed użyciem	Bez wstrząsania

* Dane zaczerpnięte z oficjalnych instrukcji użycia produktów.

** Nie jest znakiem towarowym Kuraray Noritake Dental Inc.

OTWARCIE
FLIP-TOP



NUMER KATALOGOWY

NAZWA

#3970-EU

KATANA™ Cleaner (4,0 ml)

NAJLEPSZE CEMENTOWANIE ADHEZYJNE



PANAVIA™ V5

PANAVIA™ V5 to dualnie wiążący cement kompozytowy, oferujący najwyższe siły łączenia spośród wszystkich obecnych na rynku. Dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej i pastach próbnych. Monomer 10-MDP, stabilność koloru, wszechstronność zastosowania oraz najwyższe siły łączenia pozwalają osiągnąć najlepsze rezultaty trwałego i estetycznego cementowania.



PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL

Cement Universal PANAVIA™ SA dzięki zawartości monomerów LCSi oraz 10-MDP pozwala na skuteczne połączenie praktycznie z każdym substratem (ceramika szklana, tlenek cyrkonu, szkliwo, zębina), bez potrzeby stosowania dodatkowego primera. Prosta procedura i wysokie siły łączenia to gwarancja trwałego cementowania w każdej sytuacji klinicznej.

KONTAKT

Kuraray Europe GmbH

BU Medical Products

Philipp-Reis-Strasse 4

65795 Hattersheim am Main

Niemcy

Tel. +48 511 013 016

E-Mail dental-poland@kuraray.com

Strona www.kuraraynoritake.eu/pl

- Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi.
- Specyfikacje i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Kolor nadruku może nieznacznie różnić się od koloru rzeczywistego.

„KATANA” jest znakiem towarowym Noritake Co., Ltd.

„PANAVIA” jest znakiem towarowym Kuraray Co., Ltd.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia
Website www.kuraraynoritake.com

