

JEDNA SILNÁ ŘADA

PANAVIA™

ODPOVĚĎ NA VŠECHNY VAŠE POTŘEBY V OBLASTI CEMENTOVÁNÍ

PANAVIA™ V5 PRYSKYŘIČNÝ CEMENT

Silný a estetický

PANAVIA™ Veneer LC

Specialista na fazety

PANAVIA™ SA Cement Universal

Váš každodenní cement


BORN IN JAPAN

SKUTEČNÝ CEMENT

PANAVIA™

Vše začalo v roce 1983, kdy byl produkt PANAVIA™ EX uveden na trh jako první adhezivní pryskyřičný cement obsahující originální monomer MDP od společnosti Kuraray Noritake Dental Inc. Značka PANAVIA™ si rychle získala oblibu mezi zubními lékaři po celém světě pro svou spolehlivou adhezi. Byly vylepšeny stávající receptury a vyvinuty zcela nové technologie s cílem položit základy pro zjednodušené postupy adhezivního cementování a vynikající estetiku. To vše nakonec vyústilo v současnou řadu snadno použitelných a vysoce estetických pryskyřičných cementů, které poskytují špičkovou pevnost spoje.

HISTORIE ZNAČKY PANAVIA™

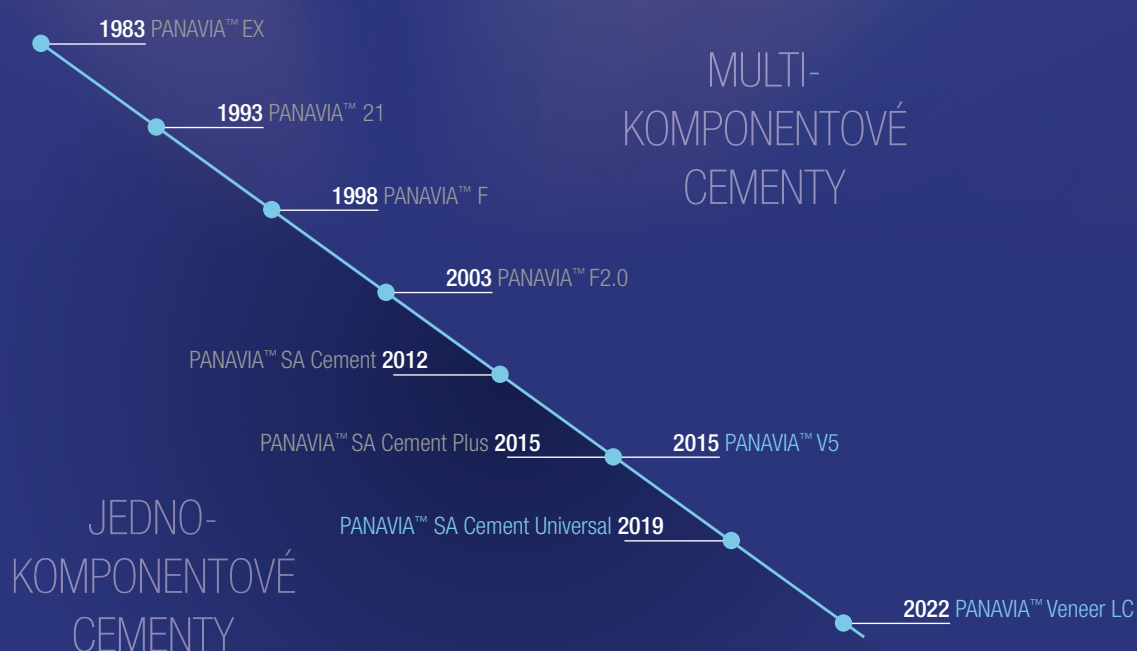

ŘADA PANA VIA™

SÍLA TŘÍ

Vzhledem k různým individuálním preferencím a odlišným potřebám na základě indikace pravděpodobně nikdy nebude možné nabídnout jeden pryskyřičný cement pro všechny a pro všechno. Společnost Kuraray Noritake Dental Inc. je však přesvědčena, že tři různé systémy cementování jsou dostatečné pro splnění potřeb a přání každého zubního lékaře a pacienta.

PANA VIA™ SA Cement Universal

VÁŠ KAŽDODENNÍ CEMENT



Pro ty, kteří chtějí co nejjednodušeji nahradit konvenční cementování při každodenní práci. Minimalizujte počet pracovních kroků i prumerů a ušetřete čas při cementování, aniž by to ohrozilo vaše výsledky.

- Snadný postup
- Estetika

PANA VIA™ V5

SILNÝ A ESTETICKÝ



Volba pro předvídatelný systém cementování, který spolehlivě vytváří extrémně pevný a odolný spoj a zároveň poskytuje vysoce estetické výsledky.

- Snadný postup
- Estetika

PANA VIA™ Veneer LC

SPECIALISTA



Chcete aplikovat více fazet najednou, aniž byste museli závodit s časem tuhnutí? Produkt PANA VIA™ Veneer LC, vyvinutý speciálně pro tyto indikace, je přesně to, co potřebujete.

- Snadný postup
- Estetika

Fazety



Inlay/
onlaye



Přední
korunky



Zadní
korunky



3členné
můstky



Dlouhé
můstky



Korunky/můstky
pro implantáty



PANA VIA™ Veneer LC



PANA VIA™ V5



PANA VIA™ SA Cement Universal



PANAVIA™ SA Cement Universal

NENÍ
POTŘEBA
PRIMER



DĚLEJTE TO CO NEJJEDNODUŠEJI!

Chcete minimalizovat počet pracovních kroků i primerů a ušetřit čas při cementování, aniž byste ohrozili své výsledky? Pokud ano, pak je pro vás Cement Universal PANAVIA™ SA skvělou volbou. Díky integraci dvou specifických monomerů poskytuje samolepicí pryskyřičný cement s duálním vytvrzováním pevný a odolný spoj, který chemicky přilne ke všem výplňovým materiálům a povrchům zubů bez nutnosti použití samostatného primeru. Proto je ideální pro každodenní zákroky, jako je cementování korunek a můstků, ať už ze zirkonu, lithium disilikátu, hybridní keramiky, nebo dokonce kovu.

KAŽDODENNÍ CEMENT

VÝHODY A INDIKACE

VÝHODY

- ✓ Váže se na zirkon a lithium disilikát bez dalších primerů
- ✓ Velmi snadné odstraňování přebytečného materiálu
- ✓ Skladování při pokojové teplotě*
- ✓ Snadná aplikace při malém tlaku
- ✓ Automatické nebo ruční míchání

*Při teplotě nižší než 25 °C i přes přítomnost silanu (LCSI).

INDIKACE

- ✓ Cementování korunek, můstků, inlayí a onlayí
- ✓ Cementování protetických náhrad na implantátových abutmentech a konstrukcích
- ✓ Cementování adhezních můstků a dlah
- ✓ Cementování kořenových nástaveb a čepů
- ✓ Amalgámový bonding

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Aplikace plniva:	62 % hmot. (40 % obj.)	Sorpce vody: ^{1,2}	27 µg/mm ³
Pevnost v ohybu: ^{1,2}	91 MPa	Tloušťka filmu:	ca 14 µm
Modul pružnosti v ohybu: ^{1,2}	4,6 GPa	Nepropustnost pro záření: ²	170 % Al
Pevnost v tlaku: ¹	301 MPa	Uvolňování F-iontů:	67 µg/g
Teplota skladování:	2–25 °C / 36–77 °F	Pracovní čas (23 °C):	60 s


¹Duální vytvrzování (kombinace samovytvrzování a vytvrzování světlem). ²Podle normy ISO 4049:2009.
Zdroj: Kuraray Noritake Dental Inc.

Konečný výsledek může být ovlivněn dílčími podmínkami hodnocení stanovenými předpisy ISO.

PANAVIA™ SA Cement Universal


FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY

SMYKOVÁ PEVNOST VAZBY S VÝPLŇOVÝMI MATERIÁLY

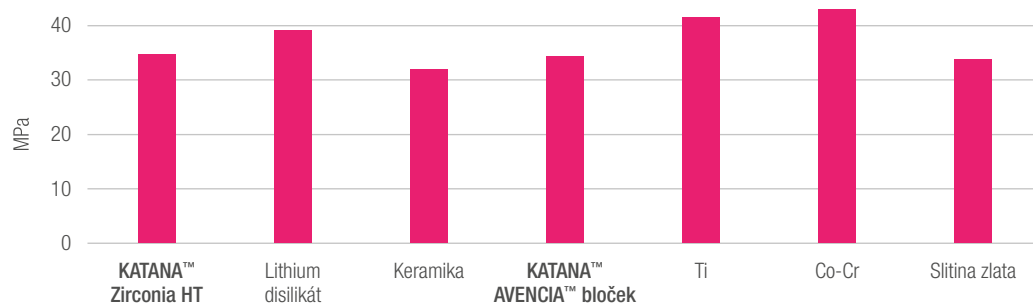

Zdroj dat:
Kuraray Noritake Dental Inc.

SMYKOVÁ PEVNOST VAZBY KE STRUKTUŘE ZUBU

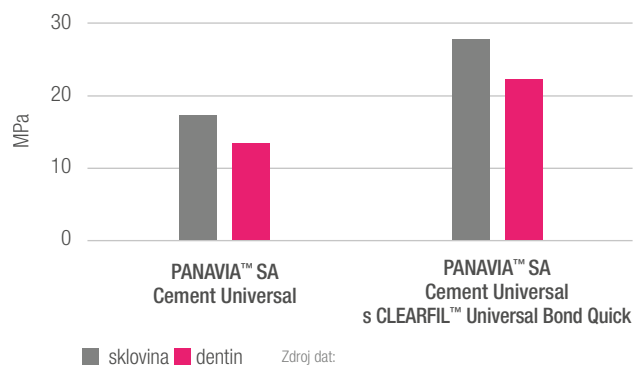

■ sklovina ■ dentin

Zdroj dat:
Kuraray Noritake Dental Inc.




CLEARFIL™ Universal Bond Quick
Lze použít na strukturu zubu pro zvýšení pevnosti spoje v případech s omezenou retencí. Díky této kombinaci není nutné používat přípravek CLEARFIL™ DC ACTIVATOR.




Snadné odstranění přebytků
Šetrný k dásním, snadné odstraňování přebytečného cementu. Vždy stejný bezproblémový výsledek čištění!



TŘI ESTETICKÉ ODSTÍNY

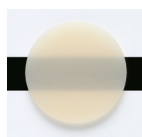

Univerzální (A2)
(pro všechny případy)

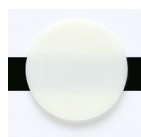

Bílý
(větší value)



Průsvitný
(větší průsvitnost)

TECHNOLOGIE

Inovativní technologie monomerů LCSi ve formě patentovaného silanového pojiva s dlouhým uhlíkovým řetězcem umožňuje vazbu na sklokeramiku, lithium disilikát, hybridní keramiku a kompozitní pryskyřici.

Originální monomer MDP zajišťuje chemické spojení se zirkonem, kovem, dentinem a sklovinou.



POSTUP CEMENTOVÁNÍ

PANAVIA™ SA Cement Universal



KOMPONENTY

PANAVIA™ SA Cement Universal

PANAVIA™ V5



ZVOLTE NEJSILNĚJŠÍ A NEJESTETIČTĚJŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU INDIKACI

Hledáte předvídatelný cementační systém, který spolehlivě vytvoří extrémně pevný a odolný spoj a zároveň podpoří vysoce estetické výsledky? Pokud ano, pak je PANAVIA™ V5 řešením pro vás. Cement s duálním vytvrzováním poskytuje nejvyšší pevnost spoje a estetiku z řady cementů PANAVIA™, takže můžete své výplně cementovat s jistotou. Jeho dobře sladěné komponenty jsou vynikající volbou pro celou řadu nepřímých výplní a lepení kořenových nástaveb a čepů – vždy se kombinují a aplikují stejným způsobem.

PRO PŘEDVÍDATELNÝ POSTUP

VÝHODY A INDIKACE

VÝHODY

- ✓ Pevné a trvanlivé spojení se zubem a výplní
- ✓ Vynikající estetika a barevná stálost
- ✓ Snadná aplikace, usazení a čištění
- ✓ Stejně součásti a postupy používané pro každou indikaci
- ✓ Zkušební pasty podporují předvídatelnou estetiku

INDIKACE

- ✓ Cementování korunek, můstků, inlayí a onlayí
- ✓ Cementování fazet
- ✓ Cementování adhezních můstků a dlah
- ✓ Cementování protetických náhrad na implantátových abutmentech a konstrukcích
- ✓ Cementování kořenových nástaveb a čepů
- ✓ Amalgámový bonding

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Aplikace plniva:	61 % hmot. (38 % obj.)	Tloušťka filmu: ^{1,2}	12 μm
Pevnost v ohybu: ^{1,2}	127 MPa	Propustnost pro záření: ²	180 % Al
Modul pružnosti v ohybu: ^{1,2}	6,3 GPa	Uvolňování F-iontů (28 dní): ¹	58 μg/g
Pevnost v tlaku: ¹	310 MPa	Pracovní čas (23 °C):	2 min
Sorpce vody: ^{1,2}	21 μg/mm ³		


¹Duální vytvrzování pasty (kombinace samovytvrzování a vytvrzování světlem). ²Podle normy ISO 4049:2009.
Zdroj: Kuraray Noritake Dental Inc. Konečný výsledek může být ovlivněn dílčími podmínkami hodnocení. Viz předpisy ISO.

PANAVIA™ V5

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY

PEVNOST VAZBY NA STRUKTURU ZUBU

(smyková pevnost lidského zubu: po 3 000 tepelných cyklech)

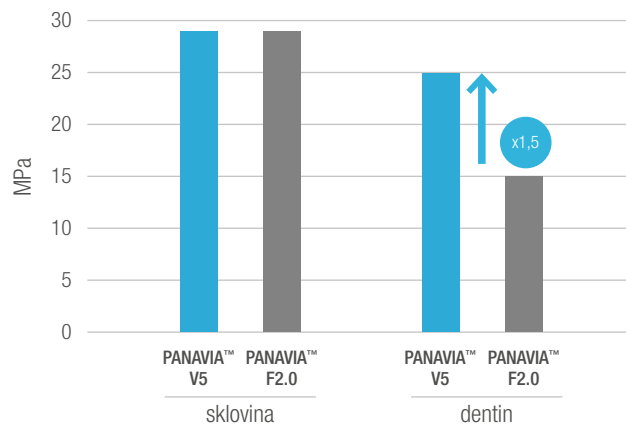


Podmínky měření

Vzorky byly lidské zuby leštěné zrnitostí 1 000 (pro zkoušku pevnosti ve smyku) a hovězí zuby leštěné zrnitostí 1 000 (pro zkoušku pevnosti v tahu) na přilnavé ploše 3 mm. Okraje byly vytvrzovány světlem ze dvou směrů pomocí nástroje Pen Cure 2000 po dobu 10 sekund (pro zkoušku pevnosti ve smyku) nebo chemicky (pro zkoušku pevnosti v tahu). Po vytvrzení byly na jeden den ponořeny do vody o teplotě 37 °C, podrobeny tepelnému cyklování (4–60 °C, 3 000krát /TC3000/ nebo 4 000krát /TC4000/) a vyhodnoceny podle typu buď na pevnost ve smyku, nebo na pevnost v tahu.

PEVNOST SPOJE S PROTETICKÝMI NÁHRADAMI

(po 3 000 tepelných cyklech)

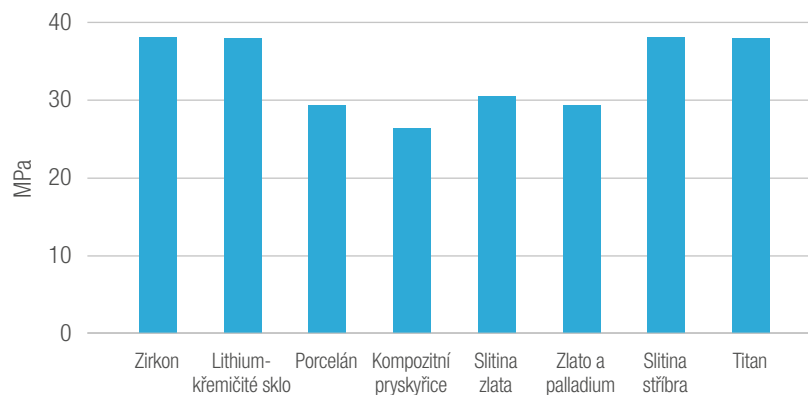


Podmínky měření

Pískování (zirkon, kov jiné než titan, kompozitní pryskyřice)
Leštění zrnitostí 1 000 (porcelán, sklo, titan)
Přilnavý povrch: 5 mm ø
Po nanesení produktu CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS na přilnavý povrch byl aplikován produkt PANAVIA™ V5 a protěza byla udržována pod tlakem. Okraje protězy byly vytvrzovány světlem ze dvou směrů po dobu 10 sekund pomocí nástroje Pen Cure 2000. Sestava byla na jeden den ponořena do vody (37 °C), podrobena tepelnému cyklování (4–60 °C, 3 000krát) a poté byla vyhodnocena na pevnost spoje.

Měřicí přístroj

Autograph AG-100kN (Shimadzu) při rychlosti křížové hlavy 1 mm/min.
Měřeno společností Kuraray Noritake Dental Inc. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na podmínkách měření.

STABILITA ODSTÍNU

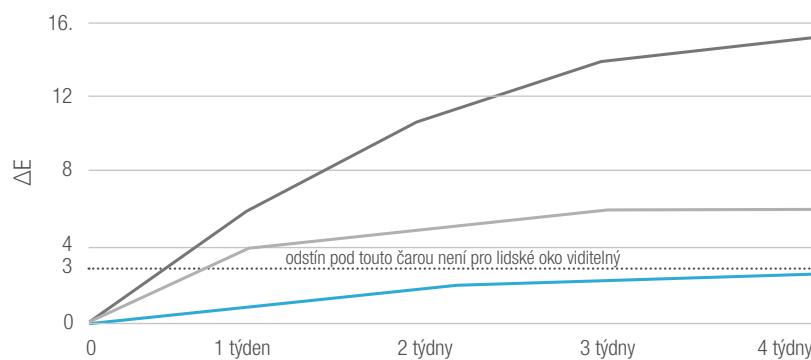

- PANAVIA™ V5
- Multilink Automix*
- RelyX Ultimate*

Zdroj: Kuraray Noritake Dental Inc. Vzorky byly stařeny ve vodě o teplotě 70 °C.

*Není ochrannou známkou společnosti Kuraray Co., Ltd.



PĚT VYSOCE ESTETICKÝCH ODSTÍNŮ


S odstínem odpovídajícím individuálním požadavkům lze snadno dosáhnout realistických výsledků. Pasty PANAVIA™ V5 Try-in jsou k dispozici ve stejných odstínech.



Univerzální (A2)
(pro všechny případy)



Čirý
(větší průsvitnost)

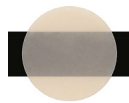

Hnědý (A4)
(více chromatičnosti)



Bílý
(větší value)



Neprůhledný
(více maskování)

TECHNOLOGIE TOUCH-CURE

Blokuje adhezní styčnou plochu při kontaktu mezi zubním primerem PANAVIA™ V5 a pastou PANAVIA™ V5 a vytváří pevný spoj se sklovinou a dentinem. Zároveň urychluje polymeraci (samovytržování) cementu s duálním vytvrzováním a zvyšuje tak jeho účinnost.



Monomer MDP v zubním primeru PANAVIA™ V5 a přípravku CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS je odpovědný za chemické spojení se zirkonem, kovem, dentinem a sklovinou.

KOMPONENTY

Pasta PANAVIA™ V5
Zubní primer PANAVIA™ V5
CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS
Stříkačka K-ETCHANT
Zkušební pasty PANAVIA™ V5

POSTUP CEMENTOVÁNÍ

PANAVIA™ V5



PANAVIA™ Veneer LC



VĚNUJTE POTŘEBNÝ ČAS NÁROČNÝM PROCEDŮRÁM

Chcete aplikovat více fazet najednou, aniž byste museli závodit s časem tuhnutí? Cement PANAVIA™ Veneer LC je speciálně vyvinut pro tyto indikace a je přesně tím, co potřebujete. Nabízí prodloužený pracovní čas 200 sekund* s možností zahájit vytvrzování světlem, kdykoli budete připraveni. Vhodná viskozita a konzistence cementu PANAVIA™ Veneer LC umožňují snadné dávkování a usazování. Při vývoji byl také kladen velký důraz na barevnou stálost čtyř odstínů, které jsou vysoce odolné vůči okrajovým změnám barvy a podporují tak dlouhotrvající estetiku. Snadné odstranění přebytků po vytvrzení v režimu Tack-Cure a vynikající pevnost spoje dotvářejí obraz.

*Pracovní čas: citlivost na světlo (8 000 luxů, ISO 4049).

NÁROČNÝ ÚKOL, SKVĚLÉ ŘEŠENÍ

VÝHODY A INDIKACE

VÝHODY

- ✓ Optimalizovaná manipulace díky vhodné viskozitě
- ✓ Snadné čištění po vytvrzení lepidla v režimu Tack-Cure
- ✓ Nezjistitelné okraje díky nízké tloušťce vrstvy a sférickým submikronovým plnivům
- ✓ Vynikající leštitelnost a barevná stálost pro dlouhotrvající estetiku
- ✓ Pevný a odolný spoj

INDIKACE

- ✓ Cementování keramických a kompozitních inlayí, onlayí a laminátových fazet o tloušťce menší než 2 mm

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Aplikace plniva:	66 % hmot. (47 % obj.)	Tloušťka filmu:	ca 8 μ m
Pevnost v ohybu: ^{1,2}	111 MPa	Nepropustnost pro záření: ²	110 % AI
Modul pružnosti v ohybu: ^{1,2}	5,4 GPa	Pracovní čas: ³	200 s
Pevnost v tlaku: ¹	388 MPa		

¹ Vytvrzování světlem (kombinace samovytvrzování a vytvrzování světlem). ² Podle normy ISO 4049. ³ Pracovní čas: citlivost na světlo (8 000 luxů, ISO 4049).
Zdroj: Kuraray Noritake Dental Inc. Konečný výsledek může být ovlivněn dílčími podmínkami hodnocení stanovenými předpisy ISO.


PANAVIA™ Veneer LC

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY


SMYKOVÁ PEVNOST VAZBY K LIDSKÝM ZUBŮM

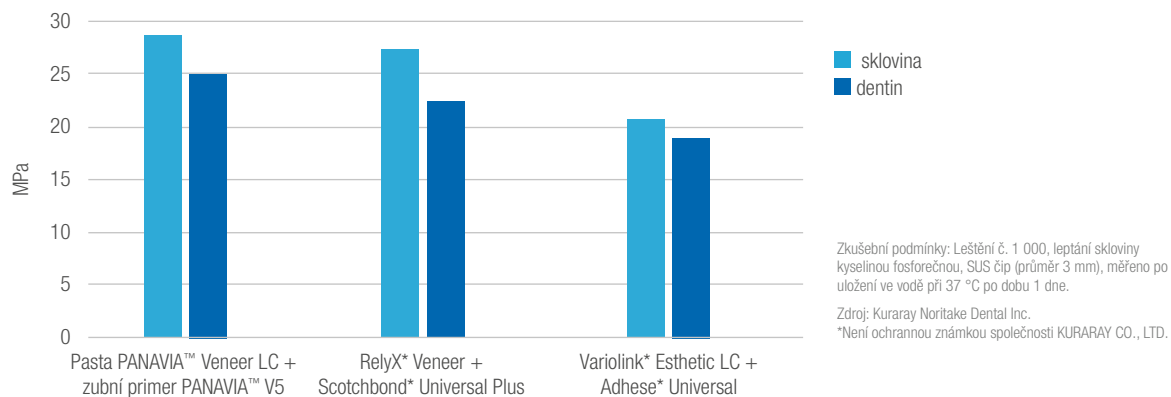


SMYKOVÁ PEVNOST SPOJE S PROTETICKÝM MATERIÁLEM

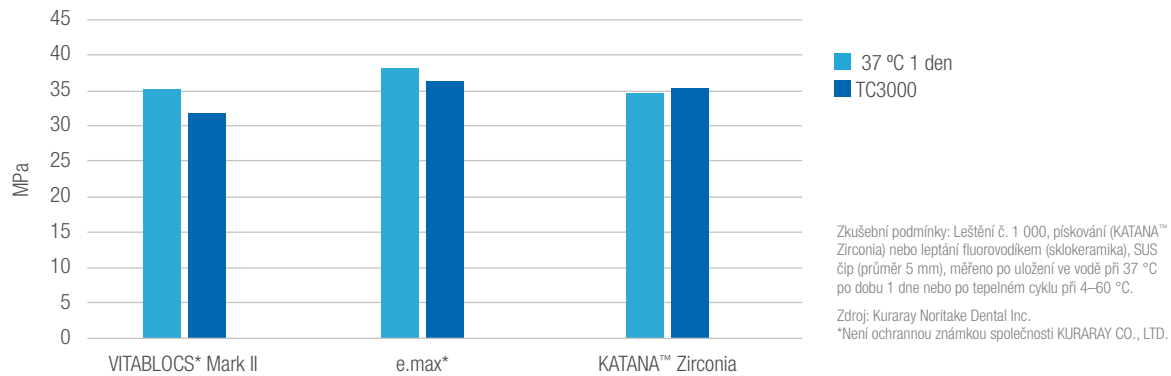

ZACHOVÁNÍ LESKU

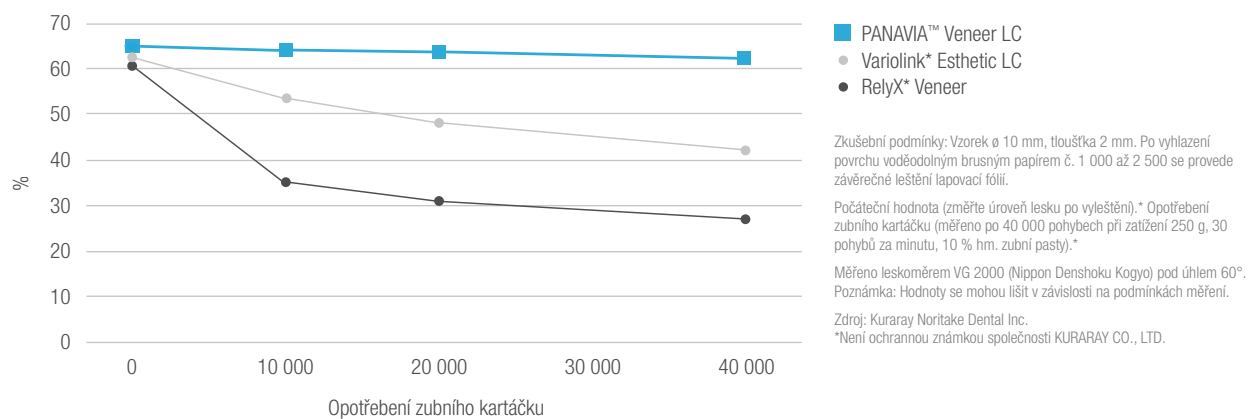

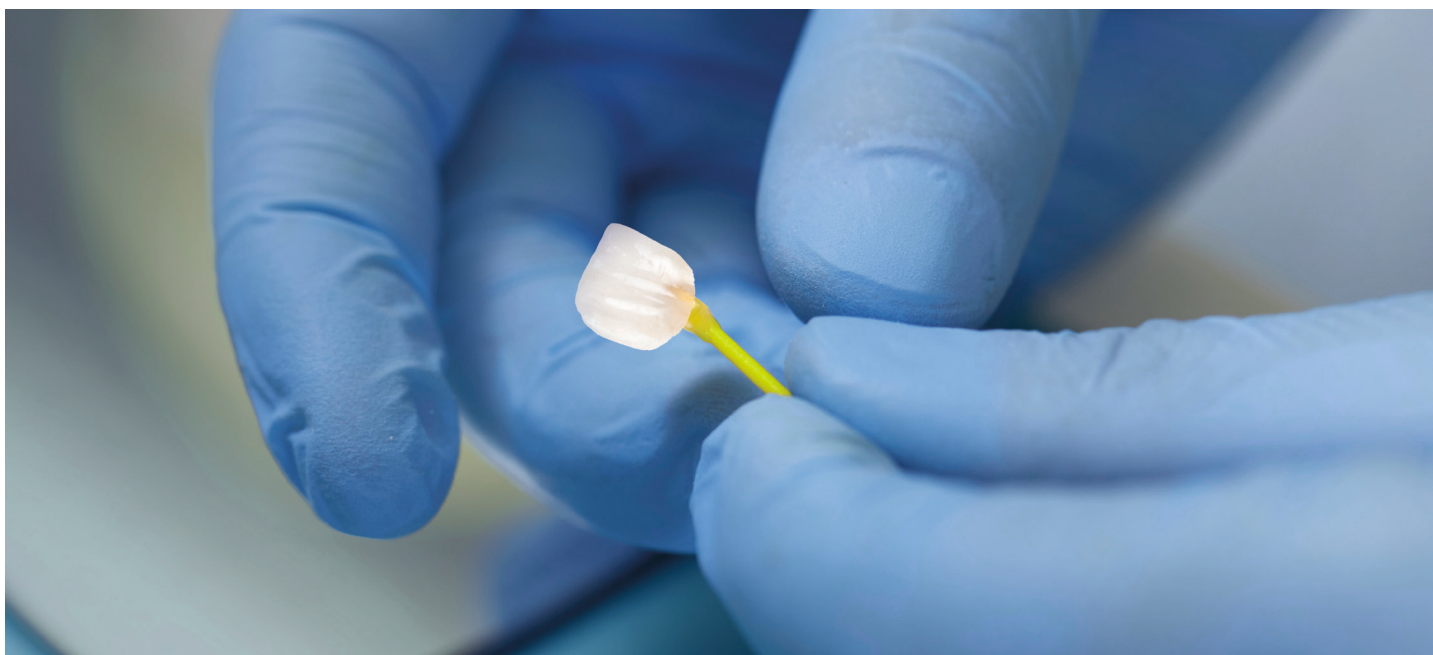

ČTYŘI VYSOCE ESTETICKÉ ODSTÍNY

S odstínem odpovídajícím individuálním požadavkům lze snadno dosáhnout realistických výsledků. Zkušební pasty PANA VIA™ V5 Try-In odpovídají odstínům PANA VIA™ Veneer LC.



Univerzální (A2)
(pro všechny případy)



Čirý
(větší průsvitnost)



Hnědý (A4)
(více chromatičnosti)



Bílý
(větší hodnota)

TECHNOLOGIE TOUCH-CURE

Inicializuje vytvrzování výhradně na rozhraní zub - pryskyřičný cement a vytváří pevnou vazbu ke sklovině a dentinu, přičemž neovlivňuje reakci tuhnutí cementu.



Monomer MDP v zubním primeru PANA VIA™ V5 a přípravku CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS je odpovědný za chemické spojení se zirkonem, kovem, dentinem a sklovinou.

KOMPONENTY

Cement PANA VIA™ LC Veneer
Zubní primer PANA VIA™ V5
CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS
Stříkačka K-ETCHANT
Zkušební pasty PANA VIA™ V5

POSTUP CEMENTOVÁNÍ

PANA VIA™ LC Veneer



ČISTICÍ PŘÍPRAVEK NA POVRCH ZUBU I PROTETICKÉHO MATERIÁLU KATANA™ Cleaner



ODSTRAŇTE ZNEČIŠTĚNÍ A OPTIMALIZUJTE SVÉ ADHEZIVNÍ POSTUPY

Kvalita vazby (a s ní i funkční charakteristiky nepřímých výplní) nezávisí pouze na zvoleném systému cementování a jeho správném použití; předpokladem dlouhodobého úspěchu je také čistý povrch spoje. KATANA™ Cleaner byl vyvinut speciálně pro optimalizaci postupů adhezivního cementování. Díky povrchově aktivním vlastnostem soli MDP má vysoký čisticí účinek. Je vhodný pro intraorální i extraorální použití a představuje vynikající řešení pro čištění bondingových povrchů (na zubech a výplních), které jsou po zkoušení potenciálně kontaminovány slinami nebo krví.

PRO VŠECHNY REKONSTRUKČNÍ ZÁKROKY

VÝHODY A INDIKACE


VÝHODY

- ✓ Intra- a extraorální použití
- ✓ Vysoký čistící účinek
- ✓ Snadný postup – rozetřete, opláchněte a osušte
- ✓ Rychlá aplikace – 10 sekund roztírání
- ✓ Ověřeny výzkumi universit i klinickými studiemi*

INDIKACE

- ✓ Čištění kontaminované sklokeramiky, zirkonu, pryskyřičných výplní, kovových náhrad a kořenových čepů vyztužených skelnými vlákny po intraorálním vyzkoušení
- ✓ Čištění kontaminovaného preparovaného zubu (dutiny, kořenového kanálku a zubního abutmentu) a abutmentu implantátu

PEVNOST VE SMYKU S PRODUKTEM KATANA™ Zirconia HT

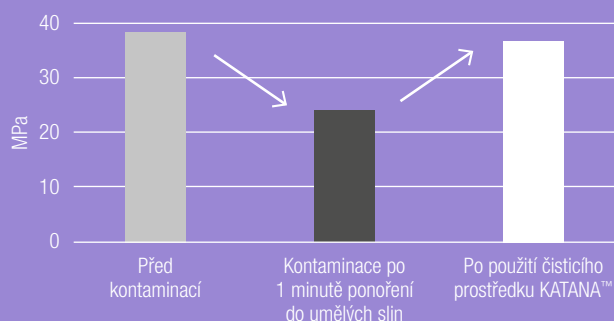

Podmínky měření:
Povrch podkladu:
Po broušení č. 1 000, pískování oxidem hlinitým.
Plocha pokrytí o \varnothing 5 mm, měřeno při 37 °C,
uloženo pod vodou po dobu 1 dne.

Cement: PANAVIA™ V5
Zdroj dat: Kuraray Noritake Dental Inc.
Číselné hodnoty se liší v závislosti na podmínkách měření.

APLIKACE JEDNOU RUKOU



*Fucong, T., et al. Effectiveness of different cleaning measures on the bonding of resin cement to saliva-contaminated or blood-contaminated zirconia. J Dent. 2022 Mar 3; 120: 104-084.
Taiseer, A., et al. Cleaning Zirconia Surface Prior To Bonding: A Comparative Study of Different Methods and Solutions. J Prosthodont. 2022 Mar; 31 (3): 239-244.
Fucong, T., et al. Effects of dentin surface cleaning on bonding of a self-etch adhesive to root canal sealer-contaminated dentine. J Dent. 2021 Sep; 112: 103-766.

OBJEDNÁVKA INFORMACE

PANAVIA™ V5



PROFESIONÁLNÍ SADA – #3600-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [jedna stříkačka pro každý odstín (2,4 ml / 4,2 g): univerzální (A2), čirá, hnědá (A4), bílá, neprůhledná], PANAVIA™ V5 Try-in [jedna stříkačka pro každý odstín (1,8 ml): univerzální (A2), čirá, hnědá (A4), bílá, neprůhledná], stříkačka K-ETCHANT (3 ml), 30 směšovací hrotů, 10 endo hrotů (S)¹, 50 aplikačních štětečků (jemné <stříbrné>)¹, 1 míchací miska (FPN)¹, 20 jehlových hrotů (E)¹



STANDARDNÍ SADA – univerzální (A2) #3601-EU – čirá #3602-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [jedna stříkačka pro každý odstín (4,6 ml / 8,1 g): univerzální (A2), čirá], stříkačka K-ETCHANT (3 ml), 15 směšovací hrotů, 5 endo hrotů (S)¹, 50 aplikačních štětečků (jemné<stříbrné>)¹, 1 míchací miska (FPN)¹, 20 jehlových hrotů (E)¹



ÚVODNÍ SADA – univerzální (A2) #3604-EU – čirá #3605-EU PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [jedna stříkačka pro každý odstín (2,4 ml / 4,2 g): univerzální (A2), čirá], 10 směšovací hrotů, 50 aplikačních štětečků (jemné<stříbrné>)¹, 1 míchací miska (FPN)¹



NÁPLŇ

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (4 ml) #3635-EU

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (4 ml) #3637-EU

PANAVIA™ V5 (4,6 ml / 8,1 g), 20 SMĚŠOVACÍCH HROTŮ

Univerzální (A2) #3611-EU Čirá #3612-EU

Hnědá (A4) #3613-EU Bílá #3614-EU

Neprůhledná #3615-EU

PANAVIA™ V5 Try-in Paste (1,8 ml)

Univerzální (A2) #3621-EU Čirá #3622-EU

Hnědá (A4) #3623-EU Bílá #3624-EU

Neprůhledná #3625-EU

STŘÍKAČKA K-ETCHANT (3 ml),
20 jehlových hrotů (E) #3252-EU

Směšovací hrot (20 směšovací hrotů) #3626-EU

Endo hrot (S) (20 hrotů) #3629-EU

PANAVIA™ SA Cement Universal



SINGLE PACK HANDMIX

- #4202-EU PANAVIA™ SA Cement Universal pro ruční míchání (univerzální (A2))
- #4203-EU PANAVIA™ SA Cement Universal pro ruční míchání (bílý)
- #4204-EU PANAVIA™ SA Cement Universal pro ruční míchání (průsvitný)
1 stříkačka na odstín (9,2 g / 5,0 ml)

VALUE PACK HANDMIX

- #4206-EU PANAVIA™ SA Cement Universal pro ruční míchání, dvojité balení (univerzální (A2))
2 injekční stříkačky na odstín (9,2 g / 5,0 ml), míchací špachtle, míchací podložka



SINGLE PACK AUTOMIX

- #4212-EU PANAVIA™ SA Cement Universal pro automatické míchání (univerzální (A2))
- #4213-EU PANAVIA™ SA Cement Universal pro automatické míchání (bílý)
- #4214-EU PANAVIA™ SA Cement Universal pro automatické míchání (průsvitný)
1 injekční stříkačka na odstín (8,2 g / 4,6 ml), 20 směšovací hrotů

VALUE PACK AUTOMIX

- #4210-EU PANAVIA™ SA Cement Universal pro automatické míchání, velké balení (univerzální (A2))
- #4211-EU PANAVIA™ SA Cement Universal pro automatické míchání, velké balení (průsvitný)
3 injekční stříkačky na odstín (8,2 g / 4,6 ml), 40 směšovacích hrotů, 10 hrotů Endo (SS)



#4218-EU Směšovací hroty (20 hrotů)



#4221-EU Endo hroty (20 hrotů)

PANAVIA™ Veneer LC



- #4500 STANDARDNÍ SADA UNIVERZÁLNÍ (A2)
- #4505 PASTA UNIVERZÁLNÍ (A2) (2,6 g / 1,5 ml)
- #4513-EU HROT PRO APLIKÁTOR (16 g / 20 hrotů)

PANAVIA™ Veneer LC KITS

- #4500 STANDARDNÍ SADA UNIVERZÁLNÍ (A2)
- #4501 STANDARDNÍ SADA ČIRÁ

Pasta PANAVIA™ Veneer LC (2,6 g / 1,5 ml)

- #4505 UNIVERZÁLNÍ PASTA (A2)
- #4506 ČIRÁ PASTA
- #4507 HNĚDÁ PASTA (A4)
- #4508 BÍLÁ PASTA

- #4513-EU HROT PRO APLIKÁTOR PANAVIA™ VENEER LC
20 HROTŮ (16G)

ČISTICÍ PŘÍPRAVEK KATANA™

- #3970-EU Čistící přípravek KATANA™ (4,0 ml)





Dovozce do EU

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Německo
Telefon +49 (0)69 30 535 835
Fax +49 (0)69 30 598 35 835
www.kuraraynoritake.eu
dental.eu@kuraray.com

- Před použitím tohoto výrobku si nezapomeňte přečíst návod k použití dodaný s výrobkem.
- Technické údaje a vzhled výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Barva tisku se může mírně lišit od skutečné barvy.

KATANA je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti NORITAKE CO., LIMITED, PANAVIA a CLEARFIL jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti KURARAY CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonsko
Webové stránky www.kuraraynoritake.com



06/2022/MKA00700