

kuraray

Noritake

SPECIALISTUL ÎN FAȚETE CARE STĂPÂNEȘTE CIMENTAREA FOARTE ESTETICĂ



PANAVIA™ Veneer LC

O misiune provocatoare, o soluție foarte bună.

NĂSCUT ÎN
JAPONIA

O MISIUNE PROVOCATOARE, O SOLUȚIE FOARTE BUNĂ

Proceduri minim invazive care utilizează restaurări foarte estetice este ceea ce pacienții așteaptă atunci când caută un tratament restaurator. Cu diversele tipuri de restaurări disponibile astăzi, este posibilă concretizarea acestor așteptări, cu condiția să fie utilizate materialele corecte. Pentru aplicarea fațetelor trebuie selectat un ciment rășinic care susține estetica durabilă, este aplicat ușor, oferă un timp de lucru suficient pentru cimentarea simultană a restaurărilor multiple și oferă o rezistență adezivă excelentă. Noul „PANAVIA™ Veneer LC” este exact ceea ce aveți nevoie.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

1

TEHNOLOGIE DE POLIMERIZARE INOVATOARE

Cimentul cu fotopolimerizare oferă un timp de lucru îndelungat, care facilitează aplicarea simultană a fațetelor multiple. „PANAVIA™ V5” Tooth Primer sigilează interfața adezivă prin polimerizarea imediată la contactul cu pasta (touch-cure). Rezultatul este o adeziune rezistentă și durabilă.

2

MANIPULARE OPTIMIZATĂ

O vâscozitate și consistență corespunzătoare a pastei permit distribuirea mai ușoară și aplicarea corectă a restaurării, în timp ce funcția tack-cure de o secundă permite îndepărtarea ușoară a cimentului în exces.

3

ESTETICĂ ÎNALTĂ

Grosimea redusă a filmului și capacitatea bună de lustruire permit utilizatorilor să creeze margini netede. Cele patru nuanțe diferite selectate, cu o stabilitate cromatică înaltă oferă o estetică durabilă. Pastele de probă corespunzătoare facilitează selectarea nuanței corecte.



INDICAȚII

„PANAVIA™ Veneer LC” poate fi utilizat pentru cimentarea permanentă a

- fațetelor și
- inlay-urilor și onlay-urilor cu o grosime sub 2 mm.

TEHNOLOGIE DE POLIMERIZARE INOVATOARE

Un ciment pentru fațete trebuie să ofere un timp de lucru îndelungat, dar totuși să se obțină o rezistență adezivă înaltă care să fie stabilă în timp. Kuraray Noritake Dental Inc. a dezvoltat o cale de a utiliza tehnologia touch-cure în cazul unui ciment fotopolimerizabil, pentru a oferi ambele tehnologii.

„PANAVIA™ Veneer LC” este un sistem de ciment rășinic cu fotopolimerizare, care oferă o stabilitate excelentă în lumina ambientală, ceea ce duce la un timp de lucru de 200 secunde*. Aceasta vă permite să aplicați fațete multiple în mod simultan, fără să fie nevoie să vă grăbiți din cauza prizei. Polimerizarea poate fi pornită oricând sunteți gata.

TIMP DE LUCRU*

200_{SEC}

*Timp de lucru în lumina ambientală (8000 lux.): 200 secunde.



PRIMER AUTOGRAVANT MONOCOMPONENT


Contribuie la polimerizarea interfeței adezive.

FOTOPOLIMERIZAȚI PASTA DE CIMENT

Stabilitate excelentă în lumina ambientală.

FOTOPOLIMERIZAȚI


Sigilați interfața adezivă de la nivelul structurii dintelui prin polimerizare touch-cure, în timp ce asigurați un timp de operare suficient.

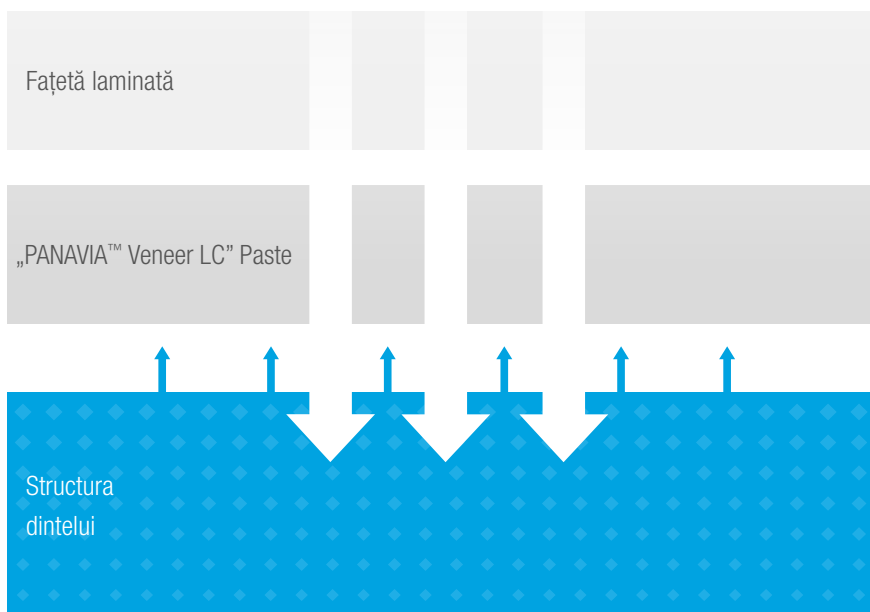

Catalizatorul polimerizării chimice contribuie la polimerizare.

„PANAVIA™ V5” Tooth Primer este un adeziv autogravant pentru structura dintelui (dentină și smalț) care sigilează interfața aderentă la dinte în condiții de siguranță, de îndată ce „PANAVIA™ Veneer LC” Paste este aplicată pe acesta. Această tehnologie touch-cure inițiază polimerizarea numai la interfața adezivă și creează o adeziune puternică la smalț și dentină, dar nu afectează reacția de priză a cimentului. O rezistență adezivă înaltă la materialele de restaurare se obține prin utilizarea produsului consacrat „CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS”.

(MPa) REZISTENȚĂ ADEZIVĂ ÎNALTĂ LA DINȚII UMANI

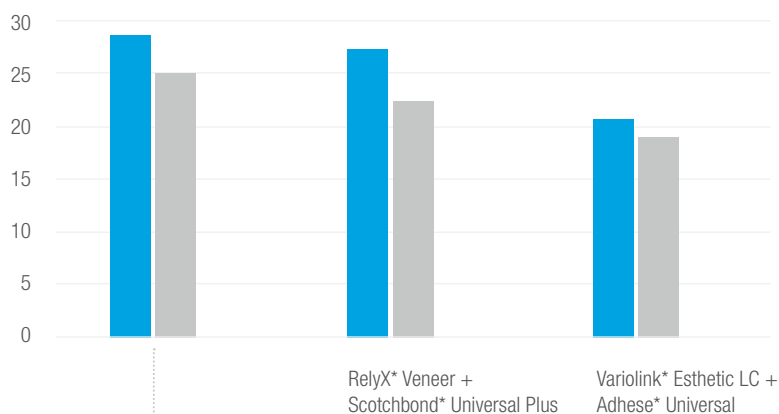

■ Smalț
■ Dentină

Condiții de testare: Lustruire #1000, gravarea smalțului cu acid fosforic, așchie SUS (dia. 3mm), măsurat după depozitare în apă la 37°C, timp de o zi.


Sursa: Kuraray Noritake Dental Inc.

*Nu este o marcă comercială de la KURARAY CO., LTD.



„PANAVIA™ Veneer LC” Paste + „PANAVIA™ V5” Tooth Primer

(MPa) REZISTENȚĂ ADEZIVĂ ÎNALTĂ LA MATERIALUL PROTETIC

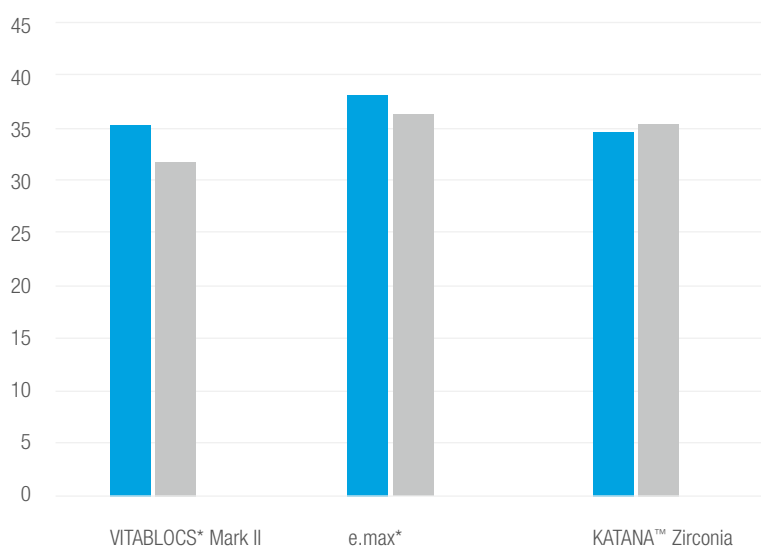

■ 37 °C o zi
■ TC3000

Condiții de testare: Lustruire #1000, sablare („KATANA™ Zirconia”) sau gravare cu acid fluorhidric (ceramică de sticlă), așchie SUS (dia. 5mm), măsurat după depozitare în apă la 37°C, timp de o zi, sau ciclu termic la 4-60°C.

Sursa: Kuraray Noritake Dental Inc.

*Nu este o marcă comercială de la KURARAY CO., LTD.





MANIPULARE OPTIMIZATĂ

Este posibil să se reducă timpul și efortul implicate în aplicarea fațetei cu un ciment care sprijină aplicarea omogenă a cimentului, poziționarea ușoară a fațetei și îndepărtarea excesului, precum și lustruirea rapidă. „**PANAVIA™ Veneer LC**” oferă toate caracteristicile necesare și conferă un control ridicat datorită vârfului de aplicare conceput în mod special.

LIPSA ADERENȚEI

Cimentul rășinic oferă o consistență excelentă și ideală pentru o aplicare ușoară și sigură de-a lungul suprafeței interioare a lucrării, deoarece nu aderă de vârful de aplicare datorită tehnologiei cu material de umplere de tip nanocluster.

CONSISTENȚĂ IDEALĂ

Noile materiale de umplere cu dioxid de siliciu sferic din ciment asigură rămânerea materialului acolo unde este aplicat, dar acesta curge bine când fațeta este aplicată pe dinte, pentru o poziționare ușoară, fără deplasare sau scufundare.

ÎNDEPĂRTAREA UȘOARĂ A EXCESULUI

Cimentul în exces poate fi îndepărtat într-o singură bucată, cu o sondă, după o secundă de tack-cure.

ESTETICĂ ÎNALTĂ

Datorită în general grosimii lor minime și translucidității lor înalte, aspectul estetic al fațetelor este puternic influențat de culoarea cimentului. De aceea, este esențială utilizarea unui ciment rășinic care este stabil cromatic și produce margini care rămân nedetectabile în timp. „PANAVIA™ Veneer LC” îndeplinește aceste cerințe.



PATRU NUANȚE FOARTE ESTETICE

Cu o nuanță care corespunde cerințelor individuale, se obțin cu ușurință rezultate cu aspect natural.

„PANAVIA™ Veneer LC” Paste



Clear



Universal



White



Brown

PASTE DE PROBĂ CORESPUNZĂTOARE

„PANAVIA™ V5” Try-In Paste corespund nuanțelor de „PANAVIA™ Veneer LC” și permit simularea aspectului final.

„PANAVIA™ V5” Try-In Paste



Clear



Universal (A2)



White



Brown (A4)

GROSIMEA MINIMĂ A FILMULUI

Datorită fluidității sale și grosimii reduse a filmului, „PANAVIA™ Veneer LC” produce un strat de ciment subțire, distribuit uniform, care contribuie la o aplicare ușoară, fără interferențe și la margini foarte estetice.


CAPACITATE SUPERIOARĂ DE LUSTRIRE ȘI PĂSTRAREA LUCIULUI

Capacitatea superioară de lustruire și păstrarea excelentă a luciului susțin marginile estetice în timp.

Modificarea luciului prin testul abraziei cu periuța dentară.

Durabilitate înaltă a luciului (păstrarea luciului) datorită unei densități înalte de materiale de umplere fine.


(%) PĂSTRAREA LUCIULUI

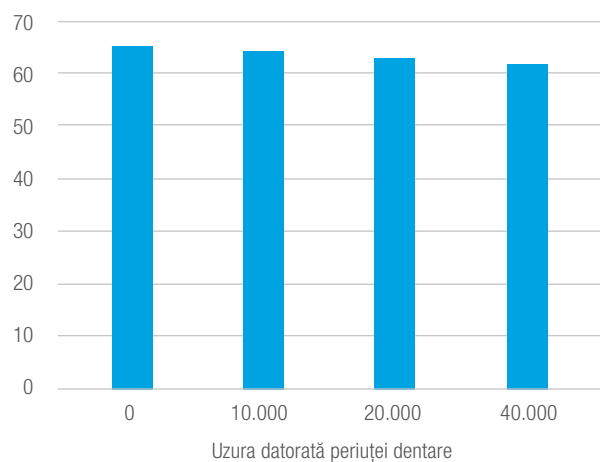

■ „PANA VIA™ Veneer LC”

Sursa: Kuraray Noritake Dental Inc.

(%) PĂSTRAREA LUCIULUI

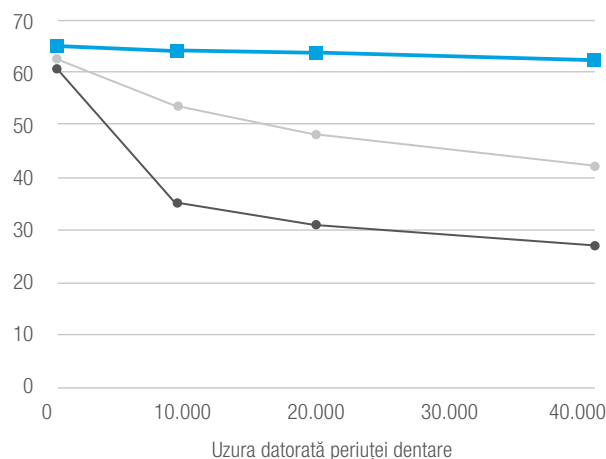

■ „PANA VIA™ Veneer LC”

● Variolink* Esthetic LC

● RelyX* Veneer

Condiții de testare: probă ø10mm, grosime 2mm.
După netezirea suprafeței cu hârtie abrazivă rezistentă la apă, de #1000 până la #2500, lustruire finală cu film de lepuire.

Luminozitatea inițială (măsurată nivelul luciului după lustruire*).
Uzura datorată periutei dentare (măsurată după 40.000 lovituri cu o încărcătură de 250g, 30 lovituri/minut, pastă de dinți* 10 %masă).

Măsurat cu glossmetru VG 2000 (Nippon Denshoku Kogyo) la un unghi de 60°.
Notă: Valorile pot varia în funcție de condițiile de măsurare.

Sursa: Kuraray Noritake Dental Inc.

* Nu este o marcă comercială de la KURARAY CO., LTD.

REZISTENȚA LA MODIFICAREA CULORII

Stabilitatea cromatică înaltă este probabil cea mai importantă caracteristică responsabilă de estetica durabilă, care este oferită de o formulă bine echilibrată și de tehnologia touch-cure.



CAZ CLINIC

Prin bunăvoința Dr. Sato



1. Stadiul inițial înainte de prepararea a șase fațete (de la #13 până la #23).



2. Consistența și vâscozitatea excelentă a pastei „PANA VIA™ Veneer LC” au permis distribuirea, priza și îndepărtarea mai ușoară a cimentului în exces.



3. Fotopolimerizarea fiecărei zone și a marginilor.



4. Rezultat final după cimentarea celor șase fațete din „KATANA™ Zirconia” STML.

Pentru instrucțiuni detaliate, vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare.

TRULY PANAVIA™

Totul a început în 1983, când a fost lansat „PANAVIA™ EX” ca primul ciment rășinic adeziv care conține monomerul MDP original de la KURARAY CO., LTD. Marca „PANAVIA” a devenit rapid populară în rândul practicienilor stomatologiei din întreaga lume, pentru adeziunea sa excelentă. Pentru a pune bazele unor proceduri de cimentare standardizate și a unei estetici excelente, au fost îmbunătățite formulele existente și au fost dezvoltate tehnologii complet noi. Toate acestea au dus, în cele din urmă, la gama actuală de cimenturi rășinice ușor de utilizat și foarte estetice, care oferă o rezistență adezivă de vârf.



INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ

„PANAVIA™ Veneer LC” KITS

#4500 Standard Kit Universal (A2)
#4501 Standard Kit Clear

„PANAVIA™ Veneer LC” Paste (2,6g/1,5ml)

#4505 Paste Universal (A2) #4507 Paste Brown (A4)
#4506 Paste Clear #4508 Paste White

ALTELE

„PANAVIA™ V5” Try-In Paste (1,8ml)
#3621-EU Universal (A2) #3622-EU Clear
#3623-EU Brown (A4) #3624-EU White

#4513-EU „PANAVIA™ Veneer LC” Vârf de aplicator (16g)
#3637-EU „CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS” (4ml)
#3635-EU „PANAVIA™ V5” Tooth Primer (4ml)



Importator UE
Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Strasse 4
65795 Hattersheim am Main, Germania
Telefon +49 (0)69 305 35 835
Fax +49 (0)69 305 98 35 835
www.kuraraynoritake.eu
centralmarketing@kuraray.com

- Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că ați citit instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu produsul.
- Specificările și imaginea produsului pot fi modificate fără notificare.
- Culoarea imprimată poate fi ușor diferită de culoarea actuală.

„PANAVIA” și „CLEARFIL” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate de la KURARAY CO., LTD
„KATANA” este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată de la NORITAKE CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia
Pagină de internet: www.kuraraynoritake.eu

