


DENTAL CLEANING AGENT

KATANA™ *Cleaner*

Decontaminante universale
a uso intra-orale e extra-orale

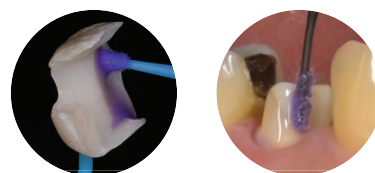

RIMUOVE LE CONTAMINAZIONI MIGLIORANDO LE PROCEDURE DI ADESIONE


Durante il try-in, il dente preparato e il restauro vengono a contatto con le proteine presenti nella saliva e nel sangue. È necessario, perciò, pulire in modo efficace per evitare che le proteine siano di ostacolo a una corretta procedura di adesione. KATANA™ Cleaner è un decontaminante universale che, grazie all'elevata attività superficiale del sale MDP, combinato con una speciale ammina, elimina completamente le proteine presenti.

A differenza di altri detergenti, KATANA™ Cleaner ha un pH di 4.5¹ che ne permette l'uso, non solo extra-oralmente, ma anche intra-oralmente.

KATANA™ Cleaner migliora e ottimizza le procedure di adesione.

1. Metodo di misurazione: JIS Z 8802:2011

Forza adesiva a KATANA™ Zirconia HT

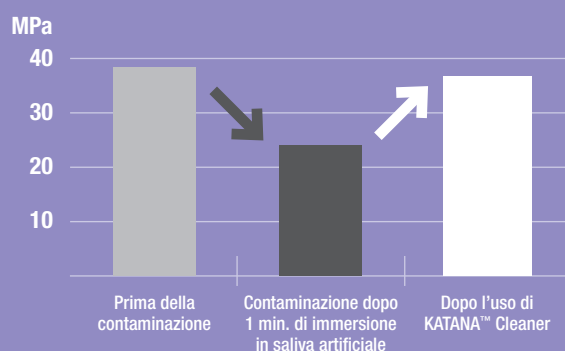

Condizioni di misurazione

Superficie del substrato:

Dopo #1000 levigature e sabbiatura in alluminio.

Copertura dell'area di ø 5mm, misurata a 37°C, dopo conservazione in acqua per un giorno.

Cemento: PANAVIA™ V5

Fonte dati: Kuraray Noritake Dental Inc.

*Valori numerici variabili, dipendenti dalle condizioni di misurazione.




PROCEDURA FACILE E VELOCE




Strofinare, sciacquare e asciugare.

Diversamente dagli altri detergenti che richiedono tempi di applicazione più lunghi e sono esclusivamente per uso extra-orale, **KATANA™ Cleaner richiede solo 10 secondi di strofinamento e può essere usato sia in cavità sia sui restauri protesici.**

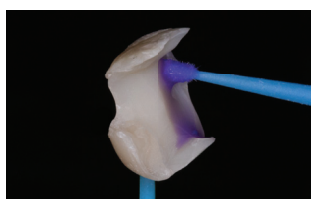

Applicare e strofinare KATANA™ Cleaner per almeno 10 secondi, sia sulla protesi che sul substrato intra-orale.

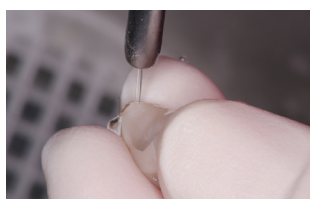


Risciacquare ed asciugare.



Cementare la protesi seguendo le istruzioni del produttore.


Foto concesse dal
Dr. Shoji Kato

COME FUNZIONA

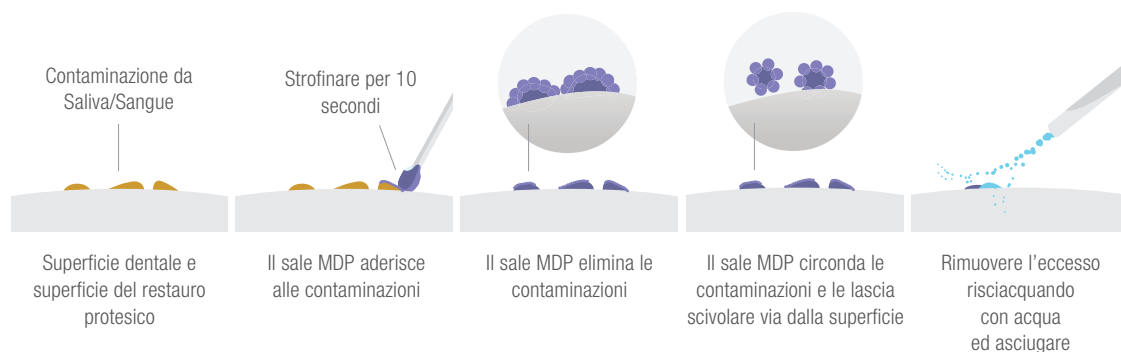

MODALITÀ D'USO: INTRA ED EXTRA-ORALE

Grazie al suo pH neutro di 4.5, KATANA™ Cleaner può essere utilizzato, non solo extra-oralmente, ma anche intra-oralmente. Ciò lo rende un detergente universale multiuso sia per la struttura dentale che per quella protesica.

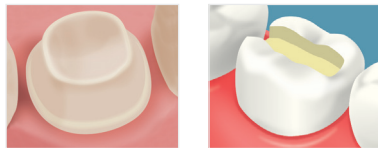

Intra-orale:

Cavità, Monconi, Devitalizzazioni, Canale radicolare




Protesi:

Ceramica (Zirconia, Disilicato di Litio, Porcellana)
Resine (Corone CAD/CAM, Resine Composite)
Metalli (Leghe Metalliche Preziose/Non Preziose)
Perni Moncone (Perni in Fibra di Vetro, Perni Metallici)

TEST DELL'EFFETTO PULENTE SU ZIRCONIA CON COLORAZIONE DELLE PROTEINE

Contaminazione con saliva artificiale

Livello di contaminazione stabilito tramite il livello di colorazione dato da un colorante che si lega alle proteine presenti nella saliva.

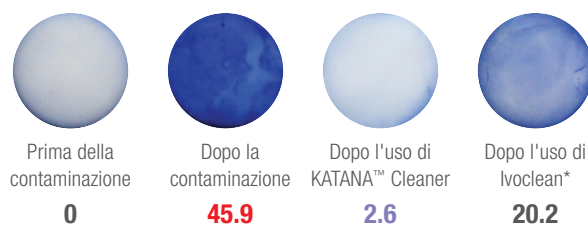


Contaminazione con sangue (plasma umano)

Il livello di contaminazione viene valutato tramite il livello di colorazione dato da un agente (albumina, fibrinogeno, immunoglobulina) che si lega alle proteine presenti nel plasma umano.

Fonte dati: Kuraray Noritake Dental Inc.


*Non è un marchio Kuraray Noritake Dental Inc.

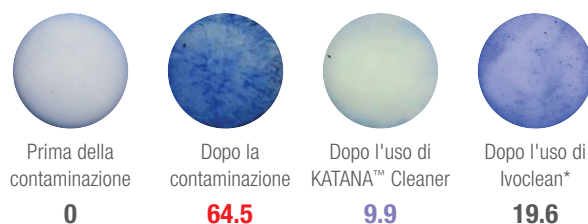


ELEVATO EFFETTO DECONTAMINANTE

Eliminando tutte le contaminazioni dal dente preparato o dal restauro protesico, KATANA™ Cleaner permette di migliorare le procedure di adesione, ottimizzando la superficie adesiva.

Forza adesiva a KATANA™ Zirconia HT dopo la pulizia con:

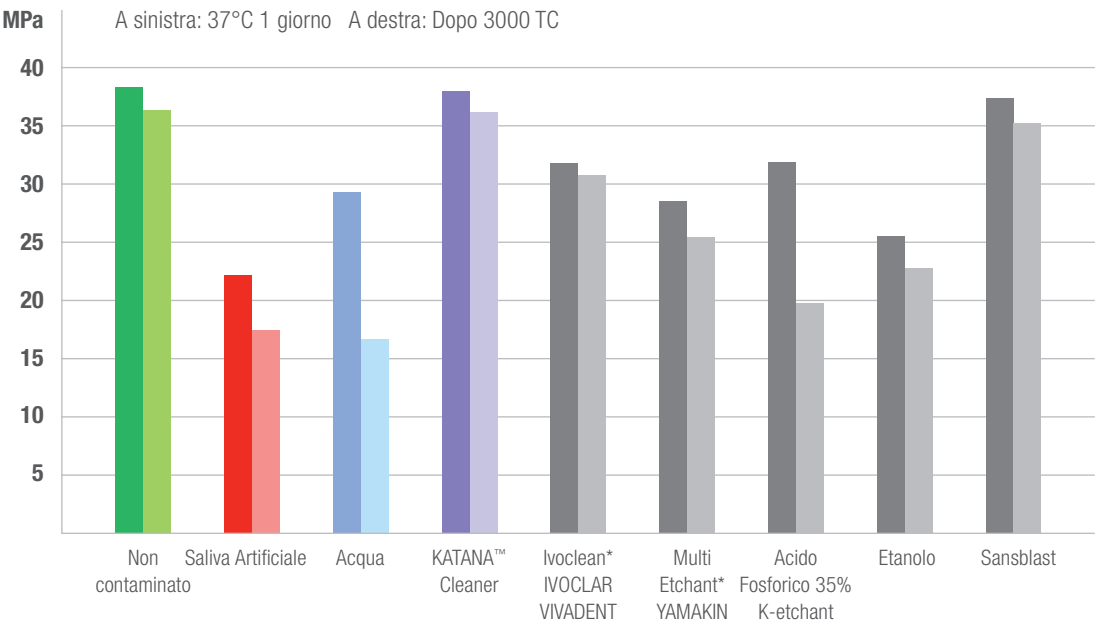

Forza adesiva a smalto e dentina dopo la pulizia con:

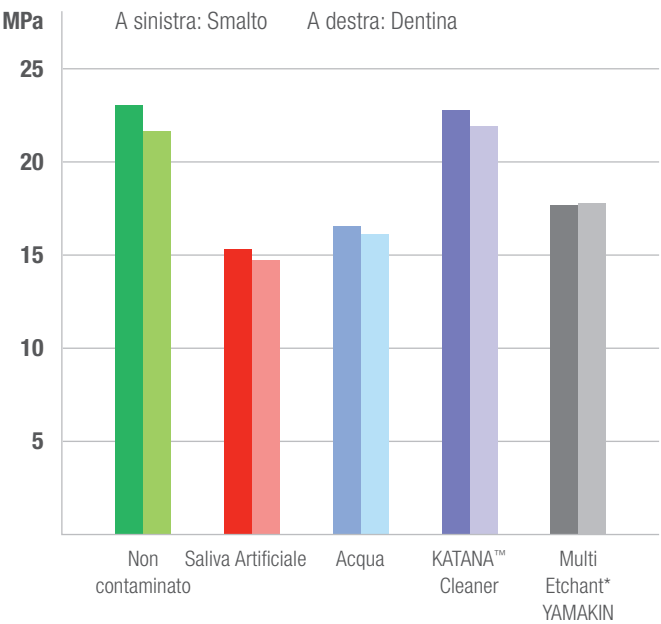

Cemento: PANAVIA™ V5
Dati concessi dal Dr. Shoji Kato al 38° Meeting Annuale della Japan Society for Adhesive Dentistry Effect delle diverse procedure di pulizia sulla performance del legame.

* Non è un marchio Kuraray Noritake Dental Inc.

CONFRONTO TRA DETERGENTI*

	KATANA™ CLEANER	IVOCLEAN** (IVOCLAR VIVADENT)	ZIRCLEAN** (BISCO)
Intra-orale sulla struttura del dente	Si	No	No
Intra-orale su moncone implantare	Si	No	No
Extra-orale	Si	Si	Si
Agenti attivi	Sale MDP (Tensioattivo)	Idrossido di Sodio	Idrossido di Potassio
pH	4.5	13-13.5	13
Tempi di applicazione	10 Secondi	20 Secondi	20 Secondi
Preparazione	Non agitare	Agitare prima dell'uso	Non agitare

* Secondo le Istruzioni d'uso delle documentazioni ufficiali
** Non è un marchio Kuraray Noritake Dental Inc.

GAMMA PRODOTTO

NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE
#3970-EU	KATANA™ Cleaner (4 ml)




I TUOI COMPAGNI DI SQUADRA IDEALI



PANAVIA™ V5

PANAVIA™ V5 è il cemento con la più alta forza adesiva che abbiamo mai sviluppato. Con i suoi 5 colori, è anche il più estetico. Ciò rende possibile un'odontoiatria completamente nuova, dove si può essere sicuri di sé durante la cementazione.

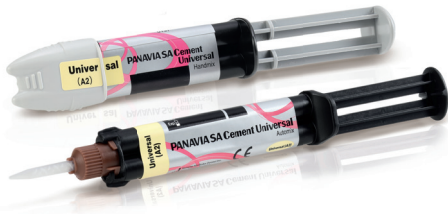

PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL

PANAVIA™ SA Cement Universal contiene l'esclusivo monomero LCSi che aderisce a qualsiasi materiale, incluse le vetroceramiche, senza necessità di usare un primer. L'originale monomero MDP permette reattività chimica con zirconia, dentina e smalto.

CONTATTI

Kuraray Europe Italia S.r.l
Via G. Boccaccio 21,
20123 Milano

Telefono 02 63471228
E-Mail dental-italia@kuraray.com
Web www.kuraraynoritake.eu/it

 facebook.com/KurarayNoritakeInLab
facebook.com/KurarayNoritakeInClinic

 **Kuraray Noritake Dental Inc.**
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

- Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di aver letto le Istruzioni d'uso fornite con il prodotto.
- Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a variazione senza preavviso.
- Il colore stampato può differire leggermente dal colore effettivo.

"KATANA" è un marchio NORITAKE CO., LIMITED
"PANAVIA" è un marchio KURARAY CO., LTD.



02/2020