



AVENCIA™ Block 2



Skal du velge mellom
våt- eller tørrfresing?
Ikke påkrevd.

Flussyre-etsing?
Ikke påkrevd.

Karakterisering?
Ikke påkrevd.

Sintring eller
brenning?
Ikke påkrevd.

Ventetid?
Ikke påkrevd.

Ovn?
Ikke påkrevd.

Glasering?
Ikke påkrevd.

Poleringspasta?
Ikke påkrevd.

Silan?
Ikke påkrevd.*

Tilleggsstrinn?
Ikke påkrevd.

Fresing.
Polering.
Sementering.
FERDIG.



Hvert materiale har sin plass.

Spørsmålet er ikke hvilket CAD/CAM-materiale som er best.

Spørsmålet er: Hvilket materiale er mest egnet for den valgte indikasjonen?

Moderne CAD/CAM-materialer er utviklet med ulike kliniske prioriteringer for øye. Optiske egenskaper, mekaniske egenskaper og arbeidsflyt påvirker alle materialvalget. Den spesifikke og samlede betydningen av disse faktorene avhenger i stor grad av valgt indikasjon.

Det mest egnede materialet er det materialet der egenskapene (inkludert arbeidsflyten) best støtter det kliniske målet.



Hva trenger egentlig restaureringen din?

Ulike indikasjoner krever ulike vurderinger.

KATANA™ AVENCIA™ Block 2 er en hybridkeramisk blokk utviklet for daglige indirekte restaureringer, og er utviklet for enkel integrering i eksisterende CAD/CAM-arbeidsflyter.

TRE KLINISKE PRIORITERINGER

ARBEIDSFLYT

Enkelt og greit

ESTETIKK

Naturlig utseende og optisk estetikk

STYRKE

Pålitelig og holdbar funksjon

CLINICAL INDICATIONS

Lavere
prosedyrekompleksitet

Høyere
prosedyrekompleksitet

DIREKTE RESTAURERINGER

Direkte kompositt i fortenner og molarer. Lagvis oppbygging av kompositt Komposittskallfasetter.

RUTINEMESSIGE INDIREKTE RESTAURERINGER

Den ideelle balansen for hverdagslige indirekte restaureringer. Innlegg, onlays, endo(kroner).

Typical indications for KATANA™ AVENCIA™ Block 2

AVANSERTE INDIREKTE ESTETISKE INDIKASJONER

Omfattende og/eller høyestetiske (fortanns-)restaureringer. Spesifikke posteriore tilfeller. Skallfasetter og, omfattende anteriore broarbeider.

INDIREKTE INDIKASJONER MED MAKSIMAL STYRKE

Komplekse, utvidede kasus med krav til høy styrke. Omfattende broarbeid, hel kjeve.



Den samme arbeidsflyten. Ulike optiske prioriteringer.

KATANA™ AVENCIA™ Block 2 er tilgjengelig i to optiske konsepter, slik at klinikere kan velge det utseendet som passer best for indikasjonen, samtidig som samme enkle arbeidsflyt opprettholdes.

Multi-Layer (ML)

Bevisst utformet naturlig fargeovergang



Indikasjoner

Krone
Endokrone
Implantatkrone

- Integrert farge / translucensgradient for et naturlig utseende
- Integrert emalje-dentin-overgang / koronal-cervikal fargeovergang
- Mindre behov for ytterligere karakterisering

KATANA™ AVENCIA™ Block 2
A2 ML (Flere lag)



KATANA™ AVENCIA™ Block
A2 LT (Lav translucens, monolag)

High-Translucent (HT)

Utviklet for optisk integrasjon




Indikasjoner

Innlegg
Onlay
Overlay

- Høyere translucens støtter god optisk integrasjon
- Bevarer naturlig valør (value)

KATANA™ AVENCIA™ Block 2
A2 HT (Høy translucens)

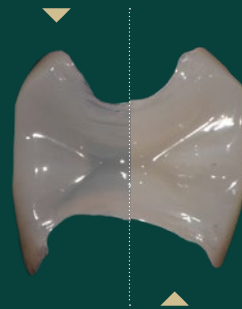


KATANA™ AVENCIA™ Block
A2 LT (Lav translucens)

Utviklet for å tilpasse seg din arbeidsflyt. Ikke omvendt.


Hvert kliniske steg bør bidra til den endelige restaureringen.

Dette enkle prinsippet ledet utviklingen av KATANA™ AVENCIA™ Block 2. Ved å eliminere unødvendige prosessstrinn samtidig som den forblir kompatibel med et bredt utvalg av eksisterende CAD/CAM-arbeidsflyter, gir den tannleger og tannpleiere fleksibiliteten til å jobbe slik de selv foretrekker.

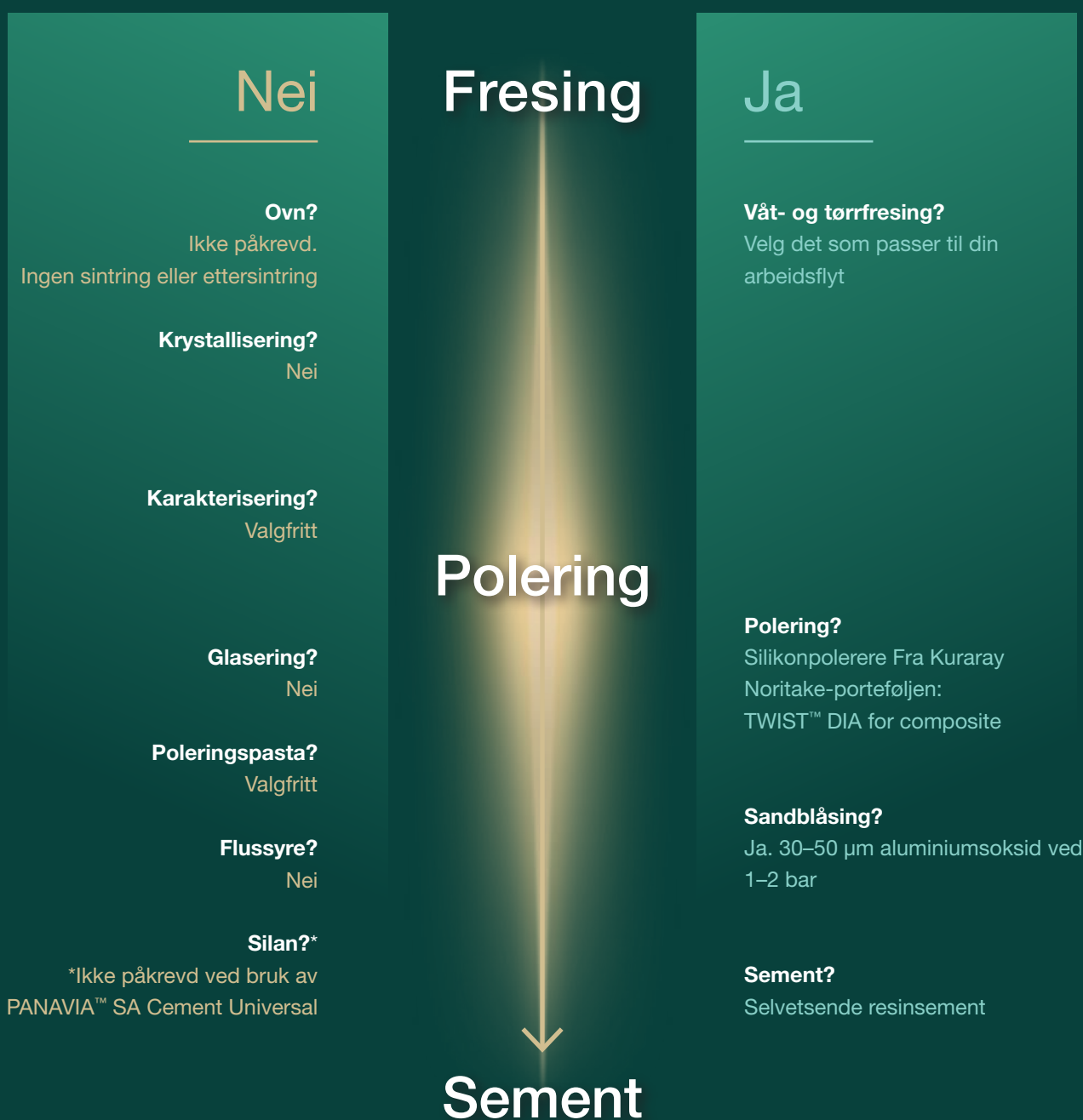


Utviklet for daglig klinisk ytelse.

Bøyestyrke (MPa)

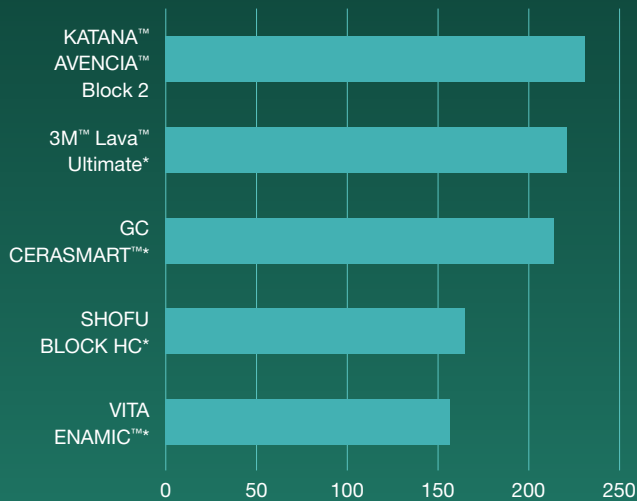

Testforhold:
JIS T 6517, Proveform: 2 x 2 x 17 mm, Støtteavstand: 10 mm Datakilde
Kuraray Noritake Dental Inc.
*Ikke et varemerke for KURARAY CO., LTD

Utmerket glansbevaring Overflateruhet (µm)

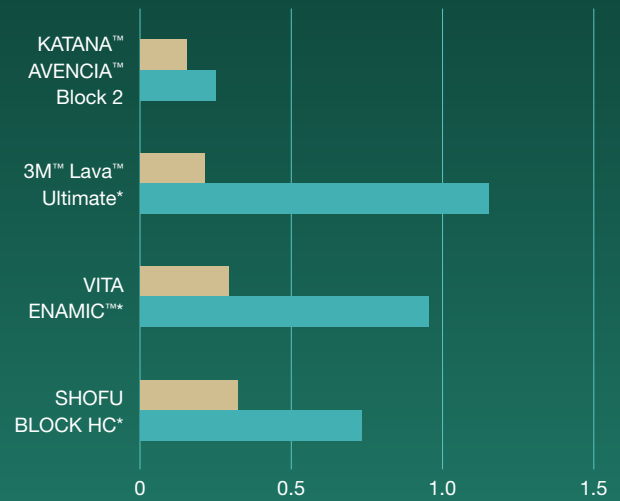




■ Overflatestruktur ved utgangspunktet
■ Overflatestruktur etter 40 000 børstestruk

Testforhold:
Belastning: 250 g, Tannkrem: Dentaclear MAX (Lion) 10 vektprosent suspensjon Tannbørste: Between sikkakk-formet standard (Lion).
Datakilde: Kuraray Noritake Dental Inc.
*Ikke et varemerke for KURARAY CO., LTD

Høy slitasjemotstand og minimal slitasje på antagonist

Materialsitasje (µm)

Slitasje på antagonist

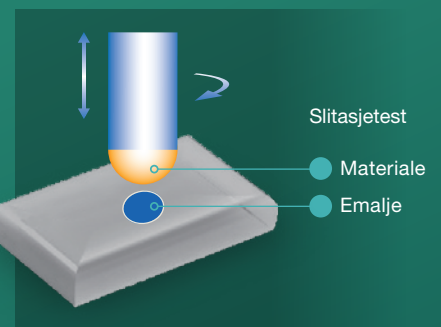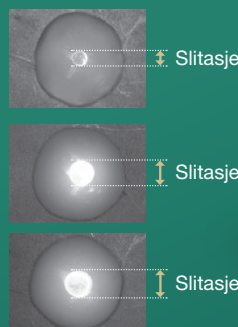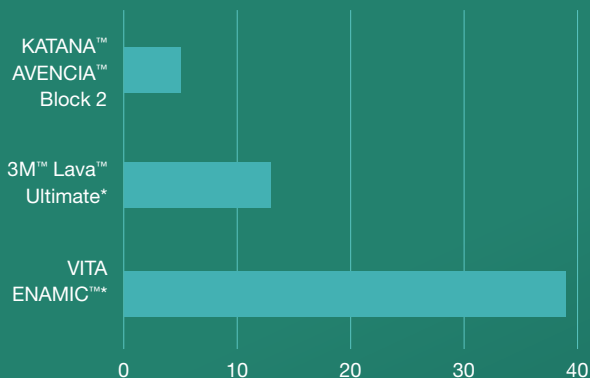

Testforhold:
Leinfelder slitasetest ved romtemperatur i vann, Belastning: 15,6 kg/cm²
10 000 sykluser, Antagonist: bovin emalje polert med nr.1000-slipepapir
Materiale: Polert med nr.3000-papir.
Datakilde: Kuraray Noritake Dental Inc.
*Ikke et varemerke for KURARAY CO., LTD

Bestillingsinformasjon.

Nyanser og størrelser

Multi-Layered farger (ML)

- A1, A2, A3, A3.5

High-Translucent farger (HT)


- A1, A2, A3, A3.5

Tilgjengelige størrelser:


- Størrelse 12: 10 (A) × 12 (B) × 15 (C) mm (kun HT)
- Størrelse 14L: 14,5 (A) × 14,5 (B) × 18 (C) mm

For digital tannrestaurering

CEREC

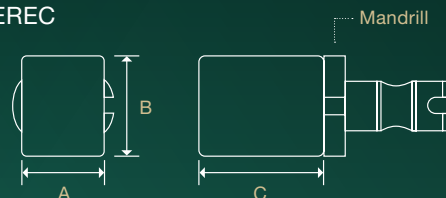

UNIVERSAL

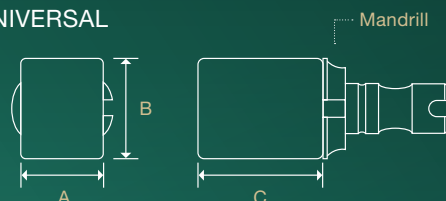

KATANA™ AVENCIA™ Block 2

(HT) CEREC

Størrelse 12 (5 blokker) Størrelse 14 (5 blokker)

#4166-EU 12/A1	#4171-EU 14L/A1
#4167-EU 12/A2	#4172-EU 14L/A2
#4168-EU 12/A3	#4173-EU 14L/A3
#4169-EU 12/A3.5	#4174-EU 14L/A3.5

(ML) CEREC

Størrelse 14 (5 blokker)

#4186-EU 14L/A1
#4187-EU 14L/A2
#4188-EU 14L/A3
#4189-EU 14L/A3.5

(HT) Universal

Størrelse 12 (5 blokker) Størrelse 14 (5 blokker)

#4151-EU 12/A1	#4156-EU 14L/A1
#4152-EU 12/A2	#4157-EU 14L/A2
#4153-EU 12/A3	#4158-EU 14L/A3
#4154-EU 12/A3.5	#4159-EU 14L/A3.5

(ML) Universal

Størrelse 14 (5 blokker)

#4181-EU 14L/A1
#4182-EU 14L/A2
#4183-EU 14L/A3
#4184-EU 14L/A3.5

Tilleggsprodukter

TWIST™ DIA for Composite

En naturlig glans på bare to trinn



- #1211-IP 10 mm introduksjonssett (6 stk)
- #1201-IP 14 mm introduksjonssett (6 stk)

PANAVIA™ SA Cement Universal

Selvadhesive harpiksementer med MDP og silan



- #4212-EU Automix Universal (A2)
- #4213-EU Automix White
- #4214-EU Automix Translucent
- (1 sprøyte 8,2 g, 20 blandespiser)

FOR MER PRODUKT- OG BESTILLINGSINFORMASJON



Start med én restaurering.

Opplev KATANA™ AVENCIA™ Block 2 i din egen arbeidsflyt.

Se hvor naturlig det passer inn i din eksisterende CAD/CAM-arbeidsflyt.



Den beste måten å vurdere et restaureringsmateriale på, er der det faktisk skal brukes. Be om en gratis prøveblokk, så kan en av våre spesialister besøke klinikken din og hjelpe deg i gang hvis du ønsker det.

I løpet av den veiledede vurderingen vil vi:

- ✓ Gjøre rede for anbefalte indikasjoner og materialkonseptet.
- ✓ Demonstrere prosedyrene for fresing, etterbehandling og sementering.
- ✓ Besvare kliniske og tekniske spørsmål.
- ✓ Hjelpe deg med å fullføre din første restaurering med trygghet.

Det rette valget er ikke alltid det mest kompliserte.

SETT OPP EN TIME MED DIN LOKALE SPESIALIST FRA KURARAY NORITAKE



Fabian Giæver

Business Development Manager Dental Norge
90101013
Fabian.Giaever@kuraray.com