

EN	ENGLISH	English	Dental Zirconia
FR	FRANÇAIS	French	Zircone dentaire
ES	ESPAÑOL	Spanish	Óxido de zirconio dental
IT	ITALIANO	Italian	Ossido di zirconio dentale
NL	NEDERLANDS	Dutch	Dentaaal zirkoniumoxide
DE	DEUTSCH	German	Dentales Zirkonoxid
SV	SVENSKA	Swedish	Dental zirkoniumdioxid
NO	NORSK	Norwegian	Dental zirkoniumdioksidi
FI	SUOMI	Finnish	Hammaslääketieteellinen zirkoniumdioksidi
DA	DANSK	Danish	Dentalt zirkonia
PT	PORTUGUÊS	Portuguese	Óxido de zircónio dentário
EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Greek	Οδοντιατρικό οξείδιο του ζιρκονίου
TR	TÜRKÇE	Turkish	Dental zirkonyum oksit
PL	POLSKI	Polish	Tlenek cyrkonu do aplikacji dentystycznych
RO	ROMÂNĂ	Romanian	Oxid de zirconiu dentar
HR	HRVATSKI	Croatian	Dentalni cirkonij
HU	MAGYAR	Hungarian	Fogászati cirkonoxid
SL	SLOVENŠČINA	Slovenian	Dentalni cirkonij
CS	ČESKY	Czech	Dentální zirkonoxid
SK	SLOVENSKY	Slovak	Dentálny oxid zirkónu
BG	БЪЛГАРСКИ	Bulgarian	Стоматологичен цирконий
UK	УКРАЇНСЬКА	Ukrainian	Стоматологічний цирконій
ET	EESTI	Estonian	Dentaaalne tsirkoonium
LV	LATVIEŠU	Latvian	Zobārstniecības cirkonijs
LT	LIETUVIŠKAI	Lithuanian	Odontologinis cirkonio oksidas

	EN	UK Responsible Person	PL	Osoba odpowiedzialna w Wielkiej Brytanii
	FR	Personne responsable au Royaume-Uni	RO	Persoana responsabilă din Marea Britanie
	ES	Responsable en el Reino Unido	HR	Osoba odgovorna za Ujedinjeno Kraljevstvo (UK)
	IT	Responsabile per il Regno Unito	HU	Felelős személy az Egyesült Királyságban
	NL	Verantwoordelijke in het VK	SL	Odgovorna oseba v Združenem kraljestvu
	DE	Für UK verantwortliche Person	CS	Odpovědná osoba ve Spojeném království
	SV	Ansvarig person i Storbritannien	SK	Zodpovedná osoba v Spojenom kráľovstve
	NO	Ansvarlig person i Storbritannia	BG	Отговорно лице за Обединеното кралство
	FI	Vastuuhenkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa	UK	Відповідальна особа у Великій Британії
	DA	Ansvarlig person i Det Forenede Kongerige	ET	Suurbritannia vastutav isik
	PT	Responsável no Reino Unido	LV	Apvienotās Karalistes atbildīgā persona
	EL	Υπεύθυνο Πρόσωπο για το Ηνωμένο Βασίλειο	LT	Atsakingas asmuo Jungtinėje Karalystėje
	TR	Birleşik Krallık Sorumlusu		



Kuraray Noritake Dental Inc.
300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan
TEL +81-561-32-8953 FAX +81-561-32-8976



Kuraray Europe GmbH (EU Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone: +49 (0)69 305 35835 Fax: +49 (0)69 305 98 35835
URL: <https://www.kuraraynoritake.eu>




EC REP

EMERGO EUROPE

Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

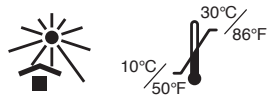

I. Introduction

This IFU is for KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML is a pre-sintered zirconia disc 98.5 mm in diameter, which contains a plastic ring. This is designed for all milling systems using this generic-type disc. (Please refer to your milling system's technical instructions for correct machine operation.) KATANA Zirconia UTML has 2 available thicknesses: (14mm and 18mm) and has 20 shade variations: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML consists of 4 gradated shade layers. KATANA Zirconia UTML is recommended for use in fabricating FCZ (Full Contour Zirconia) restorations or the frameworks. The general clinical benefit of this product is to restore tooth function for the following INTENDED USE/ INDICATIONS FOR USE.

II. INTENDED USE/ INDICATIONS FOR USE

KATANA Zirconia is used for the fabrication of the all-ceramic restorations (frameworks, FCZ crowns, FCZ bridges, inlays, onlays and veneers).

[Intended user]

- Dentists (chairside fabrication of restorations; clinical workflow)
- Dental laboratory technicians (fabrication of restorations in the dental laboratory)

III. Sintering Program

Sintering program 1

Temperature	Programming Rate	Holding Time
Room Temp. — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 hrs
1550°C (2822°F) — Room Temp.	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Sintering program 2

Temperature	Programming Rate	Holding Time
Room Temp. — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Room Temp. (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

* The restorations may be removed at 800°C (1472°F) or less depending on the circumstances.

Sintering program 3

Temperature	Programming Rate	Holding Time
Room Temp. — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Room Temp. (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

* The restorations may be removed at 800°C (1472°F) or less depending on the circumstances.

IV. Composition

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Units in parentheses are mass %.

V. Type and Class (ISO6872:2015)

Type:II/ Class:3

VI. Physical Properties

Coefficient of Thermal Expansion (25-500°C (77-932°F)): 9.7×10⁻⁶/K

VII. Directions for Use

- (1) Take the disc from the packaging and confirm that the disc does not have a crack or other damage.
- (2) Place the disc into the milling machine; then begin the milling process following the milling systems technical instructions.
- (3) After milling, remove the restorations from the disc with a diamond bur, etc.
- (4) The cutting waste or dust, which is attached to the restorations, can be removed with a gentle air stream.
- (5) Put the restorations into the refractory sagger tray and place them in the sintering furnace.
- (6) Depending on the performance of the sintering furnace used, review the sintering schedule shown above (III. Sintering Program) before sintering the restorations.
- (7) After sintering, adjust the restorations with a diamond bur as needed.
- (8) Confirm that the restorations have no cracks.
- (9)-1 FCZ:

Glaze baking: Create a high shine surface by polishing, especially on the contact areas, then apply the glaze on all surfaces in the usual manner.
- (9)-2 Frameworks: Build-up the dental porcelain (CERABIEN ZR or CZR PRESS LF) on the frameworks following the manufacturer's technical instructions. Check the coefficient of thermal expansion of the porcelain in the manufacturer's technical instructions to confirm compatibility.

VIII. Remarks on Handling

Contraindications:

1. If the patient is hypersensitive to zirconia or any other components, this product must not be used.
2. Do not use this product to make 4+ unit bridges, cantilever bridges or bridges containing molars.

Warning:

- If the patient or the dental professional demonstrates a hypersensitivity reaction, such as rash, dermatitis etc., discontinue use of the product and seek medical attention immediately.

Caution:

1. This product should not be used when malocclusion, clenching or bruxism conditions are present.
2. When milling the disc or cutting, grinding and polishing the restorations, use an approved dust mask and vacuum with air filter to protect your lungs from inhaling dust.
3. When milling the disc or cutting, grinding and polishing the restorations, use safety glasses to prevent dust from getting into your eyes. If the dust gets into your eyes, immediately rinse with copious amounts of water and consult a physician.
4. Do not use for any purposes except for dental restoration. This product is for dental application only.
5. The use of this product is restricted to dental professionals.
6. Do not touch the items heated in the furnace with your bare hands.
7. Do not take the restorations out of the sintering furnace during high temperature, as the quenching causes the breaking. However, if an automatic opening type furnace is used under the sintering program 2 or 3, the restorations may be removed from the furnace at 800°C (1472°F) or less. When removed from the furnace, the restorations must be put on a tray made of ceramic fiber (for example: Noritake Porcelain Mat) to cool slowly.
8. There may be a large difference between the setting temperature in the program and the temperature in the real furnace when using the furnace for sintering program 2 or 3. Please use the furnace after checking with the manufacturer that the furnace and temperature listed in sintering program 2 or 3 is compatible.
9. **Sintering program 2 or 3 is only recommended for frameworks (up to 3 units), FCZ crowns, FCZ bridges (up to 3 units), inlays, onlays and veneers.**
10. This product is particularly translucent; therefore, one should carefully consider its appropriateness for use when masking the underlying surface, such as a metal abutment, or a very dark or discolored tooth preparation.
11. The margins should be prepared with a deep chamfer and rounded shoulders, with cutting edges and corners rounded to eliminate sharp preparation corners. The angle of the axial surface should be within the range of 5 to 15 degrees.
12. When preparing teeth, avoid the following: deep shoulders, J-margins, knife edges, serrated margins, non-tapered abutments, undercuts, guide grooves, the formation of retentive holes, and sharp corners.
13. Keep the following thickness of this product for fabricating prosthetics:

Location & indication	Wall thickness
Anterior crown or bridge	0.8 mm or more
Veneer	0.4 mm or more*
Posterior crown or bridge	1.0 mm or more
Inlay or onlay	1.0 mm or more

* 0.4 mm or more of this product is for full zirconia veneers. Keep thickness 0.8 mm or more, if it is used for combination with the porcelain.

14. Use the following cross-sectional areas for connectors when fabricating bridges.

Location & indication	Connector cross section
Anterior 2- or 3-unit bridges	12 mm ² or more
Premolar 2- or 3-unit bridges	16 mm ² or more

15. Choose a shade color that is brighter than the intended color for a thick restoration, as it may look duller depending on the thickness of the restorations.
16. When using a sintering furnace for the first time and changing a sintering condition, colors after sintering may vary. Sinter a small piece of Zirconia beforehand and confirm the color.

Caution in conjunction with usage:

1. Do not use the disc if there is a crack noticed after removing it from the package.
2. Dry milling is recommended. If wet milling is used, the translucency of the disc may be reduced.
3. If you find a crack in the restorations, do not use.
4. The above sintering recommendation is only a guideline; some adjustments may be required depending on each individual furnace.
5. When milling the disc, use caution when approaching the milling bur with the plastic ring to prevent detachment of the disc. Mill the disc as if leaving a zirconia part contacting the internal side of the plastic ring at 2 mm.
6. Cut and remove the plastic ring prior to sintering the whole disc.
7. Dispose of this product as a medical waste to prevent infection.

Storage:

1. Store in a cool and dry place. Keep away from direct sunlight.
2. The product should be stored at 10-30°C (50-86°F).
3. Do not remove the disc from its packaging during storage.
4. The disc is fragile, and requires care when handling.
5. The product must be stored in an appropriate place where only dental personnel have access.
6. The product must be used by the expiration date indicated on the package.

[WARRANTY]


Kuraray Noritake Dental Inc. will replace any product that is proven to be defective. Kuraray Noritake Dental Inc. does not accept liability for any loss or damage, direct, consequential or special, arising out of the application or use of or the inability to use these products. Before using, the user shall determine the suitability of the products for the intended use and the user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.

[NOTE]

If a serious incident attributable to this product occurs, report it to the manufacturer's authorized representative shown below and the regulatory authorities of the country in which the user/patient resides. "KATANA" and "CERABIEN" are registered trademarks or trademarks of NORITAKE CO., LIMITED.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

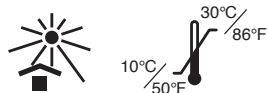

I. Introduction

Ce mode d'emploi est pour KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML est un disque préfritté de zircone de 98,5 mm de diamètre, qui contient un disque en matière plastique. Il est conçu pour tous les systèmes de fraiseage utilisant ce disque de type générique. (Veuillez vous référer aux instructions techniques du système de fraiseage pour l'utiliser correctement.) KATANA Zirconia UTML possède 2 épaisseurs différentes: (14 mm et 18 mm) et 20 variations de teinte: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML est composé d'un dégradé de 4 couches d'ombre. KATANA Zirconia UTML est recommandé pour la fabrication des restaurations ou d'armatures FCZ (Full Contour Zirconia). Le bénéfice clinique général de ce produit est de restaurer la fonction dentaire pour les UTILISATIONS PRÉVUES/ INDICATIONS D'UTILISATION suivantes.

II. UTILISATIONS PRÉVUES/ INDICATIONS D'UTILISATION

KATANA Zirconia est utilisé pour la fabrication des restaurations tout céramique (armatures, couronnes FCZ crowns, bridges FCZ, inlays, onlays et facettes).

[Utilisateur prévu]

- Dentistes (fabrication de restaurations en fauteuil, flux de travail clinique)
- Prothésistes dentaires (fabrication de restaurations en laboratoire dentaire)

III. Programme de sinterisation

Programme de sinterisation 1

Température	Taux de programmation	Temps de prise
Temp. pièce — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 heures
1550°C (2822°F) — Temp. pièce	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Programme de sinterisation 2

Température	Taux de programmation	Temps de prise
Temp. pièce — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Temp. pièce (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

* Les restaurations peuvent être retirées à 800°C (1472°F) ou moins selon les circonstances.

Programme de sinterisation 3

Température	Taux de programmation	Temps de prise
Temp. pièce — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Temp. pièce. (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

* Les restaurations peuvent être retirées à 800°C (1472°F) ou moins selon les circonstances.

IV. Composition

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Les unités entre parenthèses sont des % de masse.

V. Type et Classe (ISO6872:2015)

Type:II/ Classe:3

VI. Propriétés physiques

Coefficient de dilatation thermique (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Instructions

- Retirez le disque du paquet et vérifiez qu'il n'a aucune fissure et n'est pas endommagé.
- Placez le disque dans l'appareil de fraiseage; puis débutez le processus de fraiseage en suivant les instructions techniques du système de fraiseage.
- Après le fraiseage, retirez les restaurations du disque avec une fraise diamantée, etc.
- Les déchets ou la poussière de coupe attachés à la restauration, peuvent être enlevés avec un léger courant d'air.
- Placez les restaurations dans la nacelle de cuisson réfractaire puis dans le four de frittage.
- En fonction du rendement du four de frittage utilisé, revoir le programme de frittage indiqué ci-dessus (III. Programme de sinterisation) avant le frittage des restaurations.
- Après le frittage, ajustez si nécessaire les restaurations avec une fraise diamantée.
- Vérifiez que les restaurations ne sont pas fissurées.
- 1 FCZ:
Cuisson du glaze: Créez une surface de haute brillance par polissage, en particulier sur les zones de contact puis appliquez le glaze sur toutes les surfaces de la manière habituelle.
- 2 Armatures: Assemblez la porcelaine dentaire (CERABIEN ZR ou CZR PRESS LF) sur l'armature en suivant les instructions techniques du fabricant. Vérifiez le coefficient de dilatation thermique de la porcelaine dans les instructions techniques du fabricant pour vérifier la compatibilité.

VIII. Remarques sur la manipulation

Contre-indications:

- Si le patient est hypersensible au zircone ou à d'autres composants, ce produit ne doit pas être utilisé.
- N'utilisez pas ce produit pour faire des bridges 4+ dents, des bridges cantilever ou des bridges contenant des molaires.

Avertissement:

- Si le patient ou le professionnel des soins dentaires manifeste une réaction d'hypersensibilité, tels qu'une éruption cutanée, une dermatite, etc cessez d'utiliser le produit et consultez un médecin immédiatement.

Attention:

- Ce produit ne doit pas être utilisé lorsque que des problèmes de malocclusion, serrage ou bruxisme sont réunies.
- Lors du fraiseage du disque ou de la coupe, du meulage et du polissage des restaurations, utiliser un masque anti-poussière approuvé et aspirez avec filtre à air pour protéger vos poumons de l'inhalation de la poussière.
- Lors du fraiseage du disque ou de la coupe, du meulage et du polissage des restaurations, utilisez des lunettes de sécurité pour empêcher la poussière de pénétrer dans vos yeux. Si de la poussière pénétrait dans vos yeux, lavez-les immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.
- Ne l'utilisez pas pour toute autre utilisation que la restauration dentaire. Ce produit est destiné uniquement à une application dentaire.
- L'utilisation de ce produit est réservée aux professionnels dentaires.
- Ne touchez pas les éléments chauffés par le four à mains nues.
- Ne pas sortir les restaurations du four de sinterisation pendant les hautes températures, la trempe entraînant une rupture. Cependant, si un four de type à ouverture automatique est utilisé dans le Programme de sinterisation 2 ou 3, les restaurations peuvent être retirées du four à 800°C (1472°F) ou moins. Lorsqu'elles sont retirées du four, les restaurations doivent être placées sur un plateau en fibre de céramique (par exemple un Noritake Porcelain Mat) pour les faire refroidir lentement.
- Il peut y avoir une grande différence entre la température de réglage du programme et la température réelle du four lors de l'utilisation du four pour le programme de frittage 2 ou 3. Veuillez utiliser le four après avoir vérifié auprès du fabricant que le four et la température indiqués dans le programme de frittage 2 ou 3 sont compatibles.
- Le programme de frittage 2 ou 3 est recommandé uniquement pour les armatures (3 unités maximum), les couronnes FCZ, les bridges FCZ (3 unités maximum), les inlays/onlays et les facettes.
- Ce produit est particulièrement translucide; par conséquent, vérifiez s'il est pertinent de l'utiliser lors du masquage de la surface sous-jacente, comme une butée en métal, ou une préparation de la dent très sombre ou décolorée.
- Les marges doivent être préparées avec un chanfrein profond et les coins arrondis, avec des bords et des coins arrondis pour éliminer les coins tranchants de la préparation. L'angle de la surface axiale doit être compris entre 5 et 15 degrés.
- Lors de la préparation des dents, évitez ce qui suit: les épaulements profonds, les marges en J, les lames de couteau, les marges dentelées, les piliers coniques, les interférences de taillage, les rainures guide, la formation de trous de rétention, et les angles aigus.
- Respectez l'épaisseur de produit suivante pour la fabrication de prothèse:

Emplacement et indication	Épaisseur de paroi
Couronne antérieur ou bridge	0,8 mm ou plus
Facette	0,4 mm ou plus*
Couronne postérieure ou bridge	1,0 mm ou plus
Inlay ou onlay	1,0 mm ou plus

* 0,4 mm de produit ou plus pour les facettes en zircone. Gardez une épaisseur de 0,8 mm ou plus lors d'une utilisation en combinaison avec de la porcelaine.

- Utilisez les zones transversales suivantes pour les connecteurs lors de la fabrication des bridges.

Emplacement et indication	Section transversale de connexion
Bridges antérieurs 2 ou 3 dents	12 mm ² ou plus
Bridges prémolaires 2 ou 3 dents	16 mm ² ou plus

- Choisissez une couleur de dégradé plus brillante que la couleur prévue pour une restauration épaisse, car elle peut sembler plus terne en fonction de l'épaisseur des restaurations.
- Lors de l'utilisation d'un four de frittage pour la première fois et de de la modification d'une condition de frittage, les couleurs après frittage peuvent varier. Frittez un petit morceau de zircone à l'avance et vérifiez la couleur.

Précautions liées à l'utilisation:

- N'utilisez pas le disque si vous trouvez une fissure après le retrait de l'emballage.
 - Un fraiseage à sec est recommandé. Si un fraiseage humide est utilisé, la translucidité peut être réduite.
 - Si la restauration est fissurée, ne l'utilisez pas.
 - Les recommandations de frittage ci-dessus ne sont qu'indicatives; et certains ajustements peuvent être nécessaires en fonction du four utilisé.
 - Lors du fraiseage du disque, faites attention lorsque vous approchez la barre de fraiseage avec la bague en plastique pour empêcher le détachement du disque. Fraisez le disque comme si vous laissez une partie du zircone en contact avec le côté interne de la bague en plastique à 2 mm.
 - Coupez et enlevez la bague en plastique avant de fritter le disque entier.
 - Mettez ce produit au rebut comme un déchet médical afin de prévenir toute infection.
- Stockage:**
- Stockez dans un endroit frais et sec. Conservez à l'écart de la lumière du soleil.
 - Le produit doit être stocké dans une plage de température de 10-30°C (50-86°F).
 - Ne retirez pas le disque de son emballage pendant le stockage.
 - Le disque est fragile et demande des précautions lors de sa manipulation.
 - Le produit doit être stocké dans un endroit approprié accessible uniquement par le personnel médical.
 - Le produit doit être utilisé avant la date d'expiration indiquée sur l'emballage.


[GARANTIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. s'engage à remplacer tout produit défectueux. Kuraray Noritake Dental Inc. décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages directs ou indirects, ou inhabituels découlant de l'utilisation du produit ou d'une utilisation inappropriée. Avant utilisation, l'utilisateur s'engage à vérifier que les produits sont bien appropriés à l'usage qu'il compte en faire et l'utilisateur endosse tous risques et responsabilités associés.

[REMARQUE]
Si un incident sérieux imputable à ce produit a lieu, le rapporter au représentant agréé du fabricant indiqué ci-dessous ainsi qu'aux autorités régulatrices du pays dans lequel l'utilisateur/patient réside.
«KATANA» et «CERABIEN» sont des marques déposées ou des marques commerciales de NORITAKE CO., LIMITED.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

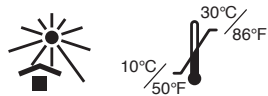

I. Introducción

Estas son las instrucciones de uso de KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML es un disco de zirconia presinterizado, de 98,5 mm de diámetro que contiene un anillo de plástico. Está diseñado para todos los sistemas de fresado que usen este disco genérico. (Consulte en las instrucciones técnicas de su sistema de fresado el funcionamiento correcto de la máquina). KATANA Zirconia UTML está disponible en 2 espesores: (14 mm y 18 mm) y cuenta con 20 tonalidades: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML consta de 4 capas de tonalidades graduadas. KATANA Zirconia UTML está recomendado para su uso durante la fabricación de restauraciones de FCZ (Full Contour Zirconia) o estructuras. El beneficio clínico general de este producto es restaurar la función dental para el siguiente USO PREVISTO/ las siguientes INDICACIONES PARA EL USO.

II. USO PREVISTO/ INDICACIONES PARA EL USO

KATANA Zirconia se utiliza para fabricar las restauraciones de cerámica completa (estructuras, coronas FCZ, puentes FCZ, inlays, onlays y carillas). [Usuario previsto]

- Dentistas (fabricación de restauraciones en la clínica, flujo de trabajo clínico)
- Técnicos de laboratorio dental (fabricación de restauraciones en el laboratorio dental)

III. Programa de sinterización

Programa de sinterización 1

Temperatura	Tasa de programación	Tiempo de mantenimiento
Temperatura ambiente — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 h
1550°C (2822°F) — Temperatura ambiente	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Programa de sinterización 2

Temperature	Tasa de programación	Tiempo de mantenimiento
Temperatura ambiente — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Temperatura ambiente (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

* Las restauraciones se pueden retirar a 800°C (1472°F) o menos dependiendo de las circunstancias.

Programa de sinterización 3

Temperature	Tasa de programación	Tiempo de mantenimiento
Temperatura ambiente — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Temperatura ambiente (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

* Las restauraciones se pueden retirar a 800°C (1472°F) o menos dependiendo de las circunstancias.

IV. Composición

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Las unidades entre paréntesis son % en masa.

V. Tipo y clase (ISO6872:2015)

Tipo: II/Clase:3

VI. Propiedades físicas

Coefficiente de expansión térmica (25-500 °C (77-932 °F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Instrucciones de uso

- (1) Saque el disco del embalaje y verifique que el disco no presenta grietas ni otros daños.
- (2) Coloque el disco en la fresadora; después inicie el proceso de fresado siguiendo las instrucciones técnicas del sistema de fresado.
- (3) Después del fresado retire las restauraciones del disco con una punta de diamante, etc.
- (4) Los residuos o el polvo del corte adherido a las restauraciones se puede retirar con un suave chorro de aire.
- (5) Deposite las restauraciones en la bandeja refractaria y colóquelas en el horno de sinterización.

- (6) Según el rendimiento del horno de sinterización utilizado, revise el esquema de sinterización mostrado anteriormente (III. Programa de sinterización) antes de sinterizar las restauraciones.
- (7) Después de la sinterización ajuste las restauraciones con una punta de diamante, según sea necesario.
- (8) Verifique que las restauraciones no tengan grietas.
- (9)-1 FCZ:
Cocción de glaseado: hacer un pulido manual hasta conseguir una superficie brillante, especialmente en las zonas de contacto oclusal. A continuación aplicar la masa de glaseado en toda la superficie de manera habitual.
- (9)-2 Estructuras: estratifique cerámica (CERABIEN ZR o CZR PRESS LF) sobre las estructuras siguiendo las instrucciones técnicas del fabricante. Compruebe el coeficiente de expansión térmica de la porcelana en las instrucciones técnicas del fabricante para asegurar la compatibilidad.

VIII. Observaciones sobre la manipulación

Contraindicaciones:

1. Si el paciente es hipersensible a la zirconia o a cualquier otro componente, no se deberá utilizar este producto.
2. No utilice este producto para hacer puentes de 4+ elementos, puentes en extensión o puentes con molares.

Advertencia:

- Si el paciente o el profesional especialista mostraran una reacción hipersensible, tal como sarpullido, dermatitis, etc., deje de utilizar el producto y consulte a un médico inmediatamente.

Atención:

1. Este producto no debe utilizarse en caso de presencia de maloclusión, apretamiento mandibular o bruxismo.
2. Cuando frese el disco o recorte, amole y pula las restauraciones, utilice una máscara antipolvo y una aspiradora con filtro de aire homologadas para evitar que sus pulmones inhalen el polvo.
3. Cuando frese el disco o recorte, amole y pula las restauraciones, utilice gafas de seguridad para evitar que el polvo penetre en sus ojos. Si el polvo penetra en sus ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico.
4. No utilice el producto para ningún fin excepto para restauraciones dentales. Este producto solo está previsto para aplicaciones dentales.
5. El uso de este producto está limitado a los profesionales dentales.
6. No toque los objetos calentados en el horno sin protección adecuada en las manos.
7. No retire las restauraciones del horno de sinterización mientras hay altas temperaturas, ya que el enfriamiento puede provocar roturas. No obstante, si se utiliza un horno de apertura automática bajo el programa de sinterización 2 ó 3, las restauraciones se pueden retirar del horno a 800°C (1472°F) o menos. Una vez retiradas, las restauraciones se deben colocar en una bandeja de fibra cerámica (por ejemplo, Noritake Porcelain Mat) para que se enfrien lentamente.
8. Puede haber una gran diferencia entre la temperatura de fraguado en el programa y la temperatura en el horno real cuando se usa para el programa de sinterización 2 ó 3. Utilice el horno después de haber comprobado con el fabricante que es compatible con la temperatura indicada en el programa de sinterización 2 ó 3.
9. El programa de sinterización 2 ó 3 solo se recomienda para estructuras (hasta 3 elementos), coronas FCZ, puentes FCZ (hasta 3 elementos), inlays, onlays y carillas.
10. Este producto es especialmente translúcido; por lo tanto, se debe considerar su idoneidad para enmascarar superficies subyacentes como un pilar de implante metálico o una preparación del diente muy oscura o descolorida.
11. Los márgenes se deben preparar con un bisel profundo y hombros redondeados, redondeando bordes cortantes y esquinas para eliminar esquinas de preparación afiladas. El ángulo de la superficie axial debe ser de entre 5 y 15 grados.
12. Al preparar dientes, evite lo siguiente: hombros profundos, márgenes en J, filos de cuchillo, márgenes serrados, pilares no cónicos, socavaduras, ranuras guía, formaciones de agujeros de retención y esquinas afiladas.
13. Mantenga el siguiente grosor de producto para fabricar prótesis:

Ubicación e indicación	Grosor de pared
Corona o puente de diente frontal	0,8 mm o más
Carilla	0,4 mm o más*
Corona o puente de diente posterior	1,0 mm o más
Inlay de onlay	1,0 mm o más

* 0,4 mm o más de este producto son para carillas completas de óxido de zirconio. Mantenga el grosor a 0,8 mm o más si se utiliza en combinación con porcelana.

14. Utilice las siguientes secciones transversales para conectores al fabricar puentes.

Ubicación e indicación	Sección transversal del conector
Puentes de dientes frontales de 2 ó 3 elementos	12 mm ² o más
Puentes de dientes premolar de 2 ó 3 elementos	16 mm ² o más

15. Elija un tono que sea más brillante que el color previsto para una restauración gruesa, ya que puede quedar más apagado según el grosor de las restauraciones.
16. Al utilizar un horno de sinterización por primera vez y cambiar una condición de sinterización, pueden variar los colores tras el proceso. Sinterice un trozo pequeño de zirconia de antemano y confirme el color.

Cuidado relativo al uso:

1. No utilice el disco si se constata que presenta alguna grieta después de sacarlo del embalaje.
2. Se recomienda el fresado en seco. Si se utiliza el fresado en húmedo, puede reducirse la translucidez del disco.
3. No utilice si existe alguna grieta en las restauraciones.
4. La recomendación de sinterización mencionada arriba sólo sirve de guía; puede que se necesiten algunos ajustes en función de cada horno.
5. Al fresar el disco, tenga sumo cuidado al acercarse a la barra de fresado con el anillo de plástico para evitar que se desprenda el disco. Muela el disco como si dejara una pieza de zirconia en contacto con el lado interno del anillo de plástico a 2 mm.
6. Corte y retire el anillo de plástico antes de sinterizar el disco entero.
7. Elimine este producto como residuo médico para prevenir infecciones.

Almacenamiento:

1. Almacene el producto en un sitio fresco y seco. Mantenga el producto alejado de la luz solar directa.

2. El producto debe ser almacenado a 10-30 °C (50-86 °F).
3. No retire el disco de su embalaje durante el almacenamiento.
4. El disco es frágil y debe manejarse con cuidado.
5. El producto debe ser almacenado en un lugar adecuado al que sólo tenga acceso el personal adecuado.
6. El producto debe ser utilizado antes de la fecha de caducidad indicada en el embalaje.

[GARANTÍA]

Kuraray Noritake Dental Inc. sustituirá cualquier producto que resulte defectuoso. Kuraray Noritake Dental Inc. no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño, directo, indirecto, resultante o especial, derivado de la aplicación o el uso o la incapacidad para utilizar estos productos. Antes de la utilización, el usuario determinará la idoneidad de los productos para el uso previsto y el usuario asume todo riesgo y responsabilidad en relación con esto.

[NOTA]


Si se produce un incidente grave atribuible a este producto, informe al representante autorizado del fabricante indicado más abajo y a las autoridades reguladoras del país de residencia del usuario o paciente.

"KATANA" y "CERABIEN" son marcas registradas o marcas comerciales de NORITAKE CO., LIMITED.

012 TI-013-ES 01/2025



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

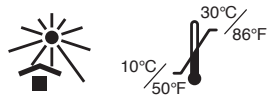

I. Introduzione

Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono al prodotto KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML è un disco pre-sinterizzato in ossido di zirconio di 98,5 mm di diametro, contenente un anello in plastica e progettato per tutti i sistemi di fresatura che utilizzano questo tipo di disco generico. (Per un utilizzo corretto della macchina, si prega di fare riferimento alle istruzioni tecniche del proprio sistema di fresatura.) KATANA Zirconia UTML è disponibile in 2 spessori: (14 mm e 18 mm) e in 20 varianti di tonalità: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML è costituito da 4 strati a tonalità graduale. KATANA Zirconia UTML è raccomandato per la realizzazione di restauri in FCZ (Full Contour Zirconia) o di strutture. Il vantaggio clinico generale di questo prodotto è il ripristino della funzionalità del dente per la DESTINAZIONE D'USO/le INDICAZIONI PER L'USO seguenti.

II. DESTINAZIONE D'USO/INDICAZIONI PER L'USO

KATANA Zirconia si usa per realizzare restauri in ceramica integrale (strutture, corone FCZ, ponti FCZ, inlay, onlay e faccette).
[Utilizzatore previsto]

- Dentisti (realizzazione di restauri alla poltrona; workflow clinico)
- Odontotecnici (realizzazione di restauri nel laboratorio dentale)

III. Programma di sinterizzazione

Programma di sinterizzazione 1

Temperatura	Rapporto di programmazione	Tempo di mantenimento
Temperatura ambiente — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 ore
1550°C (2822°F) — Temperatura ambiente	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Programma di sinterizzazione 2

Temperatura	Rapporto di programmazione	Tempo di mantenimento
Temperatura ambiente — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Temperatura ambiente (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

* La rimozione del restauro è possibile a 800°C (1472°F) o a temperatura inferiore, a seconda delle circostanze.

Programma di sinterizzazione 3

Temperatura	Rapporto di programmazione	Tempo di mantenimento
Temperatura ambiente — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Temperatura ambiente (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

* La rimozione del restauro è possibile a 800°C (1472°F) o a temperatura inferiore, a seconda delle circostanze.

IV. Composizione

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Le unità tra parentesi sono % di massa.

V. Tipo e classe (ISO6872:2015)

Tipo: II/Classe:3

VI. Proprietà fisiche

Coefficiente di espansione termica (25-500 °C (77-932 °F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Istruzioni per l'uso

- Togliere il disco dalla confezione e assicurarsi che il disco non presenti crepe o sia in altro modo danneggiato.
- Collocare il disco all'interno della fresatrice; avviare quindi il processo di fresatura seguendo le istruzioni tecniche del sistema di fresatura.
- Dopo la fresatura, rimuovere dal disco i restauri con una fresa diamantata ecc.
- Gli sfidi del taglio o la polvere che rimane attaccata ai restauri si possono rimuovere con un getto d'aria delicato.
- Mettere i restauri nell'incassatore refrattario e inserirli nel forno di sinterizzazione.

- In base alle prestazioni del forno di sinterizzazione utilizzato, ripassare lo schema di sinterizzazione sopra esposto (III. Programma di sinterizzazione) prima di sinterizzare i restauri.
- Dopo la sinterizzazione, rifinire i restauri con una fresa diamantata secondo necessità.
- Assicurarsi che i restauri non presentino crepe.
- 1 FCZ:
Cottura del glaze: creare una superficie altamente brillante tramite la lucidatura, soprattutto nelle aree di contatto, poi applicare il glaze su tutte le superfici secondo il metodo abituale.
- 2 Strutture: modellare la ceramica dentale (CERABIEN ZR o CZR PRESS LF) sulle strutture seguendo le istruzioni tecniche del produttore. Controllare il coefficiente di espansione termica della porcellana sulle istruzioni tecniche del produttore per verificarne la compatibilità.

VIII. Note relative alla manipolazione

Controindicazioni:

- Se il paziente è ipersensibile all'ossido di zirconio o a qualsiasi altro componente, il presente prodotto non deve essere usato.
- Non usare questo prodotto per realizzare ponti a 4+ elementi, ponti con elementi in estensione o ponti contenenti molari.

Avvertenza:

- Se il paziente o il professionista del settore mostra una reazione di ipersensibilità come eruzione cutanea, dermatite ecc., sospendere l'uso del prodotto e richiedere immediatamente il parere di un medico.

Attenzione:

- Questo prodotto non va usato in presenza di malocclusione, serramento dentale o bruxismo.
- Quando si fresa il disco o si taglia, leviga e lucida i restauri, usare una mascherina antipolvere e sottovuoto con un filtro per l'aria per proteggere i polmoni dall'inalazione della polvere.
- Quando si fresa il disco o si taglia, leviga e lucida i restauri, usare occhiali protettivi per impedire alla polvere di entrare negli occhi. Se gli occhi vengono a contatto con la polvere, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e richiedere il parere di un medico.
- Non usare il prodotto per scopi diversi dai restauri dentali. Il prodotto è esclusivamente destinato all'applicazione dentale.
- L'uso di questo prodotto è limitato ai professionisti dentali.
- Non toccare a mani nude gli oggetti riscaldati con il forno.
- Non estrarre i restauri dal forno di sinterizzazione in fase di alta temperatura, poiché il brusco raffreddamento provoca rottura. Tuttavia, se si usa un tipo di forno ad apertura automatica con il programma di sinterizzazione 2 o 3, sarà possibile togliere i restauri dal forno a 800°C (1472°F) o a temperatura inferiore. Quando vengono tolti dal forno, i restauri vanno collocati su un vassoio di fibra ceramica (per esempio: Noritake Porcelain Mat) perché si raffreddino lentamente.
- Potrà esserci una differenza notevole tra la temperatura di presa impostata nel programma e la temperatura effettiva del forno quando si utilizza il forno per il programma di sinterizzazione 2 o 3. Si prega di usare il forno scopo aver verificato con il produttore che il forno e la temperatura elencati nel programma di sinterizzazione 2 o 3 siano compatibili.
- Il programma di sinterizzazione 2 o 3 è consigliato soltanto per strutture (fino a 3 elementi), corone FCZ, ponti FCZ (fino a 3 elementi), inlay, onlay e faccette.
- Questo prodotto è particolarmente traslucido; si dovrebbe pertanto considerare attentamente la sua appropriatezza di utilizzo per mascherare la superficie sottostante, come un abutment di metallo, o una preparazione dentale molto scura o scolorita.
- I margini dovranno essere preparati con un chamfer profondo e spalle arrotondate, con spigoli vivi e angoli arrotondati di preparazione affilati. L'angolo della superficie assiale dovrà essere compreso in un intervallo da 5 a 15 gradi.
- Durante la preparazione del dente, evitare quanto segue: spalle profonde, margini a J, bordi a lama di coltello, margini serrati, abutment non conici, sottosquadri, scanalature di guida, la formazione di cavità ritentive e angoli affilati.
- Mantenere il seguente spessore per questo prodotto per la fabbricazione di protesi:

Collocazione e indicazione	Spessore della parete
Corona o ponte dente frontale	0,8 mm o più
Faccette	0,4 mm o più*
Corona o ponte dente laterale	1,0 mm o più
Inlay dente onlay	1,0 mm o più

* 0,4 mm o più di questo prodotto è lo spessore per faccette interamente in ossido di zirconio. Mantenere uno spessore di 0,8 mm o più se il prodotto viene usato in combinazione con la porcellana.

- Utilizzare le seguenti sezioni per i connettori per la realizzazione di ponti.

Collocazione e indicazione	Sezione per il connettore
Ponti dente frontale a 2 o 3 elementi	12 mm ² o più
Ponti dente premolare a 2 o 3 elementi	16 mm ² o più

- Scegliere una sfumatura di colore che sia più luminosa del colore voluto per un restauro spesso, poiché potrebbe apparire più spenta in base allo spessore dei restauri.
- Quando si usa un forno di sinterizzazione per la prima volta e quando si cambia una condizione di sinterizzazione, i colori in seguito alla sinterizzazione potranno variare. Sinterizzare prima un pezzetto di ossido di zirconio e quindi confermare il colore.

Precauzioni legate all'utilizzo:

- Non usare il disco se è stata riscontrata una crepa dopo averlo estratto dalla sua confezione.
- Si raccomanda la fresatura a secco. In caso di uso della fresatura a umido, è possibile una riduzione della traslucenza del disco.
- Non usare se viene riscontrata una rottura nei restauri.
- Le raccomandazioni di sinterizzazione sopra esposte rappresentano unicamente una guida orientativa; possono essere necessari aggiustamenti in base ad ogni singolo forno.
- Quando si fresa il disco, usare prudenza nell'avvicinarsi alla barra di fresatura con l'anello di plastica al fine di evitare il distacco del disco. Fresare il disco in modo da lasciare una parte di ossido di zirconio a contatto con l'interno dell'anello di plastica a 2 mm.

6. Tagliare e rimuovere l'anello di plastica prima di sinterizzare l'intero disco.
7. Smaltire questo prodotto come rifiuto medico per prevenire infezioni.

Conservazione:

1. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Tenere il prodotto lontano dalla luce diretta del sole.
2. Il prodotto deve essere conservato a 10-30 °C (50-86 °F).
3. Non rimuovere il disco dalla sua confezione durante la conservazione.
4. Il disco è fragile e richiede di essere maneggiato con cura.
5. Il prodotto deve essere conservato in un luogo appropriato, al quale abbia accesso soltanto il personale odontoiatrico.
6. Il prodotto deve essere utilizzato entro la data di scadenza indicata sulla confezione.

[GARANZIA]

Kuraray Noritake Dental Inc. sostituirà qualsiasi prodotto che dovesse risultare difettoso. Kuraray Noritake Dental Inc. non si assume alcuna responsabilità per perdita o danni diretti, conseguenti o particolari, causati dall'applicazione, dall'utilizzo o dall'incapacità a utilizzare questi prodotti. Prima di utilizzare i prodotti, l'operatore deve verificare che gli stessi siano adatti all'uso che ne intende fare, assumendosi tutti i rischi e le responsabilità che ne conseguono.

[NOTA]


Se accade un incidente grave imputabile a questo prodotto, fare rapporto al rappresentante autorizzato del produttore mostrato in basso e alle autorità competenti nel Paese in cui risiede l'utente/il paziente.

"KATANA" e "CERABIEN" sono marchi registrati o marchi di fabbrica di NORITAKE CO., LIMITED.

012 TI-013-IT 01/2025



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

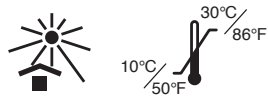

I. Inleiding

Dit is de gebruiksaanwijzing voor KATANA Zirconia UTML (ultratranslucient meerlagenmateriaal). KATANA Zirconia UTML is een voorgesinterd schijfje zirkoniumoxide met een diameter van 98,5 mm, met daarin een plastic ring. Dit schijfje is ontworpen voor alle freessystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van schijfjes van dit generieke type. (Raadplaag alstublieft de technische instructies van uw freessysteem voor de correcte werking van de machine.) KATANA Zirconia UTML is verkrijgbaar in 2 verschillende dikten: (14 mm en 18 mm) en in 20 kleurvarianties: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML bestaat uit 4 lagen in verschillende kleurgradaties. KATANA Zirconia UTML wordt aangeraden voor het vervaardigen van volledige zirkoniumrestauraties of onderstructuren. Het algemeen klinisch nut van dit product is het herstel van de tandfunctie voor het volgende BEOOGDE GEBRUIK/ de volgende GEBRUIKSINDICATIES.

II. BEOOGDE GEBRUIK/ GEBRUIKSINDICATIES

KATANA Zirconia wordt aanbevolen voor de vervaardiging van volledig keramische restauraties (frames, FCZ -kronen, FCZ -bruggen, inlays, onlays en facings).

[Beoogde gebruikers]

- Tandartsen (maken van restauraties aan de stoel, klinische workflow)
- Tandtechnici (maken van restauraties in tandtechnische laboratoria)

III. Sinteringsprogramma

Sinteringsprogramma 1

Temperatuur	Programma	Bewaartijd
Kamertemp. — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 uur
1550°C (2822°F) — Kamertemp.	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Sinteringsprogramma 2

Temperatuur	Programma	Bewaartijd
Kamertemp. — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Kamertemp. (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

* Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de restauraties bij maximaal 800°C (1472°F) verwijderd worden.

Sinteringsprogramma 3

Temperatuur	Programma	Bewaartijd
Kamertemp. — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Kamertemp. (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

* Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de restauraties bij maximaal 800°C (1472°F) verwijderd worden.

IV. Samenstelling

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Eenheden tussen haakjes zijn massapercentages.

V. Type en Klasse (ISO6872:2015)

Type:II/ Klasse:3

VI. Fysische eigenschappen

Thermische expansiecoëfficiënt (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Gebruiksaanwijzing

- Neem de disc uit de verpakking en verwittigt uzelf ervan dat de schijf geen breuken of andere beschadigingen heeft.
- Plaats de disc in de freesmachine; vang dan aan met het slijpproces volgens de technische instructies van het freessysteem.
- Verwijder de restauraties, met behulp van bijvoorbeeld een diamantboor, uit de schijf na het slijpproces.
- Het slijpafval of stof dat zich aan de restauraties heeft gehecht, kan met een zachte luchtstroom worden verwijderd.
- Plaats de restauraties in de vuurvaste sinter bakje en zet deze in de sinteroven.
- Zie in overeenstemming met de specificaties van de sinteroven die u gebruikt het hierboven aangegeven sinteringsprogramma (III. Sinteringsprogramma) alvorens de restauraties te sinteren.
- Werk de restauraties, na het sinteren, naar behoefte bij met een diamantboor.
- Controleer of de restauraties geen haarscheuren vertonen.
- 1 FCZ:
Glans bak: Creeër een hoge glans door te polijsten, speciaal bij de contactpunten en breng vervolgens de glans zoals gebruikelijk aan op alle oppervlakten.
- 2 Substructuren: Bouw op met tandheelkundig porselein: (CERABIEN ZR of CZR PRESS LF) op de substructuur volgens de technische instructies van de fabrikant. Controleer de thermische-uitzettingscoëfficiënt van het porselein in de technische instructies van de fabrikant om de compatibiliteit zeker te stellen.

VIII. Kanttekeningen bij gebruik

Contra-indicaties:

- Wanneer de patiënt overgevoelig is voor zirkoniumoxide of een van de andere componenten, dient dit product niet gebruikt te worden.
- Gebruik dit product niet voor het maken van 4+ unitbruggen, cantileverbruggen of bruggen die een kies omvatten.

Waarschuwing:

- Indien de patiënt of de tandheelkundige professional een overgevoeligheidsreactie laat zien, bijvoorbeeld huiduitslag, dermatitis enz., stop dan met gebruik van het product en roep onmiddellijk medische hulp in.

Voorzichtig:

- Dit product mag niet worden gebruikt in geval van malocclusie, dichtklemmen of bruxisme.
- Gebruik een goedgekeurd stofmasker en zuig af via een luchtfilter bij het afslijpen uit de schijf of bij het afslijpen, beslijpen en polijsten van de restauraties; zo beschermt u uw longen tegen het inademen van stof.
- Zet een veiligheidsbril op bij het afslijpen uit de schijf of bij het afslijpen, beslijpen en polijsten van de restauraties; zo voorkomt u dat er stof in uw ogen komt. Als er stof in uw ogen is gekomen, spoel ze dan onmiddellijk uit met veel water en raadpleeg een arts.
- Gebruik niet voor andere doeleinden dan tandheelkundige restauraties. Dit product is uitsluitend bestemd voor tandheelkundig gebruik.
- Het gebruik van dit product is voorbehouden aan tandheelkundige professionals.
- Raak de in de oven verhitte items niet aan met blote handen.
- De restauraties bij hoge temperaturen niet uit de sinteroven halen omdat het duntrekken tot breuk leidt. Wordt er echter bij het sinterprogramma 2 of 3 een oven met automatische opening gebruikt, dan kunnen de restauraties bij maximaal 800°C (1472°F) uit de oven verwijderd worden. Om langzaam af te koelen, moeten de restauraties na de verwijdering uit de oven op een uit keramische vezels bestaande planchet (bijv. Noritake Porcelain Mat) gelegd worden.
- Er is mogelijk een groot verschil tussen de temperatuur in het programma en de temperatuur in de werkelijke oven die voor het sinteringsprogramma 2 of 3 wordt gebruikt. Controleer bij de fabrikant of de oven en in het sinteringsprogramma 2 of 3 aangeven temperatuur compatibel zijn.
- Het sinteringsprogramma 2 of 3 wordt alleen voor frames (maximaal 3 units), FCZ-kronen, FCZ-bruggen (maximaal 3 units), inlays, onlays en facings aanbevolen.
- Dit product is bijzonder doorzichtig; u dient dan ook goed na te denken over de geschiktheid bij het maskeren van een onderliggend oppervlak, bijvoorbeeld een metalen stift of een erg donkere of sterk verkleurde tandpreparatie.
- De marges dienen te worden geprepareerd met een diepe afschuining en ronde schouders; de snijranden en hoeken moeten worden afgerond om scherpe preparatiehoeken te voorkomen. De hoek van het axiale oppervlak dient zich binnen een bandbreedte van 5 tot 15 graden te bevinden.
- Bij het prepareren van element voorkom: diepe schouders, J-marges, uitsteekfels, gekartelde marges, niet tapse stiften, undercuts, geleidegroeven, de vorming van retentieve holtes en scherpe hoeken.
- Houd de volgende dikte van dit product aan voor het fabriceren van protheses:

Locatie & indicatie	Wanddikte
Anterieure kroon of brug	0,8 mm of meer
Facing	0,4 mm of meer*
Posterieure kroon of brug	1,0 mm of meer
Inlay of onlay	1,0 mm of meer

* 0,4 mm of meer van dit product is voor volledige zirconia facings. Houd een dikte van 0,8 mm of meer aan in geval van gebruik voor een combinatie met porselein.

- Gebruik bij de vervaardiging van bruggen onderstaande dwarsdoorsnedevlakken voor verbindingen.

Locatie & indicatie	Dwarsdoorsnede van de verbinding
Anterieure 2- of 3-unitbruggen	12 mm ² of meer
Premolar 2- of 3-unitbruggen	16 mm ² of meer

- Kies een tint die lichter is dan de gewenste kleur voor een dikke restauratie daar de kleur mogelijk afhankelijk van de dikte van de restauraties matter zal lijken.
- Indien een sinteroven voor het eerst wordt gebruikt en de omstandigheden van het sinteren veranderen, kunnen de kleuren na het sinteren mogelijk variëren. Sinter derhalve eerst een klein stukje Zirconia en controleer de kleur.

Voorzichtigheid in verband met gebruik:

- Gebruik de disc niet indien er een scheur wordt waargenomen nadat de schijf uit de verpakking is gehaald.
 - Droog slijpen wordt aanbevolen. Indien nat wordt geslepen is er kans dat de translucentie zal afnemen.
 - Gebruik de restauratie niet als deze een scheur vertoont.
 - De bovenstaande sinteraankbeveling is slechts een richtlijn; enkele aanpassingen kunnen nodig zijn afhankelijk van de individuele oven.
 - Wanneer u de disc freest, moet u goed opletten dat de freesstang niet in contact komt met de plastic ring om te voorkomen dat de disc los komt. Frees de disc alsof een zirconia deel de interne kant van de plastic ring op 2mm raakt.
 - Snij de plastic ring uit voordat u de volledige disc sintert.
 - Voer dit product af als medisch afval om infecties te vermijden.
- Opslag:**
- Bewaar op een koele en droge plaats. Uit direct zonlicht houden.
 - Het product dient opgeslagen te worden op 10-30°C (50-86°F).
 - De disc niet uit de verpakking halen gedurende de opslagtijd.
 - De disc is fragiel en moet voorzichtig behandeld worden.
 - Het product moet opgeslagen worden op een geschikte plaats waar alleen tandheelkundige medewerkers toegang toe hebben.
 - Het product moet gebruikt worden voor de vervaldatum, zoals aangegeven op de verpakking.

[GARANTIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. vervangt ieder aantoonbaar defect product. Kuraray Noritake Dental Inc. accepteert geen aansprakelijk voor directe of indirecte schade of eventuele vervolgschade die ontstaat door een onjuist of ondeskundig gebruik van dit product. Voor gebruik moet de gebruiker de geschiktheid van de producten voor de betreffende indicatie(s) controleren en de aansprakelijkheid voor alle daaruit voortvloeiende risico's voor zijn/haar rekening nemen.

[OPMERKING]


Rapporteer een ernstig voorval, dat aan dit product toegewezen kan worden, bij de onderstaande gevolmachtigde van de fabrikant en de toezichthoudende autoriteiten in het land, waar de gebruiker/patiënt woont.

"KATANA" en "CERABIEN" zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van NORITAKE CO., LIMITED.

.....
012 TI-013-NL 01/2025



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

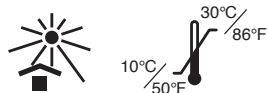

I. Einleitung

Diese GA gilt für KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML ist eine vorgesinterte Zirkonoxid-Scheibe mit einem Durchmesser von 98,5 mm und enthält einen Kunststoffring. Sie ist für alle Frässysteme geeignet, die mit diesem Durchmesser arbeiten. (Bitte befolgen Sie die Anweisungen für den korrekten Gerätebetrieb in der technischen Anleitung Ihres Frässystems.) KATANA Zirconia UTML ist in 2 Stärken (14 mm und 18 mm) und in 20 Farbvarianten (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW) erhältlich. KATANA Zirconia UTML setzt sich aus 4 abgestuften Farbschichten zusammen. KATANA Zirconia UTML wird für den Einsatz bei der Herstellung von Restaurationen aus FCZ (Full Contour Zirconia) oder Gerüsten empfohlen. Der allgemeine klinische Nutzen dieses Produkts besteht in der Wiederherstellung der Zahnfunktion bei folgender BESTIMMUNGSGEMÄSSER VERWENDUNG bzw. folgenden ANWENDUNGSINDIKATIONEN.

II. BESTIMMUNGSGEMÄSSER VERWENDUNG/ ANWENDUNGSINDIKATIONEN

KATANA Zirconia wird zur Herstellung vollkeramischer Restaurationen (Gerüste, FCZ-Kronen, FCZ-Brücken, Inlays, Onlays und Veneers) verwendet.

[Bestimmungsgemäße Anwender]

- Zahnärzte (Herstellung von Restaurationen am Behandlungsstuhl – „Chairside“ ; klinischer Arbeitsablauf)
- Zahntechniker (Herstellung von Restaurationen im zahntechnischen Labor – „Labside“)

III. Sinterprogramm

Sinterprogramm 1

Temperatur	Programmierungsrate	Haltezeit
Raumtemperatur — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 Stunden
1550°C (2822°F) — Raumtemperatur	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Sinterprogramm 2

Temperatur	Programmierungsrate	Haltezeit
Raumtemperatur — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 Min
1560°C (2840°F) — Raumtemperatur (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

* Je nach den Gegebenheiten können die Restaurationen bei maximal 800°C (1472°F) entnommen werden.

Sinterprogramm 3

Temperatur	Programmierungsrate	Haltezeit
Raumtemperatur — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 Min
1600°C (2912°F) — Raumtemperatur (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

* Je nach den Gegebenheiten können die Restaurationen bei maximal 800°C (1472°F) entnommen werden.

IV. Zusammensetzung

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Einheiten in Klammern sind Masse-%.

V. Typ und Klasse (ISO6872:2015)

Typ: II/Klasse:3

VI. Physikalische Eigenschaften

Wärmeausdehnungskoeffizient (25-500 °C (77-932 °F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Gebrauchsanweisung

- (1) Scheibe aus der Verpackung nehmen und sicherstellen, dass die Scheibe keine Risse oder anderen Schäden aufweist.
- (2) Scheibe in die Fräsmaschine einlegen; dann mit dem Fräsprozess beginnen und dabei die für das Frässystem geltenden technischen Anweisungen befolgen.
- (3) Nach dem Fräsen die Restaurationen mit einem Diamantbohrer o. ä. von der Scheibe abtrennen.
- (4) Der bei dem Schneiden entstandene Abfall oder Staub, der sich auf den Restaurationen absetzt, kann mit einem sanften Luftstrom entfernt werden.
- (5) Die Restaurationen auf die feuerfeste Ablageplatte legen und in den Sinterofen geben.

- (6) In Abhängigkeit von der Leistung des verwendeten Sinterofens vor dem Sintern der Restaurationen den oben aufgeführten Sinterplan (III. Sinterprogramm) überprüfen.
- (7) Nach dem Sintern nötigenfalls mit Hilfe eines Diamantbohrers die notwendigen Anpassungen der Restaurationen vornehmen.
- (8) Sicherstellen, dass die Restaurationen keine Risse aufweisen.
- (9)-1 FCZ:
Glasieren: Die Oberfläche auf Hochglanz bearbeiten, besonders die Kontaktbereiche sollten hochglänzend sein, danach alle Oberflächen auf die übliche Weise glasieren.
- (9)-2 Gerüste: Das Dentalporzellan (CERABIEN ZR oder CZR PRESS LF) auf die Gerüste drücken und dabei die technischen Anweisungen des Herstellers befolgen. Den Wärmeausdehnungskoeffizienten des Porzellans gemäß den technischen Anweisungen des Herstellers überprüfen, um die Kompatibilität sicherzustellen.

VIII. Anmerkungen zur Handhabung

Gegenanzeigen:

1. Wenn bei dem Patienten eine Überempfindlichkeit gegen Zirkonoxid oder andere Komponenten vorliegt, darf das Produkt nicht verwendet werden.
2. Dieses Produkt nicht zur Herstellung von 4+-gliedrigen Brücken, Freireibbrücken oder Brücken mit Molaren verwenden.

Warnung:

- Wenn bei dem Patienten oder der zahnärztlichen Fachkraft Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Ausschlag, Dermatitis usw., auftreten, die Nutzung des Produkts einstellen und sofort einen Arzt konsultieren.

Nutzung:

1. Dieses Produkt sollte nicht bei Fehlstellungen der Zähne, Zähnepressen oder Bruxismus verwendet werden.
2. Beim Fräsen der Scheibe oder beim Schneiden, Schleifen und Polieren der Restaurationen eine entsprechende Staubmaske und eine Absaugung mit Luftfilter zum Schutz der Lungen vor eingeatmetem Staub verwenden.
3. Beim Fräsen der Scheibe oder beim Schneiden, Schleifen und Polieren der Restaurationen eine Schutzbrille verwenden, damit kein Staub in die Augen gerät. Sollte Staub in die Augen geraten, spülen Sie sie sofort mit reichlich Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt.
4. Das Produkt ausschließlich für Zahnrestaurationen verwenden. Dieses Produkt ist ausschließlich für dentale Anwendungen vorgesehen.
5. Die Benutzung dieses Produkts ist ausschließlich dem zahnmedizinischen sowie zahntechnischen Fachpersonal vorbehalten.
6. Die im Ofen erwärmten Objekte nicht mit bloßen Händen berühren.
7. Die Restaurationen nicht bei hohen Temperaturen aus dem Sinterofen nehmen, da das Abschrecken zum Bruch führt. Wird jedoch beim Sinterprogramm 2 oder 3 ein Ofen mit selbsttätiger Öffnung verwendet, können die Restaurationen bei maximal 800°C (1472°F) aus dem Ofen entnommen werden. Die Restaurationen müssen nach der Entnahme aus dem Ofen zum langsamen Abkühlen auf eine Ablage aus Keramikfaser (z. B. Noritake Porcelain Mat) gelegt werden.
8. Bei Verwendung des Ofens für das Sinterprogramm 2 oder 3 können sich die vom Programm angegebene Abbinde- und die tatsächliche Temperatur im Ofen deutlich voneinander unterscheiden. Zuvor bitte mit dem Hersteller prüfen, ob der Ofen mit der in Sinterprogramm 2 oder 3 angegebenen Temperatur kompatibel ist; erst danach den Ofen verwenden.
9. **Das Sinterprogramm 2 oder 3 wird nur für Gerüste (bis zu 3 Gliedern), FCZ-Kronen, FCZ-Brücken (bis zu 3 Gliedern), Inlays, Onlays und Veneers empfohlen.**
10. Dieses Produkt ist besonders transluzent und sollte deshalb beim Abdecken der darunter liegenden Oberflächen, wie etwa bei einem Metall-Abutment oder einer sehr dunklen oder verfärbten Zahnpräparation, sorgfältig auf seine Eignung hin geprüft werden.
11. Die Ränder sollten mit einer tiefen Stufe und abgerundeten Schultern, mit Schneidekanten und Kanten, die zur Vermeidung scharfer Präparationskanten abgerundet sind, präpariert werden. Der Winkel der axialen Oberfläche sollte zwischen 5 und 15 Grad betragen.
12. Beim Vorbereiten von Zähnen Folgendes vermeiden: tiefe Schultern, Ränder in Form eines „J“, Messerkanten, gezahnte Ränder, unspitz zulaufende Abutments, Hinterschnitte, Führungsrillen, die Entstehung von Retentionsrillen, und scharfe Kanten.
13. Halten Sie zur Herstellung von Prothesen die nachfolgend aufgeführte Wandstärke dieses Produkts ein:

Ort und Indikation	Wandstärke
Frontzahn-Krone oder -Brücke	mindestens 0,8 mm
Veneer	mindestens 0,4 mm*
Seitenzahn-Krone oder -Brücke	mindestens 1,0 mm
Inlay oder onlay	mindestens 1,0 mm

* Mindestens 0,4 mm dieses Produkts gilt für Voll-Zirkonoxid-Veneers. Halten Sie die Stärke von mindestens 0,8 mm ein, wenn es zur Verwendung in Kombination mit Porzellan bestimmt ist.

14. Verwenden Sie bei der Herstellung von Brücken die nachfolgenden Verbinderquerschnitte.

Ort und Indikation	Verbinderquerschnitt
2- oder 3-gliedrige Frontzahn-Brücken	mindestens 12 mm ²
2- oder 3-gliedrige Prämolare -Brücken	mindestens 16 mm ²

15. Für eine dicke Restauration eine Farbe auswählen, die heller als die geplante Farbe ist, da die Farbe unter Umständen je nach Dicke der Restauration dunkler wirkt.
16. Wenn Sie einen Sinterofen erstmalig verwenden und die Sinterbedingungen verändern, können die Farben nach dem Sintern anders aussehen. Sintern Sie ein kleines Stück des Zirkonoxids und überzeugen Sie sich davon, dass die Farbe übereinstimmt.

Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung:

1. Sollte nach der Entnahme aus der Verpackung ein Riss festgestellt werden, die Scheibe nicht verwenden.
2. Trockenfräsen wird empfohlen. Im Fall von Nassfräsen kann die Transluzenz der Scheibe beeinträchtigt werden.
3. Bei Feststellen eines Risses in den Restaurationen nicht verwenden.
4. Bei der oben aufgeführten Empfehlung für das Sintern handelt es sich lediglich um eine Richtlinie; je nach Ofen sind eventuell Anpassungen erforderlich.

5. Wenn Sie die Scheibe fräsen, gehen Sie beim Heranführen des Kunststoffrings an die Frässtange vorsichtig vor, um ein Ablösen der Scheibe zu vermeiden. Fräsen Sie die Scheibe so, dass ein Zirkonoxidteil bleibt, das bei 2 mm Kontakt zu der Innenseite des Kunststoffrings hat.
6. Vor dem Sintern der gesamten Scheibe den Kunststoffring abtrennen und verwerfen.
7. Entsorgen Sie dieses Produkt als medizinischen Abfall, um Infektionen zu vermeiden.

Lagerung:

1. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
2. Das Produkt sollte bei 10-30 °C (50-86 °F) aufbewahrt werden.
3. Die Scheibe während der Lagerung nicht aus der Verpackung nehmen.
4. Die Scheibe ist zerbrechlich und mit besonderer Vorsicht zu behandeln.
5. Das Produkt muss so gelagert werden, dass es nur dem Dental-Personal zugänglich ist.
6. Das Produkt vor Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums verwenden.

[GARANTIE]


Kuraray Noritake Dental Inc. erklärt sich zum Ersatz nachweislich mangelhafter Produkte bereit Kuraray Noritake Inc. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich Direkt- Folge- und Einzelfallschäden, die sich aus der Anwendung oder dem Gebrauch oder der Unfähigkeit zum Gebrauch dieser Produkte ergeben. Vor Gebrauch hat der Benutzer sich von der Eignung der Produkte für den vorgesehenen Gebrauch zu überzeugen; in diesem Zusammenhang übernimmt der Benutzer sämtliche Risiken und Verpflichtungen.

[HINWEIS]

Melden Sie einen schwerwiegenden Vorfall, der diesem Produkt zugeordnet werden kann, dem nachstehend genannten bevollmächtigten Vertreter des Herstellers und den Aufsichtsbehörden in dem Land, in dem der Benutzer/Patient lebt.
"KATANA" und "CERABIEN" sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von NORITAKE CO., LIMITED.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

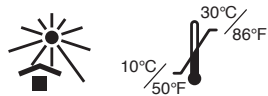

I. Inledning

Denna bruksanvisning gäller för KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML är en försintrad zirkoniumdisk med en diameter på 98,5 mm som innehåller en plastring. Den är lämplig för alla frässystem som använder denna disk av generisk typ. (Se fräsningssystemets tekniska instruktioner för korrekt drift av maskinen.) KATANA Zirconia UTML har 2 tillgängliga tjocklekar (14 mm och 18 mm) och har 20 nyansvariationer (A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML består av 4 graderade nyanslager. KATANA Zirconia UTML rekommenderas för användning vid tillverkning av FCZ (Full Contour Zirconia) restaurationer eller skelett. Den allmänna kliniska fördelen med denna produkt är att återställa tandfunktionen för följande AVSEDD ANVÄNDNING/ INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING.

II. AVSEDD ANVÄNDNING/ INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

KATANA Zirconia används för tillverkning av helkeramiska restaurationer (skelett, FCZ-kronor, FCZ-broar, inlägg, onlays och fasader).

[Avsedd användare]

- Tandläkare (tillverkning av rekonstruktioner i behandlingsstolen, kliniskt arbetsflöde)
- Tandtekniker (tillverkning av rekonstruktioner i det tandtekniska laboratoriet)

III. Sintringsprogram

Sintringsprogram 1

Temperatur	Programmerad tid	Hålltid
Rumstemperatur — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 h
1550°C (2822°F) — Rumstemperatur	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Sintringsprogram 2

Temperatur	Programmerad tid	Hålltid
Rumstemperatur — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Rumstemperatur (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Restaurationerna kan avlägsnas vid 800°C (1472°F) eller lägre, beroende på förhållandena.

Sintringsprogram 3

Temperatur	Programmerad tid	Hålltid
Rumstemperatur — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Rumstemperatur (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Restaurationerna kan avlägsnas vid 800°C (1472°F) eller lägre, beroende på förhållandena.

IV. Sammansättning

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Enheter inom parentes är massa %.

V. Typ och klass (ISO6872:2015)

Typ:II/ Klass:3

VI. Fysikaliska egenskaper

Värmeutvidgningskoefficient (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Instruktioner

- (1) Ta disken ur förpackningen och kontrollera att den inte har en spricka eller annan skada.
- (2) Placera disken i fräsmaskinen; påbörja sedan fräsningssprocessen i enlighet med frässystemets tekniska instruktioner.
- (3) Efter fräsning ska restaurationen avlägsnas från disken med en diamantbör eller liknande.
- (4) Skäravfall eller damm, som sitter fast i restaurationerna, kan tas bort med en mjuk luftström.
- (5) Sätt restaurationerna i den elfasta saggerbrickan och placera dem i sintringsugnen.
- (6) Beroende på den använda sintringsugnens utförande ska sintringsschemat ovan (III. Sintringsprogram) konsulteras innan sintring av restaurationerna.
- (7) Efter sintring ska restaurationerna anpassas efter behov med en diamantbör.
- (8) Kontrollera att restaurationerna inte har några sprickor.
- (9)-1 FCZ:
 - Glasyrbränning: Skapa en högblank yta genom polering, särskilt på kontaktytorna, och applicera glasyr på alla ytor på vanligt sätt.
- (9)-2 Skelett: För uppbyggnad av dentalt porslin (CERABIEN ZR eller CZR PRESS LF) på skelettet, följ tillverkarens tekniska instruktioner. Kontrollera värmeutvidgningskoefficienten av keramiken i tillverkarens tekniska instruktioner för att säkerställa dess kompatibilitet.

VIII. Information om hantering

Kontraindikationer:

1. Om patienten är överkänslig mot zirkonia eller andra komponenter får denna produkt inte användas.
2. Använd inte den här produkten för att tillverka 4+ leds broar, extensionsbroar eller broar som innehåller molarer..

Varning:

Om patienten eller tandläkaren visar en överkänslighetsreaktion, såsom utslag, eksem osv., ska behandlingen med produkten omedelbart avbrytas och en läkare konsulteras.

OBS!

1. Denna produkt bör inte användas när bettavvikelser, pressning eller bruxism föreligger.
2. Vid fräsning av disken eller vid skärning samt slipning och polering av restaurationerna, ska en godkänd skyddsmask och vakuum med ett luftfilter användas för att skydda lungorna mot inandad damm.
3. Vid fräsning av disken eller vid skärning samt slipning och polering av restaurationerna, ska skyddsglasögon användas för att förhindra att slipdamm hamnar i ögonen. Om damm hamnar i ögat, ska det omedelbart sköljas med rikligt med vatten och en läkare kontaktas.
4. Använd inte produkten för andra ändamål än tandrestaurering. Denna produkt är endast avsedd för användning inom tandvården.
5. Denna produkt får endast användas av tandvårdspersonal.
6. Vidrör inte föremål som har värmts upp i ugnen med händerna.
7. Ta inte ut rekonstruktionerna ur sintringsugnen under hög temperatur, eftersom temperaturskillnaden leder till brott. Om emellertid en ugn med automatisk öppning används under sintringsprogram 2 eller 3, kan rekonstruktionerna avlägsnas från ugnen vid 800°C (1472°F) eller mindre. När de har avlägsnats från ugnen måste rekonstruktionerna läggas på en bricka av keramisk fiber (till exempel: Noritake Porcelain Mat) för att svalna långsamt.
8. Det kan finnas en stor skillnad mellan inställningstemperaturen i programmet och den faktiska ugnstemperaturen när ugnen används för sintringsprogram 2 eller 3. Använd ugnen först efter att ha konsulterat tillverkaren om ugnen och temperaturen som anges i sintringsprogram 2 eller 3 är kompatibla. Om SpeedFire används som sintringsugn, ta bort rekonstruktionerna från SpeedFire enligt sintringsprogrammet bruksanvisning.
9. **Sintringsprogram 2 eller 3 rekommenderas endast för skelett (upp till tre leder), FCZ-kronor, FCZ-broar (upp till tre leder), inlägg, onlays och fasader.**
10. Denna produkt är särskilt genomskinlig; därför bör man noga överväga dess lämplighet för användning vid maskering av den underliggande ytan, såsom en metallförankring, eller en mycket mörk eller missfärgad förbehandlad tand.
11. Kanterna bör förberedas med en djup avfasning och rundade hörn, för att eliminera vassa kanter på den förbehandlade tanden. Vinkeln av den axiella ytan bör vara mellan 5 och 15 grader.
12. Vid förbehandling av tänderna ska följande undvikas: djupa, J-formade, vassa, taggade kanter, icke-avsmalnande förankringar, underskärningar, styrspar, bildandet av underskärningshål och vassa hörn.
13. För framställning av proteser ska följande tjocklekar av produkten beaktas:

Situation och indikation	Väggjtjocklek
Framtandskrona eller -bro	0,8 mm eller mer
Fasade	0,4 mm eller mer*
Baktandskrona eller -bro	1,0 mm eller mer
Inlägg eller onlay	1,0 mm eller mer

*0,4 mm eller mer av denna produkt används för hela zirkoniumfasader. Tjockleken ska vara 0,8 mm eller mer vid användning med porslin.

14. Använd följande förbindningstvårsnittare vid tillverkning av broar.

Situation och indikation	Förbindningstvårsnittare
Anteriora 2- eller 3-ledsbroar	12 mm ² eller mer
Premolar 2- eller 3-ledsbroar	16 mm ² eller mer

15. Välj en färgnyans som är ljusare än den avsedda färgen för en tjock restauration, eftersom den kan se mattare ut beroende på restaurationernas tjocklek.
16. När en sintringsugn används för första gången och ett sintringstillstånd ändras kan färgerna variera efter sintring. Sintra en liten bit zirkonium på förhand och verifiera färgen.

Försiktighet i samband med användningen:

1. Använd inte disken om en spricka syns när den tas ut ur förpackningen.
2. Torrfrysning rekommenderas. Om våtfräsning används, kan diskens genomskinlighet minska.
3. Använd inte restaurationer om du hittar en spricka i dem.
4. Ovanstående sintringsrekommendation är bara en riktlinje; vissa justeringar kan vara nödvändiga beroende på varje enskild ugn.
5. Se upp vid fräsning av disken när fräsborret närmar sig plastringen för att förhindra att disken lossnar. Fräs disken så att du lämnar en zirkoniumdel som har kontakt med plastringens insida vid 2 mm.
6. Klipp av och ta bort plastringen innan du sintrar hela disken.
7. Avfallshantera denna produkt som medicinskt avfall för att förhindra infektion.

Förvaring:

1. Förvaras svalt och torrt. Produkten får inte utsättas för direkt solljus.
2. Produkten ska förvaras vid 10-30°C (50-86°F).
3. Ta inte bort disken ur förpackningen under förvaring.
4. Disken är känslig, och kräver omsorg vid hantering.
5. Produkten ska förvaras på en lämplig plats, där den endast är åtkomlig för tandvårdspersonalen.
6. Produkten måste användas innan förfallodatumet som står på förpackningen har gått ut.

[GARANTI]

Kuraray Noritake Dental Inc. ersätter en produkt som visat sig vara defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. ansvarar inte för direkta, efterföljande eller särskilda förluster eller skador som härrör från tillämpning, användning respektive ickeanvändning av dessa produkter. Användaren måste avgöra före användning, om produkterna är användbara för det avsedda ändamålet och användaren övertar alla risker och ansvaret som relateras till användningen.

[OBS!]


Om en allvarig incident inträffar som beror på den här produkten, måste den rapporteras till tillverkarens representant (som är angiven nedan) och tillsynsmyndigheterna i det land där användaren/patienten är bosatt.

"KATANA" och "CERABIEN" är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör
NORITAKE CO., LIMITED.

012 TI-013-SV 01/2025



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

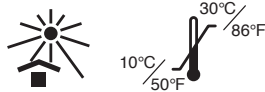

I. Innledning

Denne bruksinformasjonen gjelder for KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML er en forhåndssintret zirkoniumdioksid-disk med en diameter på 98,5 mm, og inneholder en plastring. De egner seg til alle fresesystemer som arbeider med denne diameteren. (Følg anvisningene for korrekt bruk av apparatet i den tekniske anvisningen for fresesystemet ditt.) KATANA Zirconia UTML fås i 2 tykkelser (14 mm og 18 mm) og 20 fargevarianter (A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML består av 4 nyanserte fargelag. KATANA Zirconia UTML anbefales for bruk ved fremstilling av restaureringer i FCZ (Full Contour Zirconia) eller skjeletter. Den generelle kliniske fordelene med dette produktet er å gjenopprette tannfunksjonen for følgende TILTENKT BRUK/ INDIKASJONER FOR BRUK.

II. TILTENKT BRUK/ INDIKASJONER FOR BRUK

KATANA Zirconia brukes til fremstilling av helkeramiske restaureringer (skjeletter, FCZ-kroner, FCZ-broer, inlays, onlays og laminater).

【Tiltent bruker】

- Tannleger (fabrikasjon av restaureringer med pasienten i stolen, klinisk arbeidsflyt)
- Tannteknikere (fabrikasjoner av restaureringer i tannteknisk laboratorium)

III. Sintringsprogram

Sintringsprogram 1

Temperatur	Programmeringsverdi	Holdetid
Romtemperatur — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 timer
1550°C (2822°F) — Romtemperatur	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Sintringsprogram 2

Temperatur	Programmeringsverdi	Holdetid
Romtemperatur — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Romtemperatur (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Avhengig av omstendighetene kan restaureringene tas ut ved maks. 800°C (1472°F).

Sintringsprogram 3

Temperatur	Programmeringsverdi	Holdetid
Romtemperatur — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Romtemperatur (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Avhengig av omstendighetene kan restaureringene tas ut ved maks. 800°C (1472°F).

IV. Sammensetning

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Enheter i parentes er masse %.

V. Type og klasse (ISO6872:2015)

Type:II/ Klasse:3

VI. Fysikalske egenskaper

Varmeutvidelseskoeffisient (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Anvisninger

- (1) Ta disken ut av pakken og sjekk at det ikke er sprekker i den, eller at den er skadet på andre måter.
- (2) Legg disken inn i fresemaskinen og start fresingen. Følg de tekniske anvisningene som gjelder for fresesystemet.
- (3) Etter fresing brukes et diamantbor e.l. til å skille restaureringen fra disken.
- (4) Avfallet eller støvet som oppstår under skjæring, og som kan feste seg på restaureringen, fjernes med en svak luftstrøm.
- (5) Legg restaureringen på den ildfaste platen og sett den inn i sintringsovn.
- (6) Avhengig av effekten til sintringsovn som brukes, må sintringsplanen ovenfor (III. Sintringsprogram) sjekkes for restaureringen sintres.
- (7) Etter sintringen kan eventuelle nødvendige tilpasninger av restaureringen utføres med et diamantbor.
- (8) Påse at det ikke er sprekker i restaureringen.
- (9)-1 FCZ:
Glaserig: Bearbeid overflaten til høyglans. Spesielt kontaktflatene skal ha høyglans, deretter glaseres alle overflater på vanlig måte.
- (9)-2 Skjelett: Følg produsentens tekniske anvisninger ved oppbygging av tannporselenet (CERABIEN ZR eller CZR PRESS LF). Kontroller porselenets varmeutvidelseskoeffisient iht. de tekniske anvisningene fra produsenten, slik at kompatibilitet er garantert.

VIII. Merknader for bruk

Kontraindikasjon:

1. Produktet må ikke brukes dersom pasienten er overømfintlig overfor zirkoniumdioksid eller andre komponenter.
2. Dette produktet skal ikke brukes til produksjon av broer med 4+ ledd, ekstensjonsbroer eller broer med molarer.

Advarsel:

Dersom pasient eller tannmedisinske personell opplever overømfintlighetsreaksjoner som f.eks. utslett, dermatitt osv., skal produktet ikke lenger brukes og lege konsulteres omgående.

OBS:

1. Dette produktet bør ikke brukes ved tannfeilstilling, tannpressing eller bruksisme.
2. Når disken freses eller restaureringen skjæres, slipes og poleres skal det brukes støvmaske og avtrekk med luftfilter for å beskytte lungene mot støv som kan innåndes.
3. Når disken freses eller restaureringen skjæres, slipes og poleres skal det brukes vernebriller, slik at støv ikke kan trenge inn i øynene. Skulle man få støv i øynene, skal øynene straks skylles med rikelige mengder vann. Oppsøk lege.
4. Produktet skal utelukkende brukes til tannrestaureringer. Dette produktet er utelukkende til dental bruk.
5. Dette produktet skal utelukkende brukes av tannmedisinsk fagpersonale.
6. Objekter som har vært varmet opp i ovnen, må ikke berøres med bare hender.
7. Ikke ta restaureringene ut av sintringsovn mens temperaturen er høy, bråkjøling fører til at de brekker. Brukes det imidlertid en ovn med automatisk åpning for sintringsprogram 2 eller 3, kan restaureringene tas ut av ovnen ved maks. 800°C (1472°F). Når de er tatt ut av ovnen, må restaureringene legges på et underlag av keramfiber (f.eks. Noritake Porcelain Mat) for langsom avkjøling.
8. Ved bruk av ovnen til sintringsprogram 2 eller 3 kan herdetemperaturen angitt av programmet avvike tydelig fra faktisk temperatur i ovnen. Kontakt først produsenten for å høre om ovnen er kompatibel med temperaturen som angis i sintringsprogram 2 eller 3, først deretter skal ovnen brukes. Ved bruk av SpeedFire som sintringsovn skal restaureringene tas ut av SpeedFire som angitt i sintringsprogrammet.
9. Sintringsprogram 2 eller 3 anbefales kun for skjeletter (opptil 3 ledd), FCZ-kroner, FCZ-broer (opptil 3 ledd), innlegg, onlays og laminater.
10. Dette produktet er ekstra translucent. Skal overflaten som ligger under produktet tildekkes, f.eks. metalldistanser eller en svært mørk eller misfarget tannpreparering, bør det derfor kontrolleres at produktet egner seg til dette.
11. Kantene bør prepareres med et dypt trinn og avrundede skuldre, med skjærekanter og kanter som er avrundet for å unngå skarpe prepareringskanter. Vinkelen på den aksiale overflaten bør være mellom 5 og 15 grader.
12. Unngå følgende ved forberedelse av tenner: dype skuldre, kanter i «J»-form, knivkanter, taggete kanter, distanser som ikke har spiss, konisk form, underskjæringer, foringsriller, danning av retensjonshull og skarpe kanter.
13. Ved fremstilling av protoser skal de følgende tykkelsene for produktet overholdes:

Sted og indikasjon	Veggtykkelse
Fronttannkrone eller -bro	minst 0,8 mm
Laminat	minst 0,4 mm*
Sidetannkrone eller -bro	minst 1,0 mm
Inlay eller onlay	minst 1,0 mm

*Minst 0,4 mm av dette produktet gjelder for helzirkoniumdioksid-laminater. Overhold en tykkelse på minst 0,8 mm hvis det skal brukes i kombinasjon med porselen.

14. Bruk følgende forbindelsestverrsnitt ved produksjon av broer.

Sted og indikasjon	Forbindelsestverrsnitt
Fronttann-broer med 2 eller 3 ledd	minst 12 mm ²
Premolar-broer med 2 eller 3 ledd	minst 16 mm ²

15. Til en tykk restaurering bør det velges en farge som er lysere enn den planlagte fargen, da fargen eventuelt kan virke mørkere, avhengig av tykkelsen på restaureringen.

16. Bruker du en sintringsovn for første gang og forandrer sintringsbetingelsene, kan fargen se annerledes ut etter sintring. Sintre et lite stykke av zirkoniumdioksiden og kontroller at fargen stemmer overens.

Forsiktighetstiltak i forbindelse med bruk:

1. Oppdages en sprekk etter at disken er tatt ut av forpakningen, skal det ikke brukes.
2. Torrfresing anbefales. Våtfresing kan påvirke diskens translucens.
3. Dersom det oppdages en sprekk i restaureringene, må denne ikke brukes.
4. Anbefalingen for sintring nevnt ovenfor er kun veiledende, avhengig av ovn må det eventuelt foretas tilpasninger.
5. Når du freser disken, må du gå forsiktig frem når plastringen føres mot fresen, slik at du unngår at disken løsner. Fres disken slik at det blir igjen en zirkoniumdioksid-del som har 2 mm kontakt til innsiden av plastringen.
6. Ta av plastringen og kast den før hele disken sintres.
7. For å unngå infeksjoner skal dette produktet avfallsbehandles som medisinsk avfall.

Oppbevaring:

1. Oppbevares tørt og kjølig. Produktet må ikke utsettes for direkte sollys.
2. Produktet må oppbevares ved 10–30 °C (50–86 °F).
3. Disken skal ikke tas ut av forpakningen under oppbevaring.
4. Disken er knuselig og må behandles med stor omhu.
5. Produktet skal oppbevares slik at det kun er tilgjengelig for tannmedisinsk personell.
6. Produktet må brukes før utløpsdatoen som er angitt på emballasjen.

[GARANTI]

Kuraray Noritake Dental Inc. vil erstatte alle produkter som er bevist defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. godtar ikke ansvar for tap eller skade, direkte, som konsekvens eller spesielt, som oppstår ved påføring eller bruk av eller manglende evne til å bruke disse produktene.

Før bruk skal brukeren avgjøre produktenes egnethet for tiltent bruk, og brukeren påtar seg all risiko og ansvar i henhold til dette.


[MERKNAD]

Alvorlige hendelser som kan tilordnes produktet, skal meldes til produsentens nedenfor angitte autoriserte representant og tilsynsmyndighetene i landet der brukeren/pasienten bor.

"KATANA" og "CERABIEN" er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører NORITAKE CO., LIMITED.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

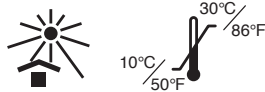

I. Johdanto

Tämä käyttöohje on KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered) varten. KATANA Zirconia UTML on esisintrattu zirkoniumoksidikiekkko, jonka halkaisija on 98,5 mm ja joka sisältää muovirenkaan. Se on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa tätä yleisen tyyppin kiekkoa käyttävissä jyrshintäjäjärjestelmissä. (Katso koneen käyttöohjeet jyrshintäjäjärjestelmän teknisistä ohjeista.) KATANA Zirconia UTML:stä on saatavana 2 eri paksuutta (14 mm ja 18 mm). Sävyvaihtoehtoja on 20 (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML koostuu 4:stä asteittaisesta sävykerroksesta. KATANA Zirconia UTML -kiekkoa suositellaan käytettäväksi FCZ-korjausten (Full Contour Zirconia) tai runkojen valmistukseen. Tämän tuotteen yleinen klininen hyöty on hampaiden toiminnan palauttaminen seuraaviin KÄYTTÖKOHTEISIIN/ KÄYTTÖTARKOITUKSIIN.

II. KÄYTTÖKOHTEISIIN/ KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

- KATANA Zirconia -kiekkoa käytetään kokokeraamisten restauraatioiden luomiseen (tukirakenteet, FCZ-kruunut, FCZ-sillat, inlay- ja onlay-täytteet ja laminaatit).
- [Käyttötarkoituksen mukainen käyttäjä]
- Hammaslääkärit (restauraatioiden valmistus vastaanotolla; klininen työnkulku)
- Hammaslaboratorioteknikot (restauraatioiden valmistus hammaslaboratoriossa)

III. Sintrausohjelma

Sintrausohjelma 1

Lämpötila	Ohjelmoinnin tahti	Käsittelyaika
Huoneenlämpö — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 tuntia
1550°C (2822°F) — Huoneenlämpö	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Sintrausohjelma 2

Lämpötila	Ohjelmoinnin tahti	Käsittelyaika
Huoneenlämpö — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Huoneenlämpö (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Restauraatiot voidaan ottaa pois tilanteesta riippuen 800°C (1472°F):n tai sitä alemassa lämpötilassa.

Sintrausohjelma 3

Lämpötila	Ohjelmoinnin tahti	Käsittelyaika
Huoneenlämpö — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Huoneenlämpö (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Restauraatiot voidaan ottaa pois tilanteesta riippuen 800°C (1472°F):n tai sitä alemassa lämpötilassa.

IV. Koostumus

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Suluissa olevat yksiköt ovat massa-%-yksiköitä.

V. Tyyppi ja luokka (ISO6872:2015)

Tyyppi:II/ Luokka:3

VI. Fysikaaliset ominaisuudet

Lämpölaajenemiskerroin (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Käyttöohjeet

- Ota kiekko pakkauksesta ja tarkista, ettei siinä ole säröjä tai muita vaurioita.
- Aseta kiekko jyrshintäkoneeseen ja käynnistä jyrshintäminen jyrshintäjäjärjestelmän teknisten ohjeiden mukaisesti.
- Poista jyrshintäminen jälkeen restauraatiot kiekosta esimerkiksi timanttilaikalla.
- Restauraatioon kiinni jääneet leikkauksijäämät tai pölyn voi poistaa kevyellä ilmapuhalluksella.
- Aseta restauraatiot tulenkkestävälle polttotarjottimelle ja laita ne sintrausuuniin.
- Riippuen käytettävän sintrausuunin suorituskyvystä käy läpi ylempänä oleva sintraustaulukko (III. Sintrausohjelma) ennen restauraatioiden sintrausta.
- Viimeistelet restauraatiot sintrauksen jälkeen tarpeen mukaan timanttilaikalla.
- Tarkista, ettei restauraatioissa ole säröjä.
- 1 FCZ:
Lasitteen polttaminen: hio pinta erittäin kiiltäväksi, etenkin kontaktialueet, ja levitä sitten lasite tavalliseen tapaan kaikille pinnoille.
- 2 Tukirakenteet: Kasaa hammasposiliinia (CERABIEN ZR tai CZR PRESS LF) tukirakenteisiin seuraten valmistajan teknisiä ohjeita. Varmista yhteensopivuus tarkistamalla posiliinin lämpölaajenemiskerroin valmistajan teknisistä ohjeista.

VIII. Käsittelyä koskevia huomautuksia

Tapaukset, joissa tuotetta ei saa käyttää:

- Tätä tuotetta ei tule käyttää, jos potilas on yliherkkä zirkoniumoksidille tai tuotteen muille komponenteille.
- Älä käytä tätä tuotetta 4:n tai useamman yksikön siltojen, vapaapäätteisen siltojen tai poskihampaita sisältävien siltojen valmistukseen.

Varoitus:

Jos potilaalle ilmaantuu yliherkkyyssreaktio, kuten ihottuma, ihotulehdus jne., lopeta tuotteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Huomio:

- Tätä tuotetta ei tule käyttää, jos potilaalla on purentavika, hampaiden puristamista yhteen tai buksismia.
- Kiekon jyrshintäminen tai restauraatioiden leikkauksen, hionnan ja kiillotuksen aikana on käytettävä hyväksyttyä pölysuojainta, jossa on tyhjölilmansuodatin, keuhkojen suojelemiseksi pölyn sisäanhengitykseltä.
- Kiekon jyrshintäminen tai restauraatioiden leikkauksen, hionnan ja kiillotuksen aikana on käytettävä suojalaseja, jotta pölyä ei pääse silmiin. Jos pölyä pääsee silmiin, huuhtelet silmiä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Käytä vain hammasrestauraatioiden valmistukseen. Tuote on tarkoitettu vain hammaslääketieteelliseen käyttöön.
- Tuotetta saavat käyttää vain hammaslääketieteen ammattilaiset.
- Älä kosketa uunissa kuumennettuja esineitä paljain käsin.
- Älä ota entisointeja ulos sintrausuunista korkeiden lämpötilojen aikana, koska äkillinen sammuminen aiheuttaa rikkoutumista. Jos kuitenkin käytetään automaattisesti avautuvaa uunin sintrausohjelmalla 2 tai 3, entisöinnit voidaan poistaa uunista 800°C (1472°F) lämpötilassa tai viileämmässä. Kun entisöinnit poistetaan uunista, ne täytyy laittaa keraamisesta kuidusta tehdyille alustalle (esimerkiksi: Noritake Porcelain Mat) hidasta viilenemistä varten.
- Kun uunia käytetään sintrausohjelmaan 2 tai 3, voi ilmetä suuri muutos lämpötilassa kun verrataan ohjelman asetuslämpötilaa ja todellisen uunin lämpötilaa. Ole hyvä ja käytä uunia vasta sen jälkeen kun olet varmistanut valmistajalta, että sintrausohjelmassa 2 tai 3 listattu uuni ja lämpötila ovat yhteensopivia. Mikäli SpeedFireä käytetään sintrausuunina, poista entisöinnit SpeedFirestä sintrausohjelman ohjeiden mukaisesti.
- Sintrausohjelmaa 2 tai 3 suositellaan vain tukirakenteille (enintään3 yksikköä), FCZ-kruunuille, FCZ-silloille (enintään 3 kpl), inlay- ja onlay-täytteille sekä laminaateille.**
- Tämä tuote on erityisen läpikuultava, joten sen soveltuvuutta käyttöön on harkittava tarkasti, jos sillä on tarkoitus peittää metalliabutmenti tai hyvin tumma tai värjäytynyt hammas.
- Reunat on viimeisteltävä erittäin vinoiksi ja olkapääät pyöristettävä. Reunat ja kulmat on leikattava pyöristetyiksi, jotta tuotteeseen ei jää teräviä kulmia. Aksiaalisen pinnan kulman tulisi olla 5-15 astetta.
- Hampaita preparoitaessa on vältettävä seuraavia: syvät olkapääät, J-reunat, veitsireunat, sahalaiteiset reunat, viistämättömät abutmentit, leikkaaminen liian pieneksi, ohjausurat, retentiivisten aukkojen muodostuminen ja terävät kulmat.
- Säilytä proteesien valmistuksessa seuraava tuotepaksuus:

Paikka ja käyttöaihe	Seinämapaksuus
Etualueen kruunu tai silta	vähintään 0,8 mm
Laminaatti	vähintään 0,4 mm*
Taka-alueen kruunu tai silta	vähintään 1,0 mm
Inlay- tai onlay -täytteet	vähintään 1,0 mm

*0,4 mm tai enemmän tätä tuotetta koskee täysinä zirkoniumlaminaatteja. Valitse paksuudeksi vähintään 0,8 mm, jos tuotetta käytetään yhdessä posiliinin kanssa.

- Käytä seuraavia poikkileikkauksellisia alueita rakenteita varten, kun valmistat siltoja.

Paikka ja käyttöaihe	Rakenteen poikkileikkauksen pinta-ala
Etualueen 2 tai 3 yksikön sillat	vähintään 12 mm ²
Premolaari 2 tai 3 yksikön sillat	vähintään 16 mm ²

- Valitse paksuun restauraatioon tarkoitettua väriä kirkaampi sävy, sillä väri saattaa näyttää tummemmalta restauraation paksuuden vuoksi.
- Kun käytät sintrausuunia ensimmäisen kerran ja kun muutat sintrauksen olosuhteita, sintrauksen jälkeiset värit saattavat vaihdella. Sintraa etukäteen pieni pala Zirconiaa ja varmista väristä.

Käyttöön liittyviä varotoimia:

- Älä käytä kiekkoa, jos pakkauksesta otetussa tuotteessa on särö.
- Kuivajyrshintä on suositeltavaa. Märkäjyrshintäminen käyttö saattaa heikentää kiekon läpikuultavuutta.
- Jos huomaat restauraatioissa särön, älä käytä sitä.
- Edellä esitetty sintraussuositus on vain ohjeellinen. Asetuksia voi olla tarpeen muuttaa hieman uunin yksilöllisten ominaisuuksien mukaan.
- Kiekon jyrshintäminen aikana jyrshintälaikkaa on vietävä varovasti muovirengasta kohden, jotta kiekko ei irtoa. Jyrshi kiekko siten, että zirkoniumosa jää koskemaan muovirenkaan sisäpuolta 2 mm:n verran.
- Leikkaa muovirengas ja irrota se ennen koko kiekon sintrausta.
- Hävitä tämä tuote lääketieteellisenä jätteenä infektioiden ehkäisemiseksi.

Varastointi:

- Säilytä viileässä ja kuivassa. Suojaa tuotetta suoralta auringonvaltolta.
- Tuotteen säilytyslämpötila on 10-30°C (50-86°F).
- Älä ota kiekkoa pois pakkauksesta säilytyksen aikana.
- Kiekko särkyy herkästi ja sitä on käsiteltävä varoen.
- Tuote on säilytettävä asianmukaisessa paikassa, johon vain hammashoidon ammattilaisilla on pääsy.
- Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

[TAKUU]

Kuraray Noritake Dental Inc. vaihtaa kaikki virheelliseksi todetut tuotteet. Kuraray Noritake Dental Inc. ei ota vastuuta vahingoista tai vaurioista, jotka ovat joko suoraan tai epäsuoraan syntyneet yrityksen tuotteiden käytön tai virheellisen käytön johdosta. Ennen tuotteen käyttöönottoa käyttäjän on varmistettava, soveltuuko tuote siihen käyttötarkoitukseen, johon sitä aiotaan käyttää. Käyttäjä kantaa kaiken tuotteen käyttöön liittyvän riskin ja vastuun.

[HUOMAUTUS]

Ilmoita tämän tuotteen aiheuttamista vakavista tapahtumista jäljempänä mainitulle valmistajan toimivaltaiselle edustajalle ja käyttäjän/potilaan asuinmaan viranomaisille. "KATANA" ja "CERABIEN" ovat NORITAKE CO., LIMITED -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)



I. Introduktion

Denne brugsanvisning er for KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML er en forsintret zirkonia-disk, med en diameter på 98,5 mm, som indeholder en plastikring. Den er designet til alle de fræsesystemer, der anvender denne fællestype disk. (Med henblik på korrekt anvendelse henvises til fræsesystemets tekniske instruktioner.) KATANA Zirconia UTML leveres i 2 tykkelser (14 mm og 18 mm) og har 20 farvevariationer (A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML består af 4 graderede farvelag. KATANA Zirconia UTML anbefales til fremstilling af FCZ (fuld kontur zirkonia) restaureringer eller stel. Den generelle kliniske fordel ved dette produkt er, at det genopretter tandfunktionen for følgende TILSIGTEDE BRUG/ INDIKATIONER FOR BRUG.

II. TILSIGTEDE BRUG/ INDIKATIONER FOR BRUG

KATANA Zirconia anvendes til fremstilling af fuldkeramiske restaureringer (stel, FCZ-kroner, FCZ-broer, inlays, onlays og veneers).

[Tilsligtet bruger]

- Tandlæger (fremstilling af restaureringer ved stolen; klinisk arbejdsgang)
- Dentallaboratorieteknikere (fremstilling af restaureringer i dentallaboratoriet)

III. Sintringsprogram

Sintringsprogram 1

Temperatur	Programmeringshastighed	Holdetid
Stuetemperatur — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 timer
1550°C (2822°F) — Stuetemperatur	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Sintringsprogram 2

Temperatur	Programmeringshastighed	Holdetid
Stuetemperatur — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Stuetemperatur (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Restaureringerne kan fjernes ved 800°C (1472°F) eller derunder, alt afhængigt af omstændighederne.

Sintringsprogram 3

Temperatur	Programmeringshastighed	Holdetid
Stuetemperatur — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Stuetemperatur (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Restaureringerne kan fjernes ved 800°C (1472°F) eller derunder, alt afhængigt af omstændighederne.

IV. Komposition

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Enheder i parentes er masse %.

V. Type og klasse (ISO6872:2015)

Type:II/ Klasse:3

VI. Fysiske egenskaber

Termisk ekspansionskoefficient (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Brugsanvisning

- Tag disken ud af emballagen og kontrollér, at disken ikke har revner eller andre skader.
- Anbring disken i fræsemaskinen og påbegynd så fræseprocessen, idet den tekniske vejledning til fræsesystemet følges.
- Efter fræsningen fjernes restaureringen fra disken ved hjælp af en diamantspids eller lignende.
- Fræserester eller støv, som sidder på restaureringerne, kan fjernes med en svag luftstrøm.
- Anbring restaureringerne i den ildfaste bakke og placér dem i sintringsovn.
- Afhængigt af den anvendte sintringsovn's ydelse, bør ovennævnte sintringsplan anvendes (III. Sintringsprogram) inden sintring af restaureringer.
- Efter sintringen justeres restaureringerne om nødvendigt ved hjælp af en diamantspids.
- Kontrollér, at restaureringerne ikke har revner.
- 1 FCZ:
 - Glasurbrænding: Fremstil en højglansoverflade ved polering, specielt på kontaktområderne. Applicér derefter glasuren på alle overflader på sædvanlig vis.
- 2 Stel:
 - Opbyg det dentale porcelæn (CERABIEN ZR eller CZR PRESS LF) på stellerne, idet producentens tekniske vejledning følges. Slå varmeudvidelseskoefficienten vedrørende porcelænet op i producentens tekniske vejledning, så kompatibiliteten kan bekræftes.

VIII. Bemærkninger vedrørende håndtering

Kontraindikationer:

- Hvis patienten er overfølsom over for zirkonia eller andre af komponenterne, må dette produkt ikke anvendes.
- Anvend ikke dette produkt til fremstilling af 4+ledsbroer, ekstensionsbroer eller broer, der omfatter molarer.

Advarsel:

Hvis patienten eller tandlægen udviser overfølsomhedsreaktioner, som udslett, dermatitis etc., skal anvendelsen af produktet ophøre og en læge straks konsulteres.

Forsigtig:

- Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af malokklusion, sammenbidning eller bruksisme.
- Ved fræsning af disken eller skæring, slibning og polering af restaureringerne skal der anvendes en godkendt støvmaske samt udsugning med luftfilter, så lungerne beskyttes mod inhalering af støv.
- Ved fræsning af disken eller skæring, slibning og polering af restaureringerne skal der anvendes beskyttelsesbriller, så øjnene beskyttes mod støv. Hvis der kommer støv i øjnene, skal der øjeblikkeligt skylles med rigelige mængder vand og en læge konsulteres.
- Må ikke anvendes til andre formål end dentale restaureringer. Dette produkt er kun til dental anvendelse.
- Anvendelsen af dette produkt er udelukkende forbeholdt tandlæger.
- Bør ikke genstande, der er opvarmet i ovnen, med de bare hænder.
- Tag ikke restaureringerne ud af sintringsovn under høj temperatur, da chokafkølingen forårsager brud. Hvis der imidlertid anvendes en type ovn med automatisk åbning under sintringsprogram 2 eller 3, kan restaureringerne fjernes fra ovnen ved 800°C (1472°F) eller mindre. Når restaureringerne er fjernet fra ovnen, skal de anbringes på en bakke, der er fremstillet af keramiske fibre (for eksempel: Noritake Porcelain Mat) for at afkøle langsomt.
- Der kan være stor forskel mellem indstillingstemperaturen i programmet og temperaturen i selve ovnen, hvis ovnen anvendes til sintringsprogram 2 eller 3. Ovnen bør først anvendes, efter at det er kontrolleret hos producenten, at ovnen og den temperatur, der er anført i sintringsprogram 2 eller 3, er kompatibel. Hvis SpeedFire anvendes som sintringsovn, fjernes restaureringerne fra SpeedFire som anført i vejledningen for sintringsprogram.
- Sintringsprogram 2 eller 3 anbefales kun til stel (op til 3 led), FCZ-kroner, FCZ-broer (op til 3 led), inlays, onlays og veneers.**
- Dette produkt er særligt gennemskinneligt. Man bør derfor nøje overveje dets egnethed til dækning af den underliggende overflade, som for eksempel metalabutments, eller en meget mørk eller misfarvet tandpræparation.
- Randene bør præpareres med en dyb skrå kant og afrundede skuldre, med afrundede skærekanten og hjørner, så skarpe præparationskanter elimineres. Vinklen på den aksiale overflade bør være inden for et område på 5 til 15 grader.
- Ved præparation af tænder bør følgende undgås: dybe skuldre, J-formede rande, knivkanter, savtaktede rande, ikke-tilspidsede abutments, underskæring, føringsriller, dannelse af retentive huller og skarpe kanter.
- Overhold følgende tykkelse på produktet ved fremstilling af protetiske emner:

Sted og indikation	Vægttykkelse
Fortandskrone eller -bro	Mindst 0,8 mm
Facade	Mindst 0,4 mm*
Kindtandskrone eller -bro	Mindst 1,0 mm
Inlay eller onlay	Mindst 1,0 mm

*Mindst 0,4 mm af dette produkt er til veneers af 100 % zirkoniumdioxid. Hold en tykkelse på mindst 0,8 mm, hvis det anvendes i kombination med porcelænet.

- Anvend følgende konnektortværsnitsflader ved fremstilling af broer.

Sted og indikation	Konnektortværsnitsflade
Anterior 2- eller 3-ledsbroer	Mindst 12 mm ²
Præmolar 2- eller 3-ledsbroer	Mindst 16 mm ²

- Til en tyk restaurering skal der vælges en farve, som er lysere end den planlagte farve, da farven eventuelt virker mørkere alt efter restaureringens tykkelse.
- Når en sintringsovn anvendes for første gang, og en sintringsbetingelse ændres, kan farverne variere efter sintringen. Foretag først en sintring af et lille stykke zirkoniumdioxid og kontrollér farven.

Forsigtighedsadvarsler i forbindelse med anvendelsen:

- Brug ikke disken, hvis der konstateres revner, når den tages ud af emballagen.
- Tørfræsning anbefales. Hvis der anvendes vådfræsning, kan diskens gennemskinnelighed blive reduceret.
- Hvis der forekommer revner i restaureringerne, må disse ikke anvendes.
- Ovennævnte sintrings anbefalinger er kun retningslinjer. Visse justeringer kan være påkrævet, alt afhængigt af den pågældende ovn.
- Ved fræsning af disken bør der udvises forsigtighed, når fræsespiden kommer i nærheden af plastikringen, så det undgås, at disken løsner sig. Fræs disken på en sådan måde, at en zirkoniumdioxid-del bliver tilbage og har 2 mm kontakt til indersiden af plastikringen.
- Afskær og fjern plastikringen inden sintring af hele disken.
- For at undgå smittefare bør dette produkt bortskaffes som medicinsk affald.

Opbevaring:

- Opbevares på et tørt og køligt sted. Beskyt produktet mod direkte sollys.
- Produktet skal opbevares ved 10-30°C (50-86°F).
- Tag ikke disken ud af emballagen under opbevaringen.
- Disken er skrøbelig og skal under håndteringen behandles med omhu.
- Produktet skal opbevares på et forsvarligt sted, som kun tandlægepersonalet har adgang til.
- Produktet skal anvendes inden den udløbsdato, der fremgår af emballagen.

[GARANTI]

Kuraray Noritake Dental Inc. erstatter ethvert produkt, der beviseligt er defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. påtager sig intet ansvar for noget tab eller skader, det være sig direkte skader, følgeskader eller specielle skader, der er opstået ved appliceringen eller som følge af brugerens manglende kendskab til anvendelsen af disse produkter. Inden anvendelsen skal brugeren vurdere produktets egnethed til den pågældende opgave, ligesom brugeren skal påtage sig alle risici og et hvilket som helst ansvar i forbindelse hermed.

[BEMÆRKNING]


Hvis en alvorlig hændelse, som kan tilskrives dette produkt, opstår, skal dette meddeles producentens nedenstående repræsentant samt det lands respektive myndigheder, i hvilket brugeren/patienten bor.

"KATANA" og "CERABIEN" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
NORITAKE CO., LIMITED.

012 TI-013-DA 01/2025



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

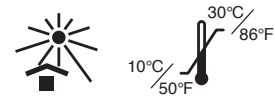

I. Introdução

As presentes Instruções de Utilização destinam-se ao produto KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). O produto KATANA Zirconia UTML é um disco de zircónia pré-sinterizado com 98,5 mm de diâmetro, que incorpora um anel de plástico. Fora concebido para todos os sistemas de fresagem que utilizam este tipo genérico de disco. (Consultar as instruções técnicas do sistema de fresagem para operar corretamente a máquina.) O produto KATANA Zirconia UTML está disponível em 2 espessuras diferentes (14 mm e 18 mm) e tem 20 variantes de tonalidade (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). O produto KATANA Zirconia UTML é composto por 4 camadas de tonalidades graduais. O produto KATANA Zirconia UTML é recomendado para utilização no fabrico de restaurações FCZ (Full Contour Zirconia) ou estruturas. O benefício clínico geral deste produto é restaurar a função dentária para a(s) UTILIZAÇÃO PREVISTA/ INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO seguinte(s).

II. UTILIZAÇÃO PREVISTA/ INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O produto KATANA Zirconia é utilizado para a confecção de próteses dentárias de cerâmica maciça (estruturas, coroas FCZ, pontes FCZ, inlays, onlays e facetas). [Utilizador previsto]

- Dentistas (fabrico de restaurações no consultório; fluxo de trabalho clínico)
- Técnicos de laboratório dentário (fabrico de restaurações no laboratório dentário)

III. Programa de sinterização

Programa de sinterização 1

Temperatura	Ritmo de programação	Tempo de espera
Temperatura ambiente — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 horas
1550°C (2822°F) — Temperatura ambiente	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Programa de sinterização 2

Temperatura	Ritmo de programação	Tempo de espera
Temperatura ambiente — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Temperatura ambiente (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*As restaurações podem ser removidas a 800°C (1472°F) ou a uma temperatura inferior, dependendo das circunstâncias.

Programa de sinterização 3

Temperatura	Ritmo de programação	Tempo de espera
Temperatura ambiente — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Temperatura ambiente (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*As restaurações podem ser removidas a 800°C (1472°F) ou a uma temperatura inferior, dependendo das circunstâncias.

IV. Composição

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

As unidades entre parênteses são % em massa.

V. Tipo e classe (ISO6872:2015)

Tipo:II/ Classe:3

VI. Propriedades físicas

Coefficiente de Expansão Térmica (25-500°C (77-932°F)): 9,7x10⁻⁶/K

VII. Instruções de utilização

- Retirar o disco da embalagem e confirmar que o disco não apresenta fissuras ou outros danos.
- Colocar o disco na fresadora; em seguida, iniciar o processo de fresagem seguindo as instruções técnicas do sistema de fresagem.
- Após a fresagem, remover as restaurações do disco com uma broca de diamante, etc.
- Os resíduos ou pó resultante do corte que aderiu às restaurações pode(m) ser removido(s) com um jato de ar suave.
- Colocar as restaurações no tabuleiro refratário e colocá-las no forno de sinterização.
- Dependendo do desempenho do forno de sinterização utilizado, rever os tempos de sinterização acima apresentados (III. Programa de sinterização) antes de sinterizar as restaurações.
- Após a sinterização, ajustar as restaurações com uma broca de diamante, conforme necessário.
- Confirmar que as restaurações não apresentam fissuras.
- 1 FCZ:

Cozedura de vidro: criar uma superfície de alto brilho, polindo, especialmente nas áreas de contacto, e aplicar depois o vidro a todas as superfícies da forma habitual.

- 2 Estruturas: efetuar a preparação de porcelana dentária (CERABIEN ZR ou CZR PRESS LF) nas estruturas, seguindo as instruções técnicas do fabricante. Verificar o coeficiente de expansão térmica da porcelana nas instruções técnicas do fabricante, a fim de confirmar a compatibilidade.

VIII. Observações sobre manuseamento

Contra-indicações:

- Este produto não deverá ser utilizado em pacientes hipersensíveis a zircónia ou a qualquer outro componente.
- Não utilizar este produto para construir pontes com 4 ou mais elementos, pontes cantilever ou pontes contendo molares.

Advertência:

Se o paciente ou o dentista demonstrar uma reação de hipersensibilidade, tal como erupção cutânea, dermatite, etc., interromper imediatamente a utilização do produto e procurar assistência médica.

Atenção:

- Este produto não deverá ser utilizado em pacientes com oclusão deficiente, contração dos maxilares ou bruxismo.
- Ao fresar o disco, ou cortar, retificar e polir as restaurações, utilizar uma máscara antipó aprovada e aspiração com filtro de ar para proteger os pulmões contra a inalação de pó.
- Ao fresar o disco, ou cortar, retificar e polir as restaurações, utilizar óculos de proteção para evitar que o pó entre em contacto com os olhos. Caso o pó entre para os olhos, lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico.
- Não utilizar para qualquer finalidade, exceto restauração dentária. Este produto destina-se apenas a aplicações dentárias.
- A utilização deste produto é autorizada apenas a dentistas.
- Não tocar nos artigos aquecidos pelo forno com as mãos desprotegidas.
- Não retirar as restaurações do forno de sinterização ainda a uma temperatura elevada, pois o arrefecimento brusco provoca fratura. Contudo, se for utilizado um forno do tipo elevatório com o programa de sinterização 2, as restaurações poderão ser removidas do forno a 800°C (1472°F) ou a uma temperatura inferior. Uma vez removidas do forno, as restaurações devem ser colocadas num tabuleiro de fibra cerâmica (por exemplo, Noritake Porcelain Mat) para arrefecerem lentamente.
- Poderá existir uma grande diferença entre a temperatura de processamento no programa e a temperatura real no forno ao utilizar o forno para o programa de sinterização 2 ou 3. Utilizar o forno após verificar junto do fabricante se o forno e a temperatura referida no programa de sinterização 2 ou 3 são compatíveis. Se como forno de sinterização for utilizado o SpeedFire, remover as restaurações do SpeedFire de acordo com as indicações do programa de sinterização.
- O programa de sinterização 2 ou 3 é recomendado apenas para estruturas (até 3 elementos), coroas FCZ, pontes FCZ (até 3 elementos), inlays, onlays e facetas.
- Este produto é particularmente translúcido; por conseguinte, deverá ser cuidadosamente analisada a sua adequação para dissimular uma superfície subjacente, como um pilar metálico ou uma preparação de dente muito escura ou descolorada.
- As margens deverão ser preparadas com um chanfro profundo e rebordos arredondados com arestas cortantes e cantos arredondados para eliminar cantos de preparação afiados. O ângulo da superfície axial deverá estar dentro do intervalo de valores de 5 a 15 graus.
- Ao preparar dentes, evitar o seguinte: rebordos profundos, margens J, arestas afiadas, margens serrilhadas, pilares não-cónicos, rebaixos, ranhuras guia, a formação de orifícios retentores e cantos afiados.
- Manter a seguinte espessura deste produto para o fabrico de próteses:

Situação e indicação	Espessura de parede
Coroa ou ponte de dente anterior	0,8 mm ou mais
Faceta	0,4 mm ou mais*
Coroa ou ponte de dente posterior	1,0 mm ou mais
Inlay ou onlay	1,0 mm ou mais

*Para facetas de zircónia pura é válida uma espessura igual ou superior a 0,4 mm. Manter a espessura de 0,8 mm ou superior, se for utilizada em associação com a porcelana.

- Utilizar as seguintes áreas de secção transversal para conectores ao fabricar pontes.

Situação e indicação	Secção transversal de conector
Pontes anteriores de 2 ou 3 elementos	12 mm ² ou mais
Pontes Pré-molar de 2 ou 3 elementos	16 mm ² ou mais

- Para uma restauração espessa escolha uma tonalidade mais viva que a cor pretendida, pois poderá ficar com um aspeto mais baço, dependendo da espessura das restaurações.
- Quando um forno de sinterização for utilizado pela primeira vez e forem alteradas as condições de sinterização, as cores poderão variar após a sinterização. Sinterizar previamente uma pequena peça de zircónia e confirmar a cor.

Precaução em associação com a utilização:

- Não utilizar o disco se for detetada uma fissura após remover o mesmo da embalagem.
- É recomendada a fresagem a seco. Se for utilizada fresagem húmida, a translucidez do disco poderá ficar reduzida.
- Não utilizar se for detetada uma fissura nas restaurações.
- As recomendações de sinterização acima servem apenas como orientação; poderão ser necessários alguns ajustes em cada forno específico.
- Ao fresar o disco, proceder com precaução ao aproximar a broca de fresagem do anel de plástico, a fim de evitar a separação do disco. Fresar o disco como se fosse deixada uma parte de zircónia em contacto com o lado interior do anel de plástico a 2 mm.
- Cortar e remover o anel de plástico, antes de sinterizar todo o disco.
- Eliminar este produto como resíduo médico, a fim de evitar infeções.

Armazenagem:

- Armazenar em local fresco e seco. Manter afastado de radiação solar direta.
- O produto deverá ser armazenado a 10-30°C (50-86°F).
- Não remover o disco da respetiva embalagem durante o armazenamento.
- O disco é frágil e requer cuidado ao ser manuseado.
- O produto deverá ser armazenado num local adequado e acessível apenas a profissionais de medicina dentária.
- O produto deverá ser utilizado até à data de validade indicada na embalagem.

[GARANTIA]

A Kuraray Noritake Dental Inc. providenciará a substituição de qualquer produto que se encontre comprovadamente defeituoso. A Kuraray Noritake Dental Inc. não aceita qualquer responsabilidade por perdas e danos, diretos, consequenciais ou especiais, resultantes da aplicação ou utilização, ou da incapacidade de utilização destes produtos.

Antes de utilizar os produtos, o utilizador deverá determinar a adequação dos produtos à finalidade de utilização pretendida, assumindo todo e qualquer risco e responsabilidade relacionados com a utilização dos mesmos.


[NOTA]

Caso ocorra um incidente grave atribuível a este produto, o mesmo deverá ser comunicado ao representante autorizado do fabricante abaixo referido e às autoridades reguladoras do país em que o utilizador/paciente reside.

"KATANA" e "CERABIEN" são marcas registadas ou marcas comerciais da NORITAKE CO., LIMITED.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

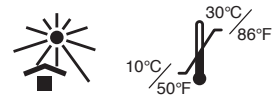

I. Εισαγωγή

Αυτές οι Οδηγίες Χρήσεως είναι για το KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). Το προϊόν KATANA Zirconia UTML είναι ένας δίσκος από προ-πυροσυσσωματωμένη ζirkονία διαμέτρου 98,5 mm, ο οποίος περιέχει έναν πλαστικό δακτύλιο. Έχει σχεδιαστεί για όλα τα συστήματα φρεζαρίσματος που χρησιμοποιούν αυτόν τον δίσκο γενικής χρήσης. (Παρακαλούμε ανατρέξτε στις τεχνικές οδηγίες του συστήματος φρεζαρίσματος για τη σωστή λειτουργία της μηχανής.) Το προϊόν KATANA Zirconia UTML έχει 2 διαθέσιμα πάχη (14 mm και 18 mm) και έχει 20 παραλλαγές απόχρωσης (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). Το προϊόν KATANA Zirconia UTML αποτελείται από 4 διαβαθμισμένα στρώματα απόχρωσης. Η χρήση του KATANA Zirconia UTML συνιστάται για την κατασκευή αποκαταστάσεων FCZ (Full Contour Zirconia) ή σκελετών. Το γενικό κλινικό όφελος αυτού του προϊόντος είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας των δοντιών για την ακόλουθη ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ/ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ.

II. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ/ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το KATANA Zirconia χρησιμοποιείται για την κατασκευή ολοκεραμικών αποκαταστάσεων (σκελετών, στεφανών FCZ, γεφυρών FCZ, ενθέτων, επενθέτων και όψεων (veneers)).

[Προβλεπόμενος χρήστης]

- Οδοντίατροι (κατασκευή αποκαταστάσεων στο οδοντιατρείο· κλινική ροή εργασίας)
- Τεχνολόγοι οδοντοτεχνικών εργαστηρίων (κατασκευή αποκαταστάσεων στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο)

III. Πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης

Πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 1

Θερμοκρασία	Ρυθμός προγραμματισμού	Χρονικό διάστημα
Θερμοκρασία δωματίου — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 ώρες
1550°C (2822°F) — Θερμοκρασία δωματίου	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 2

Θερμοκρασία	Ρυθμός προγραμματισμού	Χρονικό διάστημα
Θερμοκρασία δωματίου — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Θερμοκρασία δωματίου (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Οι αποκαταστάσεις μπορούν να αφαιρεθούν στους 800°C (1472°F) ή λιγότερο, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 3

Θερμοκρασία	Ρυθμός προγραμματισμού	Χρονικό διάστημα
Θερμοκρασία δωματίου — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Θερμοκρασία δωματίου (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Οι αποκαταστάσεις μπορούν να αφαιρεθούν στους 800°C (1472°F) ή λιγότερο, ανάλογα με τις περιστάσεις.

IV. Σύνθεση

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Οι μονάδες σε παρένθεση είναι μάζα %.

V. Τύπος και κατηγορία (ISO6872:2015)

Τύπος: II/ Κατηγορία: 3

VI. Φυσικές ιδιότητες

Συντελεστής θερμικής διαστολής (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Οδηγίες χρήσης

- Βγάλετε τον δίσκο από τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει ρωγμές ή άλλη ζημιά.
- Τοποθετήστε τον δίσκο στη φρέζα και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τη διαδικασία φρεζαρίσματος σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες για τα συστήματα φρεζαρίσματος.
- Μετά το φρεζάρισμα, αφαιρέστε τις αποκαταστάσεις από τον δίσκο με έναν διαμαντοτροχό κ.λπ.
- Τα αποκόμματα ή η σκόνη, που βρίσκονται επάνω στις αποκαταστάσεις, μπορούν να αφαιρεθούν με ένα απαλό ρεύμα αέρος.
- Βάλτε τις αποκαταστάσεις στο πυρίμαχο δισκίο υλικών καύσης και τοποθετήστε τις στον κλίβανο πυροσυσσωμάτωσης.
- Ανάλογα με την απόδοση του κλίβανου πυροσυσσωμάτωσης που χρησιμοποιείτε, τροποποιήστε το ανωτέρω πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης (III. Πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης) πριν την πυροσυσσωμάτωση των αποκαταστάσεων.
- Μετά την πυροσυσσωμάτωση προσαρμόστε τις αποκαταστάσεις, εάν χρειαστεί, με μια φρέζα διαμαντιού.

- Βεβαιωθείτε ότι οι αποκαταστάσεις δεν έχουν καθόλου ρωγμές.

(9)-1 FCZ:

Όπηση εφυάλωσης: Δημιουργήστε με στίλβωση μια επιφάνεια υψηλής στιλπνότητας, ειδικότερα στις περιοχές επαφής, εφαρμόστε μετά την εφυάλωση σε όλες τις επιφάνειες με τον τρόπο.

- 2 Σκελετοί: Εκτελέστε ανασύσταση της οδοντιατρικής πορσελάνης (CERABIEN ZR ή CZR PRESS LF) στους σκελετούς ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή. Ελέγξτε τον συντελεστή θερμικής διαστολής της πορσελάνης στις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή, για να επιβεβαιώσετε την συμβατότητα.

VIII. Παρατηρήσεις σχετικά με τον χειρισμό

Ανένδειξεις:

- Εάν ο ασθενής είναι υπερευαίσθητος στη ζirkονία ή σε οιαδήποτε άλλα συστατικά, τότε δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για να δημιουργήσετε γέφυρες με 4+ μονάδες, γέφυρες με πρόβολο ή γέφυρες που περιέχουν γομφίους.

Προειδοποίηση:

Εάν ο ασθενής ή ο οδοντίατρος παρουσιάσει αντίδραση υπερευαισθησίας, όπως εξάνθημα, δερματίτιδα κ.λπ., σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Προσοχή:

1. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση ύπαρξης συνθηκών συγκλεισιακής ανωμαλίας, τριβής ή βρυγμού οδόντων.
2. Κατά το φρεζάρισμα του δίσκου ή την κοπή, το τρόχισμα και τη στίλβωση των αποκαταστάσεων, χρησιμοποιήστε μια συγκεκριμένη μάσκα σκόνης και αναρροφήστε με φίλτρο αέρα για να προστατεύσετε τους πνεύμονές σας από την εισπνοή σκόνης.
3. Κατά το φρεζάρισμα του δίσκου ή την κοπή, το τρόχισμα και την στίλβωση των αποκαταστάσεων, χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας, για να αποτρέψετε την εισχώρηση σκόνης στα μάτια σας. Εάν μπει σκόνη στα μάτια σας, να τα ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
4. Να μην το χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό παρά μόνο για οδοντική αποκατάσταση. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οδοντιατρική εφαρμογή.
5. Το προϊόν αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από οδοντιάτρους.
6. Να μην αγγίζετε αντικείμενα που θερμάνθηκαν με τον κλίβανο με τα γυμνά σας χέρια.
7. Μη βγάλετε τις αποκαταστάσεις έξω από τον κλίβανο πυροσυσσωμάτωσης όταν έχει υψηλή θερμοκρασία, διότι η απότομη ψύξη θα προκαλέσει θραύση. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε έναν κλίβανο αυτόματου ανοίγματος στο πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 2 ή 3, μπορείτε να βγάλετε τις αποκαταστάσεις από τον κλίβανο στους 800°C (1472°F) ή λιγότερο. Όταν τις βγάλετε από τον κλίβανο, οι αποκαταστάσεις πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα δισκίο κατασκευασμένο από κεραμικές ίνες (για παράδειγμα: Noritake Porcelain Mat), για να ψύχονται αργά.
8. Όταν χρησιμοποιείτε τον κλίβανο για πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 2 ή 3, μπορεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην θερμοκρασία πήξης που αναφέρεται στο πρόγραμμα και στην θερμοκρασία στον πραγματικό κλίβανο. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τον κλίβανο αφού ελέγξετε με τον κατασκευαστή ότι ο κλίβανος ή η αναφερόμενη θερμοκρασία στο πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 2 ή 3 είναι συμβατά. Εάν χρησιμοποιείτε τον SpeedFire ως κλίβανο πυροσυσσωμάτωσης, αφαιρέστε τις αποκαταστάσεις από τον SpeedFire σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πυροσυσσωμάτωσης.
9. Το πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 2 ή 3 συνιστάται μόνο για σκελετούς (έως 3 μονάδες), στεφάνες FCZ, γέφυρες FCZ (έως 3 μονάδες), ένθετα, επένθετα και όψεις (veneers).
10. Αυτό το προϊόν είναι ιδιαίτερα ημιδιαφανές, γι' αυτό θα πρέπει κάποιος να εξετάζει προσεκτικά την καταλληλότητά του για τη χρήση όταν καλύπτεται η υποκείμενη επιφάνεια, όπως ένα μεταλλικό υποστρίγμα, ή μια πολύ σκούρα ή αποχρωματισμένη αποκατάσταση οδόντος.
11. Το όριο θα πρέπει να παρασκευάζονται με βαθιά λοξοτομή και στρογγυλεμένους βάθρα, με στρογγυλεμένα άκρα και γωνίες, για να εξαλειφθούν οι αιχμηρές γωνίες παρασκευής. Η γωνία της αξονικής επιφάνειας θα πρέπει να κυμαίνεται από 5 έως 15 μοίρες.
12. Να αποφεύγετε κατά την παρασκευή οδόντων τα εξής: βαθιά βάθρα, όρια J, κοφτερές άκρες, πριονωτά όρια, μη κωνικά στηρίγματα, υποκαφές, αυλακώσεις-οδηγούς, τη δημιουργία οπών συγκράτησης, και αιχμηρές γωνίες.
13. Να τηρείτε τα εξής πάχη αυτού του προϊόντος για την κατεργασία προσθετικών αποκαταστάσεων:

Θέση και ένδειξη	Πάχος τοιχώματος
Πρόσθια στεφάνη ή γέφυρα	0,8 mm ή περισσότερο
Όψη (veneer)	0,4 mm ή περισσότερο*
Οπίσθια στεφάνη ή γέφυρα	1,0 mm ή περισσότερο
Ένθετο ή επένθετο	1,0 mm ή περισσότερο

*0,4 mm ή περισσότερο από αυτό το προϊόν είναι για ολικές όψεις ζirkονίας. Να τηρείτε πάχος 0,8 mm ή περισσότερο, εάν χρησιμοποιείται για συνδυασμό με πορσελάνη.

14. Όταν κατασκευάζετε γέφυρες, να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες διατομές συνδέσμου για συνδετήρες.

Θέση και ένδειξη	Διατομές συνδέσμων
Πρόσθια 2 ή 3 γεφυρώματα	12 mm ² ή περισσότερο
Προγομφίου 2 ή 3 γεφυρώματα	16 mm ² ή περισσότερο

15. Επιλέξτε μια απόχρωση που είναι πιο ανοιχτόχρωμη από το προβλεπόμενο χρώμα για μια χοντρή αποκατάσταση, επειδή ίσως να φαίνεται πιο θαμπή, ανάλογα με το πάχος της αποκατάστασης.
16. Όταν χρησιμοποιείτε έναν κλίβανο πυροσυσσωμάτωσης για πρώτη φορά και αλλάζετε τις συνθήκες πυροσυσσωμάτωσης, τα χρώματα μπορεί μετά τη διαδικασία να διαφέρουν. Πυροσυσσωματώστε πριν ένα μικρό κομμάτι ζirkονίας και βεβαιωθείτε ότι το χρώμα είναι το ίδιο.

Προσοχή σε συνδυασμό με χρήση:

1. Μη χρησιμοποιείτε τον δίσκο, εάν έχει παρατηρηθεί ρωγμή μετά την αφαίρεσή του από τη συσκευασία.
2. Συνιστάται ξηρό φρεζάρισμα. Εάν χρησιμοποιείται υγρό φρεζάρισμα, η ημιδιαφάνεια του δίσκου μπορεί να μειωθεί.

- 3. Εάν βρείτε ράγισμα στις αποκαταστάσεις, μην το χρησιμοποιείτε.
- 4. Η παραπάνω σύσταση για την πυροσυσσωμάτωση είναι απλώς μια κατευθυντήρια γραμμή. Ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες ρυθμίσεις, που εξαρτάται από τον κάθε επιμέρους κλίβανο.
- 5. Κατά το φρεζάρισμα του δίσκου, να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε τον τροχό φρεζαρίσματος με τον πλαστικό δακτύλιο, για να αποτρέψετε την απόσπαση του δίσκου. Φρεζαρίστε τον δίσκο με τρόπο ώστε να παραμείνει ένα τμήμα από ζirkονία και το οποίο να έρχεται σε επαφή με την εσωτερική πλευρά του πλαστικού δακτυλίου στα 2 mm.
- 6. Κόψτε και αφαιρέστε τον πλαστικό δακτύλιο πριν από την πυροσυσσωμάτωση ολόκληρου του δίσκου.
- 7. Απορρίψτε αυτό το προϊόν ως ιατρικό απόβλητο για πρόληψη μόλυνσης.

Αποθήκευση:

- 1. Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.
- 2. Το υλικό πρέπει να αποθηκεύεται σε 10-30°C (50-86°F).
- 3. Μην αφαιρείτε τον δίσκο από τη συσκευασία του κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.
- 4. Ο δίσκος είναι εύθραυστος και απαιτεί προσοχή κατά τον χειρισμό.
- 5. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε κατάλληλο χώρο όπου μόνο ο οδοντίατρος μπορεί να έχει πρόσβαση.
- 6. Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην συσκευασία.

[ΕΓΓΥΗΣΗ]


Ένα προϊόν που είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό, αντικαθίσταται από την Kuraray Noritake Dental Inc. Η Kuraray Noritake Dental Inc. δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για άμεσες, επακόλουθες ή ειδικές απώλειες ή ζημιές, οι οποίες προέρχονται από την εφαρμογή, τη χρησιμοποίηση ή αντίστοιχα την αδυναμία χρησιμοποίησης αυτών των προϊόντων.
Πριν από τη χρήση, ο χρήστης πρέπει να ορίσει επακριβώς την καταλληλότητα των προϊόντων για την προοριζόμενη χρήση και ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη και την υποχρέωση για τη χρήση των προϊόντων αυτών.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ]

Εάν συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό λόγω αυτού του προϊόντος, να το αναφέρετε στον κατωτέρω εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή και στις ρυθμιστικές αρχές της χώρας, στην οποία διαμένει ο χρήστης/ασθενής. Τα «KATANA» και «CERABIEN» είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της NORITAKE CO., LIMITED.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

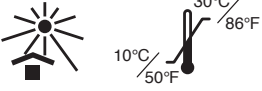

I. Giriş

Bu kullanım kılavuzu KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered) içindir. KATANA Zirconia UTML 98,5 mm çaplı, ön sinterlenmiş bir zirkonya diskler ve plastik bir halka içerir. Bunlar, jenerik disk tipleri ile birlikte kullanılan tüm frezeleme sistemleri için tasarlanmıştır. (Makinenin doğru çalıştırılmasına ilişkin bilgiler için lütfen frezeleme sisteminin teknik talimatlarına başvurun.) KATANA Zirconia UTML, 2 farklı kalınlıkta temin edilebilir: (14mm ve 18mm) ve 20 renk seçeneğiyle sunulur: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML, 4 derecelendirilmiş renk tabakasından oluşur. KATANA Zirconia UTML'nin, FCZ (Full Contour Zirconia) restorasyonlarının ve altyapılarının üretilmesinde kullanılması tavsiye edilir. Bu ürünün genel klinik faydası, aşağıdaki KULLANIM AMACI/ ENDİKASYONLAR için diş fonksiyonunu eski haline getirmesidir.

II. KULLANIM AMACI/ ENDİKASYONLAR

KATANA Zirconia, tam seramik restorasyonların (altyapılar, FCZ kuronlar, FCZ köprüler, inleyler, onleyler ve venerler) üretimi için geliştirilmiştir.

[Hedef kullanıcı]

- Diş hekimleri (Hasta başı restorasyon yapımı; Klinik iş akışı)

- Diş laboratuvarı teknisyenleri (diş laboratuvarında restorasyon yapımı)

III. Sinterleme Programı

Sinterleme Programı 1

Sıcaklık	Program Hızı	Tutma Süresi
Oda sıcaklığı — 1550°C (2822°F)	10°C/dk (18°F/dk)	—
1550°C (2822°F)	—	2 saat
1550°C (2822°F) — Oda sıcaklığı	-10°C/dk (-18°F/dk)	—

Sinterleme Programı 2

Sıcaklık	Program Hızı	Tutma Süresi
Oda sıcaklığı — 1400°C (2552°F)	50°C/dk (90°F/dk)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/dk (7°F/dk)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/dk (18°F/dk)	—
1560°C (2840°F)	—	16 dk
1560°C (2840°F) — Oda sıcaklığı (*)	-50°C/dk (-90°F/dk)	—

* Restorasyonlar, koşullara bağlı olarak, 800°C (1472°F) veya daha düşük ısılarla çıkarılabilir.

Sinterleme Programı 3

Sıcaklık	Program Hızı	Tutma Süresi
Oda sıcaklığı — 1450°C (2642°F)	120°C/dk (216°F/dk)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/dk (18°F/dk)	—
1600°C (2912°F)	—	20 dk
1600°C (2912°F) — Oda sıcaklığı (*)	-120°C/dk (-216°F/dk)	—

* Restorasyonlar, koşullara bağlı olarak, 800°C (1472°F) veya daha düşük ısılarla çıkarılabilir.

IV. Bileşim

ZrO₂ (%80-95), Y₂O₃ (%3-15)

Parantez içindeki birimler % küttedir.

V. Tip ve Sınıf (ISO6872:2015)

Tip: II/Sınıf:3

VI. Fiziksel Özellikler

Termal genleşme katsayısı (25-500 °C (77-932 °F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Kullanım Kılavuzu

- (1) Diski ambalajından çıkartın ve üzerinde çatlak veya herhangi başka bir hasarın bulunmadığını teyit edin.
- (2) Diski frezeleme makinesine yerleştirin; ardından, frezeleme sisteminin teknik talimatlarına uyararak, frezeleme sürecine başlayın.
- (3) Frezeleme işlemini tamamladıktan sonra restorasyonu bir elmas frez yardımıyla diskten çıkartınız.
- (4) Restorasyonlarda bulunan olası kesme kalıntıları veya toz, hafif hava akımı uygulayarak uzaklaştırılabilir.
- (5) Restorasyonları refraktör fırınlama kabı tepsisine koyunuz ve sinterleme fırınına yerleştiriniz.
- (6) Kullanılan sinterleme fırınının özelliklerini göz önünde tutarak, restorasyonların sinterleme işlemine geçmeden önce yukarıda yer verilen sinterleme tablosunu (III. Sinterleme Programı) gözden geçirin.
- (7) Sinterleme işlemini tamamladıktan sonra restorasyonları bir elmas frez yardımıyla gerekli şekilde düzeltiniz.
- (8) Restorasyonlarda herhangi bir kırığın bulunmadığından emin olunuz.
- (9)-1 FCZ:

Glazür Pişimi: Polisaj ile yüksek parlaklıkta yüzey elde edin, özellikle antagonist dentisyona denk gelen temas yüzeyleri için. Daha sonra restorasyonun tüm yüzeylerine glazürü bilindik şekilde uygulayın.

- (9)-2 Altyapılar: İlgili üreticinin teknik talimatlarını referans alarak altyapılara, dental porseleni (CERABIEN ZR veya CZR PRESS LF) şekillendirin. Uyumluluğu teyit etmek için, üreticinin teknik talimatlarında belirtilen porselenin termal genleşme katsayısını kontrol ediniz.

VIII. Kullanıma İlişkin Notlar

Kontrendikasyonlar:

1. Bu ürün, hastanın zirkonyaya veya ürünün herhangi diğer bir bileşenine karşı aşırı hassasiyeti bulunması durumunda kullanılmamalıdır.

2. Bu ürün, 4+ üyeli köprülerin, kanatlı köprülerin veya molar bölgelerdeki köprülerin hazırlanmasında kullanılmamalıdır.

Uyarı:

- Hastada veya dental uzmanda, kızamıklık veya dermatit vs. gibi herhangi bir aşırı hassasiyet seek medical attention immediately reaksiyonu görülmesi durumunda ürünün kullanımına derhal son verilip, tıbbi yardım alınmalıdır.

Dikkat:

1. Bu ürün malokluzyon, diş sıkma veya bruksizm gibi etkenlerin söz konusu olması durumunda kullanılmamalıdır.
2. Diskin frezelenmesi veya restorasyonun kesilmesi, taşlanması ve polisaj uygulanması sırasında tozun solunması sonucu akciğerlere ulaşmasını önlemek için, uygun bir toz maskesi ve hava filtreli bir vakum cihaz kullanınız.
3. Diskin frezelenmesi veya restorasyonun kesilmesi, taşlanması ve polisaj uygulanması sırasında gözünüze toz kaçmasını önlemek için, koruyucu gözlük takınız. Tozun gözünüze kaçması durumunda, gözlerinizi derhal bol su ile yıkayın ve bir hekime başvurun.
4. Dental restorasyonlar haricinde hiçbir amaç için kullanılmamalıdır. Bu ürün yalnız dental uygulamalar içindir.
5. Bu ürün yalnızca diş hekimleri ve diş teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
6. Fırın tarafından ısıtılmış parçalara çıplak elle dokunmayın.
7. Hızlı soğutma işlemine tabi tutulması kırılmaları yol açabileceğinden, sinterleme fırınının yüksek sıcaklıklarda çalıştırılması sırasında restorasyon çıkarılmamalıdır. Ancak, otomatik açılan tipte bir fırının sinterleme programı 2 veya 3 altında kullanılması durumunda, restorasyonlar 800°C (1472°F) veya daha düşük ısıda fırından çıkarılabilir. Fırından çıkarılan restorasyonlar, yavaşça soğumalarına izin verebilmek için, seramik lifli bir tablaya (örneğin: Noritake Porcelain Mat) yerleştirilmelidir.
8. Fırının sinterleme programı 2 veya 3 ile çalıştırılması sırasında program ayar sıcaklığı ile gerçek fırındaki sıcaklık arasında büyük farklılıklar görülebilir. Lütfen fırını kullanmadan önce üreticiye başvurun, fırının sinterleme programı 2 veya 3'de belirtilen sıcaklıklarda çalıştırılmaya uyumlu olduğunu teyit ettirin.
9. **Sinterleme programı 2 veya 3'nin yalnızca altyapılarda (3 üyeliye kadar), FCZ kuronlarda, FCZ köprülerde (3 üyeliye kadar), inleylerde, onleylerde ve venerlerde kullanılması tavsiye olunur.**
10. Bu ürün kısmen translüsenttir. Dolayısıyla, örn. metal dayanak veya koyu renkli ya da renklenme görülen diş preparasyonları gibi alta yatan yüzeylerin maskelenmesi için kullanılmadan önce ürünün uygun olup olmadığı dikkatlice değerlendirilmelidir.
11. Kenarların preparasyonu, derin oluk (chamfer) tipi frezlerle yapılmalıdır ve preparasyonda keskin kenarların bulunmaması için, keskin hatlara sahip omuzlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. Aksiyal yüzeyin açısı derecesi 5 ila 15 arasında olmalıdır.
12. Dişlerin preparasyonu sırasında şunlardan kaçınılmalıdır: derin omuzlar, "J" şeklinde kenarlar, bıçak sırtları, çıkıntılı kenarlar, konik olmayan dayanaklar, andırkatlar, kılavuz oluklar, retatif deliklerin oluşturulması ve keskin köşeler.
13. Bu ü:üne hazırlanacak protetik restorasyonlarda aşağıdaki kalınlıklara uyulmalıdır:

Lokasyon ve endikasyon	Duvar kalınlığı
Anterior kuron veya köprü	0,8 mm veya üstü
Vener	0,4 mm veya üstü*
Posterior kuron veya köprü	1,0 mm veya üstü
Inley veya Onley	1,0 mm veya üstü

* Ürün, tam zirkonyum oksit vener kaplamalar için kullanılacaksa, 0,4 mm veya üstü. Porselen ile kombine edilerek kullanılacaksa, kalınlık 0,8 mm veya üstü olmalıdır.

14. Köprü imalatında konnektörler için aşağıdaki kesit alanlarını kullanınız.

Lokasyon ve endikasyon	Konnektör en kesiti
2 veya 3 üyeli anterior köprüler	12 mm ² veya üstü
2 veya 3 üyeli premolar köprüler	16 mm ² veya üstü

15. Restorasyonun kalınlığına bağlı olarak daha soluk bir renk elde edilmesine neden olabileceğinden, kalın restorasyonlarda hedeflenen renkten bir ton daha açık olan bir renk seçilmelidir.
16. Bir sinterleme fırını ilk kez kullanılacaksa veya sinterleme koşullarının değişmesi durumunda renkler sinterleme sonrasında değişiklik gösterebilir. Rengin doğrulanabilmesi için, ufak bir parça zirkonyumu önceden sinterleyin.

Birlikte kullanıma ilişkin uyarılar:

1. Ambalajından çıkartılan diskte çatlak görülmesi halinde kullanmayın.
2. Kuru frezeleme tavsiye olunur. Islak frezeleme uygulanması halinde diskini yarı frezeleme altında düşme görülebilir.
3. Restorasyonda kırık bulunması durumunda, restorasyon kullanılmamalıdır.
4. Yukarıda yer alan sinterleme tavsiyesi yalnızca kılavuz niteliğindedir: kullanılan fırına bağlı olarak özel uyarlamalar yapmak gerekebilir.
5. Diskin yerinden çıkmasını önlemek için, disk frezelerken frezeleme çubuğunun plastik halkalı kısmına yaklaşılması sırasında bilhassa dikkat edilmelidir. Diski, 2 mm'de plastik halkanın iç tarafı ile temas eden zirkonya parçası bırakıncasına frezeleyin.
6. Diskin tamamını frezeledikten önce plastik halkayı kesiniz ve uzaklaştırınız.
7. Bu ürün, enfeksiyonları önlemek için, tıbbi atık olarak atılmalıdır.

Saklama:

1. Serin ve kuru bir ortamda saklayın. Doğrudan güneş ışığından koruyun.
2. Bu ürün, 10-30 °C (50-86 °F) arası sıcaklıklarda saklanmalıdır.
3. Disk, saklama boyunca ambalajından çıkartılmamalıdır.
4. Disk kırılabilir ve dikkatle kullanılmalıdır.
5. Bu ürün, yalnızca dental personelin ulaşabileceği, uygun bir yerde saklanmalıdır.
6. Ürün, ambalajda belirtilen son kullanım tarihinden önce kullanılmalıdır.

[GARANTİ]


Kuraray Noritake Dental Inc., ıspatlanabilir şekilde sorunlu olan her türlü ürününü yenisiyle değiştirir. Kuraray Noritake Dental Inc., ürünün kullanımı, uygulanması veya kullanmaması sonucu oluşan, doğrudan veya dolaylı olsun, herhangi kayıp veya hasar için, hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacının uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Kullanıcı, kullanımla ilgili her türlü riski ve sorumluluğu kendi üstlenir.

[NOT]

Ürünle bağlantılı ciddi bir durumun yaşanması halinde bu durum, üreticinin aşağıda belirtilen yetkili temsilcisine ve kullanıcının/hastanın ikamet ettiği ülkenin düzenleyici kurullarına bildirilmelidir.
"KATANA" ve "CERABIEN", NORITAKE CO., LIMITED.'nin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

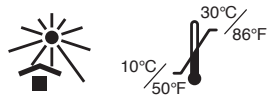

I. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja użycia obowiązuje dla KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML to wstępnie zsinterowany dysk z tlenku cyrkonu, o średnicy 98,5 mm, zawierający plastikowy pierścień. Jest przeznaczony do wszystkich systemów do frezowania wykorzystujących ten ogólny rodzaj dysku. (Należy zapoznać się z instrukcją techniczną posiadanego systemu do frezowania w celu zapewnienia prawidłowej obsługi systemu) KATANA Zirconia UTML ma 2 dostępne grubości: (14 mm i 18 mm) i ma 20 odcieni: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML składa się z 4 cieniowanych warstw odcieni. KATANA Zirconia UTML jest zalecany do stosowania do wykonywania uzupełnień protetycznych FCZ (ang. Full Contour Zirconia, pełnokonturowe uzupełnienia z tlenku cyrkonu) lub podbudów. Ogólna korzyść kliniczna ze stosowania tego produktu polega na przywróceniu czynności zęba w przypadku poniżej określonego PRZEZNACZENIA/ WSKAZAŃ DO STOSOWANIA.

II. PRZEZNACZENIA/ WSKAZAŃ DO STOSOWANIA

KATANA Zirconia stosuje się do wykonywania pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych (podbudów, koron FCZ, mostów FCZ, wkładów, nakładów i licówek). [Przewidziany użytkownik]

- Stomatolodzy (wykonywanie uzupełnień protetycznych przy fotelu dentystycznym; procedura kliniczna)
- Technicy dentystyczni (wykonywanie uzupełnień protetycznych w laboratorium protetycznym)

III. Program syntezyzacji

Program syntezyzacji 1

Temperatura	Zaprogramowana prędkość	Czas przetrzymania
Temp. pokojowa — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 godz.
1550°C (2822°F) — Temp. pokojowa	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Program syntezyzacji 2

Temperatura	Zaprogramowana prędkość	Czas przetrzymania
Temp. pokojowa — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Temp. pokojowa (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Uzupełnienia protetyczne można wyjąć w temperaturze 800°C (1472°F) lub mniej, w zależności od okoliczności.

Program syntezyzacji 3

Temperatura	Zaprogramowana prędkość	Czas przetrzymania
Temp. pokojowa — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Temp. pokojowa (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Uzupełnienia protetyczne można wyjąć w temperaturze 800°C (1472°F) lub mniej, w zależności od okoliczności.

IV. Skład

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Jednostki w nawiasach to % masowy.

V. Typ i klasa (ISO6872:2015)

Typ: II/ klasa: 3

VI. Właściwości fizyczne

Współczynnik rozszerzalności cieplnej (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Instrukcja stosowania

- Wyjąć dysk z opakowania i sprawdzić, czy nie ma pęknięć ani innych uszkodzeń.
- Umieścić dysk we frezarce, następnie rozpocząć proces frezowania, postępując zgodnie z instrukcją techniczną systemu do frezowania.
- Po frezowaniu wyjąć uzupełnienia protetyczne z dysku wiertłem diamentowym itp.
- Odpady po cięciu lub pył przyczepiony do uzupełnień protetycznych można usunąć delikatnym strumieniem powietrza.
- Włożyć uzupełnienia protetyczne do ogniotrwałej tacy do wyżarzania i umieścić je w piecu do syntezyzacji.
- Przed syntezyzacją uzupełnień protetycznych należy zapoznać się z przedstawionym powyżej programem syntezyzacji (III. Program syntezyzacji) i uwzględnić wydajność używanego pieca do syntezyzacji.
- Po syntezyzacji należy w miarę potrzeby dokonać korekt uzupełnień protetycznych paskiem diamentowym.
- Sprawdzić, czy uzupełnienia protetyczne nie mają pęknięć.
- 1 FCZ:

Wypalanie glazury: Uzyskać wysoki połysk powierzchni poprzez polerowanie, szczególnie w obszarach styżnych, następnie zwyczajnie nanieść glazurę na wszystkie powierzchnie.

- 2 Podbudowy: Odbudować porcelanę (CERABIEN ZR lub CZR PRESS LF) na podbudowach zgodnie z instrukcją techniczną dostarczoną przez producenta. Sprawdzić w dostarczonej przez producenta instrukcji technicznej współczynnik rozszerzalności cieplnej porcelany w celu potwierdzenia kompatybilności.

VIII. Uwagi dotyczące stosowania

Przeciwwskazanie:

- Nie można używać tego produktu, jeśli pacjent wykazuje nadwrażliwość na tlenek cyrkonu lub inne składniki.
- Nie stosować tego produktu do wykonywania mostów 4- i więcej punktowych, mostów wspornikowych lub mostów obejmujących trzonowce.

Ostrzeżenie:

W przypadku wystąpienia u pacjenta lub personelu stomatologicznego objawów reakcji nadwrażliwości, takich jak wysypka, zapalenie skóry itp., należy przerwać stosowanie produktu i zwrócić się natychmiast o pomoc lekarską.

Ostrożność:

- Nie stosować produktu w przypadku nieprawidłowego zgryzu, zaciskania zębów lub bruxizmu.
- Podczas frezowania dysku lub cięcia, szlifowania i polerowania uzupełnień protetycznych należy stosować zatwierdzoną maskę przeciwpyłową i ssak z filtrem powietrza w celu ochrony płuc przed wdychaniem pyłu.
- Podczas frezowania dysku lub cięcia, szlifowania i polerowania uzupełnień protetycznych należy stosować okulary ochronne, aby zapobiec przedostaniu się pyłu do oczu. Jeśli pył dostanie się do oczu, natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać produktu do innych celów niż stomatologiczne uzupełnienia protetyczne. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań stomatologicznych.
- Tylko stomatolodzy są upoważnieni do używania tego produktu.
- Nie dotykać gołymi rękami elementów podgrzewanych w piecu.
- Nie wyjmować uzupełnień protetycznych z pieca do syntezyzacji przy wysokiej temperaturze, ponieważ szybkie schłodzenie powoduje rozwarstwienie. Jednak w przypadku stosowania pieca z automatycznym otwarciem z programem syntezyzacji 2 lub 3 uzupełnienia protetyczne można wyjąć w temperaturze 800°C (1472°F) lub mniej. Po wyjęciu z pieca uzupełnienia protetyczne należy umieścić na tacy wykonanej z włókna ceramicznego (np.: Noritake Porcelain Mat) w celu wolnego schłodzenia.
- Może występować duża różnica między temperaturą zadaną w programie a temperaturą w rzeczywistym piecu podczas stosowania pieca do programu syntezyzacji 2 lub 3. Pieca należy używać po sprawdzeniu u producenta, że piec i temperatura wymienione w programie syntezyzacji 2 lub 3 są kompatybilne. W przypadku stosowania SpeedFire jako pieca do syntezyzacji należy wyjąć uzupełnienia protetyczne z pieca SpeedFire zgodnie z wytycznymi programu syntezyzacji.
- Program syntezyzacji 2 lub 3 jest zalecany tylko do podbudów (maks. 3-punktowych), koron FCZ, mostów FCZ (maks. 3-punktowych), wkładów, nakładów i licówek.
- Produkt ten jest szczególnie przezierny, dlatego należy dokładnie rozważyć jego przydatność do stosowania w przypadku maskowania leżącej poniżej powierzchni, takiej jak łącznik metalowy, lub bardzo ciemnej bądź przebarwionej preparacji zęba.
- Krawędzie należy opracować z głębokim stopniem typu chamfer i zaokrąglonymi stopniami w kształcie schodka, z brzegami tnącymi i rogami zaokrąglonymi w celu wyeliminowania ostrych rogów preparacji. Kąt powierzchni osiowej powinien wynosić od 5 do 15 stopni.
- Podczas opracowywania zęba należy unikać głębokich stopni w kształcie schodka, krawędzi J, ostrych brzegów, ząbkowanych krawędzi, niestozkowanych filarów, podcieni, rowków prowadzących, utworzenia otworów retencyjnych i ostrych rogów.
- Do wykonywania uzupełnień protetycznych należy zachować następującą grubość tego produktu:

Lokalizacja i wskazanie	Grubość ścianki
Korona lub most w odcinku przednim	0,8 mm lub więcej
Licówka	0,4 mm lub więcej*
Korona lub most w odcinku bocznym	1,0 mm lub więcej
Wkład lub nakład	1,0 mm lub więcej

*0,4 mm lub więcej tego produktu jest przewidziane dla pełnych licówek z tlenku cyrkonu. Należy zachować grubość 0,8 mm lub więcej w przypadku stosowania do połączenia z porcelaną.

- Podczas wykonywania mostów należy zastosować następujące pola przekroju poprzecznego dla łączników.

Lokalizacja i wskazanie	Przekrój poprzeczny łącznika
Mosty 2- lub 3-punktowe w odcinku przednim	12 mm ² lub więcej
Mosty 2- lub 3-punktowe w odcinku Ząb przedtrzonowy	16 mm ² lub więcej

- Wybrać kolor odcienia, który jest jaśniejszy od zamierzonego koloru dla grubych uzupełnień protetycznych, ponieważ może wyglądać bardziej matowo w zależności od grubości uzupełnień protetycznych.
- W przypadku pierwszego użycia pieca do syntezyzacji i zmiany warunków syntezyzacji kolory po syntezyzacji mogą się zmieniać. Najpierw należy poddać syntezyzacji mały kawałek tlenku cyrku i potwierdzić kolor.

Środki ostrożności podczas stosowania:

- Nie używać dysku w przypadku zauważenia pęknięcia po wyjęciu z opakowania.
- Zaleca się frezowanie na sucho. W przypadku zastosowania frezowania na mokro przezierność dysku może ulec zmniejszeniu.
- Nie używać w przypadku zauważenia pęknięcia w odbudowie.
- Powyższe zalecenia dotyczące syntezyzacji są wyłącznie wytyczną. W zależności od konkretnego pieca mogą być wymagane pewne korekty.
- Podczas frezowania dysku należy zachować ostrożność przy zbliżaniu się do wiertła frezującego z plastikowym pierścieniem, aby zapobiec odłączeniu się dysku. Dysk należy frezować w taki sposób, aby pozostawić część z tlenku cyrkonu w kontakcie na 2 mm z wewnętrzną stroną plastikowego pierścienia.
- Przed syntezyzacją całego dysku należy odciąć i usunąć plastikowy pierścień.
- Ten produkt należy usuwać jako odpad medyczny, aby zapobiec infekcjom.

Przechowywanie:

1. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
2. Produkt należy przechowywać w temperaturze 10-30°C (50-86°F).
3. Nie wyjmować dysku z opakowania podczas przechowywania.
4. Dysk jest delikatny i wymaga zachowania ostrożności podczas stosowania.
5. Produkt musi być przechowywany w odpowiednim miejscu, do którego dostęp ma tylko personel stomatologiczny.
6. Produkt należy zużyć przed upływem terminu ważności podanego na opakowaniu.

[GWARANCJA]

Firma Kuraray Noritake Dental Inc. wymieni każdy produkt, który okaże się wadliwy. Kuraray Noritake Dental Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody, bezpośrednie, wynikowe lub szczególne, wynikające z zastosowania lub użycia lub niemożności użycia tych produktów.

Przed użyciem użytkownik określa przydatność produktów do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelkie związane z tym ryzyko i odpowiedzialność.

[UWAGA]


W razie poważnego incydentu, który można przypisać temu produktowi, należy zgłosić go upoważnionemu przedstawicielowi producenta, wskazanemu poniżej, oraz organom regulacyjnym kraju, w którym mieszka użytkownik/pacjent.

„KATANA” i „CERABIEN” są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NORITAKE CO., LIMITED.

012 TI-013-PL 01/2025



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

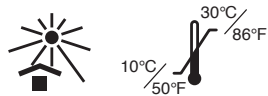

I. Introducere

Aceste instrucțiuni de utilizare se referă la KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML este un disc din oxid de zirconiu presinterizat, cu un diametru de 98,5 mm, care conține un inel din plastic. Acesta este destinat utilizării cu toate sistemele de frezare care folosesc acest tip general de disc. (Pentru utilizarea corectă a sistemului de frezare, consultați instrucțiunile tehnice ale acestuia.) KATANA Zirconia UTML este disponibil în 2 variante de grosime: (14mm și 18mm) și în 20 de nuanțe: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML prezintă 4 straturi de nuanțe gradate. KATANA Zirconia UTML este recomandat pentru utilizare în fabricarea restaurărilor FCZ (Full Contour Zirconia) sau a suporturilor metalice. Beneficiul clinic general al acestui produs este de a restabili funcția dentară pentru următoarele UTILIZĂRI PRECONIZATE/INDICAȚII DE UTILIZARE.

II. UTILIZĂRI PRECONIZATE/INDICAȚII DE UTILIZARE

KATANA Zirconia se utilizează pentru fabricarea restaurărilor din ceramică integrală (suporturi metalice, coroane FCZ, punți FCZ, inlay-uri, onlay-uri și fațete). [Utilizatorul preconizat]

- Medici stomatologi (fabricarea restaurărilor la în cabinetul stomatologic; flux de lucru clinic)
- Tehnicienii dentari (fabricarea restaurărilor în laboratorul dentar)

III. Program de sinterizare

Program de sinterizare 1

Temperatură	Rata de programare	Temp de menținere
Temp. ambiantă — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 ore
1550°C (2822°F) — Temp. ambiantă	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Program de sinterizare 2

Temperatură	Rata de programare	Temp de menținere
Temp. ambiantă — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Temp. ambiantă (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Restaurările pot fi scoase la 800°C (1472°F) sau mai puțin, în funcție de circumstanțe.

Program de sinterizare 3

Temperatură	Rata de programare	Temp de menținere
Temp. ambiantă — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Temp. ambiantă (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Restaurările pot fi scoase la 800°C (1472°F) sau mai puțin, în funcție de circumstanțe.

IV. Compoziție

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Unitățile dintre paranteze sunt procente de masă.

V. Tipul și clasa (ISO6872:2015)

Tip:II/ Clasa:3

VI. Proprietăți fizice

Coefficient de expansiune termică (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Instrucțiuni de utilizare

- (1) Scoateți discul din ambalaj și asigurați-vă că discul nu prezintă vreă crăpătură sau alt defect.
- (2) Introduceți discul în mașina de frezare, apoi începeți procesul de frezare respectând instrucțiunile tehnice ale sistemului de frezare.
- (3) După frezare, separați restaurările de disc cu o freză diamantată etc.
- (4) Reziuurile sau praful provenit din tăiere, rămase pe restaurări, pot fi îndepărtate cu un jet de aer ușor.
- (5) Așezați restaurările în tava din porțelan refractar și introduceți-le în cuptorul de sinterizare.
- (6) În funcție de performanța cuptorului de sinterizare utilizat, consultați programul de sinterizare prezentat mai sus (III. Program de sinterizare), înainte de sinterizarea restaurărilor.
- (7) După sinterizare, ajustați restaurările cu o freză diamantată după cum este necesar.
- (8) Asigurați-vă că restaurările nu prezintă crăpături.
- (9)-1 FCZ:
Arderea de glazurare: Creați o suprafață cu grad ridicat de luciu prin lustruire, în special în zonele de contact, apoi aplicați glazură pe toate suprafețele, prin metoda obișnuită.
- (9)-2 Suporturi metalice: Aplicați porțelanul dentar (CERABIEN ZR sau CZR PRESS LF) pe suporturile metalice, respectând instrucțiunile tehnice ale producătorului. Verificați coeficientul de expansiune termică a porțelanului specificat în instrucțiunile tehnice ale producătorului pentru a confirma compatibilitatea.

VIII. Observații privind manipularea

Contraindicație:

1. Dacă pacientul este hipersensibil la zirconiu sau la orice altă componentă, nu trebuie să utilizați acest produs.
2. Nu folosiți acest produs pentru a realiza punți cu mai mult de 4 elemente, punți în consolă sau punți care includ molari.

Avertisment:

Dacă pacientul sau personalul stomatologic prezintă o reacție de hipersensibilitate, cum ar fi erupții cutanate, dermatită etc., întrerupeți utilizarea produsului și solicitați imediat asistență medicală.

Atenție:

1. Acest produs nu trebuie utilizat în cazuri de malocluzie, înclăștare sau bruxism.
2. Atunci când efectuați frezarea discului sau tăierea, șlefuirea și lustruirea restaurărilor, folosiți o mască de praf adecvată și un aspirator cu filtru de aer, pentru a împiedica inhalarea prafului în plămâni.
3. Atunci când efectuați frezarea discului sau tăierea, șlefuirea și lustruirea restaurărilor, folosiți ochelari de siguranță, pentru a vă proteja ochii împotriva prafului. Dacă praful pătrunde în ochi, clătiți imediat cu apă din abundență și adresați-vă unui medic.
4. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât pentru restaurări dentare. Produsul este destinat exclusiv utilizării în domeniul stomatologic.
5. Utilizarea acestui produs este limitată la profesioniștii din domeniul stomatologiei.
6. Nu atingeți produsele încălzite în cuptor cu mâinile neprotejate.
7. Nu scoateți restaurările din cuptorul de sinterizare la temperaturi ridicate, deoarece răcirea bruscă provoacă ruperea. Cu toate acestea, dacă folosiți un cuptor cu deschidere automată cu programul de sinterizare 2 sau 3, restaurările pot fi scoase din cuptor la 800°C (1472°F) sau mai puțin. La scoaterea din cuptor, restaurările trebuie să fie așezate pe o tavă din fibră ceramică (de exemplu: Noritake Porcelain Mat), pentru a se răci lent.
8. Atunci când utilizați cuptorul pentru programul de sinterizare 2 sau 3, poate exista o diferență mare între temperatura setată în program și temperatura efectivă din cuptor. Utilizați cuptorul numai după ce producătorul vă confirmă că temperatura indicată în programul de sinterizare 2 sau 3 este compatibilă cu cuptorul respectiv. Dacă utilizați cuptorul de sinterizare SpeedFire, scoateți restaurările din SpeedFire conform indicațiilor programului de sinterizare.
9. **Programul de sinterizare 2 sau 3 este recomandat numai pentru suporturi metalice (până la 3 elemente), coroane FCZ, punți FCZ (până la 3 elemente), inlay-uri, onlay-uri și fațete.**
10. Acest produs are o transparență ridicată; de aceea, trebuie să luați în considerare cu atenție adecvarea acestuia pentru utilizare în scopul mascării suprafeței subiacente, precum un bont metalic sau un dinte preparat de culoare foarte închisă sau decolorat.
11. Marginita trebuie preparate cu margine oblică adâncă și praguri rotunjite, cu margini de tăiere și colțuri rotunjite, pentru ca preparația să nu prezinte colțuri ascuțite. Unghiul suprafeței axiale trebuie să se situeze între 5 și 15 grade.
12. La prepararea dinților, evitați următoarele: praguri adânci, margini în J, margini în lamă de cuțit, margini zimțate, bonturi neconice, retentivități, canaluri de ghidaj, formarea șanțurilor de retenție și colțuri ascuțite.
13. Respectați următoarele grosimi ale produsului pentru fabricarea protezelor:

Localizare & indicație	Grosimea peretelui
Coroane sau punți anterioare	0,8 mm sau mai mult
Fațete	0,4 mm sau mai mult*
Coroane sau punți posterioare	1,0 mm sau mai mult
Inlay-uri sau onlay-uri	1,0 mm sau mai mult

*O grosime a produsului de 0,4 mm sau mai mult este adecvată pentru realizarea fațetelor integrale din oxid de zirconiu. Grosimea trebuie să fie de 0,8 mm sau mai mult dacă se utilizează în combinație cu porțelanul.

14. Pentru conectorii punților, respectați următoarele arii ale secțiunii transversale.

Localizare & indicație	Secțiunea transversală a conectorului
Punți anterioare cu 2 sau 3 elemente	12 mm ² sau mai mult
Punți Premolar cu 2 sau 3 elemente	16 mm ² sau mai mult

15. În cazul unei restaurări de grosime mare, alegeți o nuanță care să fie mai deschisă decât culoarea vizată, deoarece nuanța se întuneacă în funcție de grosimea restaurării.
16. Atunci când utilizați pentru prima dată un cuptor de sinterizare și schimbați un parametru al sinterizării, culorile obținute după sinterizare pot varia. Sinterizați în prealabil un eșantion mic de Zirconia și confirmați culoarea.

Atenție în timpul utilizării:

1. Nu utilizați discul dacă observați că prezintă o crăpătură atunci când îl scoateți din ambalaj.
 2. Se recomandă frezarea uscată. Dacă folosiți frezarea umedă, transparența discului poate fi redusă.
 3. Dacă restaurarea prezintă crăpături, nu o folosiți.
 4. Recomandarea de mai sus privind sinterizarea este doar orientativă; pot fi necesare ajustări în funcție de cuptorul utilizat.
 5. La frezarea discului, procedați cu atenție atunci când apropiați freza de inelul din plastic, pentru a preveni detașarea discului. Când frezați discul, lăsați pe partea interioară a inelului din plastic un strat de oxid de zirconiu de 2 mm.
 6. Tăiați și îndepărtați inelul din plastic înainte de a sinteriza întregul disc.
 7. Pentru a preveni infecția, eliminați acest produs ca deșeu medical.
- Depozitare:**
1. A se păstra într-un loc uscat și răcoros. A se păstra ferit de lumina directă a soarelui.
 2. Produsul trebuie păstrat la temperaturi de 10-30°C (50-86°F).
 3. Nu păstrați discul scos din ambalaj.
 4. Discul este fragil și trebuie manipulat cu atenție.
 5. Produsul trebuie depozitat într-un loc adecvat, la care are acces numai personalul stomatologic.
 6. Produsul trebuie utilizat până la data de expirare indicată pe ambalaj.

[GARANȚIE]


Kuraray Noritake Dental Inc. va înlocui orice produs care se dovedește a fi defect. Kuraray Noritake Dental Inc. nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună directă, de consecință sau specială, care rezultă din aplicarea sau utilizarea respectiv imposibilitatea de a utiliza aceste produse.Înainte de folosire, utilizatorul va determina adecvarea produselor pentru utilizarea preconizată și utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderea în legătură cu acestea.

[OBSERVAȚIE]

Dacă apare un incident grav care poate fi atribuit acestui produs, raportați-l reprezentantului autorizat al producătorului, menționat mai jos, și autorităților de reglementare din țara de rezidență a utilizatorului/pacientului.
„KATANA” și „CERABIEN” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale NORITAKE CO., LIMITED.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

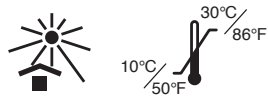

I. UVOD

Ove Upute za upotrebu služe za KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML je pedsinteriran cirkonijev disk promjera 98,5 mm, koji sadrži plastični prsten. Namijenjen je za sve sustave glodanja uz korištenje tog generičkog diska. (Za ispravno rukovanje uređajem molimo pogledajte tehničke upute svog sustava za glodanje.) KATANA Zirconia UTML ima na raspolaganju 2 debljine: (14 mm i 18 mm) i 20 varijanti boja: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML se sastoji od 4 sloja s gradacijom boja. KATANA Zirconia UTML preporučuje se za izradu cirkonijevih restauracija ili osnova punog oblika. Opća klinička korist ovog proizvoda je restauriranje funkcije zuba za sljedeće NAMJENE/INDIKACIJE ZA UPORABU.

II. NAMJENE/INDIKACIJE ZA UPORABU

KATANA Zirconia služi za izradu restauracija od pune keramike (okviri, cirkonijeve krunice i mostovi punog oblika, inleji, onleje i ljuskice).

[Predviđeni korisnik]

- Stomatolozi (izrada restauracija u ordinaciji; klinički tijek rada)
- Zubotehničari (izrada restauracija u stomatološkom laboratoriju)

III. Program za sinteriranje

Program za sinteriranje 1

Temperatura	Brzina	Vrijeme zadržavanja
sobna temp. — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 sata
1550°C (2822°F) — sobna temp.	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Program za sinteriranje 2

Temperatura	Brzina	Vrijeme zadržavanja
sobna temp. — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — sobna temp. (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Restauracije se mogu ukloniti na 800°C (1472°F) ili nižoj temperaturi ovisno o okolnostima.

Program za sinteriranje 3

Temperatura	Brzina	Vrijeme zadržavanja
sobna temp. — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — sobna temp. (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Restauracije se mogu ukloniti na 800°C (1472°F) ili nižoj temperaturi ovisno o okolnostima.

IV. Sastav

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Jedinice u zagradama su mase u %.

V. Tip i klasa (ISO6872:2015)

Tip:II/ klasa:3

VI. Fizikalna svojstva

Koeficijent toplinske ekspanzije (25-500°C (77-932°F)): 9,7·10⁻⁶/K

VII. Smjernice za upotrebu

- Izvadite disk iz pakiranja i potvrdite da disk nema napuklinu ili drugo oštećenje.
- Stavite disk u glodalicu, potom započnite proces glodanja sljedeći tehničke upute sustava za glodanje.
- Nakon glodanja uklonite restauraciju s diska primjenom dijamantnog svrdla, itd.
- Ostaci rezanja ili prašina koji ostanu pričvršćeni na restauracijama mogu se ukloniti nježnom strujom zraka.
- Položite restauracije u vatrostatnu kazetu i stavite ih u peć za sinteriranje.
- Ovisno o izvedbi primijenjene peći za sinteriranje pregledajte prethodno prikazan program za sinteriranje (III. Program za sinteriranje) prije sinteriranja restauracija.
- Nakon sinteriranja prilagodite restauracije dijamantnom šipkom prema potrebi.
- Potvrdite da restauracije nemaju napukline.
- 1 Cirkonij punog oblika:
 - pečenje glazure: poliranjem izradite visoko sjajnu površinu, naročito na kontaktnim područjima, potom primijenite glazuru na svim površinama na uobičajen način.
- 2 osnove: nadogradite dentalnu keramiku (CERABIEN ZR ili CZR PRESS LF) na osnovama sljedeći proizvođačeve tehničke upute. Provjerite koeficijent toplinske ekspanzije keramike u proizvođačevim tehničkim uputama radi potvrđivanja kompatibilnosti.

VIII. Napomene o rukovanju

Kontraindikacije:

- Ovaj proizvod se ne smije koristiti ako je pacijent preosjetljiv na cirkonij ili bilo koje druge komponente.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod za izradu mostova s 4 ili više elemenata, konzolnih mostova ili mostova koji sadrže kutnjake.

Upozorenje:

Ako pacijent ili stomatološki radnik pokaže reakciju preosjetljivosti, poput osipa, dermatitisa, itd., prekinite primjenu proizvoda i odmah potražite medicinsku pomoć.

Oprez:

- Ovaj se proizvod NE smije koristiti ako su prisutna stanja malokluzije, škrgutanja ili bruksizma.
- Pri glodanju diska ili rezanju, brušenju i poliranju restauracija koristite odobrene maske protiv prašine i vakuum sa zračnim filterom da zaštitite svoja pluća od udisanja prašine.
- Pri glodanju diska ili rezanju, brušenju i poliranju restauracija koristite zaštitne naočale da spriječite ulazak prašine u oči. Ako Vam prašina dospije u oči, odmah ih isperite obilnom količinom vode i posavjetujte se s liječnikom.
- Nemojte koristiti proizvod u bilo koje druge svrhe osim za dentalnu restauraciju. Proizvod služi samo za stomatološku primjenu.
- Upotreba proizvoda ograničena je na licencirane stomatologe.
- Nemojte golim rukama dodirivati predmete zagrijane u peći.
- Nemojte vaditi restauracije iz peći za sinteriranje tijekom visoke temperature, jer brzo hlađenje uzrokuje lomljenje. Međutim, ako se tip peći s automatskim otvaranjem koristi uz program za sinteriranje 2 ili 3, restauracije se mogu izvaditi iz peći na 800°C (1472°F) ili manje. Nakon uklanjanja iz peći restauracije se moraju staviti na podlogu proizvedenu od keramičkih vlakana (na primjer: Noritake Porcelain Mat) radi sporog hlađenja.
- Može se javiti velika razlika između zadane temperature u programu i stvarne temperature u peći kada se peć koristi uz program za sinteriranje 2 ili 3. Molimo koristite peć tek nakon što ste s proizvođačem provjerili da su peć i temperatura navedena u programu za sinteriranje 2 ili 3 kompatibilni. Ako se SpeedFire koristi kao peć za sinteriranje, izvadite restauracije iz SpeedFire peći sukladno smjernicama programa za sinteriranje.
- Program za sinteriranje 2 ili 3 preporučuje se samo za osnove (do 3 elementa), cirkonijeve krunice punog oblika, cirkonijeve mostove punog oblika (do 3 elementa), inleje, onleje i ljuskice.**
- Ovaj proizvod je naročito translucentan; stoga je potrebno pažljivo razmotriti njegovu prikladnost za upotrebu kada se maskira temeljna površina poput metalnog upornjaka ili vrlo tamne ili diskolorirane preparacije zuba.
- Rubove je potrebno izraditi s dubokim žljebom i zaobljenim ramenima, sa zaobljenim rezanim rubovima i kutovima kako bi se eliminirali oštri kutovi. Kut aksijalne površine treba biti unutar raspona od 5 do 15 stupnjeva.
- Kod preparacije zubi izbjegavajte sljedeće: duboka ramena, rubove u obliku slova J ili oštrice noža, nazubljene rubove, nesužene upornjake, podminirana mjesta, vodeće ure, stvaranje retencijskih udubina i oštre kutove.
- Pridržavajte se sljedeće debljine proizvoda za izradu protetika:

Lokacija i indikacija	Debljina stijenke
prednja krunica ili most	0,8 mm ili više
ljuskica	0,4 mm ili više*
stražnja krunica ili most	1,0 mm ili više
inleji ili onleji	1,0 mm ili više

*0,4 mm ili više ovog proizvoda služi za ljuskice od punog cirkonija. Neka debljina bude 0,8 mm ili više ako se proizvod koristi za kombinaciju s keramikom.

- Koristite sljedeće površine poprečnih presjeka za konektore kod izrade mostova.

Lokacija i indikacija	Poprečni presjek konektora
prednji 2-člani ili 3-člani mostovi	12 mm ² ili više
premolar 2-člani ili 3-člani mostovi	16 mm ² ili više

- Za restauraciju veće debljine odaberite boju koja je svjetlija od željene, jer konačna boja može izgledati tamnija ovisno o debljini restauracije.
- Pri prvom korištenju peći za sinteriranje i pri promijenjenim uvjetima sinteriranja boje nakon sinteriranja mogu varirati. Provedite prethodno sinteriranje na malom komadu proizvoda Zirconia i potvrdite boju.

Oprez pri upotrebi:

- Nemojte koristiti disk ako na njemu nakon vađenja iz pakiranja primijetite napuklinu.
- Preporučuje se suho glodanje. Ako se koristi mokro glodanje, može se smanjiti translucencija diska.
- Ako pronađete napuklinu u restauracijama, nemojte ih koristiti.
- Prethodno navedena preporuka za sinteriranje služi samo kao smjernica, mogu biti potrebne prilagodbe ovisno o svakoj pojedinačnoj peći.
- Pri glodanju diska budite oprezni kad se plastičnim prstenom približavate svrdlu za glodanje kako biste spriječili odvajanje diska. Izgledajte disk tako da dio cirkonija u kontaktu s unutarnjom stranom plastičnog prstena ima veličinu od 2 mm.
- Odrežite i uklonite plastični prsten prije sinteriranja cijelog diska.
- Zbrinite ovaj proizvod kao medicinski otpad kako biste spriječili infekciju.

Pohrana:

- Čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Proizvod se treba pohraniti na temperaturi od 10-30°C (50-86°F).
- Nemojte vaditi disk iz pakiranja tijekom pohrane.
- Disk je krhak i neophodno je pažljivo rukovanje.
- Proizvod se mora čuvati na odgovarajućem mjestu dostupnom samo stomatološkom osoblju.
- Proizvod se mora upotrijebiti do isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

[JAMSTVO]


Kuraray Noritake Dental Inc. zamijenit će svaki proizvod za koji se dokaže da je bio oštećen. Kuraray Noritake Dental Inc. ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu, izravne, posljedične ili specijalne naravi, proizasle iz primjene ili korištenja ili nemogućnosti korištenja tih proizvoda. Prije korištenja korisnik će odrediti prikladnost tih proizvoda za namijenjenu primjenu i korisnik preuzima sav rizik i odgovornost koji su na bilo koji način povezani s tim.

[NAPOMENA]

Ako dode do ozbiljnog incidenta koji se može pripisati primjeni ovog proizvoda, prijavite ga ovlaštenom zastupniku proizvođača navedenom u nastavku i regulatornim tijelima države u kojoj boravi korisnik/pacijent. „KATANA“ i „CERABIEN“ su registrirane robne marke ili robne marke tvrtke NORITAKE CO., LIMITED.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

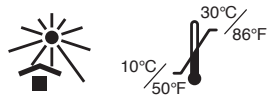

I. Bevezetés

Ezek a használati utasítások a KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered) termékre vonatkoznak. A KATANA Zirconia UTML egy 98,5 mm átmérőjű, előszinterezett cirkónium korong, amely egy műanyag gyűrűt tartalmaz. Ez úgy lett megtervezve, hogy minden olyan marórendszerhez megfelelő legyen, amely ezzel az általános típusú koronggal működik. (Kérjük, tekintse át a marórendszerhez mellékelt műszaki utasításokat a gép megfelelő működtetése érdekében.) A KATANA Zirconia UTML termék 2 különböző vastagságban (14 mm és 18 mm), illetve 20 különböző árnyalatban (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW) kapható. A KATANA Zirconia UTML 4 színátmenetes árnyalatrétegből áll. A KATANA Zirconia UTML használatá full-kontúr cirkónium (FCZ) restaurációk és vázak készítéséhez ajánlott. A termék általános klinikai előnye a fogak funkciójának helyreállítása az alábbi RENDELTETÉS/ JAVALLATOK esetén.

II. RENDELTETÉS/ JAVALLATOK

A KATANA Zirconia teljes kerámia restaurációk (vázak, FCZ koronák, FCZ hidak, inlay-ek, onlay-ek és héjak) készítéséhez használható.

[Rendeltetés szerinti felhasználás]

- Fogorvosok (restaurációk készítése a fogorvosi szék mellett; klinikai munkafolyamat)
- Fogászati laboratóriumi technikusok (restaurációk készítése a fogászati laboratóriumban)

III. Szinterező program

1. szinterező program

Hőmérséklet	Programozási sebesség	Tartási idő
Szobahőmérséklet — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 óra
1550°C (2822°F) — Szobahőmérséklet	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

2. szinterező program

Hőmérséklet	Programozási sebesség	Tartási idő
Szobahőmérséklet — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Szobahőmérséklet (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*A restaurációk igény szerint eltávolíthatók 800°C (1472°F)-os vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten az adott körülményektől függően.

3. szinterező program

Hőmérséklet	Programozási sebesség	Tartási idő
Szobahőmérséklet — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Szobahőmérséklet (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*A restaurációk igény szerint eltávolíthatók 800°C (1472°F)-os vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten az adott körülményektől függően.

IV. Összetétel

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

A zárójelben lévő mértékegységek tömeg%-ok.

V. Típus és osztály (ISO6872:2015)

Típus:II/ Osztály:3

VI. Fizikai tulajdonságok

Hőtágulási együttható (25-500°C (77-932°F)): 9,7x10⁻⁶/K

VII. Használati útmutató

- (1) Vegye ki a korongot a csomagolásából, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta repedés vagy egyéb sérülés.
- (2) Helyezze a korongot a marógépbe, majd kezdje el a marási folyamatot a marórendszerek műszaki utasításai szerint.
- (3) A marást követően távolítsa el a restaurációkat a korongból egy gyémánt fúróval vagy hasonló eszközzel.
- (4) A vágáskor keletkező hulladék és por, amely hozzátapad a restaurációkhoz, enyhé légárammal távolítható el.
- (5) Helyezze a restaurációkat a tűzálló porcelánégető tálcába, és tegye be őket a szinterező kályhába.
- (6) Az adott szinterező kályha teljesítményétől függően tekintse át a szinterezés fentiekben ismertetett menetét (III. szinterező program), mielőtt elkezdené szinterezni a restaurációkat.
- (7) A szinterezést követően igazítsa ki igény szerint a restaurációkat egy gyémánt fúróval.
- (8) Győződjön meg arról, hogy a restaurációkon nincsenek repedések.
- (9)-1 FCZ:
Glazúrozás: Hozzon létre magasfényű felületet polírozással, különösen az érintkező részeknél, majd vigye fel a glazúrt az összes felületre a szokásos módon.
- (9)-2 Vázak: Rétegezze fel a fogászati porcelánt (CERABIEN ZR vagy CZR PRESS LF) a vázakra a gyártó műszaki utasításai szerint. Tekintse meg a porcelán hőtágulási együtthatóját a gyártó műszaki utasításaiban, és győződjön meg a kompatibilitásról.

VIII. Kezeléssel kapcsolatos megjegyzések

Ellenjavallatok:

1. Ha a páciens túlzottan érzékeny a cirkóniumra vagy bármely más összetevőre, akkor ne használja a terméket.
2. Ne használja a terméket négynél több tagból álló hidak, tartóhidak vagy őrlőfogakra kiterjedő hidak készítéséhez.

Figyelmeztetés:

Ha a páciensnél vagy a fogorvosnál túlérzékenységi reakció, például kiütés, dermatitisz stb. lép fel, hagyja abba a termék alkalmazását, és azonnal forduljon orvoshoz.

Figyelem:

1. Ez a termék nem használható, amennyiben helytelen fogsorilleszkedés, fogcsikorgatás vagy bruxizmus körülményei állnak fenn.
2. A korong marásakor, vagy a restaurációk vágásakor, csiszolásakor és polírozásakor használjon légszűrővel ellátott, jóváhagyott pormaszkot és porszívót, hogy megvédje a tüdejét a portól.
3. A korong marásakor, vagy a restaurációk vágásakor, csiszolásakor és polírozásakor használjon védőszemüveget, hogy a por ne kerüljön a szemébe. Ha a por mégis a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bőséges mennyiségű vízzel, és forduljon orvoshoz.
4. A fogászati helyreállítás kivételével ne használja a terméket más célokra. Ez a termék kizárólag fogászati alkalmazásokhoz használható.
5. A terméket kizárólag fogorvosok használhatják.
6. Ne érjen hozzá pusztá kézzel a kályhában felhevített tételekhez.
7. Ne vegye ki a restaurációkat a szinterező kályhából magas hőmérsékleten, mivel a kioltás törést okoz. Ha automatikusan nyíló kályhát használ a 2. vagy 3. szinterező programhoz, a restaurációkat 800°C-os (1472°F-os) vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten eltávolíthatja a kályhából. A kályhából való eltávolításakor helyezze a restaurációkat egy kerámiaszállból készült tálcára (pl. Noritake Porcelain Mat), és várja meg, amíg lehűlnék.
8. Amikor a kályhát a 2. vagy 3. szinterező programhoz használja, a programhoz beállított hőmérséklet és a kályha tényleges hőmérséklete nagytokú eltérést mutathat. Kérjük, hogy a kályha használata előtt érdeklődjön meg a gyártónál, hogy a kályha és a 2. vagy 3. szinterező programnál feltüntetett hőmérséklet kompatibilis-e egymással. Ha SpeedFire készüléket használ szinterekályháként, akkor a restaurációkat a szinterező program útmutatásai szerint távolítsa el a SpeedFire készülékből.
9. Program za sinteriranje 2 ili 3 preporučuje se samo za osnove (do 3 elementa), cirkonijeve krunice punog oblika, cirkonijeve mostove punog oblika (do 3 elementa), inleje, onleje i ljuskice.
10. Ez a termék különösen áttetsző, ezért alaposan meg kell fontolni, hogy alkalmas-e az alatta lévő felület, például egy fém csomakészítésére, vagy egy nagyon sötét vagy elszíneződött fog előkészítésére.
11. A széleket mély legömbölyített vállal és lekerekített vállakkal kell kialakítani, amelyhez a széleket és a sarkokat lekerekítve kell levágni, hogy ne legyenek éles preparációs sarkok. Az axiális felület szögének az 5 és 15 fok közötti tartományban kell lennie.
12. A fogak előkészítésekor kerülje el a következőket: mély vállak, J alakú szélek, éles peremek, csipkézett szélek, nem kúpos csomók, aláménos részek, vezető barázdák, retenciós üregek kialakítása, valamint éles sarkok.
13. Fogpótlások készítésekor tartsa be a termék alábbi vastagságait:

Hely és javallat	Falvastagság
Elülső korona vagy híd	0,8 mm vagy több
Héj	0,4 mm vagy több*
Hátsó korona vagy híd	1,0 mm vagy több
Inlay vagy onlay	1,0 mm vagy több

*A termékből 0,4 mm vagy ennél több a teljes cirkónium héjakhoz használható. Porcelánnal való kombinálás esetén ügyeljen arra, hogy a vastagság 0,8 mm vagy ennél több legyen.

14. Hidak készítésekor használja az alábbi keresztmetszeti területeket a konnectorokhoz.

Hely és javallat	Konnector keresztmetszete
2 vagy 3 tagból álló elülső hidak	12 mm ² vagy több
2 vagy 3 tagból álló Premolaris hidak	16 mm ² vagy több

15. Ha vastag restaurációt szeretne készíteni, válasszon olyan árnyalatú színt, amely világosabb, mint az elérni kívánt végeredmény, mivel a vastagságtól függően a restauráció sötétebb lehet.
16. Ha először használ szinterező kályhát, és megváltoztatja az egyik szinterezési körülményt, előfordulhat, hogy a színek a szinterezést követően eltérőek lesznek. Először szinterezzen egy kis darab cirkóniumot, és ellenőrizze a színt.

A használatlalt kapcsolatos óvintézkedések:

1. Ne használja a korongot, ha a csomagolásból való kivétele után repedést észlel rajta.
 2. Száraz marás alkalmazása ajánlott. Nedves marás alkalmazása esetén a korong áttetszősége csökkenhet.
 3. Ha a restaurációkon repedést talál, ne használja őket.
 4. A fenti szinterezési ajánlások csak iránymutatásként szolgálnak; az adott kályhától függően szükség lehet bizonyos módosításokra.
 5. A korong marása közben körültekintően közelítse meg a műanyag gyűrűt a fúróval, nehogy a korong leváljon. A korong marásakor hagyja meg 2 mm-en a cirkóniumnak azt a részét, amely a műanyag gyűrű belső oldalával érintkezik.
 6. A teljes korong szinterezése előtt vágja le és távolítsa el a műanyag gyűrűt.
 7. A fertőzés elkerülése érdekében a terméket egészségügyi hulladékként ártalmatlanítsa.
- Tárolás:**
1. A terméket száraz, hűvös helyen tárolja. Tartsa távol a közvetlen napfénytől.
 2. A terméket 10-30°C (50-86°F)-os hőmérsékleten kell tárolni.
 3. Tárolás közben a korong ne legyen kivéve a csomagolásából.
 4. A korong törékeny, ezért körültekintően kell kezelni.
 5. A terméket olyan helyen tárolja, ahol csak fogászati szakemberek férhetnek hozzá.
 6. A terméket a csomagoláson feltüntetett lejárati idő előtt fel kell használni.


[GARANCIA]

A Kuraray Noritake Dental Inc. a bizonyítottan hibás termékeket kicseréli. A Kuraray Noritake Dental Inc. nem vállal felelősséget a termékek alkalmazásából, használatából vagy a használatukra való képtelenségből eredő közvetlen, következményes vagy speciális veszteségektől és károktól.

A felhasználó a használat előtt köteles megállapítani a termékeknek a szándékolt használatra való alkalmasságát, és a felhasználó vállalja az ezzel kapcsolatos összes kockázatot és felelősséget.

[MEGJEGYZÉS]

Ha a termékkel kapcsolatosan súlyos esemény következik be, jelentse a gyártó alább található hivatalos képviselőének és a felhasználó/beteg lakóhelye szerinti ország szabályozó hatóságainak.
A „KATANA” és a „CERABIEN” a NORITAKE CO., LIMITED védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

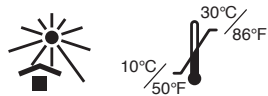

I. Uvod

Ta navodila za uporabo veljajo za izdelek KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML je disk iz pedsintranega cirkonija s premerom 98,5 mm, ki vsebuje plastični obroček. Zasnovan je za vse rezkalne sisteme, ki uporabljajo ta generični disk. (Informacije glede pravilnega delovanja stroja najdete v tehničnih navodilih za vaš rezkalni sistem.) KATANA Zirconia UTML je na voljo v 2 debelinah: (14mm in 18mm) in 20 odenkih: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). Izdelek KATANA Zirconia UTML sestavljajo 4 sloji prelivajočih odenkov. Izdelek KATANA Zirconia UTML je priporočljiv za uporabo pri izdelovanju restavracij ali ogrodi, ki so v celoti iz cirkonija (FCZ – Full Contour Zirconia). Splošna klinična korist tega izdelka je obnovitev funkcije zoba pri naslednji PREDVIDENI UPORABI/ INDIKACIJAH ZA UPORABO.

II. PREDVIDENI UPORABI/ INDIKACIJAH ZA UPORABO

KATANA Zirconia se uporablja pri izdelovanju restavracij, ki so v celoti keramične (ogrodja, krone FCZ, mostički FCZ, inleji, onleji in zobne luske).
[Predvideni uporabnik]
- Zobozdravniki (izdelava restavracij ob stolu; klinični potek dela)
- Zobotehnik v zobnem laboratoriju (izdelava restavracij v zobotehničnem laboratoriju)

III. Program sintranja

Program sintranja 1

Temperatura	Programska stopnja	Čas zadrževanja
Sobna temp. — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 uri
1550°C (2822°F) — Sobna temp.	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Program sintranja 2

Temperatura	Programska stopnja	Čas zadrževanja
Sobna temp. — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Sobna temp. (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Restavracije lahko odstranite pri 800°C (1472°F) ali manj, odvisno od okoliščin.

Program sintranja 3

Temperatura	Programska stopnja	Čas zadrževanja
Sobna temp. — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Sobna temp. (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Restavracije lahko odstranite pri 800°C (1472°F) ali manj, odvisno od okoliščin.

IV. Sestava

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Enote v oklepajih so masni %.

V. Vrsta in razred (ISO6872:2015)

Vrsta:II/ Razred:3

VI. Fizične lastnosti

Koeficient termalne ekspanzije (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Navodila za uporabo

- (1) Disk vzemite iz embalaže in se prepričajte, da ni razpokan ali kako drugače poškodovan.
- (2) Disk postavite v rezkalni stroj, nato začnite postopek rezkanja ter pri tem upoštevajte tehnična navodila za rezkalni sistem.
- (3) Restavracije po rezkanju vzemite iz diska z diamantnim svedrom itd.
- (4) Ostanke, ki nastanejo pri rezanju, ali prah, ki se prime na restavracije, lahko odstranite z nežnim curkom zraka.
- (5) Restavracije postavite na ognjevarni pladenj in jih vstavite v peč za sintranje.
- (6) Glede na učinkovitost uporabljene peči za sintranje si oglejte zgoraj prikazani program sintranja (III. Program sintranja), preden se lotite sintranja restavracij.
- (7) Po sintranju restavracije po potrebi prilagodite z diamantnim svedrom.
- (8) Prepričajte se, da restavracije niso razpokane.
- (9)-1 FCZ:

Glazurna peka: Na površini, zlasti na stičnih površinah, ustvarite visok sijaj s poliranjem, nato na vse površine nanesite glazuro na običajen način.

- (9)-2 Ogrodja: Dentalni porcelan (CERABIEN ZR ali CZR PRESS LF) na ogrodja namestite po tehničnih navodilih proizvajalca. Preverite koeficient termalne ekspanzije porcelana v tehničnih navodilih proizvajalca, da potrdite združljivost.

VIII. Opombe glede uporabe

Kontraindikacije:

1. Če je pacient preobčutljiv na cirkonij ali kater koli drugo sestavino, tega izdelka ne smete uporabiti.
2. Tega izdelka ne uporabljajte za izdelavo mostičkov s 4+ enotami, nosilnih mostičkov ali mostičkov, ki zajemajo kočnike.

Opozorilo:

Če se pri pacientu ali zobozdravniku pojavi preobčutljivostna reakcija, kot je izpuščaj, dermatitis ipd., prenehajte z uporabo izdelka in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pozor:

1. Tega izdelka ne uporabljajte v primeru nepravilnega ugriza, škrtanja z zobmi ali bruksizma.
2. Pri rezkanju diska ali rezanju, brušenju in poliranju restavracij uporabljajte odobreno zaščitno masko in sesalnik z zračnim filtrom, da preprečite vdihavanje prahu.
3. Pri rezkanju diska ali rezanju, brušenju in poliranju restavracij uporabljajte zaščitna očala, da preprečite, da bi vam prah prišel v oči. Če vam prah zaide v oči, oči takoj sperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.
4. Uporabljajte samo za dentalne restavracije in ne za druge namene. Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zobozdravstvu.
5. Uporaba tega izdelka je omejena na zobozdravstvene strokovnjake.
6. Elementov, ki so se segrevali v peči, se ne dotikajte z golimi rokami.
7. Restavracij ne vzemite iz peči za sintranje, ko je temperatura visoka, saj hitra ohladitev povzroča zlome. Če pa uporabljate tip peči s samodejnim odpiranjem v programu sintranja 2 ali 3, lahko restavracije iz peči vzamete pri temperaturi 800°C (1472°F) ali manj. Ko restavracije vzamete iz peči, jih je treba postaviti na pladenj iz keramičnih vlaken (na primer: Noritake Porcelain Mat), da se počasi ohladijo.
8. Med programsko nastavljenno temperaturo in dejansko temperaturo v peči je lahko velika razlika, kadar peč uporabljate v programu sintranja 2 ali 3. Peč uporabite potem, ko pri proizvajalcu preverite, ali sta peč in temperatura, navedena pri programu sintranja 2 ali 3, združljivi. Če za sintranje uporabljate peč SpeedFire, restavracije odstranite iz peči SpeedFire v skladu z navodili programa sintranja.
9. **Program sintranja 2 ali 3 se priporoča le za ogrodja (do 3 enote), krone FCZ, mostičke FCZ (do 3 enote), inleje, onleje in zobne luske.**
10. Ta izdelek je delno prosojen, zato je treba dobro razmisliti o primernosti njegove uporabe, kadar je treba zakriti spodnjo površino, kot je kovinski nazidek, ali zelo temno oziroma razbarvano zobno preparacijo.
11. Robove je treba pripraviti s svedrom, ki ima obliko globoke zaobljene fisure, da odpravite ostre robove preparacije. Kot aksialne površine mora biti v razponu med 5 in 15 stopinjami.
12. Pri pripravi zoba se izogibajte naslednjemu: globoke stopnice, J-robovi, ostri robovi, nazobčani robovi, nezloženi nazidki, vdolbine, utori, oblikovanje jamic in ostrih kotov.
13. Pri izdelavi protez upoštevajte naslednje debeline izdelka:

Lokacija in indikacija	Debelina stene
Anteriorna krona ali mostiček	0,8 mm ali več
Zobna luska	0,4 mm ali več*
Posteriorna krona ali mostiček	1,0 mm ali več
Inleji ali onleji	1,0 mm ali več

*0,4 mm ali več tega izdelka, če gre za zobne luske, v celoti izdelane iz cirkonija. Uporabite debelino 0,8 mm ali več, če se uporablja v kombinaciji s porcelanom.

14. Pri izdelavi mostičkov uporabite naslednje premere spojev.

Lokacija in indikacija	Premers spoja
Anteriorni mostički z 2 ali 3 enotami	12 mm ² ali več
Premolar mostički z 2 ali 3 enotami	16 mm ² ali več

15. Pri debeli restavraciji izberite odenek, ki je svetlejši od ciljne barve, saj bo lahko videti temnejši, kar je odvisno od debeline restavracije.
16. Če peč za sintranje uporabljate prvič in spreminjate pogoje sintranja, bodo barve po sintranju lahko drugačne. Najprej sintrajte majhen kos cirkonija in potrdite barvo.

Svarila v povezavi z uporabo:

1. Diska ne uporabite, če po odstranitvi diska iz embalaže opazite razpoko.
2. Priporočljivo je suho rezkanje. Če se uporablja mokro rezkanje, je lahko prosojnost diska zmanjšana.
3. Če v restavraciji opazite razpoko, restavracije ne uporabite.
4. Zgornja priporočila glede sintranja veljajo zgolj kot smernice; pri vsaki posamezni peči bodo morda potrebne nekatere prilagoditve.
5. Pri rezkanju diska bodite previdni, ko se rezkalnemu svedru približate s plastičnim obročkom, da preprečite, da bi se disk snel. Rezčajte disk, kot da bi se del iz cirkonija dotikal notranje strani plastičnega obročka na 2 mm.
6. Odrežite in odstranite plastični obroček, preden posintrate celoten disk.
7. Izdelek odstranite kot medicinski odpadke, da preprečite okužbo.

Shranjevanje:

1. Hranite na hladnem in suhem mestu. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
2. Izdelek shranjujte pri temperaturi 10-30°C (50-86°F).
3. Diska v obdobju shranjevanja ne vzemite iz embalaže.
4. Disk je krhek in zahteva posebno previdnost pri uporabi.
5. Izdelek je treba shranjevati na ustreznem mestu, do katerega ima dostop le zobozdravstveno osebje.
6. Izdelek je treba porabiti do datuma izteka roka uporabnosti, navedenega na embalaži.

[GARANCIJA]

Kuraray Noritake Dental Inc. bo zamenjal kakršen koli izdelek, za katerega se izkaže, da je okvarjen. Kuraray Noritake Dental Inc. ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, neposredno, posledično ali posebno, ki nastane zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabljanja teh izdelkov.

Pred uporabo mora uporabnik ugotoviti, ali so izdelki primerni za predvideno uporabo, uporabnik tudi prevzema vsakršna tveganja in odgovornosti v zvezi s temi izdelki.

[OPOMBA]

Če pride do resnega zapleta, ki ga je mogoče pripisati temu izdelku, o tem obvestite pooblaščenega predstavnika proizvajalca, ki je naveden spodaj, in regulativni organ države, v kateri živi uporabnik/pacient.

»KATANA« in »CERABIEN« so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe NORITAKE CO., LIMITED.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)



I. Úvod

Tento návod k použití je určen pro produkt KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML je předsintrovaný zirkonový disk o průměru 98,5 mm, který obsahuje plastový kroužek. Je určen pro všechny frézovací systémy, které používají tento typ disku. (Informace o správném používání stroje najdete v technických pokynech ke svému frézovacímu systému.) KATANA Zirconia UTML je k dispozici ve 2 možných tloušťkách: (14 mm a 18 mm) a má 20 variant odstínů: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML se skládá ze 4 gradovaných vrstev odstínů. KATANA Zirconia UTML se doporučuje pro použití u náhrad typu FCZ (plně konturovaný zirkon) nebo u můstků. Obecným klinickým přínosem tohoto přípravku je obnovení funkce zubu pro následující URČENÉ POUŽITÍ/ INDIKACE PRO POUŽITÍ.

II. URČENÉ POUŽITÍ/ INDIKACE PRO POUŽITÍ

KATANA Zirconia se používá ke zhotovení celokeramických náhrad (můstků, korunek typu FCZ, můstků typu FCZ, inlejí, onlejí a fazet).

[Určený uživatel]

- Zubní lékaři (zhotovování náhrad v ordinaci; klinický pracovní postup)

- Zubní technici v laboratoři (zhotovování náhrad v zubní laboratoři)

III. Program sintrování

Program sintrování 1

Teplota	Naprogramovaná rychlost	Doba působení
Pokožová teplota — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 hodiny
1550°C (2822°F) — Pokožová teplota	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Program sintrování 2

Teplota	Naprogramovaná rychlost	Doba působení
Pokožová teplota — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Pokožová teplota (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Náhrady lze odstraňovat při 800°C (1472°F) nebo méně, v závislosti na okolnostech.

Program sintrování 3

Teplota	Naprogramovaná rychlost	Doba působení
Pokožová teplota — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Pokožová teplota (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Náhrady lze odstraňovat při 800°C (1472°F) nebo méně, v závislosti na okolnostech.

IV. Složení

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Jednotky v závorkách jsou hmotnostní %.

V. Typ a třída (ISO6872:2015)

Typ:II/ Třída:3

VI. Fyzikální vlastnosti

Koeficient tepelné roztažnosti (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Pokyny pro použití

- Vyjmete disk z obalu a zkontrolujte, zda nevykazuje praskliny nebo jiná poškození.
- Umístěte disk do frézovacího stroje a poté spusťte proces frézování podle technických pokynů k frézovacímu systému.
- Po frézování odstraňte náhrady z disku pomocí diamantového vrtáčku apod.
- Prach nebo jiný odpad vzniklý při řezání, který ulpí na náhradách, lze odstranit jemným proudem vzduchu.
- Umístěte náhrady do žáruvzdorného pouzdra a vložte je do sintrovací pece.
- V závislosti na výkonu sintrovací pece nejprve zkontrolujte a zvažte výše uvedený plán sintrování (III. Program sintrování), a teprve poté přistupte k vlastnímu sintrování náhrad.
- Po sintrování upravte tvar náhrad pomocí diamantového vrtáčku podle potřeby.
- Zkontrolujte, zda na náhradách nejsou praskliny.
- 1 FCZ:

Glazování: Vyleštěte povrch do vysokého lesku, zejména na kontaktních plochách, poté naneste glazuru na všechny povrchy obvyklým způsobem.

- 2 Můstky: Navrstvěte dentální porcelán (CERABIEN ZR nebo CZR PRESS LF) na můstky podle technických pokynů výrobce. Zkontrolujte koeficient tepelné roztažnosti porcelánu podle technických pokynů výrobce a ujistěte se, že je kompatibilní.

VIII. Poznámky k manipulaci

Kontraindikace:

- V případě přecitlivělosti pacienta na zirkon nebo jiné složky se tento produkt nesmí používat.
- Nepoužívejte tento produkt k výrobě můstků o 4 a více členech, samonosných můstků nebo můstků s moláry.

Varování:

Pokud se u pacientů nebo u zubního lékaře projeví reakce z přecitlivělosti, jako například vyrážka, dermatitida atd., přestaňte produkt používat a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění:

- Tento produkt by se neměl používat v případě malokluze, zatínání zubů nebo bruxismu.
- Při frézování disku nebo řezání, broušení a leštění náhrad používejte schválenou protiprachovou masku a odsávání se vzduchovým filtrem na ochranu plic před vdechováním prachu.
- Při frézování disku nebo řezání, broušení a leštění náhrad používejte ochranné brýle, aby se vám prach nedostal do očí. Pokud se vám prach dostane do očí, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a poradte se s lékařem.
- Nepoužívejte k žádným jiným účelům než ke zhotovování stomatologických náhrad. Tento produkt je určen pouze ke stomatologickému použití.
- S produktem směji pracovat výhradně zubní lékaři.
- Nedotýkejte se předmětů v sintrovací peci holými rukama.
- Nevyíjíte náhrady ze sintrovací pece při vysoké teplotě, protože mohou v důsledku náhlého zchlazení prasknout. Pokud se však používá typ pece s automatickým otevíráním v sintrovacím programu 2 nebo 3, lze náhrady vyjmout z pece při teplotě 800°C (1472°F) nebo nižší. Po vyjmutí z pece je nutno náhrady vložit do podnosu vyrobeného z keramických vláken (například: Noritake Porcelain Mat) a nechat je pozvolna vychladnout.
- Mohou se vyskytnout velké rozdíly mezi teplotou vytvrzování v programu a teplotou v reálné peci, pokud se používá pec pro sintrovací program 2 nebo 3. Pec použijte teprve poté, co se u výrobce ujistíte, že pec je kompatibilní s teplotou uvedenou pro sintrovací program 2 nebo 3. Pokud se jako sintrovací pec používá SpeedFire, vyjměte náhrady z pece SpeedFire podle pokynů uvedených v sintrovacím programu.
- Sintrovací program 2 nebo 3 je doporučen pouze pro můstky (až 3členné), korunky typu FCZ, můstky typu FCZ (až 3členné), inleje, onleje a fazety.**
- Tento produkt je obzvláště translucenční, proto je třeba pečlivě zvážit jeho vhodnost pro použití, pokud je zapotřebí maskovat povrch pod ním, jako je např. kovový abutment nebo velmi tmavý či barevně odlišný preparovaný zub.
- Krkové oblasti připravte s hlubokým zkosením nebo zaobleným schůdkem, ostré hrany a rohy zaoblete, aby se eliminovaly ostré rohy preparace. Úhel osově roviny by měl být v rozmezí od 5 do 15 stupňů.
- Při preparaci zubů se vyvarujte hlubokých schůdků, krčkových oblastí ve tvaru J, ostrých hran, zubatých hran, nezakosených abutmentů, podsekřivín, vodicích drážek, tvorby retenčních důlků a ostrých rohů.
- Při výrobě protéz dodržujte následující tloušťky tohoto produktu:

Umístění a indikace	Tloušťka stěny
Anteriorní korunka nebo můstek	0,8 mm nebo více
Fazeta	0,4 mm nebo více*
Posteriorní korunka nebo můstek	1,0 mm nebo více
Inlej nebo onlej	1,0 mm nebo více

*0,4 mm nebo více platí u tohoto produktu pro celozirkonové fazety. Pokud používáte produkt v kombinaci s porcelánem, ponechte tloušťku 0,8 mm nebo více.

- Při výrobě můstků použijte následující průřezové části spojů.

Umístění a indikace	Průřez spoje
Anteriorní 2- nebo 3členné můstky	12 mm ² nebo více
Premolár 2- nebo 3členné můstky	16 mm ² nebo více

- Vyberte takovou barvu odstínu, která je světlejší než plánovaná barva celé náhrady, protože při větší tloušťce náhrady může působit matnějším dojmem.
- Když používáte sintrovací pec poprvé nebo změňte podmínky sintrování, mohou se barvy po sintrování změnit. Nejprve podrobně sintrování malý kousek materiálu Zirconia a zkontrolujte jeho barvu.

Upozornění v souvislosti s používáním:

- Disk nepoužívejte, pokud po jeho vyjmutí z balení objevíte prasklinu.
- Doporučuje se frézování nasucho. Při vlhkém frézování se může snížit translucence disku.
- Pokud objevíte na náhradách prasklinu, nepoužívejte je.
- Výše uvedené parametry sintrování jsou pouze doporučené; v závislosti na každé jednotlivé peci může být nutné je upravit.
- Při frézování disku buďte opatrní, když se přibližujete s frézkou k plastovému kroužku, aby nedošlo k oddělení disku. Při frézování disku ponechte asi 2 mm zirkonové části v kontaktu s vnitřní stranou plastového kroužku.
- Před sintrováním celého disku plastový kroužek odřízněte a odstraňte.
- Zlikvidujte tento produkt jako lékařský odpad, abyste předešli infekci.

Skladování:

- Skladujte na suchém a chladném místě. Chraňte před přímým slunečním světlem.
- Produkt je nutno skladovat při teplotě 10-30°C (50-86°F).
- Během skladování nevylučujte disk z balení.
- Disk je křehký a je nutno s ním manipulovat opatrně.
- Produkt je nutno uchovávat na vhodném místě tak, aby k němu měl přístup pouze oprávněný stomatologický personál.
- Použijte produkt před uplynutím data expirace uvedeného na obalu.

[ZÁRUKA]

Pokud bude mít kterýkoliv produkt prokazatelnou vadu nebo závadu, společnost Kuraray Noritake Dental Inc. jej vymění. Kuraray Noritake Dental Inc. nepřijímá odpovědnost za žádné přímé, následné nebo speciální ztráty či škody, které by byly důsledkem aplikace nebo použití těchto produktů příp. nemožnosti tyto produkty používat.

Je věcí uživatele, aby si před použitím produktů ověřil jejich vhodnost pro zamýšlený účel, a uživatel nese veškerá s tím spojená rizika a odpovědnost.

[POZNÁMKA]


Pokud dojde k závažné příhodě, kdy existuje podezření, že ji způsobil tento produkt, nahláste tuto událost níže uvedenému autorizovanému zástupci výrobce a regulačnímu orgánu v zemi, kde žije uživatel/pacient.

„KATANA“ a „CERABIEN“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti NORITAKE CO., LIMITED.

012 TI-013-CS 01/2025



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

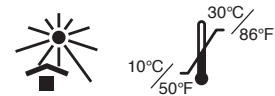

I. Úvod

Tento návod na použitie sa týka prípravkov KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML je predsintovaný zirkónový disk o priemere 98,5 mm, ktorý obsahuje krúžok z plastu. Je určený pre všetky frézovacie systémy, ktoré používajú tento druhovo typický disk. (Pozrite sa, prosím, do technických pokynov vášho frézovacieho systému, ako sa správne narába s týmto prístrojom.) KATANA Zirconia UTML má 2 dostupné hrúbky: (14 mm a 18 mm) a má 20 obmien odtieňov: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML pozostáva zo 4 vrstiev odstupňovaných odtieňov. KATANA Zirconia UTML sa odporúča k použitiu pri výrobe náhrad alebo rámov FCZ (Full Contour Zirconia). Všeobecným klinickým prínosom tohto výrobku je obnova funkcie zuba na tieto URČENÉ POUŽITIA/ INDIKÁCIE PRE POUŽITIE.

II. URČENÉ POUŽITIA/ INDIKÁCIE PRE POUŽITIE

KATANA Zirconia sa používa pri zhotovení celokeramických náhrad (konštrukcií, FCZ koruniek, FCZ mostíkov, inlejev, onlejev a faziet).

[Určený používateľ]

- Zubní lekári (zhotovovanie náhrad v ordinaci; klinický pracovný postup)

- Zubní laboranti (zhotovovanie náhrad v zubnom laboratóriu)

III. Spekací program

Spekací program 1

Teplota	Naprogramovaná rýchlosť	Doba pôsobenia
Izbová teplota — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 hodiny
1550°C (2822°F) — Izbová teplota	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Spekací program 2

Teplota	Naprogramovaná rýchlosť	Doba pôsobenia
Izbová teplota — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Izbová teplota (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Náhrady sa môžu odstrániť pri teplote 800°C (1472°F) alebo menej v závislosti od okolností.

Spekací program 3

Teplota	Naprogramovaná rýchlosť	Doba pôsobenia
Izbová teplota — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Izbová teplota (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Náhrady sa môžu odstrániť pri teplote 800°C (1472°F) alebo menej v závislosti od okolností.

IV. Zloženie

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Jednotky v zátvorkách sú v hmotnostných %.

V. Druh a trieda (ISO6872:2015)

Druh:III/ trieda:3

VI. Fyzikálne vlastnosti

Koeficient termálnej expanzie (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Návod na použitie

- Vyberte disk z obalu a overte, že na disku nemáte žiadnu trhlinu alebo iné poškodenie.
- Vložte disk do frézovacieho stroja a potom začnite frézovací úkon podľa technických pokynov frézovacieho systému.
- Po frézovaní odstráňte náhrady z disku pomocou diamantovej brúsky, atď.
- Rezný odpad alebo prach, ktorý sa usadí na náhradách, sa môže odstrániť jemným prúdom vzduchu.
- Vložte náhrady do ohňovzdornej napaľovacej misky a vložte ju do spekacej pece.
- V závislosti od výkonu použitej spekacej pece zvážte vyššie uvedený rozvrh spekania (III. Spekací program) pred spekaním náhrad.
- Po spekaní upravte náhrady diamantovým vrtáčikom podľa potreby.
- Presvedčte sa, že na náhradách nie sú žiadne praskliny.
- 1 FCZ:

- Glazovanie: Vyleštením, najmä na kontaktných plochách, vytvorte vysoko lesklý povrch a potom glazúru naneste obvyklým spôsobom na všetky povrchy.
- 2 Konštrukcie: Navrstvite detailnú keramiku (CERABIEN ZR alebo CZR PRESS LF) na konštrukciách podľa technických pokynov výrobcu. Skontrolujte koeficient termálnej expanzie keramiky v technických pokynoch výrobcu, aby ste si overili kompatibilitu.

VIII. Poznámky o manipulácii

Kontraindikácia:

- Ak je pacient nadmerne citlivý na oxid zirkónitový alebo niektorú inú zložku, tento výrobok sa nesmie použiť.

- Nepoužívajte tento produkt na výrobu mostov s viac ako 4+ jednotkami, konzolových mostov alebo mostov obsahujúcich stoličky.

Upozornenie:

Ak pacient alebo zubný lekár preukáže reakciu z precitlivenosti, ako je vyrážka, dermatitída atď., prestaňte výrobok používať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pozor:

- Tento výrobok sa nesmie použiť, ak sa u daného pacienta vyskytne maloklúzia, zatínanie zubov alebo bruxizmus.
- Pri frézovaní disku alebo rezaní, brúsení a leštení náhrad používajte schválenú protiprachovú masku a odsávanie so vzduchovým filtrom na ochranu pľúc pred vdychovaním prachu.
- Pri frézovaní disku alebo rezaní, brúsení a leštení náhrad používajte ochranné okuliare, aby ste zabránili vniknutiu prachu do očí. Ak sa vám prach dostane do očí, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára.
- Nepoužívajte pre žiadne účely okrem zubnej náhrady. Tento výrobok je určený iba pre zubnú aplikáciu.
- Použitie tohto výrobku je obmedzené len na zubných lekárov.
- Nedotýkajte sa predmetov zahriatych v peci holými rukami.
- Výplne nevyberajte zo spekacej pece pri vysokej teplote, pretože zakalenie ochladením spôsobuje prasknutie. Ak sa však pri sintrovaní programe 2 alebo 3 používa pec s automatickým otváraním, môžu sa výplne odstrániť z pece pri teplote 800°C (1472°F) alebo nižšej. Po vybratí z pece sa musia náhrady položiť na podnos vyrobený z keramických vlákien (napríklad: Noritake Porcelain Mat), aby sa ochladili pomaly.
- Pri použití pece na spekací program 2 alebo 3 môže byť veľký rozdiel medzi nastavenou teplotou v programe a teplotou v skutočnej peci. Použite túto pec po vyjasnení s výrobcom, či je pec a teplota uvedená v programe spekania 2 alebo 3 kompatibilná. Ak použijete pec "SpeedFire" na spekanie, odstráňte výplne zo "SpeedFire" podľa prevádzkových pokynov pre sinterovacie programy.
- Spekací program 2 alebo 3 sa odporúča iba pre konštrukcie (do 3 jednotiek), korunky FCZ, mostíky FCZ (do 3 jednotiek), inleje, onleje a fazety.**
- Tento výrobok je zvlášť priesvitný; preto by ste mali starostlivo zvážiť vhodnosť použitia pri maskovaní podkladového povrchu, ako je kovová podpera alebo veľmi tmavý alebo preparovaný zub so zmenou sfarbenia.
- Okraje by sa mali pripravovať s hlbokým úkosom a zaoblenými ramenami, pričom rezné hrany a rohy musia byť zaoblené, aby sa vylúčili ostré rohy preparácie. Uhol axiálnej plochy by mal byť v rozsahu 5 až 15 stupňov.
- Pri preparácii zubov sa vyvarujte: hlbokých ramien, J-okrajov, hrán nožov, zúbkovaných okrajov, nezúžených opôr, zárezov, vodiacich drážok, vytvárania retenčných dier a ostrých rohov.
- Zapamätajte si nasledujúcu hrúbku tohto výrobku pre vyhotovenie protéz:

Miesto a indikácia	Hrúbka steny
Predná korunka alebo mostík	0,8 mm alebo viac
Fazeta	0,4 mm alebo viac*
Zadná korunka alebo mostík	1,0 mm alebo viac
Inleje alebo onleje	1,0 mm alebo viac

*0,4 mm alebo viac tohto výrobku je pre celozirkónové fazety. Zachovajte hrúbku 0,8 mm alebo väčšiu, ak sa používa v kombinácii s keramikou.

- Pri výrobe mostíkov používajte pri spojoch nasledujúce prierezové oblasti.

Miesto a indikácia	Prierez spoja
Predné 2- alebo 3-jednotkové mostíky	12 mm ² alebo viac
Premolár 2- alebo 3-jednotkové mostíky	16 mm ² alebo viac

- Vyberte si farebný odtieň, ktorý je pre hrubú výplň jasnejší, než je zamýšľaná farba, pretože v závislosti od hrúbky výplne môže vyzerať tmavšia.
- Pri prvom použití spekacej pece a pri zmene podmienky spekania sa farby po spekaní môžu líšiť. Najprv spekajte kusok zirkónu a overte si farbu.

Pozor pri používaní:

- Nepoužite tento disk, ak je na ňom nejaká prasklina, ktorú ste si všimli pri vyberaní z obalu.
- Odporúča sa suché frézovanie. Ak sa použije frézovanie za vlhka, môže byť priesvitnosť disku znížená.
- Ak nájdete na náhrade prasklinu, nepoužívajte ju.
- Vyššie uvedené odporúčanie týkajúce sa spekania je iba usmernením; v závislosti od každej jednotlivce pece môžu byť potrebné určité úpravy.
- Pri frézovaní disku buďte opatrní pri priblížení sa s frézou k plastovému krúžku, aby ste zabránili odpojeniu disku. Disk sa frézuje tak, akoby sa zirkónová časť dotýkala vnútornej strany plastového krúžku pri 2 mm.
- Pred spekaním celého disku odrežte a odstráňte celý disk.
- Zlikvidujte tento výrobok ako lekársky odpad, aby ste predišli infekcii.

Uskladnenie:

- Uchovávať na chladnom a suchom mieste. Výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom.
- Výrobok sa musí skladovať pri teplote 10 – 30 °C (50 – 86 °F).
- Počas skladovania nevyberajte disk z obalu.
- Disk je krehký a pri manipulácii s ním je potrebná opatnosť.
- Výrobok sa musí skladovať na vhodnom mieste, kde má prístup stomatologický personál.
- Výrobok sa musí použiť do uplynutia dátumu expirácie uvedeného na obale.

[ZÁRUKA]

Kuraray Noritake Dental Inc. nahradí ktorýkoľvek výrobok, ktorý je dokázateľne chybný. Kuraray Noritake Dental Inc. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo priamu, následnú alebo špeciálnu ujmu, ku ktorej došlo v dôsledku aplikácie alebo použitia alebo neschopnosti používať tieto výrobky. Používateľ musí ešte pred použitím určiť vhodnosť výrobku pre zamýšľané použitie a používateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť v súvislosti s nimi.

[POZNÁMKA]

Ak dôjde k vážnemu incidentu spôsobenému týmto výrobkom, oznámte to nižšie uvedenému autorizovanému zástupcovi výrobcu a regulačným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ/pacient bydlisko.

„KATANA" a „CERABIEN" sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti NORITAKE CO., LIMITED.

012 TI-013-SK 01/2025


БЪЛГАРСКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

BG



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

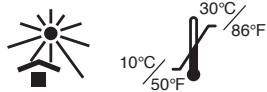

I. Въведение

Настоящите инструкции за употреба важат за KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML представлява предварително синтерован циркониев диск с диаметър 98,5 mm и съдържа пластмасов пръстен. Той е подходящ за всички системи за фрезоване, работещи с този общ вид диск. (Моля направете справка с техническите инструкции на Вашата система за фрезоване с цел правилна работа с машината.) KATANA Zirconia UTML се предлага с 2 дебелини (14 mm и 18 mm) и в 20 цвята (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML се състои от 4 слоя с преливащи цветове. KATANA Zirconia UTML се препоръчва за употреба при изработка на FCZ (Full Contour Zirconia) възстановявания или скелети за протези. Общата клинична полза на този продукт е възстановяване на зъбната функция за следното/следните ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ/ ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ/ ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

KATANA Zirconia се използва за изработка на изцяло керамични реставрации (рамки за протези, FCZ коронки, FCZ мостове, инлеи, онлеи и фасети). [Целеви потребител]
- Стоматолози (изработка на възстановявания в стоматологичния кабинет, клиничен процес)
- Зъботехници (изработка на възстановявания в зъботехническа лаборатория)

III. Програма за синтероване

Програма за синтероване 1

Температура	Скорост за програмиране	Време на престой
Стайна темп. — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 часа
1550°C (2822°F) — Стайна темп.	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Програма за синтероване 2

Температура	Скорост за програмиране	Време на престой
Стайна темп. — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Стайна темп. (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Реставрациите могат да се извадят при максимум 800°C (1472°F) в зависимост от условията.

Програма за синтероване 3

Температура	Скорост за програмиране	Време на престой
Стайна темп. — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Стайна темп. (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Реставрациите могат да се извадят при максимум 800°C (1472°F) в зависимост от условията.

IV. Състав

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Единиците в скоби представляват масови %.

V. Тип и клас (ISO6872:2015)

Тип:II/ Клас:3

VI. Физични свойства

Коефициент на топлинно разширение (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Указания за употреба

- Издадете диска от опаковката и се уверете, че дискът няма напуквания или други повреди.
- Поставете диска в машината за фрезоване; след това започнете процеса на фрезоване съгласно техническите инструкции на системата за фрезоване.
- След фрезоването отделете реставрациите от диска посредством диамантено борче и т.н.
- Отложжи се по реставрациите отпадъци или прах от рязането могат да се отстранят с лека въздушна струя.
- Поставете реставрациите в огнеупорната тавичка и поставете в пещта за синтероване.
- В зависимост от мощността на използваната пещ за синтероване направете справка с горепосочените параметри за синтероване (III. Програма за синтероване), преди да синтеровате реставрациите.
- След синтероването адаптирайте възстановяваниятареставрациите с диамантен борер според необходимостта.
- Уверете се, че реставрациите нямат напуквания.
- 1 FCZ:
глазиране: полирайте повърхността до блясък, особено контактните участъци, след това глазирайте всички повърхности по обичайния начин;

- 2 Рамки: нанесете стоматологичния порцелан (CERABIEN ZR или CZR PRESS LF) по рамките съгласно техническите инструкции на производителя. Проверете коефициента на топлинно разширение на порцелана в техническите инструкции на производителя, за да потвърдите съвместимостта.

VIII. Забележки относно работата

Противопоказания:

- Ако пациентът проявява свръхчувствителност към цирконий или други компоненти, продуктът не трябва да се използва.
- Не използвайте настоящия продукт за изработка на мостове с повече от 4 члена, конзолни мостове или мостове с молари.

Предупреждение:

Ако пациентът или стоматологът прояви реакция на свръхчувствителност, напр. обрив, дерматит и т.н., преустановете използването на продукта и незабавно потърсете медицинска помощ.

Внимание:

- Настоящият продукт не трябва да се използва, ако са налице условия на неправилна оклузия, стискане или скърцане на зъби.
- Когато фрезовате диска или изрязвате, пилите и полирате реставрациите, използвайте одобрена противопрахова маска и аспиратор с въздушен филтър, за да защитите белите си дробове от инхалиране на прах.
- Когато фрезовате диска или изрязвате, пилите и полирате реставрациите, използвайте предпазни очила, за да предотвратите попадане на прах в очите. Ако в очите ви попадне прах, промийте ги незабавно с обилно количество вода и се консултирайте с лекар.
- Не използвайте за други цели освен дентална реставрация. Настоящият продукт е предназначен единствено за приложение в стоматологията.
- Този продукт е предназначен за употреба само от стоматолози.
- Не докосвайте загрети в пещта изделия с незащитени ръце.
- Не изваждайте възстановяванията от пещта за синтероване при висока температура, тъй като бързо охлаждане води до счупване. Но ако използвате пещ с автоматично отваряне с програма за синтероване 2 или 3, възстановяванията могат да се извадят от пещта при максимум 800°C (1472°F). След изваждане от пещта възстановяванията трябва да се положат на поставка от керамични влакна (напр.: Noritake Porcelain Mat), за да се охладят постепенно.
- Възможна е значителна разлика между посочената от програмата температура на втвърдяване и действителната температура в пещта при употреба на пещта за програма за синтероване 2 или 3. Преди да използвате пещта, моля консултирайте се с производителя дали пещта е съвместима с температурата, посочена за програма за синтероване 2 или 3. Ако като пещ за синтероване за използва SpeedFire, издадете възстановяванията от SpeedFire съгласно програмата за синтероване.
- Програма за синтероване 2 или 3 се препоръчва само за рамки (до 3 члена), FCZ коронки, FCZ мостове (до 3 члена), инлеи, онлеи и фасети.
- Настоящият продукт има особена трансплукцентност, затова пригодността за употреба при маскиране на базовата повърхност, напр. метален абатмънт или много тъмна или обезцветена зъбна препарация, трябва да се обмисли внимателно.
- Препарирайте краищата с откос и заоблени рамене, със заоблени режещи ръбове и ъгли, за да се елиминират остри ъгли по препарацията. Ъгълът на аксиалната повърхност трябва да е между 5 и 15 градуса.
- При подготовката на зъбите избягвайте: дълбоки рамене, J-образни ръбове, остри ръбове, назъбени краища, несъкосени абатмънти, подмоли, бразди, образуване на ретентивни вдлъбнатини и остри ъгли.
- За изработка на протези спазвайте следната дебелина на продукта:

Местоположение и показание	Дебелина на стената
Антериорни коронки или мостове	минимум 0,8 mm
Фасети	минимум 0,4 mm*
Постериорни коронки или мостове	минимум 1,0 mm
Инлеи или онлеи	минимум 1,0 mm

*Минимум 0,4 mm от настоящия продукт важи за изцяло циркониеви фасети. Спазвайте минималната дебелина от 0,8 mm, ако продуктът ще се използва в комбинация с порцелан.

- При изработката на мостове използвайте следните напречни сечения за връзките.

Местоположение и показание	Напречно сечение на връзката
Антериорни двучленни или тричленни мостове	минимум 12 mm ²
Премолар двучленни или тричленни мостове	минимум 16 mm ²

- За реставрация с голяма дебелина изберете цвят, който е по-светъл от планирания цвят, тъй като той може да изглежда по-тъмен в зависимост от дебелината на реставрацията.
- Когато използвате пещ за синтероване за първи път и промените условията на синтероване, цветовете могат да изглеждат по друг начин след синтероването. Синтеровайте предварително малък къс цирконий и проверете дали цветът съпада.

Предпазни мерки във връзка с употребата:

- Не използвайте диска, ако установите пукнатина след изваждане от опаковката.
- Препоръчително е сухо фрезоване. Ако се използва мокро фрезоване, трансплукцентността на диска може да бъде нарушена.
- Не използвайте, ако установите напукване на реставрацията.
- Горепосочените препоръки за синтероването са само ориентировъчни; евентуално са необходими адаптации в зависимост от пещта.
- Когато фрезовате диска, внимавайте при приближаване на пластмасовия пръстен до фрезовия инструмент, за да предотвратите отделяне на диска. Фрезовайте диска така, че да остане циркониева част, която има контакт с вътрешната страна на пластмасовия пръстен при 2 mm.
- Преди синтероване на целия диск изрежете и отстранете пластмасовия пръстен.
- Изхвърлете настоящия продукт като медицински отпадък, за да предотвратите инфекция.

Съхранение:

1. Съхранявайте на хладно и сухо място. Пазете от пряка слънчева светлина.
2. Продуктът трябва да се съхранява при температура 10-30°C (50-86°F).
3. Не изваждайте диска от опаковката по време на съхранение.
4. Дискът е чувлив и с него трябва да се работи внимателно.
5. Продуктът трябва да се съхранява на подходящо място, достъпно само за дентален персонал.
6. Продуктът трябва да се използва преди изтичане на срока на годност, посочен на опаковката.


[ГАРАНЦИЯ]

Kuraray Noritake Dental Inc. ще замени всеки продукт с доказан дефект. Kuraray Noritake Dental Inc. не поема отговорност за загуби или щети – преки, последващи или в специални случаи – в резултат на приложението или употребата на или неспособността за употреба на тези продукти. Преди употреба потребителят трябва да провери пригодността на продуктите за планираната употреба; потребителят поема всички рискове и отговорности във връзка с това.

[ЗАБЕЛЕЖКА]

В случай на сериозен инцидент, свързан с този продукт, уведомете упълномощения представител на производителя, посочен по-долу, и компетентните органи в страната по пребиваване на потребителя/пациента. „KATANA" и „CERABIEN" са регистрирани търговски марки или търговски марки на NORITAKE CO., LIMITED.

012 TI-013-BG 01/2025

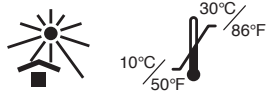

I. Вступ
Це інструкція для застосування KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML – це диск з попередньо спеченого діоксиду цирконію з діаметром 98,5 мм та пластиковим кільцем. Він призначений для всіх фрезерних систем, у яких можна використовувати цей стандартний диск. (Зверніться до інструкції з експлуатації своєї фрезерної системи для забезпечення належної машинної обробки.) KATANA Zirconia UTML пропонується з товщиною 2 типів (14mm та 18mm) і має 20 варіантів відтінків: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML складається з 4 прошарків, відтінки яких поступово переходять один в одного. KATANA Zirconia UTML рекомендовані для застосування з метою виготовлення цільнокерамічних реставрацій або каркасів на основі діоксиду цирконію. Загальна клінічна перевага цього виробу полягає у відновленні функції зуба за наступним ПРИЗНАЧЕННЯМ/ ПОКАЗАННЯМИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ.

II. ПРИЗНАЧЕННЯМ/ ПОКАЗАННЯМИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
KATANA Zirconia застосовується для виготовлення цільнокерамічних реставрацій (каркасів, цільнокерамічних коронок на основі діоксиду цирконію, цільнокерамічних мостів на основі діоксиду цирконію, вкладок, накладок і вінірів).
【Цільові користувачі】
- Стоматологи (виготовлення реставрацій у стоматологічному кабінеті; клінічний процес)
- Зубні техніки (виготовлення реставрацій у зубних лабораторіях)

III. Програма спікання
Програма спікання 1

Температура	Швидкість програмування	Час витримки
Кімнатна темп. — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 год
1550°C (2822°F) — Кімнатна темп.	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Програма спікання 2

Температура	Швидкість програмування	Час витримки
Кімнатна темп. — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Кімнатна темп. (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Реставрації можна вилучати при температурі 800°C (1472°F) або нижче, залежно від ситуації.

Програма спікання 3

Температура	Швидкість програмування	Час витримки
Кімнатна темп. — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Кімнатна темп. (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Реставрації можна вилучати при температурі 800°C (1472°F) або нижче, залежно від ситуації.

IV. Склад
ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Одиниці в дужках – % м/м.
V. Тип та клас (ISO6872:2015)
Тип:II/ клас:3

VI. Фізичні характеристики
Коефіцієнт термічного розширення (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Вказівки стосовно застосування

- Вилучити диск з упаковки та переконатися, що на ньому немає тріщин або пошкоджень.
- Встановити диск у фрезерний верстат; після цього розпочати процес фрезерування, дотримуючись при цьому інструкції з експлуатації фрезерної системи.
- Після фрезерування вилучити реставрації з диска за допомогою алмазного бора тощо.
- Обрізки або пил, налипли на реставрації, можна видалити легким струменем повітря.
- Розмістити реставрації в лоток капсули для випалу та встановити в піч для спікання.
- Залежно від характеристик печі для спікання перегляньте наведений вище профіль спікання (III. «Програма спікання») перед початком спікання реставрацій.
- Після спікання скоригуйте реставрації за допомогою алмазного бруска за потребою.
- Переконайтеся, що на реставраціях немає тріщин.
- 1 Цільнокерамічна реставрація з діоксиду цирконію:

глазурування: полірувати до високого блиску поверхні, особливо контактні ділянки, після цього нанести глазур на всі поверхні стандартним методом;
(9)-2 Каркаси: надбудувати стоматологічну кераміку (CERABIEN ZR або CZR PRESS LF) на каркасі згідно з інструкцією для застосування виробника. Перевірити коефіцієнт термічного розширення кераміки в інструкції для застосування виробника з метою підтвердження сумісності.

VIII. Примітки стосовно застосування

- Протипоказання:**
- Якщо у пацієнта є алергія до діоксиду цирконію або іншого компоненту, цей виріб застосовувати не можна.
 - Не застосовувати цей виріб для виготовлення мостів з понад 4 секціями, консольних мостоподібних протезів або мостоподібних протезів, які включають в себе моляри.
- Застереження**
Якщо у пацієнта або стоматолога з'являються реакції гіперчутливості, такі як висип, дерматит тощо, припинити використання виробу та негайно звернутися за медичною допомогою.

Увага!

- Не слід застосовувати виріб у випадку наявності невірної оклюзії, стиснення зубів або бруксизму.
- Одягати випробувану пілозахисну маску та застосовувати аспірацію з повітряним фільтром під час фрезерування диска або різання, шліфування та полірування реставрацій з метою захисту легень від вдихання пилу.
- Одягати захисні окуляри під час фрезерування диска або різання, шліфування та полірування реставрацій з метою захисту очей від потраплення пилу. Якщо пил потрапив в очі, негайно промити очі великою кількістю води та звернутися до лікаря.
- Не можна застосовувати не за призначенням. Дозволене застосування тільки для стоматологічних реставрацій. Цей виріб призначений виключно для стоматологічного застосування.
- Використовувати цей виріб дозволено виключно фахівцям у галузі стоматології.
- Не доторкатися голими руками до предметів, які нагрілися в печі.
- Не виймати реставрації з печі для спікання за високої температури, оскільки охолодження може обумовити розламування. Проте, якщо ви застосовуєте автоматичну піч відкритого типу з програмою спікання 2 або 3, реставрацію можна вилучати при температурі 800°C (1472°F) або нижче. Після вилучення з печі реставрації слід розмістити в лоток з керамічного волокна (наприклад, Noritake Porcelain Mat) для поступового охолодження.
- Встановлена температура в програмі може сильно відрізнятись від реальної температури в печі при програмі спікання 2 або 3. Застосовувати піч тільки після того, як ви перевірили у виробника, що піч та температура, зазначена в програмі спікання 2 або 3, сумісні. Якщо ви використовуєте піч «SpeedFire» для спікання, вилучайте реставрації з «SpeedFire» згідно з вказівками програми спікання.
- Програма спікання 2 або 3 рекомендована виключно для каркасів (до 3 секцій), цільнокерамічних коронок, цільнокерамічних мостоподібних протезів (до 3 секцій), вкладок, накладок та вінірів.**
- Цей виріб частково прозорий; тому слід ретельно зважити доцільність його застосування у випадку маскування поверхонь під ним, наприклад, металевих абатментів або дуже темних або знебарвлених реставрацій зубів.
- Краї слід препарувати з глибоким уступом або заокругленими плечима, при цьому слід закруглити гострі ріжучі краї та кути, щоб уникнути гострих кутів на препарованій ділянці. Кут торцевої поверхні повинен складати 5-15 градусів.
- Під час препарування зубів уникайте наступного: глибоких плечей, J-подібних країв, ріжучих країв, зубців на краях, некліновидних абатментів, піднтрень, направляючих жолобів, утворення ретенційних заглиблень та гострих кутів.
- Дотримуйтеся нижчезазначених вимог до товщини виробу для виготовлення протезних конструкцій.

Локалізація та показання	Товщина стінки
Фронтальна коронка або мостоподібний протез	0,8 мм або більше
Вінір	0,4 мм або більше*
Коронка або мостоподібний протез на жувальні зуби	1,0 мм або більше
Вкладка або накладка	1,0 мм або більше

*0,4 мм або більше цього виробу для цільнокерамічного вініру на основі діоксиду цирконію. Забезпечте товщину 0,8 мм або більше, якщо виріб застосовується в поєднанні з керамікою.

- Застосовуйте наступні площі поперечного перерізу для з'єднувачів під час виготовлення мостоподібних протезів.

Локалізація та показання	Поперечний переріз з'єднувача
Фронтальні 2- або 3-секційні мостоподібні протези	12 мм² або більше
Премоляр 2- або 3-секційні мостоподібні протези	16 мм² або більше

- Оберіть відтінок світліше за передбачений колір для товстих реставрацій, оскільки він може здаватися більш темним в залежності від товщини реставрації.
- Коли піч для спікання використовують вперше або змінюють параметри спікання, кольори після спікання можуть відрізнятись. Спочатку слід спекти невеликий шматок діоксиду цирконію та підтвердити досягнення необхідного кольору.

Обережно під час застосування!

- Не застосовувати диск, якщо після вилучення з упаковки ви помітили тріщину.
- Рекомендовано проводити сухе фрезерування. У випадку вологого фрезерування може знижуватися прозорість диска.
- Якщо ви побачили на реставраціях тріщини, не використовуйте їх.
- Надані вище рекомендації стосовно спікання являють собою виключно побажання; залежно від застосовної печі може бути необхідним їх припасаування.
- Під час фрезерування диска будьте обережними при наближенні фрези до пластикового кільця, щоб запобігти відокремленню диска. Фрезерувати диск, залишаючи 2 мм контактної частини діоксиду цирконію з внутрішнім боком пластикового кільця.
- Розрізати та видалити пластикове кільце перед спіканням всього диска.
- Утилізувати виріб як медичні відходи, щоб запобігти зараженню.

Умови зберігання

1. Зберігати у прохолодному та сухому місці. Зберігати від прямого сонячного світла.
2. Зберігати виріб при температурі 10-30°C (50-86°F).
3. Не виймати диск з упаковки під час зберігання.
4. Диск крихкий, тому слід бути з ним дуже обережним під час застосування.
5. Зберігати виріб у належному місці, доступ до якого має виключно стоматологічний персонал.
6. Виріб необхідно використати до закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.

[ГАРАНТІЯ]


Kuraray Noritake Dental Inc. замінить будь-який виріб, який обґрунтовано виявиться бракованим. Kuraray Noritake Dental Inc. не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі або особливі збитки або втрати, які виникають в результаті використання або неможливості застосування цих виробів. Перед використанням користувач повинен перевірити придатність виробу до застосування відповідно до поставлених завдань та бере на себе всі пов'язані із цим ризики та відповідальність.

[ПРИМІТКА]

У разі виникнення серйозного інциденту внаслідок застосування даного виробу необхідно повідомити уповноваженого представника виробника, зазначеного нижче, та контрольно-наглядовий орган країни, в якій проживає користувач / пацієнт.
«KATANA» та «CERABIEN» є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками компанії NORITAKE CO., LIMITED.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

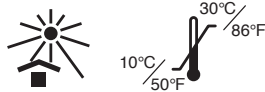

I. Sissejuhatus

See on toote KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered) kasutusjuhend. KATANA Zirconia UTML on 98,5 mm läbimõõduga eelkuumutatud tsirkooniumketas, mis sisaldab plastrõngast. Toode on ette nähtud freesimissüsteemide jaoks, mis kasutavad seda üldist tüüpi ketast. (Seadme õige töötamise tagamiseks lugege oma freesimissüsteemi tehnilist juhendit.) Tootel KATANA Zirconia UTML on 2 saadaolevat paksust: (14 mm ja 18 mm) ning 20 erinevat tooni: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML sisaldab 4 astmelist toonikihti. Toodet KATANA Zirconia UTML soovitatakse kasutada FCZ (Full Contour Zirconia (täiskontuursest tsirkooniumist)) restauratsioonide või karkasside valmistamiseks. Selle toote üldine kliiniline eelis on hamba funktsionaalsuse taastamine järgmistel KASUTUSEESMÄRKIDE/ NÄIDUSTUSTE korral.

II. KASUTUSEESMÄRKIDE/ NÄIDUSTUSTE

Toodet KATANA Zirconia kasutatakse täiskeraamiliste restauratsioonide (karkassid, FCZ-kroonid, FCZ-sillad, sisekihid, pealiskihid ja laminaadid) valmistamiseks. [Ettenähtud kasutaja] Hambaarstid (restauratsioonide valmistamine toolidel; kliiniline töövoog) Hambalaborid (restauratsioonide valmistamine hambalaboris)

III. Paagutamisprogramm Paagutamisprogramm 1

Temperatuur	Programmeerimiskiirus	Hoidmisaeg
Toatemp. — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 t
1550°C (2822°F) — Toatemp.	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Paagutamisprogramm 2

Temperatuur	Programmeerimiskiirus	Hoidmisaeg
Toatemp. — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Toatemp. (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Restauratsioonid võib olukorrast olenevalt eemaldada temperatuuril 800°C (1472°F) või madalamal temperatuuril.

Paagutamisprogramm 3

Temperatuur	Programmeerimiskiirus	Hoidmisaeg
Toatemp. — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Toatemp. (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Restauratsioonid võib olukorrast olenevalt eemaldada temperatuuril 800°C (1472°F) või madalamal temperatuuril.

IV. Koostis

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Sulgudes toodud ühikud on massi-%.

V. Tüüp ja klass (ISO6872:2015)

Tüüp:II/ klass:3

VI. Füüsilised omadused

Soojuspaismistegur (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Kasutusjuhend

- Eemaldage ketas pakendist ja veenduge, et kettal poleks pragusid ega muid kahjustusi.
- Asetage ketas freesimis- ja alustage freesimist vastavalt freesimissüsteemi tehnilisele juhendile.
- Pärast freesimist eemaldage kettalt restauratsioonid teemantpuuriga jne.
- Restauratsioonide külge jäänud lõikamisjäätmel ja tolmu saab eemaldada nõrga õhujõuga.
- Asetage restauratsioonid tulekindlale šamottalusele ja seejärel paagutussahju.
- Kasutatavast paagutussahjust olenevalt vaadake enne restauratsioonide paagutamist allolevat paagutustabelit (III. Paagutusprogramm).
- Pärast paagutamist korrigeerige vajadusel restauratsiooni teemantpuuriga.
- Veenduge, et restauratsioonil pole pragusid.
- 1 FCZ:
Glasuuri kuivatamine: looge kõrgläikiga pind, poleerides eriti kokkupuutealad, seejärel pange glasuuri kõikidele pindadele tavalisel viisil.
- 2 Karkassid: ehitage hambaportselan (CERABIEN ZR või CZR PRESS LF) karkassidele üles tootja tehnilist juhendit järgides. Ühilduvuses veendumiseks kontrollige tootja tehnilisest juhendist portselani soojuspaismistegurit.

VIII. Käsitsemismärkused

Vastunäidustused

- Seda toodet ei tohi kasutada, kui patsiendil on ülitundlikkus tsirkooniumi või mõne muu komponendi suhtes.
- Ärge kasutage seda toodet üle 4 tugiambaga sildade või purihambaid sisaldavate sildade korral.

Hoiatus!

Kui patsiendil või hambaarstil ilmneb ülitundlikkusreaktsioon, nagu lööve, nahapõletik jmt, lõpetage selle toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Ettevaatust!

- Seda toodet ei tohi kasutada hambumushäirete, kokkusuutud hammaste või bruksismi esinemise korral.
- Ketta freesimisel või restauratsiooni lõikamisel, lihvimisel ja poleerimisel kasutage kopsude kaitsmiseks sissehingatava tolmu eest heakskiidetud tolmumaski ja õhufiltriga imurit.
- Ketta freesimisel või restauratsiooni lõikamisel, lihvimisel ja poleerimisel kasutage kaitseprille, et tolm silma ei satuks. Kui tolm silma satub, loputage silma kohe rohke veega ja pidage nõu arstiga.
- Kasutage ainult hambarestauratsioonide korral. See toode on ette nähtud kasutamiseks ainult hambaravis.
- Seda toodet tohivad kasutada üksnes hambaravispetsialistid.
- Ärge puudutage ahjus kuumutatud esemeid palja käega.
- Ärge võtke restauratsiooni välja kõrge temperatuuriga paagutussahjust, kuna jahtumine põhjustada purunemise. Kui paagutusprogrammi 2 või 3 korral kasutatakse automaatselt avanavat tüüpi ahju, võib siiski restauratsioonid ahjust eemaldada temperatuuril 800°C (1472°F) või madalamal temperatuuril. Ahjust eemaldamisel tuleb restauratsioonid aeglaseks jahtumiseks panna keraamilistest kiududest alusele (nt Noritake Porcelain Mat).
- Paagutusprogrammi 2 või 3 kasutamisel võib seadistustemperatuuri ja ahju tegeliku temperatuuri vahel olla suur erinevus. Kasutage ahju pärast seda, kui olete tootjaga konsulteerinud, et paagutusprogrammi 2 või 3 nimetatud ahi ja temperatuurid ühilduvad. Kui kasutate paagutussahjuna toodet SpeedFire, eemaldage restauratsioonid ahjust SpeedFire vastavalt paagutusprogrammi juhistele.
- Paagutusprogrammi 2 või 3 on soovitatav kasutada karkasside (kuni 3ühikut), FCZ-kroonide, FCZ-sildade (kuni 3ühikut), sisekihtide, pealiskihide ja laminaatide korral.
- See toode on eriti läbikumav ja seetõttu tuleb selle sobivust hoolega kaaluda aluspinna (nt metallabutment või väga tume või värvimuutusega hambapreparaatsioon) katmisel.
- Servad tuleb ette valmistada sügava soone ja ümmarguste õlgadega ja teravate prepaareerimisnurkade kõrvaldamiseks tuleb lõikeservad ja nurgad ümaraks muuta. Aksiaalse pinna nurk peab jääma vahemikku 5-15 kraadi.
- Hammaste ettevalmistamisel vältige järgmist: sügavad õlad, J-servad, noaservad, rihveldatud servad, mittekoonusjad abutmendid, sisselõiked, juhtsooned, püsivate aukude moodustamine ja teravad nurgad.
- Proteeside valmistamisel hoidke selle toote järgmist paksust.

Asukoht ja näidustus	Seina paksus
Esihamba kroon või esihammaste sild	0,8 mm või rohkem
Laminaat	0,4 mm või rohkem*
Tagahamba kroon või tagahammaste sild	1,0 mm või rohkem
Sise- või pealiskiht	1,0 mm või rohkem

*0,4 mm või rohkem on ette nähtud tsirkooniumlaminaadile. 0,8 mm või rohkem kasutamisel koos portselaniga.

- Sildade valmistamisel kasutage ühenduskohtade jaoks järgmisi ristlõikelisi pindalasid.

Asukoht ja näidustus	Ühenduskoha ristlõige
Esihammaste 2 või 3 tugiambaga sillad	12 mm ² või rohkem
Premolaar 2 või 3 tugiambaga sillad	16 mm ² või rohkem

- Valige toon, mis on eredam kui paksu restauratsiooni jaoks ette nähtud toon, kuna see võib restauratsiooni paksusest olenevalt tuhmim välja näha.
- Paagutussahju esmakordsel kasutamisel ja paagutustingimuste muutmisel võivad värvid pärast paagutamist erineda. Paagutage eelnevalt väike tükk tsirkooniumi värvitoonis veendumiseks.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Ärge kasutage ketast, kui pärast pakendist eemaldamist on tootel märgata pragusid.
- Soovitatav on kuivfreesimine. Märgfreesimise kasutamisel võib ketta läbipaistvus väheneda.
- Ärge kasutage, kui märkate pragu restauratsioonis.
- Eespool toodud paagutamissoovitust on ainult juhised. Igast üksikjuhust olenevalt võivad olla vajalikud mõned kohandused.
- Ketta eraldumise vältimiseks olge ketta freesimisel freesimispuurile plastrõngaga lähenedes ettevaatlik. Freesige ketast nii, et tsirkooniumosa, mis puutub kokku plastrõnga siseosaga, jääks 2 mm kaugusele.
- Enne kogu ketta paagutamist lõigake ja eemaldage plastrõngas.
- Infektsioonide vältimiseks kõrvaldage toode meditsiiniliste jäätmete käitlemise põhimõtete kohaselt.

Ladustamine

- Hoida jahedas ja kuivas kohas. Hoida eemal otsesest päikesevalgusest.
- Toodet tuleb hoida temperatuuril 10-30°C (50-86°F).
- Ladustamise ajal ketast pakendist mitte välja võtta.
- Ketas on kergesti purunev ja seda tuleb ettevaatlikult käsitseda.
- Toodet tuleb ladustada sobivas kohas, kuhu on juurdepääs ainult hambaravispetsialistidel.
- Tarvitage toode ära enne pakendile märgitud aegumistähtaaja möödumist.

[GARANTII]


Kuraray Noritake Dental Inc. asendab kõik tõestatud defektidega tooted. Kuraray Noritake Dental Inc. ei vastuta mis tahes otseste, põhjuslike või spetsiifiliste kulude või kahjude eest, mis tekivad seoses nende toodete kasutamisega või võimetusega neid tooteid kasutada. Enne kasutamist peab kasutaja määrama toodete sobivuse kavandatud otstarbeks ning kasutaja vastutab toodetega seotud mis tahes riskide ja kohustuste eest.

[MÄRKUS]

Kui tekib tootega seostatav raske tüsistus, teatage sellest tootja allpool näidatud volitatud esindajale ja kasutaja/patsiendi elukohariigi regulatiivasutusele. „KATANA“ ja „CERABIEN“ on ettevõtte NORITAKE CO., LIMITED registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

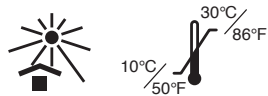

I. IEVADS

Šī lietošanas instrukcija ir paredzēta produktam KATANA Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia UTML ir iepriekš saķepināts, plastmasa gredzenu saturošs cirkonija dioksīda disks, kura diametrs ir 98,5 mm. Tas ir izstrādāts visām apstrādes sistēmām, kurās izmanto ģenēriskā tipa disku. (Pareizai ierīces izmantošanai skatīt savas frēzēšanas sistēmas tehniskās instrukcijas.) KATANA Zirconia UTML ir pieejami 2 biežumi: (14 mm un 18 mm) un tam ir 20 toņu variācijas: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). KATANA Zirconia UTML veido 4 gradēti toņu slāņi. KATANA Zirconia UTML ir ieteicams izmantot FCZ (Full Contour Zirconia) restaurāciju vai karkasu izgatavošanai. Šī produkta vispārējs klīniskais ieguvums ir atjaunot zobu funkcijas pēc PAREDZĒTA LIETOJUMA/ LIETOŠANAS INDIKĀCIJĀM.

II. PAREDZĒTĀ LIETOJUMA/ LIETOŠANAS INDIKĀCIJĀM

KATANA Zirconia tiek izmantots visu pilnībā no keramikas izgatavojamo restaurāciju (karkasu, FCZ kroņu, FCZ tiltu, inleju, onleju un venīru) izgatavošanai.

[Paredzētais lietotājs]

- Zobārsti (zobu restaurāciju izgatavošana uz vietas; klīniskā darbplūsmā)
- Zobu laboratorijas tehniķi (zobu restaurāciju izgatavošana zobārstniecības laboratorijā)

III. Saķepināšanas programma

Saķepināšanas programma 1

Temperatūra	Programmēšanas rādītājs	Noturēšanas laiks
Istabas temp. — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 stundas
1550°C (2822°F) — Istabas temp.	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

Saķepināšanas programma 2

Temperatūra	Programmēšanas rādītājs	Noturēšanas laiks
Istabas temp. — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Istabas temp. (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

* Restaurācijas var izņemt, kad temperatūra ir 800°C (1472°F) vai zemāka, atkarībā no apstākļiem.

Saķepināšanas programma 3

Temperatūra	Programmēšanas rādītājs	Noturēšanas laiks
Istabas temp. — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Istabas temp. (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

* Restaurācijas var izņemt, kad temperatūra ir 800°C (1472°F) vai zemāka, atkarībā no apstākļiem.

IV. Sastāvs

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Mērvienības iekavās ir masas %.

V. Tips un klase (ISO 6872:2015)

Tips:II/ Klase:3

VI. Fizikālās īpašības

Termiskās izplešanās koeficients (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Lietošanas norādījumi

- Izņemiet disku no iepakojuma un pārliecinieties, vai disks nav ielaisījies vai citādi bojāts.
- Ievietojiet disku frēzēšanas ierīcē un sāciet frēzēšanas procesu, ievērojot frēzēšanas sistēmas tehniskajās instrukcijās sniegtos norādījumus.
- Pēc frēzēšanas atdaliet restaurācijas no diska ar dimanta urbi vai līdzīgu instrumentu.
- Pie restaurācijām pielīpušos frēzēšanas atlikumus vai putekļus var noņemt ar saudzīgu gaisa strūklu.
- Novietojiet restaurācijas uz ugunsizturīga paliktņa un ievietojiet saķepināšanas krāsnī.
- Atkarībā no izmantotās saķepināšanas krāsns jaudas pārskatiet iepriekš norādīto saķepināšanas plānu (III. Saķepināšanas programma) pirms restaurāciju saķepināšanas.
- Pēc saķepināšanas nepieciešamajā apmērā koriģējiet restaurācijas ar dimanta urbi.
- Pārliecinieties, vai restaurācijas nav ielaisājušas.
- 1. FCZ:
glazūras apdedzināšana: pulējot izveidojiet izteikti spīdīgi virsmu, jo īpaši saskares zonās, pēc tam parastajā veidā uzklājat glazūru uz visām virsmām;
- 2. Karkasi: izveidojot zobu porcelānu (CERABIEN ZR vai CZR PRESS LF) uz karkasiem, ievērojot ražotāja tehniskajās instrukcijās sniegtos norādījumus. Lai apstiprinātu savietojamību, iepazīstieties ar ražotāja tehniskajās instrukcijās sniegtajiem norādījumiem par porcelāna termiskās izplešanās koeficientu.

VIII. Piezīmes par apstrādi

Kontraindikācijas:

- Ja pacientam ir paaugstināts jutīgums pret cirkonija dioksīdu vai kādu citu sastāvdaļu, šī produkta lietošana nav pieļaujama.
- Neizmantojiet šo produktu 4+ vienību tiltu, tiltu ar piekari un molārus ietverošu tiltu veidošanai.

Bridinājums:

Ja pacientam vai zobārstniecības speciālistam rodas paaugstinātas jutības reakcijas, piem., izsitumi, dermatīts u.c., nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu un vēršieties pēc medicīniskās palīdzības.

Uzmanību:

- Šo produktu nav paredzēts lietot maloklūzijas, zobu griešanas un žokļu sakošanas jeb bruksisma gadījumā.
- Diska frēzēšanas vai restaurāciju griešanas, slīpēšanas un pulēšanas laikā izmantojiet apstiprinātu pretputeķļu masku un putekļusūcēju ar gaisa filtru, lai pasargātu plaušas no putekļu ieelpošanas.
- Diska apstrādes vai restaurāciju griešanas, slīpēšanas un pulēšanas laikā izmantojiet aizsargbrilles, lai novērstu putekļu iekļūšanu acīs. Ja putekļi iekļūst acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens un konsultējieties ar ārstu.
- Neizmantojiet produktu nekam citam kā tikai zobu restaurācijām. Šis produkts ir paredzēts tikai izmantošanai zobārstniecībā.
- Šo produktu drīkst izmantot tikai sertificēti zobārstniecības speciālisti.
- Krāsni uzkaršētiem priekšmetiem nepieskarieties ar kailām rokām.
- Neizmantojiet restaurācijas no saķepināšanas krāsns, kamēr tajā vēl pastāv augsta temperatūra, jo strauja atdzišanās izraisa plīsumus. Tomēr ja ar automātiskas atvēršanās funkciju aprīkota tipa krāsnij izmanto programmu 2 vai 3, restaurācijas var izņemt no krāsns, kad tās temperatūra ir 800°C (1472°F) vai zemāka. Pēc izņemšanas no krāsns restaurācijas ir jānovieto uz keramikas šķiedru paliktņa (piemēram, Noritake Porcelain Mat), lai nodrošinātu lēnu atdzišanu.
- Izmantojot krāsni saķepināšanas programmai 2 vai 3, starp programmā iestatīto temperatūru un faktisko temperatūru krāsnī var pastāvēt liela atšķirība. Lūdzu izmantot krāsni pēc tam, kad, sazinoties ar ražotāju ir noskaidrots, ka krāsns ir savietojama ar saķepināšanas programmu 2 vai 3 norādīto temperatūru. Ja kā saķepināšanas krāsni izmanto SpeedFire, restaurācijas no SpeedFire izņemot saķepināšanas programmas lietošanas norādījumus.
- Saķepināšanas programmu 2 vai 3 ir ieteicams izmantot tikai karkasiem (līdz 3 vienībām), FCZ kroņiem, FCZ tieltiem (līdz 3 vienībām), inlejām, onlejām un venīriem.**
- Šis produkts ir īpaši gaismcaurlaidīgs, tādēļ ir rūpīgi jāapsver, vai tas ir piemērots apakšā novietotas virsmas, piemēram, metāla abatmenta vai ļoti atkrāsota zoba sagataves, maskēšanai.
- Malas vajadzētu sagatavot ar dziļu pārkari un noapaļotiem pleciem, sagataves šķautnes un stūri jānoapaļo, lai tie nebūtu asi. Aksiālās virsmas leņķim jābūt no 5 līdz 15 grādu robežās.
- Sagatavojot zobus, novērsiet turpmāk minēto: dziļus plecus, J veida malas, asas šķautnes, zāģveida malas, abatmentus, kas nav koniski, iegriezumus, rievās, paliekošu caurumu veidošanas un asus stūrus.
- Protēžu izgatavošanai uzturiet turpmāk norādīto šī produkta biežumu.

Vieta un indikācija	Sienas biežums
Priekšzobu kronis vai tilts	0,8 mm vai vairāk
Venīrs	0,4 mm vai vairāk*
Sānu zobu kronis vai tilts	1,0 mm vai vairāk
Inleja vai onleja	1,0 mm vai vairāk

*0,4 mm vai biežāks šī produkta slānis ir paredzēts tikai no cirkonija dioksīda izgatavotiem venīriem. Izmantojot to kombinācijā ar porcelānu, lietojiet 0,8 mm vai biežāku slāni.

- Izgatavojot tiltus, konektoriem izmantojiet turpmāk norādītos šķēsgriezuma laukumus.

Vieta un indikācija	Konektora šķēsgriezuma laukums
Anteriori 2 vai 3 vienību tilti	12 mm ² vai vairāk
Premolāri 2 vai 3 vienību tilti	16 mm ² vai vairāk

- Izvēlieties toņu krāsu, kas ir gaišāka par biežai restaurācijai paredzēto krāsu, jo tā, atkarībā no restaurāciju biežuma, var izskatīties blāvāka.
- Ieteicams sausā frēzēšana. Izmantojot slapjo frēzēšanu, diska caurspīdība var samazināties.
- Ja restaurācijās konstatējat plaisu, nelietojiet tās.
- Iepriekš sniegtais ieteikums par saķepināšanu ir tikai informatīvs, atkarībā no katras atsevišķas krāsns īpašībām var būt nepieciešamas noteiktas korekcijas.
- Diska atdalīšanās novēršanai diska frēzēšanas laikā, pietuvinot plastmasas gredzenu frēzēšanas urbum, ievērojiet piesardzību. Diska frēzēšanu veiciet, atstājot cirkonija dioksīda daļu 2 mm kontaktā ar plastmasas gredzenu iekšpusi.
- Pirms visa diska saķepināšanas plastmasas gredzenu nogrieziet un noņemiet.
- Atbrīvojieties no šī produkta kā no medicīniskajiem atkritumiem, lai novērstu inficēšanos.

Ar lietošanu saistīta piesardzība:

- Neizmantojiet disku, ja pēc izņemšanas no iepakojuma pamanāt, ka tajā ir plaisa.
 - Ieteicams sausā frēzēšana. Izmantojot slapjo frēzēšanu, diska caurspīdība var samazināties.
 - Ja restaurācijās konstatējat plaisu, nelietojiet tās.
 - Iepriekš sniegtais ieteikums par saķepināšanu ir tikai informatīvs, atkarībā no katras atsevišķas krāsns īpašībām var būt nepieciešamas noteiktas korekcijas.
 - Diska atdalīšanās novēršanai diska frēzēšanas laikā, pietuvinot plastmasas gredzenu frēzēšanas urbum, ievērojiet piesardzību. Diska frēzēšanu veiciet, atstājot cirkonija dioksīda daļu 2 mm kontaktā ar plastmasas gredzenu iekšpusi.
 - Pirms visa diska saķepināšanas plastmasas gredzenu nogrieziet un noņemiet.
 - Atbrīvojieties no šī produkta kā no medicīniskajiem atkritumiem, lai novērstu inficēšanos.
- Glabāšana:**
- Glabājiet produktu vēsā un sausā vietā. Nepakļaujiet produktu tiešas saules gaismas iedarbībai.
 - Šis produkts jāglabā 10-30°C (50-86°F) temperatūrā.
 - Glabāšanas laikā neizmantojiet disku no iepakojuma.
 - Disks ir trausls, aplejiet ar to uzmanīgi.
 - Produkts ir jāglabā piemērotā vietā, kur tam var piekļūt tikai zobārstniecības personāls.
 - Produkts ir jāizmanto līdz derīguma termiņam, kas norādīts uz iepakojuma.

[GARANTĪJA]

Kuraray Noritake Dental Inc. nomainīs jebkuru pierādīti defektīvu produktu. Kuraray Noritake Dental Inc. neuzņemas atbildību ne par kādiem tiešiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko ir izraisījis šo produktu lietošana vai izmantošana vai nespēja šos produktus izmantot.


Pirms produktu izmantošanas to lietotājam ir jānosaka produktu piemērotība paredzētajam lietojumam, un lietotājs uzņemas visus ar produkta izmantošanu saistītos riskus un atbildību.

[PIEZĪME]

Ja notiek nopietns ar šo produktu saistāms incidents, ziņojiet par to turpmāk norādītajam ražotāja pilnvarotajam pārstāvim un lietotāja/pacienta dzīvesvietas valsts uzraudzības iestādēm.
„KATANA” un „CERABIEN” ir reģistrētas preču zīmes vai uzņēmuma NORITAKE CO., LIMITED preču zīmes.



UTML (Ultra Translucent Multi Layered)

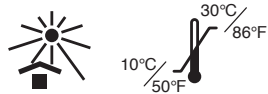

I. Įvadas

Ši naudojimo instrukcija skirta „KATANA Zirconia UTML“ (angl. Ultra Translucent Multi Layered) medžiagai. „KATANA Zirconia UTML“ yra 98,5 mm skersmens pakepintas cirkonio diskas su plastikiniu žiedu. Jie skirtas visoms frezavimo sistemoms, kuriose naudojamas tokio bendrojo tipo diskas. (Informacijos, kaip teisingai valdyti aparatą, ieškokite Jūsų naudojamos frezavimo sistemos techninėje instrukcijoje.) „KATANA Zirconia UTML“ galima įsigyti 2 skirtingų storų: (14 mm ir 18 mm) bei 20 įvairių atspalvių: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, EA1, EA2, EA3, ENW). „KATANA Zirconia UTML“ sudaro 4 pakopinių atspalvių sluoksnius. „KATANA Zirconia UTML“ rekomenduojama FCZ (angl. Full Contour Zirconia) restauracijoms ir karkasams gaminti. Bendroji šio gaminio klinikinė nauda yra atkurti danties funkciją laikantis tokių NAUDOJIMO PASKIRTIES/ NAUDOJIMO INDIKACIJŲ.

II. NAUDOJIMO PASKIRTIES/ NAUDOJIMO INDIKACIJŲ

„KATANA Zirconia“ naudojama bemažės keramikos restauracijoms (karkasams, FCZ vainikėliams, FCZ titeliams, įklotams, užklotams ir laminatėms) gaminti.

[Numatytasis naudotojas]

- Odontologai (restauracijų gamyba prie paciento; klinikinė darbo eiga)

- Odontologijos laboratorijos technikai (restauracijų gamyba odontologijos laboratorijoje)

III. Kepinimo programa

1 kepinimo programa

Temperatūra	Programuotas keitimas	Laikymo laikas
Patalpų temp. — 1550°C (2822°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1550°C (2822°F)	—	2 val.
1550°C (2822°F) – Patalpų temp.	-10°C/min. (-18°F/min.)	—

2 kepinimo programa

Temperatūra	Programuotas keitimas	Laikymo laikas
Patalpų temp. — 1400°C (2552°F)	50°C/min. (90°F/min.)	—
1400°C (2552°F) — 1500°C (2732°F)	4°C/min. (7°F/min.)	—
1500°C (2732°F) — 1560°C (2840°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1560°C (2840°F)	—	16 min
1560°C (2840°F) — Patalpų temp. (*)	-50°C/min. (-90°F/min.)	—

*Priklausomai nuo aplinkybių, restauracijas galima išimti esant 800°C (1472°F) arba žemesnei temperatūrai.

3 kepinimo programa

Temperatūra	Programuotas keitimas	Laikymo laikas
Patalpų temp. — 1450°C (2642°F)	120°C/min. (216°F/min.)	—
1450°C (2642°F) — 1600°C (2912°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1600°C (2912°F)	—	20 min
1600°C (2912°F) — Patalpų temp. (*)	-120°C/min. (-216°F/min.)	—

*Priklausomai nuo aplinkybių, restauracijas galima išimti esant 800°C (1472°F) arba žemesnei temperatūrai.

IV. Sudėtis

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Vienetai skliaustuose yra % masės.

V. Tipas ir klasė (ISO6872:2015)

II tipas/ 3 klasė

VI. Fizikinės savybės

Šiluminio plėtimosi koeficientas (25-500°C (77-932°F)): 9,7×10⁻⁶/K

VII. Naudojimo instrukcijos

- 1) Išimkite diską iš pakuotės ir įsitikinkite, kad jame nebūtų įtrūkių ar kitokių pažeidimų.
- 2) Įstatykite diską į frezavimo aparatą; tada pradėkite frezuoti, vadovaudamiesi techninėmis frezavimo sistemos instrukcijomis.
- 3) Baigę frezuoti deimantine freza ar pan., išpjaukite restauracijas iš disko.
- 4) Prie restauracijų prikibusius frezavimo nešvarumus arba dulkes galima nupūsti švelnia oro srove.
- 5) Sudėkite restauracijas į ugniai atsparų deginimo dėklą ir įdėkite jas į kepinimo krosnį.
- 6) Priklausomai nuo naudojamos kepinimo krosnies parametro, prieš kepinami restauracijas pagal pirmiau pateiktą kepinimo grafiką (III. Kepinimo programa) parinkite tinkamą.
- 7) Po kepinimo, jei reikia, restauracijas priderinkite deimantine dilde.
- 8) Įsitikinkite, kad restauracijose nėra įtrūkių.
- 9)-1 FCZ:

- Glazūravimas: paviršius, ypač kontaktines sritis, nupoliruokite iki stipraus blizgesio, tada įprastu būdu visus paviršius padenkite glazūra;
- 9)-2 Karkasai: dėkite ant karkasų odontologinį porcelianą (CERABIEN ZR arba CZR PRESS LF), vadovaudamiesi techninėmis gamintojo instrukcijomis. Patikrinkite techninėse gamintojo instrukcijose nurodytą porceliano šiluminio plėtimosi koeficientą, kad įsitikintumėte suderinamumą.

VIII. Pastabos dėl elgesio su medžiaga

Kontraindikacijos:

1. Jeigu pacientas alergiškas cirkonio oksidui arba kuriam nors kitam komponentui, šio produkto naudoti negalima.
2. Nenaudokite šio produkto 4+ elementų titeliams, gembiniais titeliams arba titeliams su krūminiais dantimis gaminti.

Ispėjimas:

jei pacientui arba odontologui atsirastų per didelio jautrumo reakcijos, pvz., bėrimas, dermatitas ir pan., nebenaudokite produkto ir nedelsdami pasikonsultuokite su gydytoju.

Dėmesio

1. Šio produkto naudoti negalima, jeigu diagnozuotas netaisyklingas sąkandis, žandikaulio spaudimas arba bruksizmas.
2. Kad apsaugotumėte plaučius nuo įkvėpiamų dulkių, frezuodami diską arba pjaustydami, šlifudami ir poliruodami restauracijas dėvėkite sertifikuotą dulkių kaukę ir naudokite nusiurbimą su oro filtru.
3. Kad dulkių nepatektų į akis, frezuodami diską arba pjaustydami, šlifudami ir poliruodami restauracijas dėvėkite saugos akinius. Jei į akis patektų dulkių, jas tuoj pat praskalaukite dideliu kiekiu vandens ir pasikonsultuokite su gydytoju.
4. Nenaudokite jokiems kitiems tikslams, tik odontologinėms restauracijoms. Šis produktas skirtas tik odontologinėms taikmenoms.
5. Šį produktą gali naudoti tik odontologijos specialistai.
6. Nelieskite krosnyje įkaitintų daiktų plikomis rankomis.
7. Netraukite restauracijų iš labai karštos kepinimo krosnies, nes staigus atvėsimas sukelia skilimus. Tačiau jei pagal 2 arba 3 kepinimo programą naudojama automatiškai atsidarancio tipo krosnis, restauraciją galima išimti iš krosnies esant 800°C (1472°F) arba žemesnei temperatūrai. Išėmus iš krosnies, restauracijas reikia padėti ant padėklo iš keraminio pluošto (pavyzdžiui, „Noritake Porcelain Mat“), kad jos galėtų lėtai atvėsti.
8. Naudojant krosnį 2 arba 3 kepinimo programa, tarp temperatūros nuostatų programoje ir tikrosios temperatūros krosnyje gali būti didelis skirtumas. Krosnį naudokite tik patikrinę su gamintoju, ar krosnis yra suderinama su temperatūra, nurodyta 2 arba 3 kepinimo programoje. Jeigu kaip kepinimo krosnis naudojama „SpeedFire“, restauraciją iš „SpeedFire“ išimkite, kaip nurodo kepinimo programa.
9. **2 arba 3 kepinimo programa rekomenduojama tik karkasams (iki 3 elementų), FCZ vainikėliams, FCZ titeliams (iki 3 elementų), įklotams, užklotams ir laminatėms.**
10. Šis produktas yra iš dalies pusskaidris, todėl reikia atidžiai apsvarstyti jo tinkamumą naudoti maskuojant apatinį paviršių, pvz., metalinę atramą arba labai tamsius ar pakitusios spalvos dantis.
11. Kraštus reikia paruošti su gilia nuosklemba ir apvalintais pečiais, nufrezuojant briaunis ir užapvalinant kampus, kad būtų išvengta aštrių paruošimo kampų. Ašinių paviršių kampas turėtų būti nuo 5 iki 15 laipsnių.
12. Paruošdami dantį venkite tokių dalykų: gilių pečių, J formos kraštų, aštrių keturių, dantytų kraštų, nekūginių atramų, apatinių įkurtų, kreipiamųjų griovelių, retencinių skylių susidarymo ir aštrių kampų.
13. Protezams gaminti išlaikykite tokį šio produkto storį.

Vieta ir indikacija	Sieneles storis
Priekinis vainikėlis arba titelis	0,8 mm arba daugiau
Laminatė	0,4 mm arba daugiau*
Užpakalinis vainikėlis arba titelis	1,0 mm arba daugiau
Įklotas arba užklotas	1,0 mm arba daugiau

*0,4 mm arba daugiau šiam produktui taikoma gryno cirkonio laminatėms. Jei jis naudojamas derinant su porcelianu, storis turi būti 0,8 mm arba daugiau.

14. Gamindami titelius, jungtims naudokite tokius skerspjuvius.

Vieta ir indikacija	Jungties skerspjuvis
Priekiniai 2 arba 3 elementų titeliai	12 mm ² arba daugiau
Premoliaras 2 arba 3 elementų titeliai	16 mm ² arba daugiau

15. Storoms restauracijoms rinkitės šviesesnio atspalvio spalvą, nei numatyta spalva, nes, priklausomai nuo restauracijos storio, ji gali atrodyti tamsesnė.
16. Pirmą kartą naudojant kepinimo krosnį ir keičiant kepinimo sąlygas, spalvos po kepinimo gali skirtis. Sukepinkite mažą cirkonio gabalėlį ir patikrinkite spalvą.

Perspėjimai dėl naudojimo

1. Nenaudokite disko, jei išėmę jį iš pakuotės pastebite įtrūkių.
2. Rekomenduojama frezuoti sausiai. Naudojant šlapįjį frezavimą gali sumažėti disko translucencija.
3. Nenaudokite restauracijos, jei pastebite joje įtrūkių.
4. Pirmiau pateiktos kepinimo rekomendacijos yra tik gairės; jas gali prireikti priderinti kiekvienai konkrečiai krosniui.
5. Frezuodami diską, artėdami su freza prie plastikinio žiedo būkite atsargūs, kad disko neatskirtumėte. Frezuokite diską taip, kad iš vidinės plastikinio žiedo pusės liktų 2 mm cirkonio.
6. Prieš kepinami visą diską, plastikinį žiedą perpjaukite ir nuimkite.
7. Išmeskite šį produktą kaip medicininę atlieką, kad užkirstumėte kelią infekcijai.

Laikymas

1. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
2. Produktą reikia laikyti 10-30°C (50-86°F) temperatūroje.
3. Produktą laikykite neišėmę iš pakuotės.
4. Diskas yra trapus ir su juo reikia elgtis atsargiai.
5. Produktas turi būti laikomas saugioje vietoje, prieinamoje tik odontologams.
6. Sunaudokite produktą iki nurodytos ant pakuotės tinkamumo naudoti datos.

[GARANTIJA]

„Kuraray Noritake Dental Inc.“ pakeis bet kokį produktą, kuris tikrai yra sugedęs. „Kuraray Noritake Dental Inc.“ neprisiima atsakomybės už jokių tiesioginių, pasekminių ar specialiųjų nuostolių ar žalą, atsiradusių dėl šių produktų naudojimo ar taikymo ar negalėjimo juos naudoti. Prieš naudojimą naudotojas privalo įsitikinti, kad produktas yra tinkamas numatytaam naudojimui būdai ir prisijima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę.

[PASTABA]

Įvykus rimtam incidentui, kurio priežastis yra šis produktas, praneškite apie tai toliau nurodytam įgaliotam gamintojo atstovui ir šalies, kurioje gyvena naudotojas/pacientas, priežiūros institucijomis. „KATANA“ ir „CERABIEN“ yra „NORITAKE CO., LIMITED“ registruotieji prekės ženklai arba prekės ženklai.