

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSALFÄRGER

KLINISKT FALL



FALL AV DR. LUCA DUSI

- Examen med hedersbetyg i Odontologi och Oral protetik vid University of Milan 2010.
- Under 2011/2012 och 2012/2013 var han adjunkt i protetisk teknologi vid University of Milan-Bicocca.
- Medlem av SIdp (Italian Society of Periodontology) och AIC (Italian Academy of Conservation).

Av rent estetiska skäl, bad denna patient om en rekonstruktion av hennes konformade övre högra laterala incisiv (12). Patienten erbjöds en behandling som inkluderade en första fas av ortodontisk terapi, med målet att skapa det nödvändiga utrymmet för att kunna rekonstruera den laterala incisiven till sin ideala storlek. Då patienten avböjde att genomgå denna ortodontiska terapi, beslöts det att restaurera tanden med komposit och anpassa storleken till det utrymme som redan fanns tillgängligt.

Det använda adhesivsystemet var CLEARFIL™ SE BOND 2, medan restorationerna skapades med den nya kompositen CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal. Även om detta material är designat för enfärgstekniken med endast två färger som matchar de anteriora färgerna, beslöt jag att kombinera de båda pastorna för att uppnå bästa möjliga resultat. Färgen UD (Universal Dark) användes för att rekonstruera den cervikala och centrala delen av den laterala incisiven. Den incisala delen restaurerades med UL (Universal Light).



Fig. 1.

Initial situation med den konformade övre högra laterala incisiven (12).

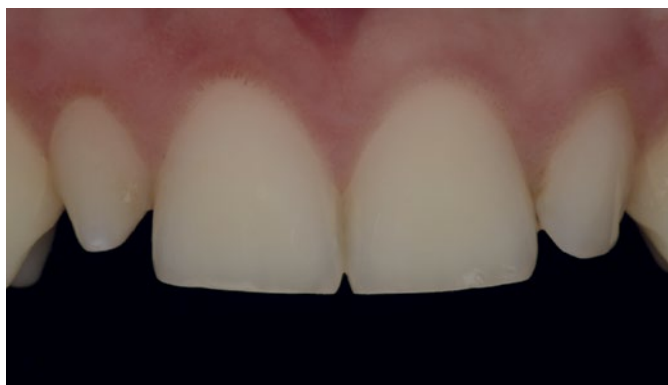


Fig. 2.

Bild av den initiala situationen tagen med ett polariserande filter för utvärdering av färgen.



Fig. 3.

Den nya kompositen CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal med endast två färger för den anteriora regionen valdes. Den ger god optisk integration tack vare Kuraray Noritake Dentsals ljusdiffusionsteknologi.



Fig. 4.

Bestämning av färg med hjälp av härdade prover av CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal UL (Universal Light) och UD (Universal Dark) på tandytorna.



Fig. 5.

Isolering med kofferdam.



Fig. 6.

CLEARFIL™ SE BOND 2 använd för att skapa en stark bindning mellan tandstrukturen och kompositmaterialet.



SLUTLIG SITUATION

Fig. 7.

Universalkompositen smälter väl in med de omgivande tänderna med både färg och ytfinish.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal **Universalfärger**

BESÖK PRODUKTSIDAN ONLINE FÖR MER DETALJER

VAD DU KAN HITTA ONLINE

- ✓ Generell information om CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universals färger
- ✓ Hela produktsortimentet
- ✓ Säkerhetsdatablad



KURARAYNORITAKE.EU/SE/CLEARFIL-MAJESTY-ES2-UNIVERSAL