

ONE STRONG FAMILY

PANAVIA™

SOLUȚIA TUTUROR NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ DE CIMENTARE

PANAVIA™ V5 RESIN CEMENT

Rezistent și estetic

PANAVIA™ Veneer LC

Specialistul în fațete

PANAVIA™ SA Cement Universal


Cimentul Dumneavoastră zilnic

BORN IN JAPAN

ESENȚA PANAVIA™

Totul a început în 1983, odată cu lansarea PANAVIA™ EX, primul ciment rășinic adeziv care conținea monomerul MDP original, dezvoltat de Kuraray Noritake Dental Inc. Datorită adeziunii sale fiabile, brandul PANAVIA™ a câștigat rapid încrederea medicilor stomatologi din întreaga lume. Pentru a pune bazele unor protocoale de cimentare adezivă mai simple și mai eficiente, precum și pentru a obține rezultate estetice excelente, formulele existente au fost perfecționate, iar tehnologii complet noi au fost dezvoltate. Rezultatul este actuala gamă de cimenturi rășinice PANAVIA™ – ușor de utilizat, cu estetică superioară și o rezistență a adeziunii de cel mai înalt nivel.

ISTORIA THE PANAVIA™

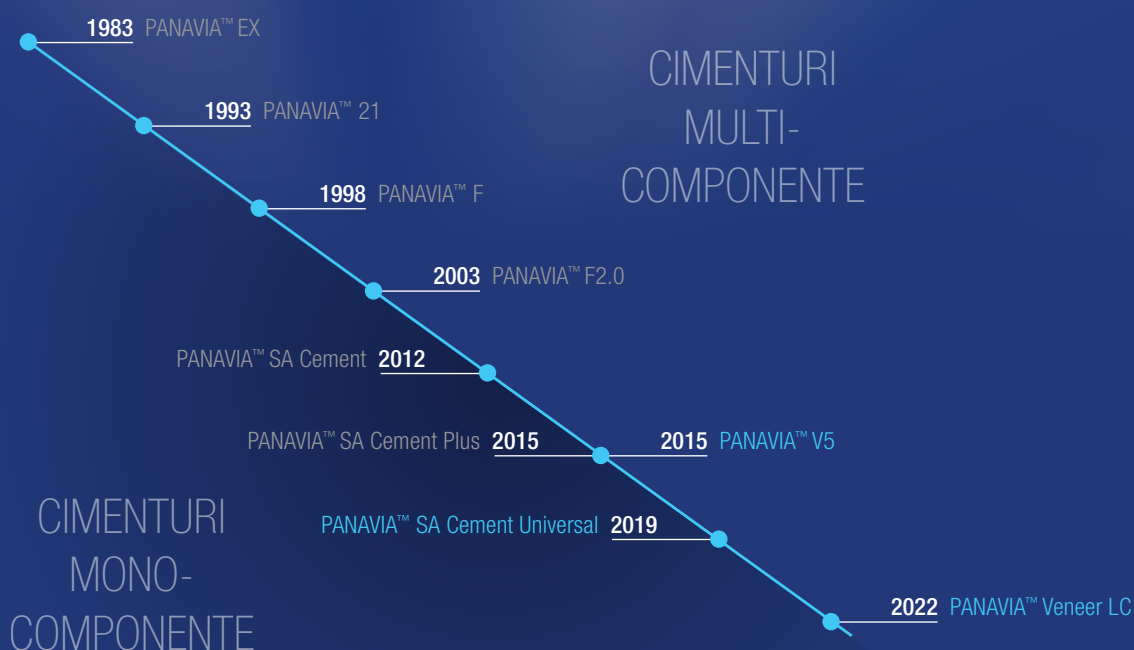

FAMILIA PANA VIA™

FORȚA CELOR TREI

Având în vedere preferințele individuale diferite și nevoile specifice fiecărei indicații, probabil că nu va fi niciodată posibil să oferim un ciment rășinic unic, pentru toată lumea și pentru toate indicațiile. Cu toate acestea, Kuraray Noritake Dental Inc. este convinsă că trei sisteme diferite de cimentare sunt suficiente pentru a satisface nevoile și dorințele fiecărui medic și pacient.

PANA VIA™ SA Cement Universal

CIMENTUL DUMNEAVOASTRĂ ZILNIC



Pentru cei care își doresc o cimentare cât mai simplă și vor să înlocuiască cimentarea convențională în practica zilnică. Mai puțini pași de lucru, mai puține primere și mai puțin timp dedicat cimentării - fără niciun compromis în privința rezultatelor.

● ● ● ● ● Procedură ușoară
● ● ● ● ● Estetică

PANA VIA™ V5

REZISTENT ȘI ESTETIC



Alegerea ideală pentru un sistem de cimentare predictibil, care asigură în mod constant o adeziune extrem de rezistentă și durabilă, oferind în același timp rezultate estetice de excepție.

● ● ● ● ● Procedură ușoară
● ● ● ● ● Estetică

PANA VIA™ Veneer LC

SPECIALISTUL FAȚETELOR



Doriți să cimentați simultan mai multe fațete, fără a fi constrânși de timpul de priză? Conceput special pentru aceste indicații, PANA VIA™ Veneer LC vă oferă control deplin și este soluția ideală pentru această procedură.

● ● ● ● ● Procedură ușoară
● ● ● ● ● Estetică

Fațete



Inlay/Onlay



Coroane Anterioare



Coroane Posterioare



Punți cu 3 elemente



Punți cu mai multe elemente



Coroane/Punți pe implanturi



PANA VIA™ Veneer LC



PANA VIA™ V5



PANA VIA™ SA Cement Universal



PANAVIA™ SA Cement Universal

NU NECESITĂ
PRIMER



PĂSTRAȚI LUCRURILE CÂT MAI SIMPLE POSIBIL!

Doriți să reduceți numărul etapelor de lucru și al primerei utilizate, economisind timp, fără a face compromisuri în privința rezultatelor? Atunci PANAVIA™ SA Cement Universal este alegerea ideală. Datorită integrării a doi monomeri specifici, acest ciment rășinic autoadeziv cu priză duală oferă o adeziune rezistentă și de lungă durată, aderând chimic la toate materialele de restaurare și la suprafețele dentare, fără a necesita utilizarea unui primer separat. Prin urmare, este soluția ideală pentru procedurile de rutină, precum cimentarea coroanelor și punților, indiferent dacă acestea sunt realizate din zirconiu, disilicat de litiu, ceramică hibridă sau metal.

CIMENTUL ZILNIC

BENEFICII ȘI INDICAȚII

BENEFICII

- ✓ Adeziune la zirconiu și disilicat de litu fără primeri suplimentari
- ✓ Curățare foarte ușoară a excesului
- ✓ Depozitare la temperatura camerei*
- ✓ Aplicare ușoară cu presiune mică
- ✓ Disponibil cu mixare automată sau manuală

*sub 25°C, în ciuda prezenței silanului (LCSI)

INDICAȚII

- ✓ Cimentarea coroanelor, punților, inlay și onlay
- ✓ Cimentarea restaurărilor protetice pe pivoți și implant
- ✓ Cimentarea punților adezive și a contențiilor
- ✓ Cimentarea pivoților
- ✓ Adeziune la amalgam

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conținut de umplură:	62% greutate (40% volum)
Rezistență la încovoiere ^{1,2} :	91 MPa
Modul de încovoiere ^{1,2} :	4,6 GPa
Rezistență la compresie ¹ :	301 MPa
Temperatura de depozitare:	2-25°C / 36-77°F


Absorbție de apă ^{1,2} :	27 μg/mm ³
Grosimea filmului:	Aprox. 14 μm
Radioopacitate ² :	170% Al
Eliberare de ioni F:	67 micro-g/g
Timp de lucru (23°C):	60 sec.

¹ Priza duală (combinație de autopolimerizare și fotopolimerizare). ² Conform ISO 4049: 2009.
Sursa: Kuraray Noritake Dental Inc.

Rezultatul final poate fi influențat de condiții minore de evaluare stipulate de reglementările ISO.


PERFORMANȚA PANAVIA™ SA Cement Universal

REZISTENȚA ADEZIUNII LA FORFECARE LA MATERIALELE DE RESTAURARE

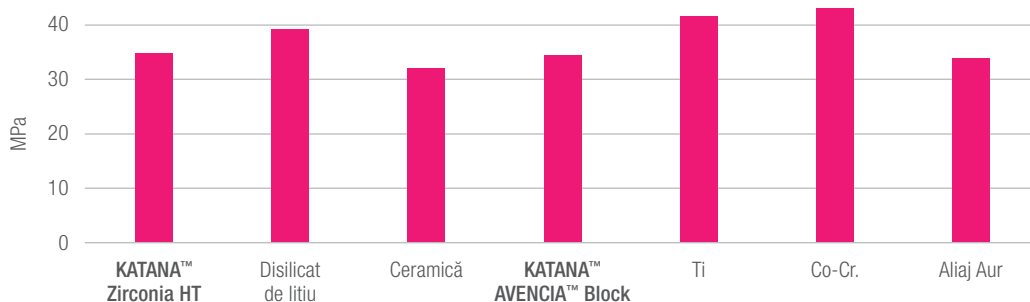

Sursa datelor:
Kuraray Noritake Dental Inc.

REZISTENȚA ADEZIUNII LA FORFECARE LA STRUCTURA DENTARĂ

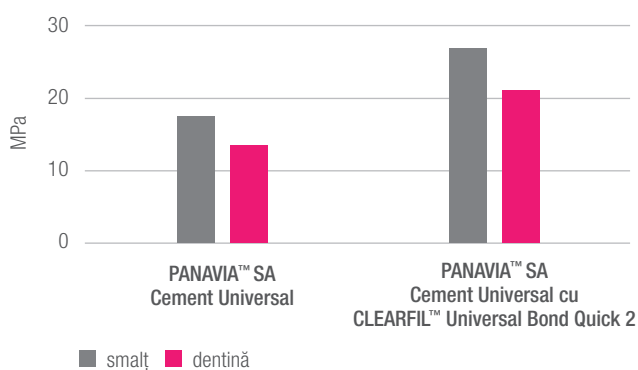

Condiții de testare:
Suprafață de adeziune: dinte uman #1000 suprafață lustruită, suprafață de adeziune: diametru 3 mm.
Lampă: PenCure 2000 mod standard.
Depozitat în apă la 37°C timp de 24 de ore.

Sursa datelor:
Kuraray Noritake Dental Inc.




CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 poate fi utilizat pe structura dentară pentru a îmbunătăți rezistența adesiunii în cazurile cu retenție scăzută. Această combinație elimină necesitatea utilizării CLEARFIL™ DC ACTIVATOR.



Îndepărtare ușoară a excesului
Delicat cu gingia, permite îndepărtarea ușoară a excesului de ciment. Obțineți de fiecare dată o curățare rapidă și fără probleme!



TREI NUANȚE ESTETICE

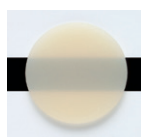

Universal (A2)
(pentru toate cazurile)



Alb
(mai multă luminozitate)



Translucent
(mai multă transluciditate)

TEHNOLOGII

Innovative LCSi Monomer Technology (Tehnologia inovatoare a monomerului LCSi) sub forma unui agent de cuplare silanic, cu lanț lung de carbon brevetat, asigură adeziunea la ceramica pe bază de sticlă, disilicatul de litiu, ceramica hibridă și rășina compozită.

Monomerul MDP original realizează adeziune chimică la zirconiu, metal, dentină și smalț.



COMPONENTE

PANAVIA™ SA Cement Universal

PANAVIA™ V5



ALEGEȚI CEA MAI REZISTENTĂ ȘI MAI ESTETICĂ SOLUȚIE PENTRU FIECARE INDICAȚIE

Căutați un sistem de cimentare predictibil care asigură în mod constant o adeziune extrem de rezistentă și durabilă, oferind în același timp rezultate estetice ridicate? Dacă da, atunci PANAVIA™ V5 este soluția dumneavoastră ideală. Cimentul cu priză duală asigură cea mai mare rezistență la adeziune și estetică din gama de cimenturi PANAVIA™, permițându-vă să cimentați cu încredere restaurările. Componentele sale bine aliniate sunt o alegere excelentă pentru o gamă largă de restaurări indirecte și pentru proceduri post-and-core (pivot-și-reconstrucție) – și sunt întotdeauna combinate și aplicate în același mod.

PENTRU PROCEDURI PREDICTIBILE

BENEFICII ȘI INDICAȚII

BENEFICII

- ✓ Adeziune puternică și durabilă la dinte și restaurare
- ✓ Estetică excelentă și stabilitate a culorii
- ✓ Aplicare, priză și curățare ușoare
- ✓ Aceleași componente și procedură utilizate pentru fiecare indicație
- ✓ Pastele de testare oferă un rezultat estetic predictibil

INDICAȚII

- ✓ Cimentarea coroanelor, punților, inlay și onlay
- ✓ Cimentarea fațetelor
- ✓ Cimentarea punților adezive și a contențiilor
- ✓ Cimentarea restaurărilor protetice pe pivoți și bonturi de implant
- ✓ Cimentarea pivoților
- ✓ Adeziune la amalgam

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conținut de umplutură:	61% greutate (38% volum)	Grosimea peliculei ^{1,2} :	12 μm
Rezistență la încovoiere ^{1,2} :	127 MPa	Radioopacitate ² :	180% Al
Modul de încovoiere ^{1,2} :	6,3 GPa	Eliberare de ioni F (28 zile) ¹ :	58 μg/g
Rezistență la compresiune ¹ :	310 MPa	Timp de lucru (23°C):	2 min.
Absorbție de apă ^{1,2} :	21 μg /mm3		


¹ Priza duală a pastei (combinație de auto- și foto-polimerizare). ² Conform ISO 4049:2009.

Sursa: Kuraray Noritake Dental Inc. Rezultatul final poate fi influențat de condiții minore de evaluare. Consultați reglementările ISO.

PERFORMANȚA PANAVIA™ V5

REZISTENȚA ADEZIUNII LA STRUCTURA DENTARĂ

(rezistență la forfecare a dintelui uman: după 3000 de cicluri termice)

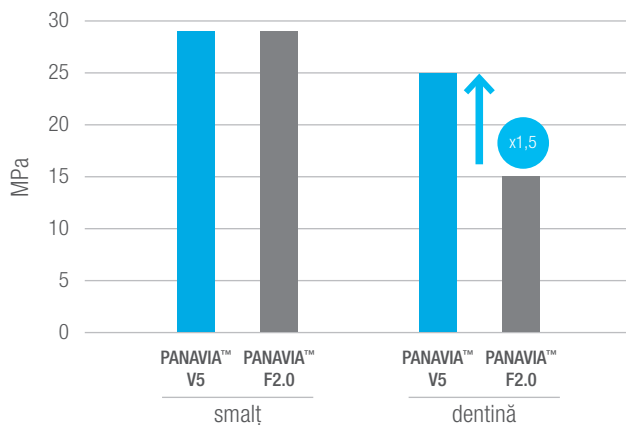


Condiții de măsurare

Probele au fost dinți umani lustruiți cu granulație #1000 (pentru testul de rezistență la forfecare) și dinți bovini lustruiți cu granulație #1000 (pentru testul de rezistență la tracțiune), pe o suprafață aderentă de 3 mm. Marginile acestora au fost fotopolimerizate din două direcții folosind Pen Cure 2000 timp de câte 10 secunde fiecare (pentru testul de rezistență la forfecare) sau autopolimerizate (pentru testul de rezistență la tracțiune). După polimerizare, au fost imersate în apă la 37°C timp de o zi, supuse unor cicluri termice (4-60°C), de 3000 de ori (TC3000) sau de 4000 de ori (TC4000) și evaluate în funcție de tip fie pentru rezistența la forfecare, fie pentru rezistența la tracțiune.

REZISTENȚA ADEZIUNII LA RESTAURARE

(după 3000 de cicluri termice)

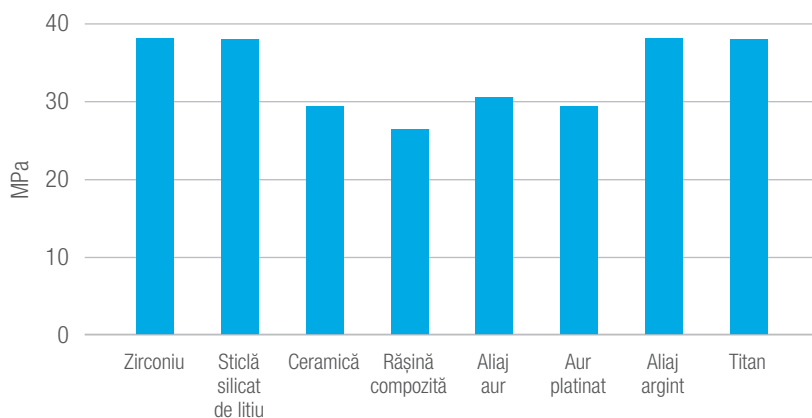

Condiții de măsurare:


Sablare (zirconiu, alte metale decât titanul, rășină compozită)
Lustruire cu granulație #1000 (ceramică, sticlă, titan)
Suprafață aderentă: 5 mm ø
După aplicarea CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS pe suprafața aderentă, s-a aplicat PANAVIA™ V5 peste aceasta, iar restaurarea a fost ținută sub presiune. Marginile restaurării au fost fotopolimerizate din două direcții, timp de 10 secunde fiecare, folosind Pen Cure 2000. Ansamblul a fost scufundat în apă (37°C) timp de o zi, supus unui ciclu termic (4-60°C, de 3000 de ori) și apoi evaluat pentru rezistența adeziunii.

Instrument de măsurare:

Autograph AG-100kN (Shimadzu) la o viteză a capului transversal de 1 mm/min.

Măsurat de Kuraray Noritake Dental Inc.: Valorile pot varia în funcție de condițiile de măsurare.

STABILITATEA NUANȚEI

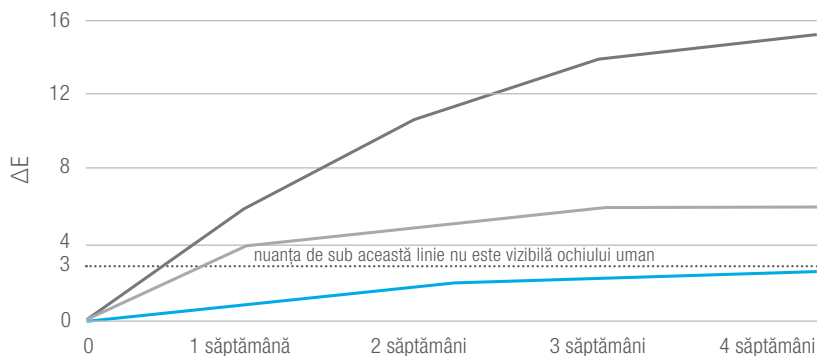

Sursă: Kuraray Noritake Dental Inc. Probele au fost maturate în apă la 70 de grade Celsius.

* Nu este o marcă înregistrată a Kuraray Co., Ltd.



CINCI NUANȚE FOARTE ESTETICE

Cu o nuanță care se potrivește cerințelor individuale, se obțin cu ușurință rezultate realiste. Pastele de testare PANA VIA™ V5 Try-in sunt disponibile în aceleași nuanțe.



Universal (A2)
(pentru toate cazurile)



Transparent
(mai multă transluciditate)



Maro (A4)
(mai multă cromă)



Alb
(mai multă luminozitate)



Opac
(mai multă mascare)

TEHNOLOGIE TOUCH-CURE

Blochează interfața adezivă la contactul dintre PANA VIA™ V5 Tooth Primer și PANA VIA™ V5 Paste și stabilește o adeziune puternică la smalț și dentină. În același timp, grăbește priza (auto-polimerizarea) cimentului cu priză duală pentru o eficiență crescută.



Monomerul MDP din PANA VIA™ V5 Tooth Primer și CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS este responsabil pentru adeziunea chimică la zirconiu, metal, dentină și smalț.

COMPONENTE

PANA VIA™ V5 Paste
PANA VIA™ V5 Tooth Primer
CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS
K-ETCHANT Syringe
Paste de testare PANA VIA™ V5 Try-in

PANAVIA™ Veneer LC



ACORDAȚI-VĂ TIMPUL NECESAR PENTRU SARCINILE COMPLEXE

Doriți să cimentați simultan mai multe fațete, fără a fi constrânși de timpul de priză? Conceput special pentru aceste indicații, PANAVIA™ Veneer LC este exact ceea ce aveți nevoie. Oferă un timp de lucru extins de 200 de secunde*, cu opțiunea de a începe fotopolimerizarea oricând sunteți gata. Vâscozitatea și consistența adecvate ale pastei PANAVIA™ Veneer LC permit dozarea și poziționarea ușoară. În timpul procesului de dezvoltare, s-a acordat o atenție deosebită stabilității cromatice a celor patru nuanțe, care sunt foarte rezistente la colorarea marginală și contribuie astfel la menținerea esteticii pe termen lung. Îndepărtarea ușoară a excesului de material după polimerizarea ușoară (tack-curing) și rezistența excelentă a adeziunii completează acest ansamblu de beneficii.

*Timp de lucru: sensibilitate la lumină (8000 lux, ISO 4049)

SARCINĂ COMPLEXĂ, SOLUȚIE EXCELENTĂ

BENEFICII ȘI INDICAȚII

BENEFICII

- ✓ Manipulare optimizată datorită vâscozității adecvate
- ✓ Curățare ușoară după polimerizarea de o secundă
- ✓ Margini nedetectabile datorită grosimii reduse a peliculei și a umpluturii sferice submicronice
- ✓ Lustruire excelentă și stabilitate a culorii pentru o estetică de lungă durată
- ✓ Adeziune puternică și durabilă

INDICAȚII

- ✓ Cimentarea inlay, onlay, fațetelor laminate ceramice și composite cu o grosime mai mică de 2 mm


SPECIFICAȚII TEHNICE

Conținut de umplură:	66% greutate (47% volum)	Grosimea filmului:	Aprox. 8 μm
Rezistență la încovoiere ^{1,2} :	111 MPa	Radioopacitate ² :	110% Al
Modul de încovoiere ^{1,2} :	5,4 GPa	Timp de lucru ³ :	200 sec.
Rezistență la compresiune ¹ :	388 MPa		


¹ Fotopolimerizare (combinație de autopolimerizare și fotopolimerizare). ² Conform ISO 4049. ³ Timp de lucru: sensibilitate la lumină (8000 lux, ISO 4049).
Sursa: Kuraray Noritake Dental Inc. Rezultatul final poate fi influențat de condiții minore de evaluare stipulate de reglementările ISO.

PERFORMANȚA PANAVIA™ Veneer LC


REZISTENȚA ADEZIUNII LA FORFECARE LA DINȚII UMANI

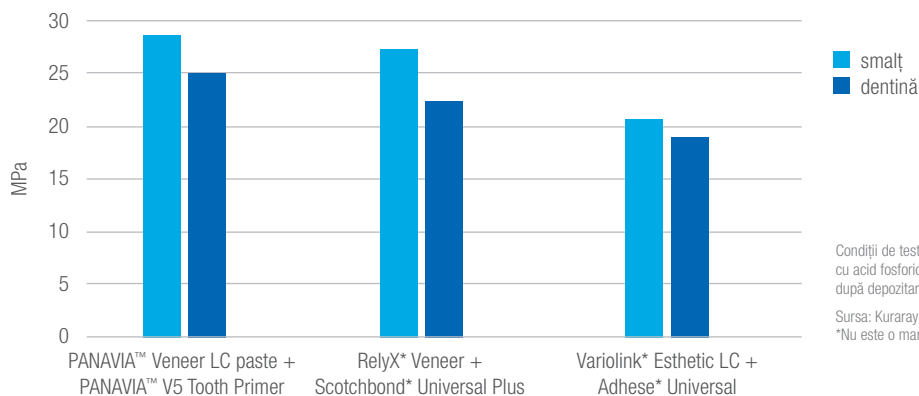

REZISTENȚA ADEZIUNII LA FORFECARE LA MATERIALUL DE RESTAURARE

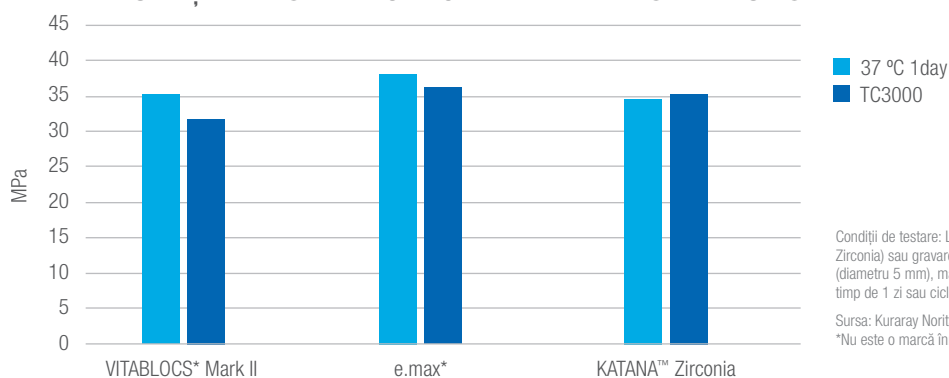

RETENȚIA LUCIULUI

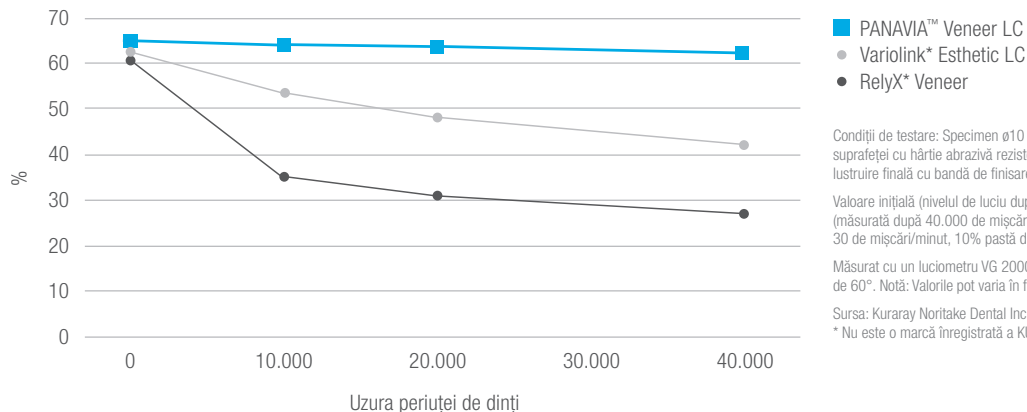



PATRU NUANȚE FOARTE ESTETICE

Cu o nuanță care se potrivește cerințelor individuale, se obțin cu ușurință rezultate realiste. Pastele de testare PANAVIA™ V5 Try-in sunt disponibile în aceleași nuanțe.



Universal (A2)
(pentru toate cazurile)



Transparent
(mai multă transluciditate)



Maro (A4)
(mai multă cromă)



Alb
(mai multă luminozitate)

TEHNOLOGIE TOUCH-CURE

Inițiază polimerizarea exclusiv la interfața dinte-ciment și stabilește o adeziune puternică la smalț și dentină, fără a afecta reacția de priză a cimentului.



Monomerul MDP din PANAVIA™ V5 Tooth Primer și CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS este responsabil pentru adeziunea chimică la zirconiu, metal, dentină și smalț.

COMPONENTE

PANAVIA™ Veneer LC Cement
PANAVIA™ V5 Tooth Primer
CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS
K-ETCHANT Syringe
Paste de testare PANAVIA™ V5 Try-in

PROTOCOL DE CIMENTARE

PANAVIA™ Veneer LC



KATANA™ Cleaner



ÎNDEPĂRTEAZĂ CONTAMINAREA PENTRU A OPTIMIZA TEHNICILE ADEZIVE

Calitatea adeziunii (și odată cu aceasta, performanța restaurărilor indirecte) nu se bazează doar pe sistemul de cimentare selectat și utilizarea corectă a acestuia; suprafețele curate sunt, de asemenea, o condiție prealabilă pentru succesul adeziunii pe termen lung. Soluția KATANA™ Cleaner a fost dezvoltată special pentru a optimiza procedurile de cimentare adezivă. Are un efect de curățare ridicat datorită caracteristicii tensioactive a sării MDP. Potrivită pentru utilizare intra- și extra-orală, este o soluție excelentă pentru curățarea suprafețelor de adeziune (pe dinți și restaurări), care sunt potențial contaminate cu salivă sau sânge după proba intraorală.

PENTRU TOATE PROCEDURILE DE RESTAURARE

BENEFICII ȘI INDICAȚII


BENEFICII

- ✓ Utilizare intra- și extra-orală
- ✓ Efect de curățare ridicat
- ✓ Procedură ușoară – pensulare, clătire și uscare
- ✓ Aplicare rapidă – 10 secunde de pensulare
- ✓ Performanță de curățare bine documentată de universități*

INDICAȚII

- ✓ Curățarea vitroceramicii contaminate, a restaurărilor din zirconiu, rășină, metal și a pivoților din fibră după proba intraorală.
- ✓ Curățarea dintelui preparat (carie, canal radicular și bont dentar) și a bontului implantului.

REZISTENȚA ADEZIUNII LA FORFECĂRE LA KATANA™ Zirconia HT

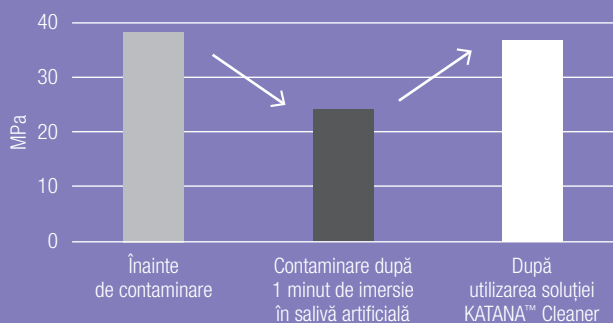

Condiții de măsurare:
Suprafața substratului:
După șlefuire #1000, sablare cu alumina.
Suprafață de acoperire ø 5 mm, măsurată la 37°C
depozitare sub apă timp de 1 zi

Ciment: PANAVIA™ V5
Sursa datelor: Kuraray Noritake Dental Inc.
Valorile numerice variază în funcție de condițiile de măsurare.

DESCHIDERE CU O MÂNĂ



* Fucong T. și colab., Eficiența diferitelor metode de curățare asupra adeziunii cimentului rășinic la zirconiu contaminat cu salivă sau cu sânge, J Dent. 2022 Mar 3;120:104084.
Taiseer A. și colab., Curățarea suprafeței de zirconiu înainte de cimentare: Un studiu comparativ al diferitelor metode și soluții, J Prosthodont. Martie 2022;31(3):239-244.
Fucong T. și colab., Efectele curățării suprafeței dentinei asupra adeziunii unui sistem autogrant la dentina contaminată cu sigilant de canal, J Dent. Septembrie 2021; 112: 103766.

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ

PANAVIA™ V5



PROFESSIONAL KIT - #3600-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [o seringă per nuanță (2,4 ml/4,2 g): Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque], Pastă de testare PANAVIA™ V5 Try-in Paste [o seringă per nuanță (1.8 ml): Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque], K-ETCHANT Syringe (3 ml), 30 Vârfuri de mixare, 10 Vârfuri Endo (S)¹, 50 Aplicatoare (fine<argintii>)¹, 1 Recipient de mixare (FPN)¹, 20 Vârfuri (E)¹



STANDARD KIT - Universal (A2) #3601-EU - Clear #3602-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [o seringă per nuanță (4,6 ml/8,1 g): Universal (A2), Clear], K-ETCHANT Syringe (3 ml), 15 Vârfuri de mixare, 5 Vârfuri Endo (S)¹, 50 Aplicatoare (fine<argintii>)¹, 1 Recipient de mixare (FPN)¹, 20 Vârfuri (E)¹



INTRODUCTORY KIT - Universal (A2) #3604-EU - Clear #3605-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [o seringă per nuanță (2,4 ml/4,2 g): Universal (A2), Clear], 10 Vârfuri de mixare, 50 Aplicatoare (fine<argintii>)¹, 1 Recipient de mixare (FPN)¹

REFILL

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (4 ml) #3635-EU

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (4 ml) #3637-EU

PANAVIA™ V5 Paste (4,6 ml/8,1 g), 20 VÂRFURI MIXARE

Universal (A2)	#3611-EU	Clear	#3612-EU
Brown (A4)	#3613-EU	White	#3614-EU
Opaque	#3615-EU		

PANAVIA™ V5 Try-in Paste (1,8 ml)

Universal (A2)	#3621-EU	Clear	#3622-EU
Brown (A4)	#3623-EU	White	#3624-EU
Opaque	#3625-EU		

K-ETCHANT Syringe (3 ml),

20 Needle tips (E) #3252-EU

Vârfuri mixare (20 vârfuri) #3626-EU

Vârfuri endo (S) (20 vârfuri) #3629-EU



PANAVIA™ SA Cement Universal



SINGLE PACK HANDMIX

#4202-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Handmix (Universal (A2))

#4203-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Handmix (White)

#4204-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Handmix (Translucent)

1 seringă per nuanță (9,2 g/5,0 ml)

VALUE PACK HANDMIX

#4206-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Handmix Double Pack (Universal (A2))

2 seringi per nuanță (9,2 g/5,0 ml), Spatulă mixare, Pad mixare



SINGLE PACK AUTOMIX

#4212-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix (Universal (A2))

#4213-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix (White)

#4214-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix (Translucent)

1 seringă per nuanță (8,2 g/4,6 ml), 20 Vârfuri mixare

VALUE PACK AUTOMIX

#4210-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix Value Pack (Universal (A2))

#4211-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix Value Pack (Translucent)

3 seringi per nuanță (8,2 g/4,6 ml), 40 Vârfuri mixare, 10 Vârfuri endo (SS)



#4218-EU Vârfuri mixare (20 vârfuri)



#4221-EU Vârfuri endo (20 vârfuri)

PANAVIA™ Veneer LC



#4500 STANDARD KIT UNIVERSAL (A2)

#4505 PASTE UNIVERSAL (A2) (2,6 g/1,5 ml)

#4513-EU APPLICATOR TIP (16 g / 20 vârfuri)

PANAVIA™ Veneer LC KITS

#4500 STANDARD KIT UNIVERSAL (A2)

#4501 STANDARD KIT CLEAR

PANAVIA™ Veneer LC Paste (2,6 g/1,5 ml)

#4505 PASTE UNIVERSAL (A2)

#4506 PASTE CLEAR

#4507 PASTE BROWN (A4)

#4508 PASTE WHITE

#4513-EU PANAVIA™ VENEER LC APPLICATOR TIP

20 VÂRFURI (16G)

KATANA™ Cleaner

#3970-EU KATANA™ Cleaner (4,0 ml)





Importator UE

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Germania

Telefon +48 662 281 282

www.kuraraynoritake.eu/ro

dental-EasternEurope@kuraray.com

- Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că ați citit Instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu produsul.
- Specificațiile și aspectul produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Culoarea imprimată poate fi ușor diferită de culoarea reală.

KATANA este o marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a NORITAKE CO., LIMITED.
PANAVIA și CLEARFIL sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale KURARAY CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia

