kuraray

Noritake

ÉÉN STERKE FAMILIE

PANAVIA™

DE OPLOSSING VOOR AL UW CEMENTEERBEHOEFTEN

PANAVIA™ V5

Sterk en esthetisch



PANAVIA™ Veneer LC

Dé veneerspecialist

PANAVIA™ SA Cement Universal

Uw cement voor dagelijks gebruik


BORN IN JAPAN

kuraraynoritake.eu

ECHT PANAVIA™

Het begon allemaal in 1983, toen PANAVIA™ EX werd gelanceerd als het eerste adhesieve composietcement met het originele MDP-monomeer van Kuraray Noritake Dental Inc. Het merk PANAVIA™ werd wereldwijd al snel enorm populair dankzij het product zijn betrouwbare hechting. Om de basis te verstevigen voor gestroomlijnde adhesieve cementeerprocedures en hoogwaardige esthetiek, werden de bestaande samenstellingen verbeterd en volledig nieuwe technologieën ontwikkeld. Dit leidde tot het huidige productaanbod van gebruiksvriendelijke en hoogesthetische composietcementen, die garant staan voor de hoogst mogelijke hechtsterkte.

DE PANAVIA™ GESCHIEDENIS

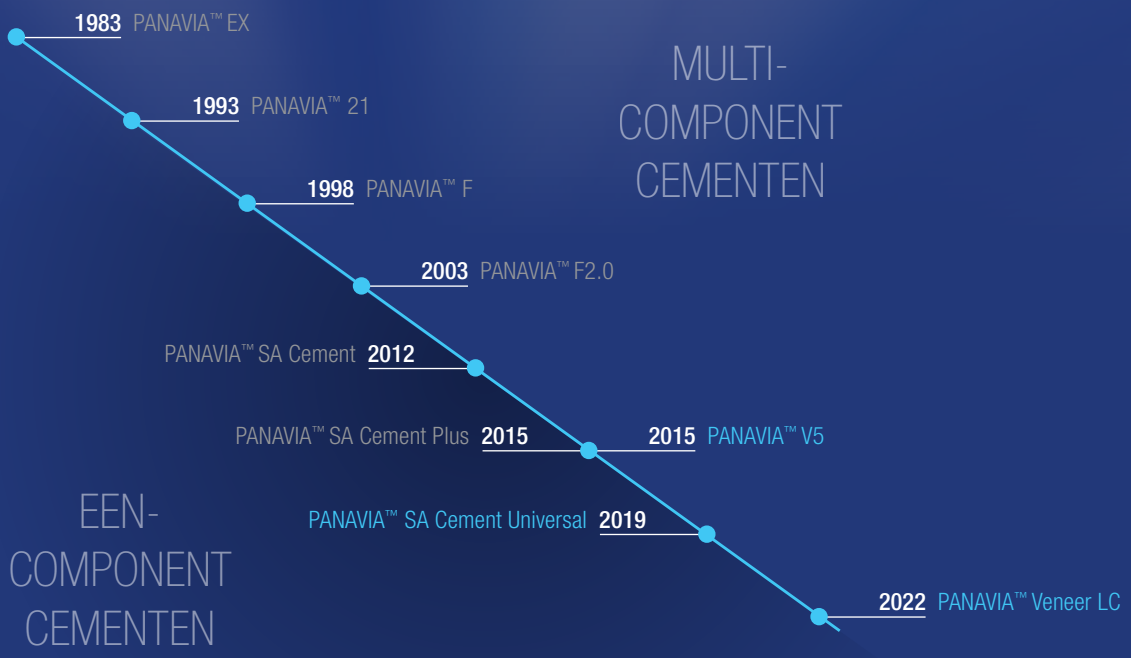

DE PANAVIA™ FAMILY, SAMEN STERK

De PANAVIA-familie biedt een oplossing voor al uw cementeerbehoeften! Wat uw wens of voorkeur in welke situatie ook is, er is altijd een PANAVIA cementeersysteem wat aansluit.

PANAVIA™ SA Cement Universal

ZELFHECHTEND COMPOSIET-CEMENT VOOR ALLE INDICATIES



Het cement met het minimale aantal proceduurestappen. Bespaar tijd zonder concessies te doen aan de kwaliteit van uw resultaten.

●●●●● Gebruiksvriendelijk
●●●●○ Esthetiek

PANAVIA™ V5

ÉÉN CEMENT. ALLE CEMENTEERINDICATIES. VOORSPELBARE PROCEDURE.



Het voorspelbare cementeer-systeem dat op betrouwbare wijze zorgt voor een uitzonderlijk sterke en duurzame hechting, en bijdraagt aan fraaie esthetische resultaten.

●●●●○ Gebruiksvriendelijk
●●●●● Esthetiek

PANAVIA™ Veneer LC

DE VENEERSPECIALIST



Het cement voor het plaatsen van (meerdere) veneers. Het biedt gemakkelijke applicatie, een verwerkingstijd van 200 seconden en blijvende esthetiek met de uitmuntende hechtsterkte van PANAVIA™.

●●●●○ Gebruiksvriendelijk
●●●●● Esthetiek



PANAVIA™ SA Cement Universal



GEEN PRIMERS NODIG

HOUD HET ZO EENVOUDIG MOGELIJK!

Wilt u graag het aantal procedurestappen en primers tijdens het cementeren minimaliseren en tijd besparen zonder afbreuk te doen aan uw resultaten? Zo ja, dan is PANAVIA™ SA Cement Universal een fantastische optie. Door de integratie van twee specifieke monomeren levert dit zelfhechtende, dual-cure composietcement een sterke en duurzame hechting aan de gebruikelijke indirecte restauratiematerialen en tandweefsel. Een aparte primer is niet langer nodig, ook niet bij glashoudende materialen! Het ideale product voor dagelijkse procedures zoals het cementeren van kronen en bruggen van zirkoniumoxide, lithiumdisilicaat, hybride keramiek of zelfs metaal.

UW CEMENT VOOR DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

VOORDELEN & INDICATIES

VOORDELEN

- Hecht aan zirkonium en lithiumdisilicaat zonder extra primers
- Gemakkelijke overmaatverwijdering
- Opslag op kamertemperatuur*
- Moeiteloos appliceren
- Verbeterde endotip voor gemakkelijker aanbrengen in wortelkanaal

*lager dan 25°C (ondanks de aanwezigheid van silaan (LCSi))

INDICATIES

- Cementeren van kronen, bruggen, inlays en onlays
- Cementeren van prothetische voorzieningen op implantaatabutments en van frames
- Cementeren van adhesiefbruggen en splints
- Cementeren van stiften en stompopbouwen


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vulstofgehalte:	62 gew. % (40 vol. %)	**Waterabsorptie** [1,2]**:**	27 µg / mm^3
Buigsterkte [1,2]**:**	91 MPa	**Filmdikte:**	Ca. 14 µm
Buigmodulus [1,2]**:**	4,6 GPa	**Radiopaciteit** [2]**:**	170 % Al
Druksterkte [1]**:**	301 MPa	**Fluorideafgifte:**	67 µg / g
Opslagtemperatuur:	2 - 25°C / 36 - 77°F	**Verwerkingstijd (23°C):**	60 sec.

[1] Duale uitharding (combinatie van zelf- en lichtuitharding) [2] Conform ISO 4049: 2009
Bron: Kuraray Noritake Dental Inc.
Het eindresultaat kan worden beïnvloed door kleine beoordelingsvoorwaarden die in de ISO-voorschriften zijn vastgelegd.


PANAVIA™ SA Cement Universal
PRESTATIES

ZEER STERKE HECHTING AAN PROTHETISCHE MATERIALEN

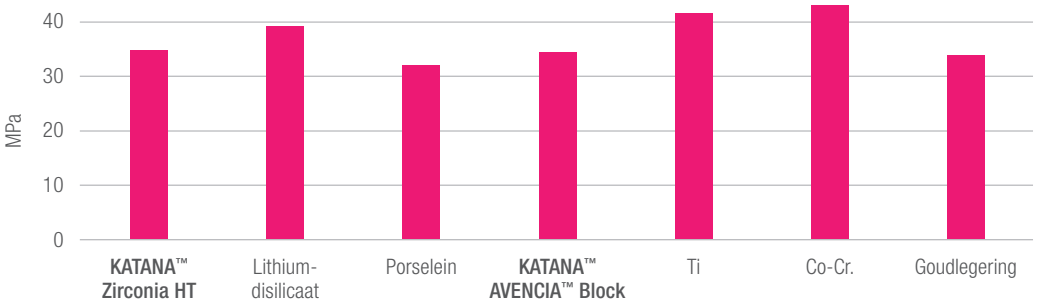

Bron:
Kuraray Noritale Dental Inc.

AFSCHUIFSTERKTE BIJ TANDWEEFSEL

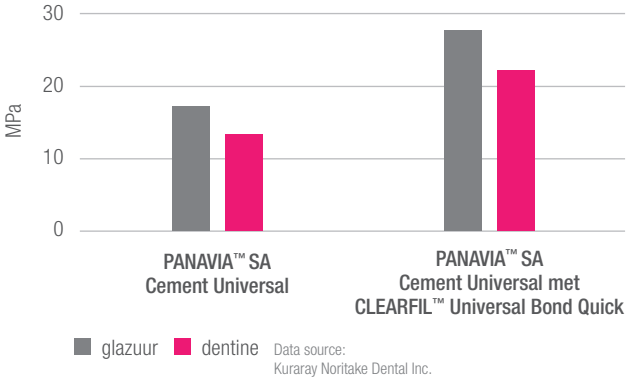

Data source:
Kuraray Noritake Dental Inc.




CLEARFIL™ Universal Bond Quick wordt op tandweefsel gebruikt om de hechtsterkte te verhogen, bijvoorbeeld in situaties waar preparatieretentie beperkt is.



Gemakkelijke overmaat-verwijdering
Gemakkelijke en gingivavriendelijke over-maatverwijdering. Altijd een consistent en probleemloos resultaat.



DRIE ESTHETISCHE KLEUREN

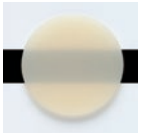

Universal (A2)
(voor de meest voorkomende situaties)



White
(meer opaciteit)



Translucent
(meer translucentie)

TECHNOLOGIE

De innovatieve LCSi monomeertechnologie, in de vorm van een zogenaamde lange ketensilaan, Long Carbon Chain Monomer (LCSi), zorgt voor de chemische hechting van glaskeramiek, lithiumdisilicaat, hybride keramiek en composiet.

Het originele MDP-monomeer verzorgt de chemische hechting aan zirkoniumoxide, metaal, dentine en glazuur.

CEMENTEERPROCEDURE

PANAVIA™ SA Cement Universal

COMPONENTEN

PANAVIA™ SA Cement Universal

PANAVIA™ V5



KIES DE STERKSTE EN MEEST ESTHETISCHE OPLOSSING VOOR ELKE INDICATIE

Bent u op zoek naar een voorspelbaar cementeersysteem, dat garant staat voor een betrouwbare, uitzonderlijk sterke en duurzame hechting in combinatie met hoogesthetische resultaten?
Dan is PANAVIA™ V5 de ideale oplossing voor u! Het hoogesthetische dual-cure cement uit het PANAVIA™ assortiment. Levert in situaties waar lichtuitharding beperkt of niet mogelijk is de hoogste hechtsterkte aan tandweefsel. De uitstekend op elkaar afgestemde componenten vormen de ideale keuze voor alle cementeerindicaties ongeacht de preparatie, de situatie of het materiaal om aan te hechten. En bovendien altijd dezelfde procedure.

VOORSPELBARE PROCEDURES

VOORDELEN & INDICATIES

VOORDELEN

- Sterke en duurzame hechting aan element en restauratie
- Voortreffelijke esthetiek en kleurstabiliteit
- Gemakkelijk aanbrengen, plaatsen en overmaatverwijdering
- Dezelfde procedure en componenten voor iedere indicatie
- Try-in-pasta's ondersteunen een voorspelbaar esthetisch resultaat

INDICATIES

- Cementeren van kronen, bruggen, inlay's en onlay's
- Cementeren van veneers
- Cementeren van etsbruggen en splints
- Cementeren van prothetische restauraties op implantaatabutments en van frames
- Cementeren van stiften en opbouwen

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Vulstofgehalte:	61 gew. % (38 vol. %)	**Filmdikte** [1,2]**:**	12 µm
Buigsterkte [1,2]**:**	127 MPa	**Radiopaciteit** [2]**:**	180 % Al
Buigmodulus [1,2]**:**	6,3 GPa	**Fluorideafgifte (28 dagen)** [1]**:**	58 µg / g
Druksterkte [1]**:**	310 MPa	**Verwerkingstijd (23°C):**	2 min.
Waterabsorptie [1,2]**:**	21 µg / mm^3		

[1] Dual curing of the paste (combination of self- and light-curing). [2] According to ISO 4049:2009
Bron: Kuraray Noritake Dental Inc. Het eindresultaat kan worden beïnvloed door kleine beoordelingsvoorwaarden die in de ISO-voorschriften zijn vastgelegd.

PANAVIA™ V5 PRESTATIES

HECHTSTERKTE AAN TANDWEEFSEL


(afschuifsterkte bij menselijke elementen; na 3.000 thermocycli)

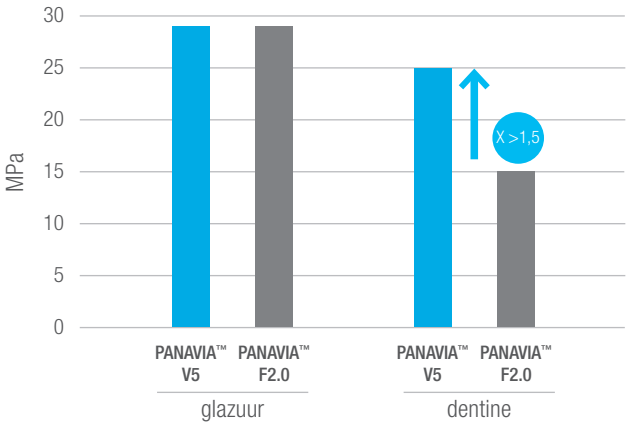

Meetomstandigheden
De monsters waren menselijke tanden, gepolijst met korrelgrootte #1000 bij een hechtingsoppervlak van 3 mm. De randen werden vanuit twee richtingen gedurende 10 seconden gepolymeriseerd met Pen Cure 2000. Na lichtuitharding werden de monsters gedurende een dag ondergedompeld in water met een temperatuur van 37°C en onderworpen aan thermocycling - 4-60°C, 3.000 keer.

HECHTSTERKTE AAN PROTHETISCH MATERIAAL

(na 3.000 thermocycli)

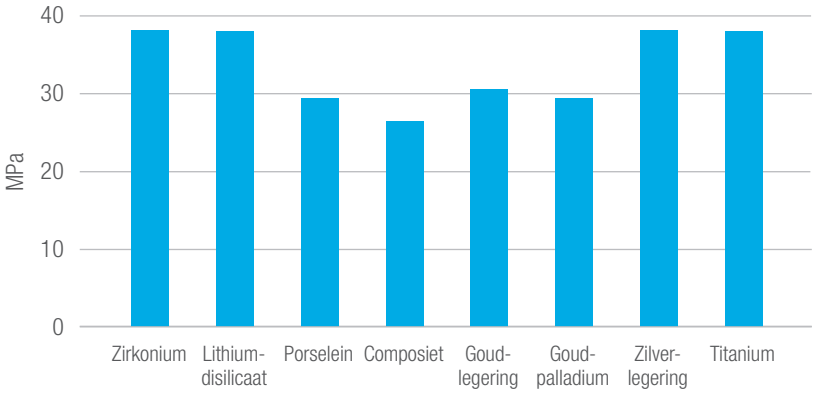


Meetomstandigheden:
Zandstralen (zirkonium, metalen anders dan titanium, composiet), polijsten met korrel #1000 (porselein, glas, titanium). Hechtingsoppervlak: 5 mm ø
Na aanbrengen van CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS op het hechtingsoppervlak, werd daarop PANAVIA™ V5 aangebracht, terwijl het prothetisch materiaal onder druk werd gehouden. De randen werden vanuit twee richtingen gedurende 10 seconden gepolymeriseerd met Pen Cure 2000. Het geheel werd ondergedompeld in water (37°C) gedurende één dag, onderworpen aan thermocycling (4-60°C, 3.000 keer) en vervolgens geëvalueerd op hechtsterkte.

Meetinstrument:
Autograph AG-100kN (Shimadzu) bij een kruiskopsnelheid van 1 mm/min.

Gemeten door Kuraray Noritake Dental Inc.: de waarden kunnen variëren, afhankelijk van de meetomstandigheden.

KLEURSTABILITEIT

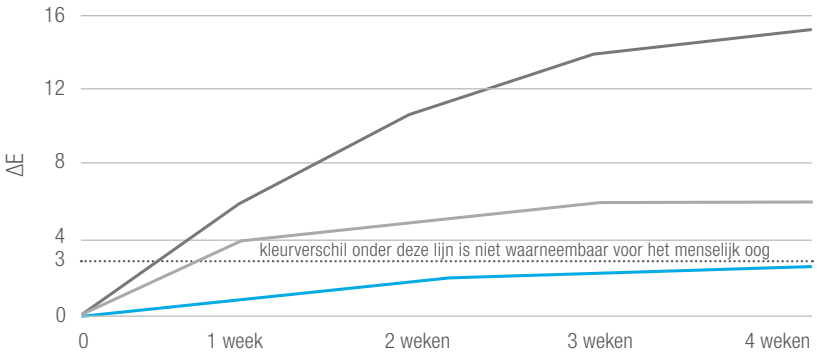

Bron: Kuraray Noritake Dental Inc. De monsters werden verouderd in water van 70ºC.
* Geen handelsmerk van Kuraray Co., Ltd.



VIJF ESTHETISCHE KLEUREN

Met een kleur die past bij individuele omstandigheden, zijn de beoogde resultaten eenvoudig te verkrijgen. PANAVIA™ V5 Try-in Pasta's die verkrijgbaar zijn in dezelfde kleuren als de cementpasta's kan eenvoudig de juiste kleurkeuze beoordeeld worden.

Universal (A2)
(voor de meest voorkomende gevallen)

Clear
(meer translucentie)

Brown (A4)
(meer chroma)

White
(meer opaak en hogere helderheid)

Opaque
(maskeren)

TOUCH-CURE-TECHNOLOGIE

De adhesieve interface wordt bij contact tussen PANAVIA™ V5 Tooth Primer en PANAVIA™ V5 Paste betrouwbaar verzegeld en faciliteert hierdoor een sterke hechting aan glazuur en dentine. Tegelijkertijd versnelt tijdens het contact de polymerisatie (zelfuitharding) van het dual-cure cement, waardoor de efficiency wordt verhoogd.

MDP MONOMER

Het MDP-monomeer in PANAVIA™ V5 Tooth Primer en CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS verzorgt een chemische hechting aan zirkonium, metaal, dentine en glazuur.

COMPONENTEN

PANAVIA™ V5 Paste
PANAVIA™ V5 Tooth Primer
CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS
K-ETCHANT Syringe
PANAVIA™ V5 Try-in Paste

CEMENTEERPROCEDURE

PANAVIA™ V5

PANAVIA™ Veneer LC



NEEM DE TIJD DIE U NODIG HEEFT VOOR VEELEISENDE TAKEN

Wilt u graag tegelijkertijd meerdere veneers plaatsen zonder een race tegen de klok? Dan is PANAVIA™ Veneer LC - speciaal ontwikkeld voor het cementeren van lichtdoorlatende voorzieningen - precies wat u nodig heeft. Dit product biedt een ruime verwerkingstijd van 200 seconden*, met de mogelijkheid om te beginnen met lichtuitharden zodra u daar klaar voor bent. De juiste pastaviscositeit en - thixotropie van PANAVIA™ Veneer LC staan garant voor een soepele dosering en plaatsing. Tijdens de productontwikkeling werd veel aandacht besteed aan de kleurstabiliteit van de pasta's. De hoge vulgraad, gecombineerd met de geringe korrelgrootte van de vulstof maken het product bijzonder resistent tegen randverkleuring en zodoende in hoge mate bijdragen aan een duurzame esthetiek. Een gemakkelijke verwijdering van overtollig materiaal na tack-curing en een uitstekende hechtsterkte maken het plaatje compleet.

*Verwerkingstijd: gevoeligheid voor licht (8.000 lux, ISO 4049)

EEN FANTASTISCHE OPLOSSING VOOR EEN UITDAGENDE TAAK

VOORDELEN & INDICATIES

VOORDELEN

- Optimale verwerking dankzij aangepaste viscositeit
- Eenvoudige overmaatverwijdering na één seconde tack-curing
- Onzichtbare marges dankzij lage filmdikte en sferische submicronvullers
- Uitstekende polijstbaarheid en kleurstabiliteit voor langdurige esthetiek
- Sterke en duurzame hechting

INDICATIES

- Cementeren van keramische en composiet inlays, onlays en veneers met een dikte van minder dan 2 mm


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vulstofgehalte:	66 gew. % (47 vol. %)	**Filmdikte:**	Approx. 8 µm
Buigsterkte[1,2]**:**	111 MPa	**Radiopaciteit**[2]**:**	110 % Al
Buigmodulus[1,2]**:**	5,4 GPa	**Verwerkingstijd**[3]**:**	200 sec.
Druksterkte[1]**:**	388 MPa		

[1] Polymerisatie (combinatie van zelf- en lichtuitharding). [2] Volgens ISO 4049. [3] Verwerkingstijd: gevoeligheid voor licht (8.000 lux, ISO 4049)
Bron: Kuraray Noritake Dental Inc. Het eindresultaat kan worden beïnvloed door marginale evaluatievoorwaarden, gedicteerd door ISO-regelgeving.

PANAVIA™ Veneer LC PRESTATIES


HECHTSTERKTE AAN TANDWEEFSEL

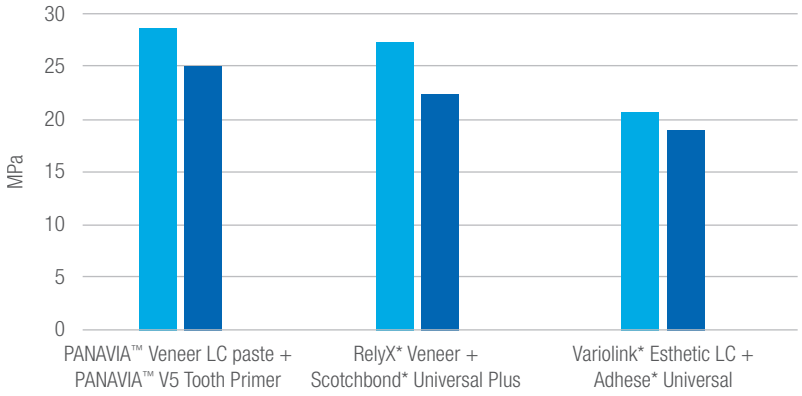

Testomstandigheden: Polijsten #1000, etsen van glazuur met fosforzuur, SUS chip (diameter 3 mm), gemeten na bewaring in water bij 37°C gedurende 1 dag.

Bron: Kuraray Noritake Dental Inc.
*Geen handelsmerk van KURARAY CO., LTD.


HECHTSTERKTE AAN PROTHETISCH MATERIAAL

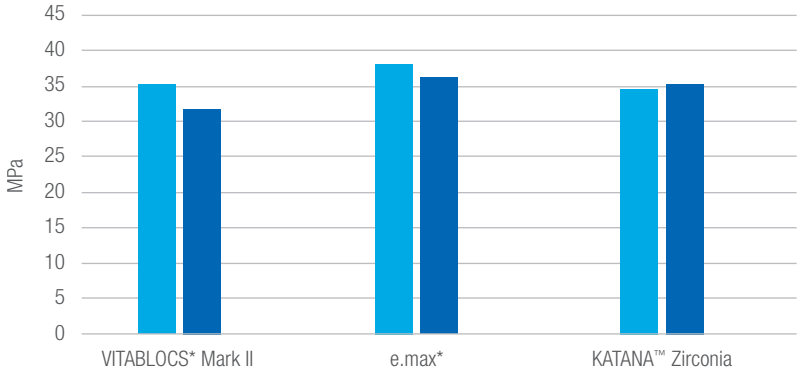

Testomstandigheden: Polijsten #1000, zandstralen (KATANA™ Zirconia) of etsen met waterstoffluoride (glaskeramiek), SUS chip (diameter 5 mm), gemeten na bewaring in water bij 37°C gedurende 1 dag, of thermocycling tussen 4 en 60°C.

Bron: Kuraray Noritake Dental Inc.
*Geen handelsmerk van KURARAY CO., LTD.

BEHOUD VAN GLANS

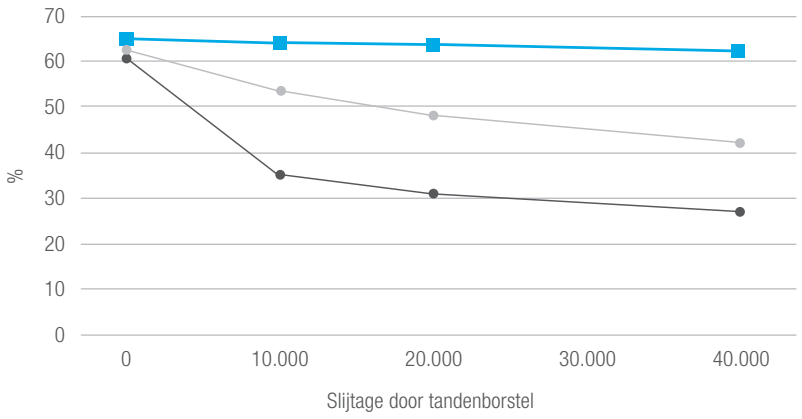


Testomstandigheden: Sample ø 10 mm, dikte 2 mm.
Afrondend polijsten met lapping film na gladmaken van het oppervlak met waterproof schuurpapier #1000 tot #2500.

Beginwaarde (meting van glansniveau na polijsten*).
Slijtage door tandenborstel (gemeten na 40.000 poetsbewegingen bij een belasting van 250 gr., 30 poetsbewegingen/minuut, 10 wt% tandpasta*).

Gemeten met een VG 2000 glansmeter (Nippon Denshoku Kogyo) onder een hoek van 60°. NB: de waarden zijn afhankelijk van de meetomstandigheden.

Bron: Kuraray Noritake Dental Inc.
*Geen handelsmerk van KURARAY CO., LTD.

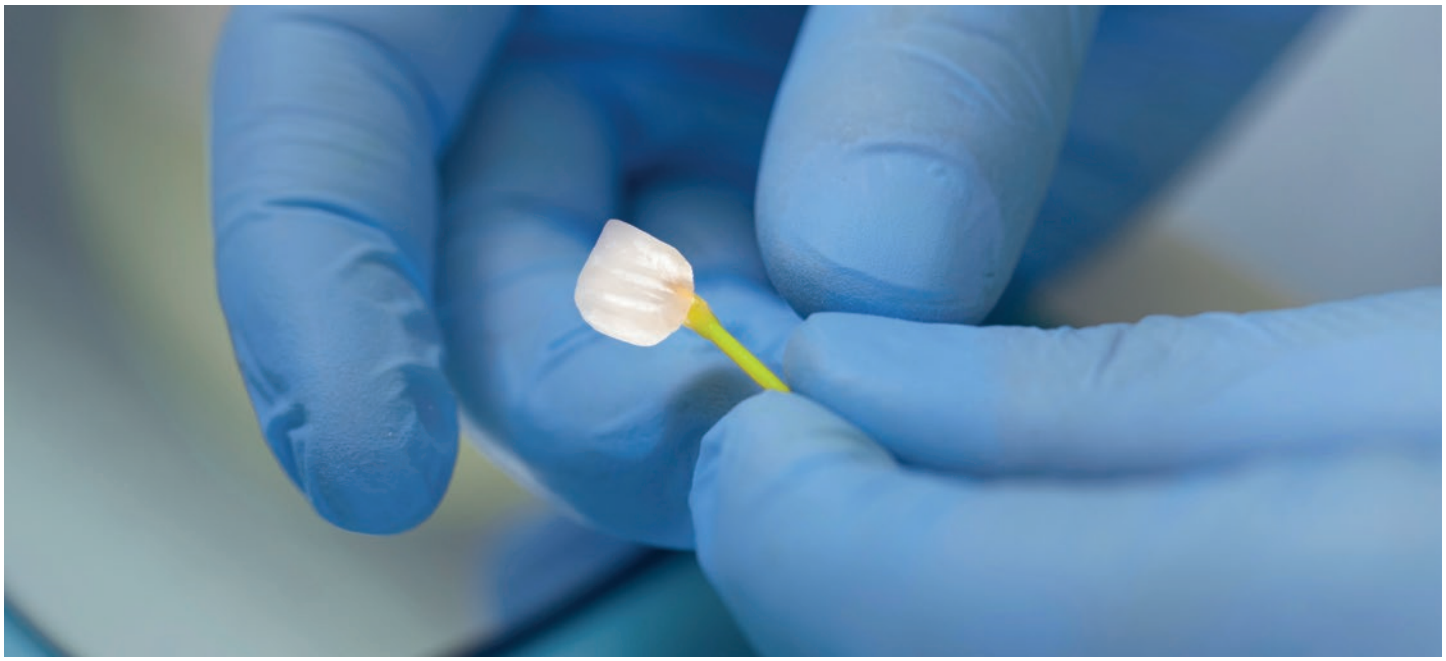

4 ESTHETISCHE KLEUREN

Met een kleur die voldoet aan de individuele eisen, zijn natuurgetrouwe resultaten eenvoudig te bereiken. PANAVIA™ V5 Try-In Pastes komen overeen met de PANAVIA™ Veneer LC kleuren.



Universal (A2)
(voor de meest voorkomende gevallen)



Clear
(meer translucentie)



Brown (A4)
(meer chroma)



White
(meer opaciteit en hogere helderheid)

TOUCH-CURE-TECHNOLOGIE

Faciliteert de polymerisatie, uitsluitend op de tand-cement-interface en verzorgt een sterke hechting aan glazuur en dentine, zonder de polymerisatiereactie van het cement te beïnvloeden.

MDP MONOMER

Het MDP-monomeer in PANAVIA™ V5 Tooth Primer en CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS verzorgt de chemische hechting aan zirkonium, metaal, dentine en glazuur.

COMPONENTEN

PANAVIA™ LC Veneer Cement
PANAVIA™ V5 Tooth Primer
CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS
K-ETCHANT Syringe
PANAVIA™ V5 Try-in Paste

CEMENTEERPROCEDURE

PANAVIA™ LC Veneer

KATANA™ Cleaner



HET UNIVERSELE REINIGINGSMIDDEL VOOR INTRA- EN EXTRAORAAL GEBRUIK

De kwaliteit van de hechting (en daarmee de prestaties van indirecte restauraties) is niet alleen afhankelijk van het gekozen cementeersysteem en het juiste gebruik daarvan; schone hechtoppervlakken zijn ook een vereiste voor succes op lange termijn. KATANA™ Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het optimaliseren van adhesieve cementeerprocedures. Dit product heeft een diep reinigend effect dankzij de oppervlakte-actieve eigenschap van het MDP-zout. Het is geschikt voor intra- en extraoraal gebruik en biedt een uitstekende oplossing voor de reiniging van hechtoppervlakken (op natuurlijke elementen en restauraties) die tijdens het passen gecontamineerd zijn met bijvoorbeeld speeksel of bloed.

VOOR ALLE RESTAURATIEVE PROCEDURES

VOORDELEN & INDICATIES


VOORDELEN

- Intra- en extraoraal gebruik
- Hoog reinigend effect
- Gemakkelijke procedure: wrijven, spoelen en drogen
- Snelle verwerking; 10 seconden wrijven
- Reinigingsprestaties wetenschappelijk goed gedocumenteerd*

INDICATIES

- Reiniging van gecontamineerd glaskeramiek, zirkonium, composiet, metaal en glasvezelstiften na intraorale try-in.
- Reiniging van gecontamineerde tandpreparaties (caviteit, wortelkanaal en tandstomp), en implantaat-abutments.

AFSCHUIFSTERKTE KATANA™ Zirconia HT

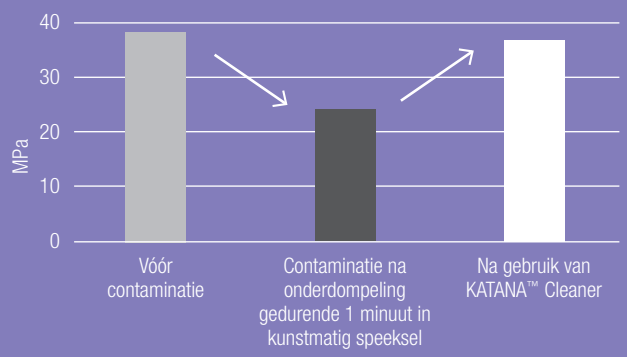

DOSERING MET ÉÉN HAND



Meetomstandigheden:
Substraatoppervlak: Na schuren met korrelgrootte #1.000, zandstralen met aluminiumoxide. Testgebied ø 5mm, gemeten bij een temperatuur van 37°C, bewaring onder water gedurende één dag.

Cement: PANAVIA™ V5
Gegevensbron: Kuraray Noritake Dental Inc.
Numerieke waarden variëren, afhankelijk van de meetomstandigheden.

* Fucong T. et al., Effectiveness of different cleaning measures on the bonding of resin cement to saliva-contaminated or blood-contaminated zirconia, J Dent. 2022 Mar 3;120:104084.
Taiseer A., et al., Cleaning Zirconia Surface Prior To Bonding: A Comparative Study of Different Methods and Solutions, J Prosthodont. 2022 Mar;31(3):239-244.
Fucong T., et al., Effects of dentin surface cleaning on bonding of a self-etch adhesive to root canal sealer-contaminated dentine, J Dent. 2021 Sep; 112: 103766.

BESTEL-INFORMATIE

PANAVIA™ V5



PROFESSIONAL KIT - #3600-EU
PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [one syringe per shade (2,4 ml / 4,2 g): Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque], PANAVIA™ V5 Try-in Paste [one syringe per shade (1,8 ml): Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque], K-ETCHANT Syringe (3 ml), 30 Mixing tips, 10 Endo tips (S)[1], 50 Applicator brushes (fine<silver>)[1], 1 Mixing dish (FPN)[1], 20 Needle tips (E)[1]



STANDARD KIT - Universal (A2) #3601-EU - Clear #3602-EU
PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [one syringe per shade (4,6 ml / 8,1 g): Universal (A2), Clear], K-ETCHANT Syringe (3 ml), 15 Mixing tips, 5 Endo tips (S)[1], 50 Applicator brushes (fine<silver>)[1], 1 Mixing dish (FPN)[1], 20 Needle tips (E)[1]



INTRODUCTORY KIT - Universal (A2) #3604-EU - Clear #3605-EU
PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [one syringe per shade (2,4 ml / 4,2 g): Universal (A2), Clear], 10 Mixing tips, 50 Applicator brushes (fine<silver>)[1], 1 Mixing dish (FPN)[1]



REFILL

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (4 ml) #3635-EU
CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (4 ml) #3637-EU
PANAVIA™ V5 Paste (4,6 ml / 8,1 g), 20 MIXING TIPS

Universal (A2)	#3611-EU	Clear	#3612-EU
Brown (A4)	#3613-EU	White	#3614-EU
Opaque	#3615-EU		

PANAVIA™ V5 Try-in Paste (1,8 ml)

Universal (A2)	#3621-EU	Clear	#3622-EU
Brown (A4)	#3623-EU	White	#3624-EU
Opaque	#3625-EU		

K-ETCHANT Syringe (3 ml),
20 Needle tips (E) #3252-EU

Mixing tip (20 Mixing tip) #3626-EU
Endo tip (S) (20 tips) #3629-EU

PANAVIA™ SA Cement Universal



SINGLE PACK AUTOMIX

#4212-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix (Universal (A2))
#4213-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix (White)
#4214-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix (Translucent)
1 syringe per shade (8,2 g / 4,6 ml), 20 Mixing tips

VALUE PACK AUTOMIX

#4210-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix Value Pack (Universal (A2))
#4211-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix Value Pack (Translucent)
3 syringes per shade (8,2 g / 4,6 ml), 40 Mixing tips, 10 Endo tips (SS)



#4218-EU Mixing tips (20 tips)



#4221-EU Endo tips (20 tips)

PANAVIA™ Veneer LC



#4500 **STANDARD KIT UNIVERSAL (A2)**
#4505 **PASTE UNIVERSAL (A2)** (2,6 g / 1,5 ml)
#4513-EU **APPLICATOR TIP** (16 g / 20 tips)

PANAVIA™ Veneer LC KITS

#4500 **STANDARD KIT UNIVERSAL (A2)**
#4501 **STANDARD KIT CLEAR**

PANAVIA™ Veneer LC Paste (2,6 g / 1,5 ml)

#4505 **PASTE UNIVERSAL (A2)**
#4506 **PASTE CLEAR**
#4507 **PASTE BROWN (A4)**
#4508 **PASTE WHITE**

#4513-EU **PANAVIA™ VENEER LC APPLICATOR TIP**, 20 TIPS (16G)

KATANA™ Cleaner



#3970-EU **KATANA™ Cleaner** (4,0 ml)

Contactgegevens
Kuraray Europe Benelux
Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nederland
Postbus 299, 1970 AG IJmuiden, Nederland
Tel: NL +31 (0)255 523 701, BE +32 (0)483 993 770
infobenelux@kuraray.com
Website www.kuraraynoritake.eu

EU Importer
Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone +49 (0)69 305 35 835
Fax +49 (0)69 305 98 35 835
www.kuraraynoritake.eu
centralmarketing@kuraray.com

- Lees vooral de meegeleverde gebruiksinstructies voordat u dit product gebruikt.
- Specificaties en uiterlijk van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren.

KATANA is een geregistreerd handelsmerk van NORITAKE CO., LIMITED.
PANAVIA en CLEARFIL zijn geregistreerde handelsmerken van KURARAY CO., LTD.

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Website www.kuraraynoritake.com

CE 0197

06/2022/MKA00700