kuraray

Noritake

KATANA™

AVENCIA™ Block 2



At vælge mellem våd- eller tørfræsning?
Ikke påkrævet.

Ætsning med flussyre?
Ikke påkrævet.

Karakterisering?
Ikke påkrævet.

Sintring eller brænding?
Ikke påkrævet.

Ventetid?
Ikke påkrævet.

Ovn?
Ikke påkrævet.

Glasering?
Ikke påkrævet.

Poleringspasta?
Ikke påkrævet.

Silan?
Ikke påkrævet.*

Yderligere trin?
Ikke påkrævet.

Fræs.
Polér..
Cementér.
FÆRDIG.

Hvert materiale har sin plads.

Spørgsmålet er ikke hvilket CAD/CAM-materiale, der er bedst.
Det er hvilket materiale, der er mest egnet til den pågældende indikation.

Moderne CAD/CAM-materialer er udviklet med forskellige kliniske prioriteter i tankerne. Optiske egenskaber, mekanisk ydeevne og arbejdsgang påvirker alle materialevalg. Den specifikke og kombinerede vigtighed af disse faktorer afhænger i høj grad af den valgte indikation.

Det mest egnede materiale er det hvis egenskaber (inklusiv arbejdsgangen) bedst understøtter det kliniske mål.



Hvad skal din restaurering faktisk bruge?

Forskellige indikationer kræver forskellige overvejelser.

KATANA™ AVENCIA™ Block 2 er en hybridkeramikblok udviklet til daglige indirekte restaureringer og er udviklet til nemt at integreres i eksisterende CAD/CAM-arbejdsgange.

TRE KLINISKE PRIORITETER

ARBEJDSGANG

Effektiv
og ligetil

ÆSTETIK

Naturligt udseende
og optisk skønhed

STYRKE

Pålidelig og
holdbar i funktion

KLINISKE INDIKATIONER

Lavere procedurekompleksitet → Højere procedurekompleksitet

DIREKTE RESTAUREURINGER

Fortands- og kindtandsplast. Lagdeling af plast. Plastfacader.

RUTINEMÆSSIGE INDIREKTE RESTAUREURINGER

Den ideelle balance til daglige indirekte restaureringer. Inlays, Onlays, (Endo)kroner

Typiske indikationer for KATANA™ AVENCIA™ Block 2

AVANCEREDE INDIREKTE ÆSTETISKE INDIKATIONER

Omfattende og/eller højæstetiske (fortands)restaureringer. Særlige kindtandskasuistikker. Facader, omfattende brokonstruktioner i fronten.

INDIREKTE INDIKATIONER - MAKSIMAL STYRKE

Komplekse, omfattende kasuistikker med krav om høj styrke. Omfattende brokonstruktioner, fuldkæbe.



Samme arbejdsgang. Forskellige optiske prioriteter.

KATANA™ AVENCIA™ Block 2 er tilgængelig i to optiske koncepter, hvilket tillader klinikere at vælge det udseende, der er bedst egnet til den pågældende indikation, mens den samme nemme arbejdsgang bevares.

Multi-Layer (ML)

Naturlig farveovergang af design



Indikationer

Krone
Endokrone
Implantatkrone

- Integreret farve-/translucensgradient for et naturligt udseende
- Integreret emalje-dentin / krone-cervikal farveovergang
- Mindre behov for yderligere karakterisering

KATANA™ AVENCIA™ Block 2
A2 ML (Multi-Layer)



KATANA™ AVENCIA™ Block
A2 LT (Low-Translucent, Mono-Layer)

High-Translucent (HT)

Udviklet til optisk integration




Indikationer

Inlay
Onlay
Overlay

- Højere translucens understøtter optisk integration
- Bevarer naturlig lyshed

KATANA™ AVENCIA™ Block 2
A2 HT (High-Translucent)

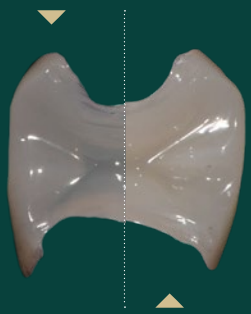

KATANA™ AVENCIA™ Block
A2 LT (Low-Translucent)

Udviklet til din arbejdsgang. Ikke omvendt.

Hvert klinisk trin bør bidrage til den endelige restaurering.
Dette simple princip ledte til udviklingen af KATANA™ AVENCIA™ Block 2.
Ved at eliminere unødvendige forarbejdningstrin, mens kompatibilitet med en bred vifte af eksisterende CAD/CAM-arbejdsgange bevares, giver behandleren fleksibiliteten til at arbejde på deres foretrukne måde.

Nej

Ovn?
Ikke påkrævet
Ingen sintring eller efterbrænding

Krystallisering?
Nej

Karakterisering?
Valgfrit

Glasering?
Nej

Poleringspasta?
Valgfrit

Flussyre?
Nej

Silan?*
*Ikke påkrævet når der anvendes PANAVIA™ SA Cement Universal

Fræs

Polér

Cementér

Ja

Våd- eller tørfræsning?
Vælg hvad der passer til din arbejdsgang

Polering?
Silikone polerskiver. Fra Kuraray Noritake porteføljen:
TWIST™ DIA for composite


Sandblæsning?
Ja. 30-50 µm aluminiumoxid ved 1-2 bar

Cement?
Din foretrukne konventionelle eller selvadhærerende plastcement

Udviklet til den daglige kliniske ydeevne.

Bøjestyrke


(MPa)

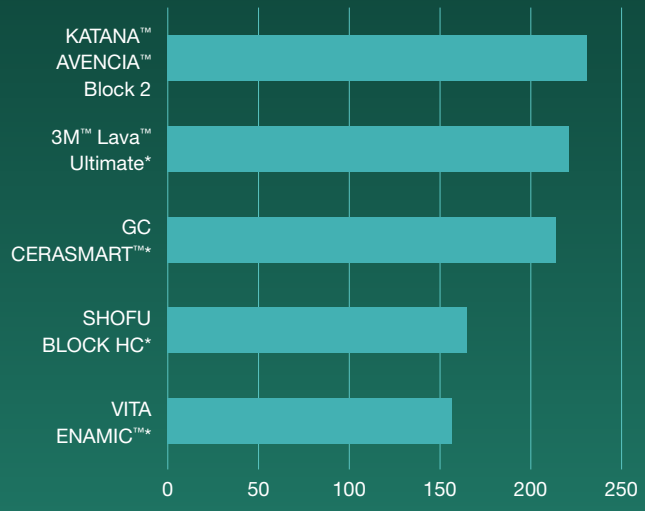

Testbetingelser:
JIS T 6517. Prøveemnestørrelse: 2 x 2 x 17 mm. Støtteafstand:10 mm
Datakilde: Kuraray Noritake Dental Inc.
*Ikke et varemærke af KURARAY CO., LTD

Fremragende glansretention


Overfladeruhed (µm)

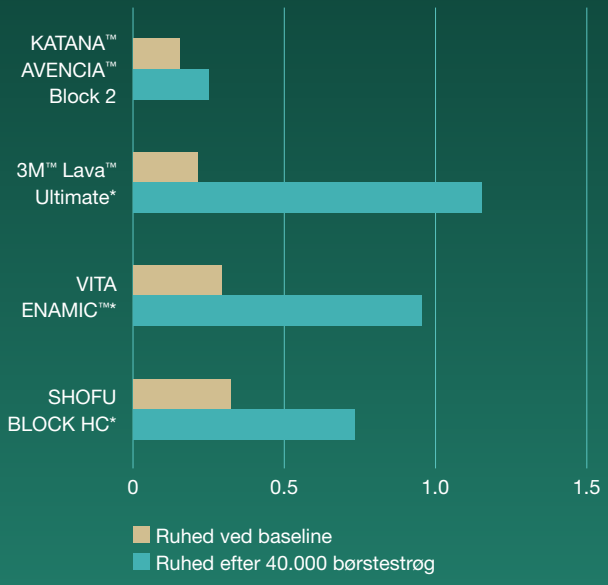

Testbetingelser:
Belastning: 250 g. Tandpasta: Dentaclear MAX (Lion) 10 vægt% opslæmning.
Tandbørste: Between Yamagiri cut regular (Lion).
Datakilde: Kuraray Noritake Dental Inc.
* Ikke et varemærke af KURARAY CO., LTD


Fremragende Slidresistens og Minimalt Slid af Antagonisten


Slid af materialer (µm)

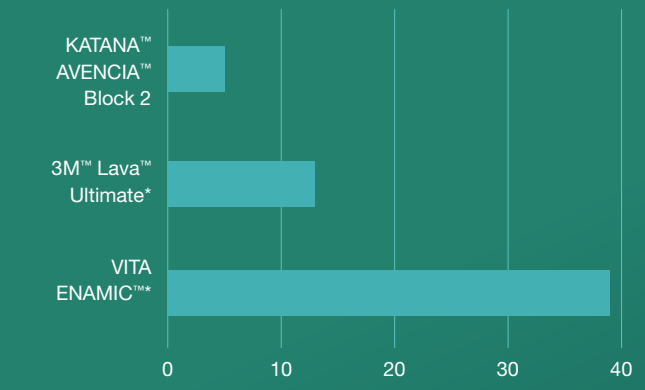

Testbetingelser:
Leinfelder slidtest ved stuetemperatur i vand. Belastning: 15,6 kg/cm², 10.000 cyklusser. Antagonist: bovin emalje, poleret med K1000 slibepapir. Materiale: poleret med K3000 slibepapir.
Datakilde: Kuraray Noritake Dental Inc.
*Ikke et varemærke af KURARAY CO., LTD

Slid på antagonister

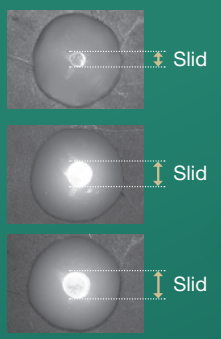

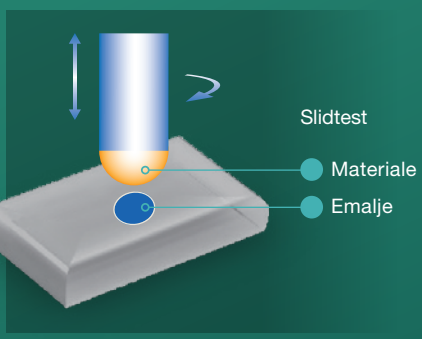

Bestillingsinformation.


Farver og Størrelser

Multi-Layered-farver (ML)
- A1, A2, A3, A3.5


High-Translucent-farver (HT)
- A1, A2, A3, A3.5

Tilgængelige størrelser:
- Størrelse 12: 10 (A) × 12 (B) × 15 (C) mm (kun HT)
- Størrelse 14L: 14,5 (A) × 14,5 (B) × 18 (C) mm

Til CEREC

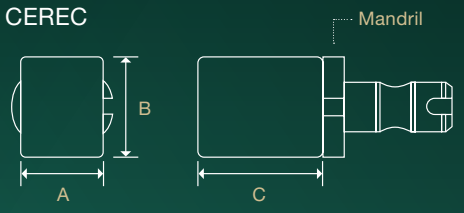

UNIVERSAL

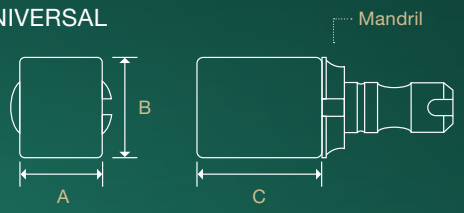

KATANA™ AVENCIA™ Block 2

(HT) CEREC

Størrelse 12 (5 blokke)		Størrelse 14 (5 blokke)	
#4166-EU	12/A1	#4171-EU	14L/A1
#4167-EU	12/A2	#4172-EU	14L/A2
#4168-EU	12/A3	#4173-EU	14L/A3
#4169-EU	12/A3,5	#4174-EU	14L/A3,5

(ML) CEREC

Størrelse 14 (5 blokke)	
#4186-EU	14L/A1
#4187-EU	14L/A2
#4188-EU	14L/A3
#4189-EU	14L/A3,5

(HT) Universal

Størrelse 12 (5 blokke)		Størrelse 14 (5 blokke)	
#4151-EU	12/A1	#4156-EU	14L/A1
#4152-EU	12/A2	#4157-EU	14L/A2
#4153-EU	12/A3	#4158-EU	14L/A3
#4154-EU	12/A3,5	#4159-EU	14L/A3,5

(ML) Universal

Størrelse 14 (5 blokke)	
#4181-EU	14L/A1
#4182-EU	14L/A2
#4183-EU	14L/A3
#4184-EU	14L/A3,5

Supplerende produkter

TWIST™ DIA for Composite
En naturlig glans på kun 2 trin



#1211-IP 10 mm Introductory kit (6 stk)
#1201-IP 14 mm Introductory kit (6 stk)

PANAVIA™ SA Cement Universal
Selvadhærerende plastcementer med MDP og silan



#4212-EU Automix Universal (A2)
#4213-EU Automix White
#4214-EU Automix Translucent
(1 sprøjte 8,2 g, 20 blandespidser)

FOR MERE PRODUKT- OG BESTILLINGSINFORMATION

kuraray

Noritake

Start med én restaurering.

Oplev KATANA™ AVENCIA™ Block 2 i din egen arbejdsgang.



Se hvor naturligt den passer i din eksisterende CAD/CAM-arbejdsgang.

Den bedste måde at evaluere et restaureringsmateriale på er der, hvor det faktisk kommer til at blive anvendt. Bestil en gratis evalueringsblok og hvis du ønsker det, vil en af vores specialister besøge din praksis for at hjælpe dig med at komme i gang.

I løbet af din guidede evaluering vil vi:

- ✔ Forklare de anbefalede indikationer og materialekoncept.
- ✔ Demonstrere fræse- polerings- og cementeringsprotokollen.
- ✔ Besvare dine kliniske og tekniske spørgsmål.
- ✔ Hjælpe dig med trygt at gennemføre din første restaurering.

Det korrekte valg er ikke altid det mest komplicerede.

ARRANGER ET BESØG MED DIN LOKALE KURARAY NORITAKE SPECIALIST



Jan Østerlund Jonassen
+45 29 93 94 58
jan.jonassen@kuraray.com

Kuraray Europe Benelux, Nordics, Baltics, Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nederlandene
Tel: +31 (0)255 52 37 01, infonordics@kuraray.com, www.kuraraynoritake.eu