

kuraray

Noritake

PEWNE WYBORY SĄ OCZYWISTE.
MONOMER 10-MDP
SPRAWDZONY, POTWIERDZONY.

CLEARFIL™ SE BOND

Samotrawiący bond o legendarnej skuteczności klinicznej.

BORN IN JAPAN

CLEARFIL™ SE BOND

Samotrawiący bond – numer 1 na świecie



ZŁOTY STANDARD WŚRÓD SAMOTRAWIĄCYCH SYSTEMÓW WIĄŻĄCYCH

CLEARFIL™ SE BOND to synonim najwyższej jakości wśród samotrawiących systemów wiążących. Dzięki zsyntetyzowanemu przez firmę Kuraray monomerowi 10-MDP, będącemu podstawowym składnikiem tego systemu, od ponad 20 lat CLEARFIL™ SE BOND jest obecny w piśmiennictwie naukowym jako najlepszy na świecie samotrawiący system wiążący. Ten testowany wielokrotnie w warunkach laboratoryjnych i klinicznych preparat jest jednocześnie środkiem znacząco minimalizującym objawy nadwrażliwości pozabiegowej, a druga butelka z zestawu, zawierająca czystą żywicę, z powodzeniem może służyć jako preparat ułatwiający modelowanie kompozytu. CLEARFIL™ SE BOND to synergistyczna kombinacja primeru, który łagodnie wytrawia tkanki oraz światłoutwardzalnego bondu. Oba preparaty przyczyniają się do wytworzenia połączenia hybrydowego o dużej sile adhezji i odporności na hydrolizę.

KORZYŚCI

- ✓ Trwała szczelność brzeżna.
- ✓ Maksymalnie zredukowana nadwrażliwość pozabiegowa.
- ✓ Prosty w użyciu i niezawodny system wiążący.
- ✓ Oparty na kwasowym primerze, zaliczanym do grupy łagodnych.
- ✓ Dokładnie sprawdzony w warunkach klinicznych.
- ✓ Druga butelka zawiera żywice kompozytowe, dzięki czemu może służyć do modelowania.

WSKAZANIA


- ✓ Bezpośrednie wypełnienia z kompozytów i kompomerów światłoutwardzalnych.
- ✓ Natychmiastowe uszczelnienie zębiny.
- ✓ Leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych i odsłoniętych korzeni.
- ✓ Wewnątrzustne naprawy uszkodzonych koron ceramicznych i kompozytowych.
- ✓ Adhezyjne przygotowanie powierzchni uzupełnień protetycznych z ceramiki oraz kompozytów.
- ✓ Utwardzany światłem preparat (bond) z drugiej butelki można wykorzystać do procedury rebondingu.

PRODUKTY

NUMER	CLEARFIL™ SE BOND	Zawartość
#1970-EU	Zestaw	Bond (5 ml), Primer (6 ml), 100 jednorazowych aplikatorów, 2 uchwyty do aplikatorów, 1 płytka do mieszania z przykrywką ochronną, 1 opatentowane opakowanie do dozowania
#1981-EU	Bond	1 butelka (5 ml)
#1982-EU	Primer	1 butelka (6 ml)
#968-EU	CLEARFIL™ Aplikatory	50 jednorazowych aplikatorów

CLEARFIL™ SE PROTECT

Jedyny bond z kariostatycznym monomerem MDPB

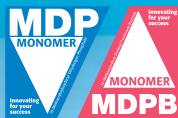

SKUTECZNA ELIMINACJA BAKTERII PRÓCHNICOTWÓRCZYCH NA DŁUGO

CLEARFIL™ SE PROTECT to jedyny na świecie system wiążący, który posiada udowodnione właściwości niszczenia bakterii próchnicotwórczych na długo, wspomagając Twoje leczenie. Samotrawiący system wiążący CLEARFIL™ SE BOND wzbogacony został o opatentowany monomer MDPB, który wykazuje silne działanie antybakteryjne. Unikatywne połączenie monomerów 10-MDP i MDPB gwarantuje skuteczność, duże siły łączenia oraz pewność i przewidywalność efektów leczenia, nawet w przypadku głębokiej próchnicy. System CLEARFIL™ SE PROTECT zalecany jest do wszystkich adhezyjnych technik cementowania oraz odbudowy zrębu zębiny koronowej*.

* W razie potrzeby zastosowania systemu CLEARFIL™ SE PROTECT w procedurze wymagającej bondu dualnie wiążącego, należy zmieszać go z aktywatorem CLEARFIL™ DC Activator.

KORZYŚCI

- ✓ Skuteczna eliminacja nadwrażliwości pozabiegowej.
- ✓ Primer zawiera antybakteryjny monomer (MDPB), który niszcząc ściany komórkowe bakterii, hamuje rozwój próchnicy.
- ✓ Sprawdzony klinicznie system wiążący w dwóch butelkach.
- ✓ Szybka, łatwa aplikacja.
- ✓ Duża siła adhezji do szkliwa i zębiny.
- ✓ Silne, długotrwałe działanie antybakteryjne dzięki wbudowaniu MDPB w łańcuch polimerowy.
- ✓ Uwalnianie jonów fluoru potęguje działanie kariostatyczne.

WSKAZANIA

- ✓ Światłoutwardzalne, bezpośrednie wypełnienia kompozytowe i kompomerowe.
- ✓ Natychmiastowe uszczelnienie zębiny.
- ✓ Znoszenie nadwrażliwości szyjek zębowych i zabezpieczenie powierzchni odsłoniętych korzeni.
- ✓ Wewnątrzustne naprawy uzupełnień z porcelany, ceramiki hybrydowej i kompozytów.
- ✓ Adhezyjne przygotowanie powierzchni uzupełnień z porcelany, ceramiki hybrydowej oraz kompozytów.
- ✓ Odbudowa zrębu zębiny koronowej z kompozytów światłoutwardzanych i podwójnie utwardzanych.
- ✓ Uszczelnianie tkanek pod wypełnienia amalgamatowe.

PRODUKTY

NUMER	CLEARFIL™ SE PROTECT	Zawartość
#2870-EU	Zestaw	Bond (5 ml), Primer (6 ml), 100 jednorazowych aplikatorów, 2 uchwyty do aplikatorów, 1 płytka do mieszania z przykrywką ochronną, 1 opatentowane opakowanie do dozowania
#2872-EU	Zestaw ekonomiczny	3 × Bond (5 ml), 3 × Primer (6 ml)
#2881-EU	Bond	1 butelka (5 ml)
#2882-EU	Primer	1 butelka (6 ml)
#968-EU	CLEARFIL™ Aplikatory	50 jednorazowych aplikatorów

Więcej informacji na stronie internetowej kuraraynoritake.eu

PAMIĘTAJ!

Samotrawiące systemy wiążące są aktualnie preferowaną i rekomendowaną grupą bondów, jeśli chodzi o ubytki, w których dominuje tkanka zębina.

DLACZEGO?

Współczesne piśmiennictwo potwierdza wysoką skuteczność łagodnych systemów samotrawiących w kontekście osiągnięcia trwałego połączenia adhezyjnego z zębina. W przypadku szkliwa rekomendowana jest technika selektywnego trawienia. Systemy oparte na technice „Total Etch” wymagają trawienia zębiny 37% kwasem ortofosforowym, co mocno i głęboko demineralizuje tę tkankę. Stwarza to ryzyko nanoprzecieku, wytworzenia kolagenowej warstwy mazistej oraz szybkiej degeneracji warstwy hybrydowej, wpływając tym samym na wystąpienie objawów nadwrażliwości, a także mikroprecieku brzeżnego i próchnicy wtórnej.


W przypadku zalecanych przez autorów publikacji łagodnych systemów samotrawiących, takich jak CLEARFIL™ SE BOND, SE PROTECT czy UNIVERSAL BOND QUICK, zyskujesz pewność, że:

- ✓ wytwarzają stabilne połączenie z zębina, czyli warstwa hybrydowa nie ulega procesowi szybkiego starzenia się,
- ✓ nie ma ryzyka przetrawienia czy przesuszenia zębiny,
- ✓ nie ma objawów nadwrażliwości pozabiegowej,
- ✓ wytwarzają tzw. super zębina pod warstwą hybrydową, która jest dodatkową ochroną przed próchnicą wtórną.


SZUKASZ DOWODÓW? MAMY WYNIKI BADAŃ!

SIŁA ADHEZJI DO SZKLIWA I ZĘBINY


Silne, stabilne połączenie adhezyjne z zębina to wyjątkowy walor tego produktu, dzięki czemu jest on bezkonkurencyjny w porównaniu z najlepszymi systemami „Total Etch”.

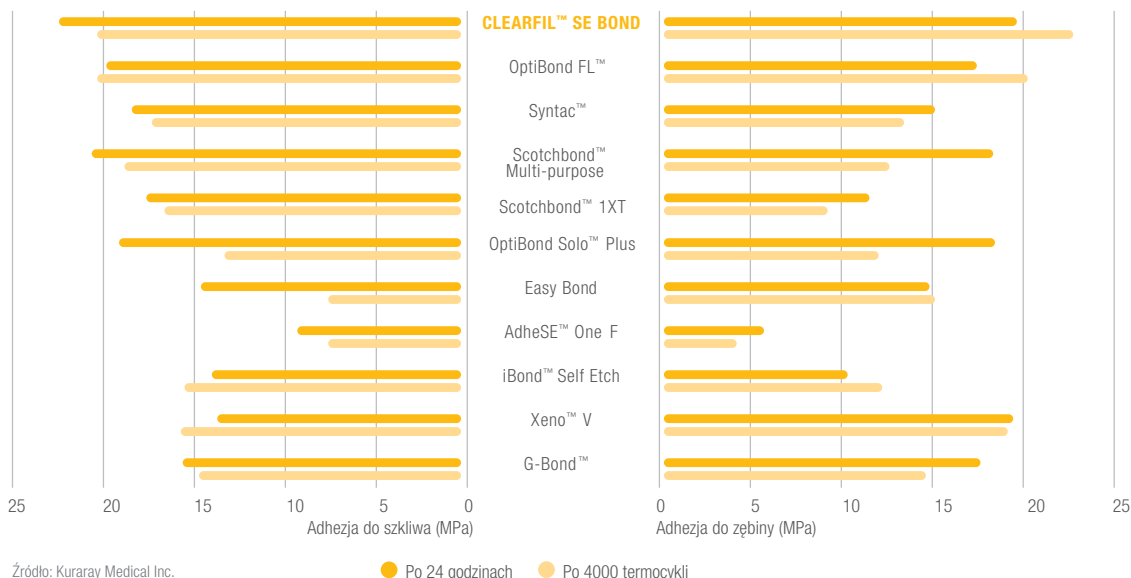

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE – POŁĄCZENIA CEMENTÓW KOMPOZYTOWYCH Z TKANKAMI¹

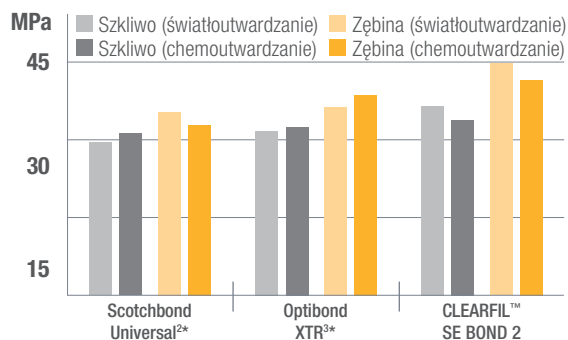

NATYCHMIASTOWA SIŁA ADHEZJI DO SZKLIWA I ZĘBINY

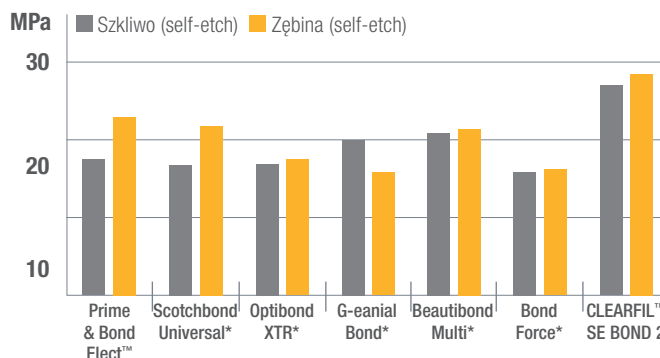

¹ Nie jest znakiem towarowym Kuraray Co., Ltd. ² Scotchbond Universal był stosowany w kombinacji z RelyX Ultimate*. ³ Optibond w połączeniu z NX3*. ⁴ CLEARFIL™ SE BOND 2 został zmieszany z CLEARFIL™ DC Activator, cementowano za pomocą CLEARFIL™ ESTHETIC CEMENT. Nie jest zalecany CLEARFIL™ SE BOND 2 Unit Dose. Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc.

CLEARFIL™ SE BOND 2

Nowa odsłona ikony samotrawiących bondów



SPRAWDZONY, SKUTECZNY, BEZPIECZNY

CLEARFIL™ SE BOND 2 to oparty na monomerze 10-MDP uniwersalny system wiążący. Rekomendowany jest do wszystkich bezpośrednich i pośrednich technik adhezyjnych. Wykazuje kompatybilność z materiałami kompozytowymi światłoutwardzalnymi i dualnymi – wystarczy tylko zastosować CLEARFIL™ DC Activator¹. Produkt zawiera nowy rodzaj fotoinicjatora oraz wykazuje o 21% większą siłę połączenia adhezyjnego z zębina niż CLEARFIL™ SE BOND, będący do tej pory niekwestionowanym złotym standardem samotrawiących systemów wiążących.

CLEARFIL™ SE BOND 2 rekomendowany jest szczególnie do technik samotrawienia oraz selektywnego trawienia.

Silne, stabilne połączenie adhezyjne z zębina to wyjątkowy walor produktu, dzięki czemu jest on bezkonkurencyjny w porównaniu z wiodącymi systemami „Total Etch”.

¹ CLEARFIL™ DC Activator z CLEARFIL™ SE BOND 2 (druga butelka) i po aplikacji użyć CLEARFIL™ SE BOND 2 PRIMER.
Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc.

KORZYŚCI

- ✓ Sprawdzony klinicznie samotrawiący system wiążący.
- ✓ Prosty w użyciu i jeszcze efektywniej polimeryzujący.
- ✓ Eliminuje problem nadwrażliwości pozabiegowej.
- ✓ Zalecany zarówno w technice selektywnego trawienia, jak i samotrawienia.
- ✓ Druga butelka może być wykorzystywana do modelowania materiałów kompozytowych oraz w procedurze rebondingu.
- ✓ Podwójnie wiążący po zastosowaniu DC Activator.

WSKAZANIA

- ✓ Światłoutwardzalne, chemoutwardzalne oraz dualne wypełnienia kompozytowe.
- ✓ Natychmiastowe uszczelnienie zębiny.
- ✓ Zabezpieczanie odsłoniętych korzeni zębów.
- ✓ Znoszenie nadwrażliwości.
- ✓ Wewnątrzustne naprawy wypełnień.
- ✓ Cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych za pomocą materiałów dualnych.
- ✓ Adhezyjne cementowanie wkładów inlay/onlay, koron, mostów i licówek.

PRODUKTY

NUMER	CLEARFIL™ SE BOND 2	Zawartość
#3270-EU	Zestaw	Bond (5 ml), Primer (6 ml), 100 jednorazowych aplikatorów, 1 płytka do mieszania z przykrywką ochronną, 1 opatentowane opakowanie do dozowania
#3281-EU	Bond	1 butelka (5 ml)
#3282-EU	Primer	1 butelka (6 ml)
#3272-EU	Opakowanie ekonomiczne	3 × Bond (5 ml) + 3 × Primer (6 ml)
#3286-EU	Unit Dose zestaw	50 ampulek (0,1 ml) Bond + 50 ampulek (0,1 ml) Primer, 100 aplikatorów
#3250-EU	CLEARFIL™ DC Activator	1 butelka (4 ml)

KONTAKT

Kuraray Europe GmbH

BU Medical Products

Philipp-Reis-Strasse 4

65795 Hattersheim am Main

Niemcy

tel. +49 (0)69 305 35 835

e-mail centralmarketing@kuraray.com

Strona internetowa www.kuraraynoritake.eu

- Przed użyciem produktu należy przeczytać dostarczoną wraz z nim instrukcję użycia.
- Specyfikacje i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Kolory na wydruku mogą nieznacznie różnić się od kolorów rzeczywistych.

„CLEARFIL” jest znakiem towarowym firmy KURARAY CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia
Strona www.kuraraynoritake.com



03/2020 MKA00022