

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal



Intuitivní uzpůsobení odstínů v zatékové formě

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal představuje zásadní posun v představě o tom, co univerzální kompozity dokážou. Díky začlenění vysokého obsahu plniva a dosažení vysoké pevnosti v ohybu se CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal dostává do pozice, kdy je schopen poskytnout estetickou dokonalost v podobě dlouhodobého řešení. Jeho jedinečná technologie rozptylu světla umožňuje pracovat pouze s jedním odstínem U vhodným pro téměř všechny laterální i frontální kavity a odstíny. Odstín UD (Universal Dark – tmavý) vykazuje nejlepší výsledky v kavitách odstínu B3 a vyšších, u nichž chybí zadní stěna, jako jsou kavity IV. třídy. Pro lepší manipulaci nabízí výrobek dvě verze tekutosti, Low – nízká a Super low – super nízká.

1 odstín

Pokrývá všech 16 odstínů VITA* ve všech kavitách s výjimkou těch, kde chybí zadní stěna a jsou odstínu B3 a tmavšího.

2 tekutosti

Nízká a super nízká pro širokou škálu indikací.

Působivá pevnost

Dostatečná pro použití i u distálních výplní zatížených žvýkacím tlakem.

Skvělé mechanické vlastnosti

Chytrá kombinace translucence podobné sklovině, barevného tónu podobného dentinu a technologie rozptylu světla (LDT) dělá své. Díky translucenci podobné sklovině prochází světlo materiálem a zvýrazňuje barvu okolní struktury zubu. Jemné uzpůsobení barevného tónu, který není ovlivněn okolní strukturou zubu, napomáhá přirozenému výsledku. A konečně, díky technologii LDT výplně rozptylují světlo podobně jako sklovina a dentin. V důsledku toho materiál snadno a neznatelně splyne s okolní strukturou zubu.



Skvělé mechanické vlastnosti

Low

- ✓ Pevnost v ohybu 151 MPa
- ✓ Pevnost v tlaku 373 MPa
- ✓ Obsah plniva 75 % hmotnosti / 59 % objemu
- ✓ Rentgen-kontrastnost 140 % Al

Super Low


- ✓ Pevnost v ohybu 152 MPa
- ✓ Pevnost v tlaku 374 MPa
- ✓ Obsah plniva 78 % hmotnosti / 60 % objemu
- ✓ Rentgen-kontrastnost 150 % Al

Zdroj dat Kuraray Noritake Dental Inc.

Oblasti použití

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

- Přímé výplně kavit všech tříd, krčkové léze (např. povrchový kořenový kaz, klínovité defekty), opotřebení a eroze zubů
- Podložka/liner kavity
- Korekce pozice a tvaru zubu
- Intraorální opravy prasklých výplní
- Cementování keramických a kompozitních inlejí, onlejí a fazet o tloušťce menší než 2 mm

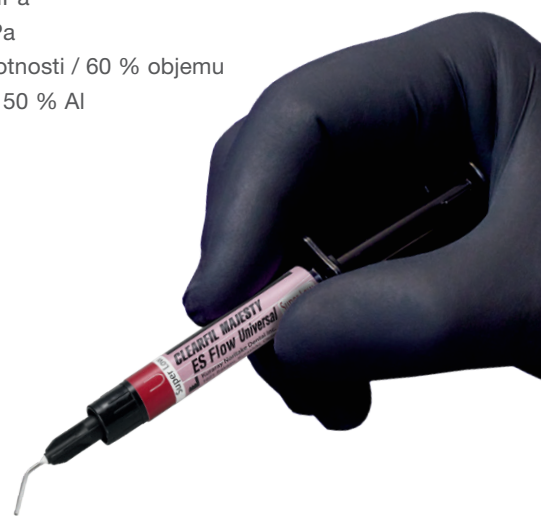

Sortiment produktů

OBJ. ČÍSLO	CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow	OBSAH
#4600-EU	Universal Low Syringe (U)	Stříkačka 2,7 g/1,5 ml, 15x aplikační hrot
#4601-EU	Universal Low Syringe (UD)	Stříkačka 2,7 g/1,5 ml, 15x aplikační hrot
#4620-EU	Universal Super Low Syringe (U)	Stříkačka 2,7 g/1,5 ml, 15x aplikační hrot
#4621-EU	Universal Super Low Syringe (UD)	Stříkačka 2,7 g/1,5 ml, 15x aplikační hrot
#3331-EU	Aplikační hrot (N)	20x

*VITA je ochranná známka společnosti VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Německo

**NASKENUJTE
A ZJISTĚTE VÍCE**

