

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal



Inteligentní zjednodušení

Kolik různých odstínů kompozitu potřebujete k vytvoření atraktivních výplní v prakticky každé klinické situaci? Pokud se rozhodnete pro koncepci odstínů CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal, postačí vám jen několik odstínů.

1

1 odstín pro laterální výplně

Jediný univerzální odstín je řešením pro všechny laterální výplně, nezávisle na barvě podkladové a přilehlé struktury zubu.

2

2 odstíny pro frontální výplně

V esteticky náročnějším frontálním úseku si můžete vybrat ze dvou odstínů.

X

Není třeba žádný opaker


Blokátor nebo opaker není třeba – ani v laterálním, ani ve frontálním úseku vašich běžných případů.

Vlastnosti

- ✓ Vynikající estetika a snadné použití díky menšímu počtu odstínů a bez opakeru nebo blokátoru
- ✓ Snadná tvarovatelnost, nelepivost a dlouhá doba zpracování
- ✓ Přirozený a dlouhodobý lesk po snadném vyleštění
- ✓ Výborné a prvotřídní mechanické vlastnosti: nízké opotřebení, nízké smrštění a šetrnost k antagonistům

Výhody

- ✓ Zjednodušený, časově úsporný postup s menším počtem potenciálně chybných kroků, pro předvídatelné výsledky a minimalizaci zásob
- ✓ Pohodlná manipulace a dostatek času pro uměleckou individualizaci vašich výplní
- ✓ Atraktivní výsledky, které dlouho vydrží
- ✓ Odolné výplně

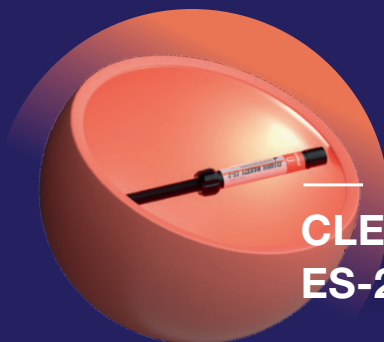

Vynikající mechanické vlastnosti

Pevnost v ohybu	118 MPa
Obsah plniva	78 % hmotnosti
Pevnost v tlaku	347 MPa
Objemové smrštění	1,9 %
Hloubka vytvrzení	2,0 mm
Doba zpracování při okolním světle	270 s

Zdroj: Kuraray Noritake Dental Inc.

Srovnávací tabulka odstínů

Univerzální odstíny jsou navrženy tak, aby pokryly všechny třídy kavit pomocí několika odstínů na základě následující tabulky:

Kategorie odstínu	Třída kavit	Odstín				
		A1 B1, B2	A2 D2, C1	A3 C2, D3	A3.5 B3, B4	A4 C3, C4
Univerzální	I 	U Universal				
	II 					
	III 	 Universal Light (světlý)		 Universal Dark (tmavý)		
	IV 					
	V 					

U klinických případů ve frontálním úseku, kde je zapotřebí vysoké míry světlosti, nabízíme speciální bílý odstín (UW).

Product assortment

OBJ. ČÍSLO	CLEARFIL MAJESTY™ ES-2	OBSAH
#3181-EU	Universal Syringe (U)	1 stříkačka U: 2,0 ml (3,6 g)
#3183-EU	Universal Syringe Light (UL)	1 stříkačka UW: 2,0 ml (3,6 g)
#3184-EU	Universal Syringe Dark (UD)	1 stříkačka UL: 2,0 ml (3,6 g)
#3182-EU	Universal Syringe White (UW)	1 stříkačka UD: 2,0 ml (3,6 g)
#3191-EU	Universal PLT (U)	20 kompulí U: 0,25 g
#3193-EU	Universal PLT Light (UL)	20 kompulí UW: 0,25 g
#3194-EU	Universal PLT Dark (UD)	20 kompulí UL: 0,25 g
#3192-EU	Universal PLT White (UW)	20 kompulí UD: 0,25 g

**NASKENUJTE
A ZJISTĚTE VÍCE**

