



MODELOVÉ ÚČINKY

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium



Jedinečné kompozity, které odpovídají všem barvám stupnice VITA™, zaručují trvanlivost a estetiku výplní v předním a postranním úseku chrupu.

MODELOVÉ KOMPOZITY

MODELOVÁ ESTETIKA NADČASOVÁ TRVANLIVOST

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium a CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic, nanohybridní kompozity pro rychlou a pohodlnou práci a výsledky, na které můžete být hrdí po mnoho let.

Trvanlivost, odolnost a estetika výplní v předním a postranním úseku chrupu, které vaši pacienti ocení.

MODELOVÁ PŘIROZENOST MODELOVÉ VÝPLNĚ

Modelový znamená sloužící jako vzor – našim chemickým inženýrům trvalo sedm let, než vyvinuli technologii, která splňuje potřeby zubních lékařů z hlediska tvárnosti a univerzálnosti materiálů a zároveň zaručuje nejvyšší estetiku a trvanlivost výplní.

Maximálně zjednodušený postup, intuitivní výběr barvy a celosvětově jedinečný efekt opalescence – to vše činí z nanohybridních kompozitů CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium a CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic dnešní definici kvality a inovace.



V MODELOVÝCH BARVÁCH

Pomocí CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 můžeme snadno a rychle přizpůsobit odstín materiálu barvě zubní tkáně. Jedná se o jediný materiál na světě založený na konceptu světlosti zubu, ověřený a akreditovaný společností VITA™, která jej uznala jako kompozit 100% ekvivalentní vzorníku VITA™, jenž je již mnoho let „zlatým standardem“. Pokud dáváte přednost práci s technikou jednoho odstínu, zvolte skupinu barev Classic. K dispozici jsou barvy v odstínech VITA, které jsou kombinací skloviny a dentinu, pokud jde o průsvitnost. Pokud denně pracujete technikou anatomického vrstvení, zvolte barvy Premium, kde najdete odstíny E (sklovina) a D (dentin), které se liší průsvitností a konzistencí. Máte možnost zvolit si libovolnou pracovní techniku podle svého vkusu. Sami si vyberete, jakou technikou chcete a budete pracovat.

Existují dvě skupiny barev, které se liší průhledností materiálu.

Skupina barev Classic

18 odstínů s transparentcí mezi sklovinou a dentinem.

Skupina barev Premium

14 sklovinových a dentinových odstínů (E + D).

Skupina barev Translucent

4 speciální doplňkové odstíny pro charakterizaci výplně.

Pokud barva zubu odpovídá odstínu ze skupiny vzorníku odstínů A2, můžete okamžitě začít pracovat s odstíny ze skupiny Premium A2E (sklovina) a A2D (dentin). Pokrývají 3 barvy ze skupiny A2 (D2, A2, C1).

Pokud naopak dáváte přednost práci s technikou jednoho odstínu a barva zubu bude odpovídat barvám ze skupiny vzorníku odstínů A2, zvolte klasický odstín D2, A2 nebo C1, aby dokonale odpovídal světlosti zubních tkání. Pomocí barev ze skupiny Classic můžete snadno a rychle provést estetickou obnovu jedinou barvou. Pokud se rozhodnete pro odstíny ze skupiny Premium, dosáhnete jedinečného estetického efektu s možností individualizace a charakterizace.


DVA KROKY K MODELOVÉ BARVĚ

1. krok Zvolte jas

Ze šesti barev vyberte vzorek, který je nejbližší jasu zubních tkání.

2. krok Zvolte barvu a sytost

Vytáhněte si vzorek, který jste si předtím vybrali ze vzorníku, a přiložením na zuby nakonec rozhodněte, který odstín bude optimální.

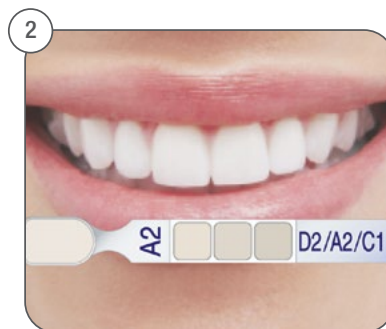

V MODELOVÝCH BARVÁCH

Jedna kombinace prémiových odstínů nyní odpovídá třem klasickým odstínům ze vzorníku VITA™. To je možné díky fenoménu opalescence, velmi prospěšnému „efektu chameleona“. Patentovaná technologie Light Diffusion navíc umožňuje získat optické vlastnosti a fluorescenci velmi podobné vlastnostem přírodní skloviny. Dovoluje nám sledovat přizpůsobení barvy a její sytosti zubům pacienta.

Snadno tak vytvoříte estetickou, přirozeně vypadající výplň, která se dokonale spojí s přirozenou zubní tkání bez ohledu na světelné podmínky. „Efekt chameleona“ nám umožňuje pracovat s menším počtem stříkaček kompozitu potřebných pro estetickou rekonstrukci zubu, což také přispívá k ekonomice práce v ordinaci.


DOSÁHNĚTE MODELOVÝCH ÚČINKŮ

Výběrem produktů CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium a CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic se vám do rukou dostanou kompozity založené na technologii Light Diffusion. Jedná se o inovativní patentovanou a komerčně jedinečnou technologii rozptylu světla na povrchu zubu, která umožňuje dosáhnout efektů co nejpodobnějších přirozenému vzhledu.

Jedna kombinace odstínů Premium odpovídá až třem klasickým odstínům ze vzorníku VITA™. V praxi to znamená, že k rekonstrukci je zapotřebí méně stříkaček, a díky jedinečným optickým vlastnostem a fluorescenci velmi blízké přirozené sklovině dochází k přizpůsobení barvy a její sytosti zubům pacienta. Méně nákladů, lepší výsledky – tak se vede modelová praxe!

MODELOVÁ IMPLEMENTACE VÍCEVRSTVÉ VÝPLNĚ


Pokud dáváte přednost technice anatomického vrstvení a usilujete o přirozeně krásné, estetické výsledky s maximálně zjednodušeným postupem a minimem materiálů, je CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium pro vaše potřeby jako stvořený. 7 odstínů skloviny (Enamel) a 7 dentinových odstínů (Dentin) v kombinaci se čtyřmi průsvitnými sklovinovými odstíny (Clear, Amber, Blue, Grey) zaručují plnou škálu barev – tj. efekty na nejvyšší úrovni.

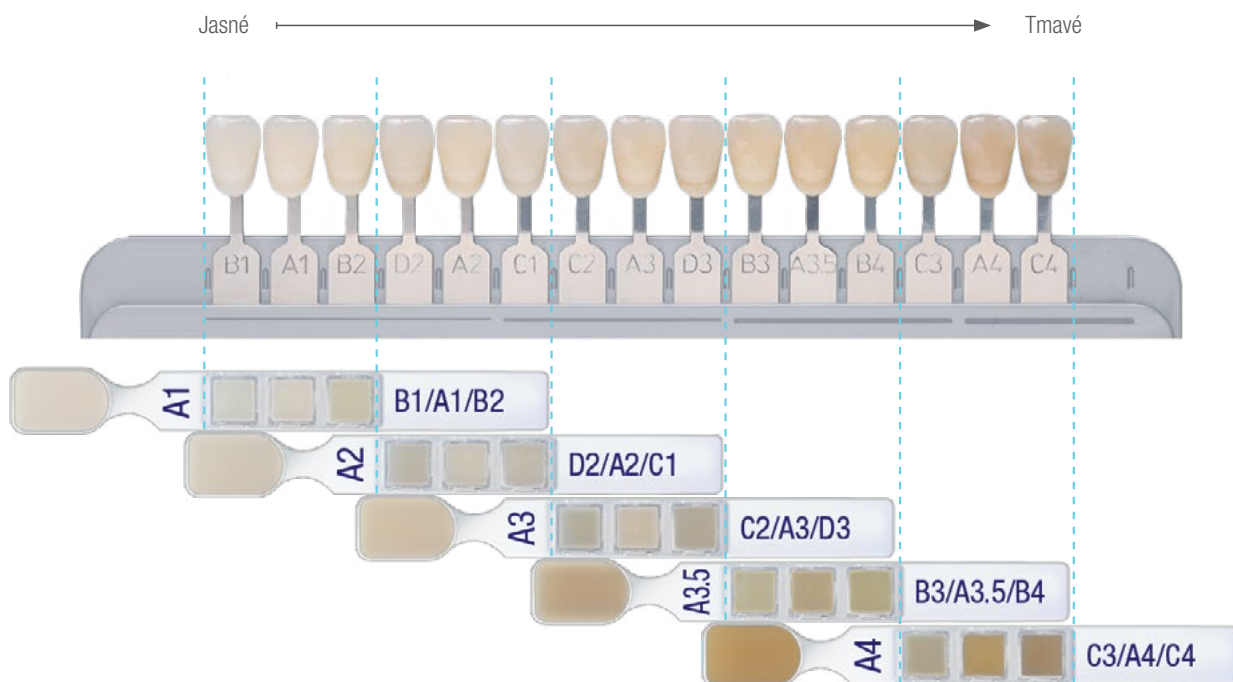

MODELOVÝ PŘÍKLAD, ŽE TO FUNGUJE!

Záruka vynikajících výsledků a snadné a příjemné práce

Modelovým příkladem možností, které nabízejí kompozity CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 v každodenní praxi, je klinický případ dr. Moniky Dzieciatkowské. Netěsnící amalgámová výplň byla nahrazena kompozitem aplikovaným technikou jednoho odstínu – A2 Classic. Postup vyplňování v postranním úseku chrupu je díky příznivým užitným vlastnostem jednoduchý, rychlý a esteticky předvídatelný. V souladu s přáním pacienta byly brázdy zabarveny, aby bylo dosaženo ještě přirozenějšího vzhledu.

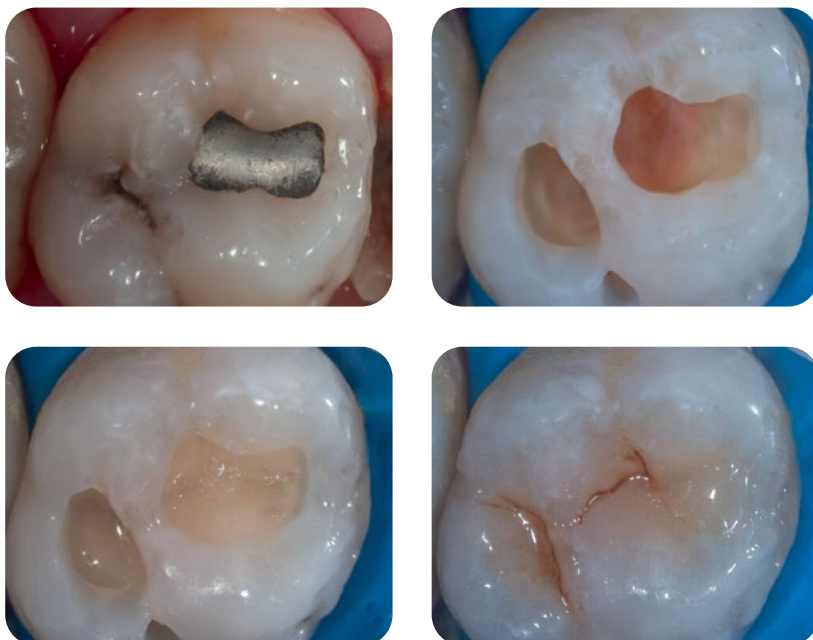

Zdroj: dr. Monika Dzieciatkowska, Polsko.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 ve verzi Classic lze použít i pro estetické výplně v předním úseku chrupu.

Dr. Piotr Marchewka provedl výplň III. třídy ve středním řezáku s použitím odstínu A2 Classic. V tomto případě byl aplikován vazebný systém CLEARFIL™ SE BOND 2 založený na technice selektivního leptání skloviny. Konečného lesku bylo dosaženo pomocí dvoustupňového systému leštících gumiček CLEARFIL™ TWIST DIA. Tyto typy zubních kazů jsou někdy pro zubaře obtížné vzhledem k jejich lokalizaci. Kvůli tomu jsou kompozity se složitými algoritmy postupu a menší plasticitou nevhodné. Proto je CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic díky svým mimořádně propracovaným užitným a estetickým vlastnostem ideální volbou pro každodenní práci zubního lékaře.



Zdroj: dr. Piotr Marchewka, Polsko.

MODELOVĚ POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Přirozeně vypadající, vysoce estetické výplně

Přirozená fluorescence

Díky přirozenému fluorescenčnímu efektu jsou výplně nerozeznatelné od vlastních zubů pacienta.

Přirozená opalescence

Díky tzv. efektu chameleona se výplň po zhotovení podobá barvě zubu a transparentní odstíny – průsvitný, jantarový, modrý a šedý – dokonale zvýrazňují průsvitný efekt a umožňují individualizaci výplní.

Stálost barev

Barvy kompozitu CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 jsou barevně stálé a po polymerizaci materiálu zůstávají stabilní, což zaručuje trvalé výsledky po mnoho let.

Light Diffusion

Patentovaná technologie Light Diffusion určuje konečný estetický výsledek. Přizpůsobuje správnou základní barvu a stupeň sytosti okolním zubním tkáním. Tato technologie umožňuje co nejvíce se přiblížit přirozeným světelným efektům pozorovaným v lidské zubovině a sklovině.

MODELOVĚ ROZVÍJENÉ INOVACE

Nejlepší užité vlastnosti materiálu

Univerzální použití

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 je nanohybridní kompozit obsahující 78 obj. % (66 hm. %) výplně. Je vhodný pro výplně v předním i postranním úseku chrupu.

Užité vlastnosti


Díky pokročilému složení a typu monomerů je materiál velmi tvárný, ale nelepí se na nástroje, což umožňuje pohodlnou a přesnou práci.

Precizní hustota

Viskozita sklovinových odstínů byla navržena tak, abyste mohli pracovat s vysokou přesností. Přizpůsobení sklovinné vrstvy materiálu okrajům kavity je snadné a modelování výplně je efektivní i se základním přístrojovým vybavením (např. aplikátor nebo kartáček).

Dlouhý čas práce

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 umožňuje práci při přirozeném osvětlení po dobu přibližně 5 minut. Při osvětlení lampou je čas práce stále postačující pro přesné nanesení další vrstvy.

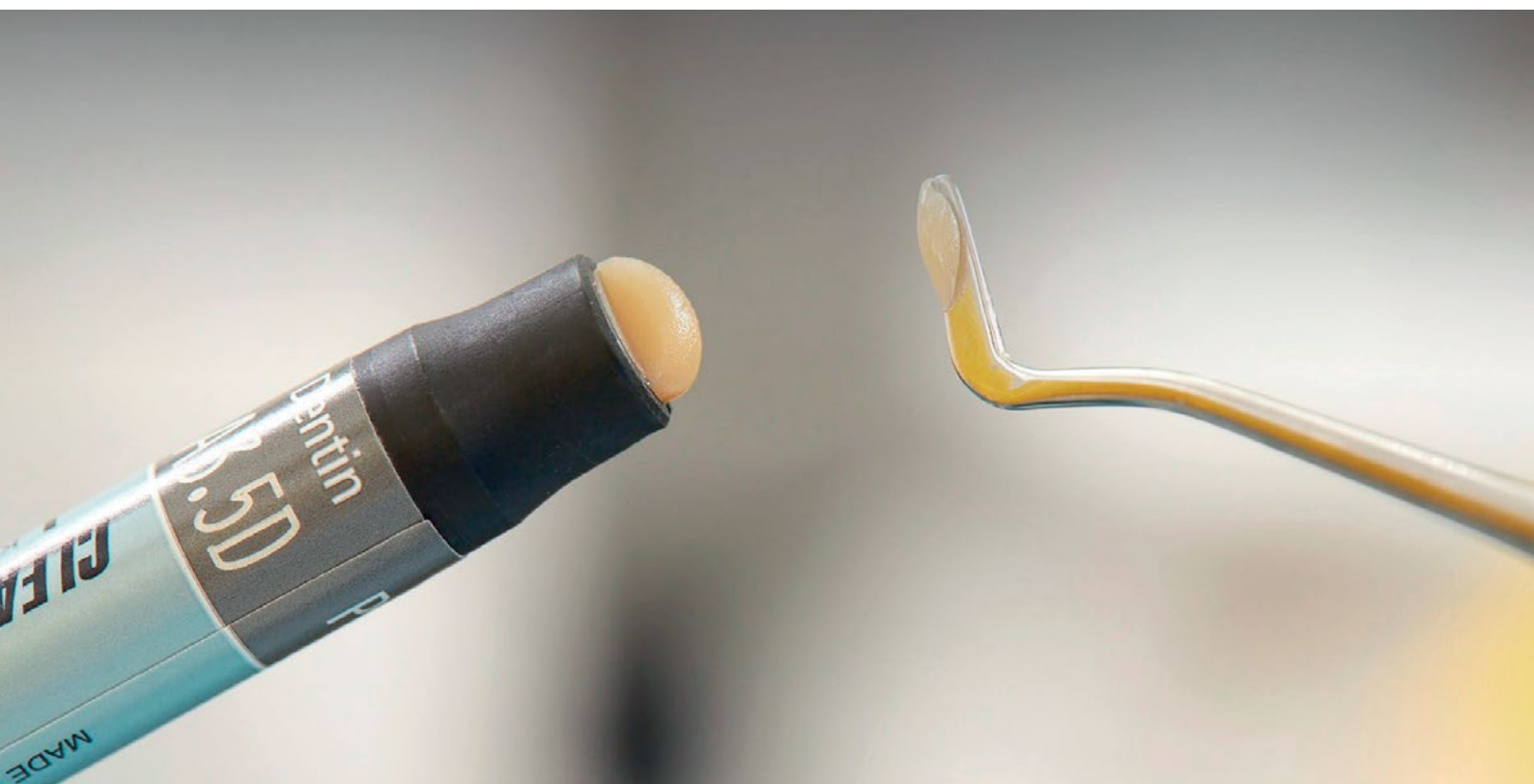

TYPY BALENÍ

Sady



#3010-EU Profesionální sada stříkaček

Classic A1, A2, A3, A3.5, Premium A1E, A2E, A3E, A3.5E,

A1D, A2D, A3D, A3.5D: 1 stříkačka příslušného odstínu (3,6 g / 2,0 ml)

Clear, Amber, Blue, Gray: 1 stříkačka příslušného odstínu (1,8 g / 0,9 ml) + vzorník



#3100-EU PLT Profesionální sada ampulí

Classic A1, A2, A3, A3.5, Premium A1E, A2E,

A3E, A3.5E, A1D, A2D, A3D, A3.5D,

Clear, Amber, Blue, Gray:

5 ampulí od každého odstínu (0,25 g) + vzorník



#3012-EU Startovací sada stříkaček

Classic A2, Premium A2D, A2E:

1 stříkačka příslušného odstínu (1,2 g / 0,7 ml)



#3102-EU PLT Startovací sada ampulí

Classic A2, Premium A2D, A2E:

5 ampulí od každého odstínu (0,25 g)

Vzorník



#3000-EU Vzorník

Všechny odstíny



#3001-EU Kompaktní vzorník

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, XW, W

STŘÍKAČKY A AMPULE PLT CLASSIC*

	A1	A2	A3	A3.5	A4	A6
Stříkačky	#3020-EU	#3021-EU	#3022-EU	#3023-EU	#3024-EU	#3025-EU
PLT	#3110-EU	#3111-EU	#3112-EU	#3113-EU	#3114-EU	#3115-EU

	B1	B2	B3	B4
Stříkačky	#3026-EU	#3027-EU	#3028-EU	#3029-EU
PLT	#3116-EU	#3117-EU	#3118-EU	#3119-EU

	C1	C2	C3	C4
Stříkačky	#3030-EU	#3031-EU	#3032-EU	#3033-EU
PLT	#3120-EU	#3121-EU	#3122-EU	#3123-EU

	D2	D3	XW	W
Stříkačky	#3034-EU	#3035-EU	#3036-EU	#3037-EU
PLT	#3124-EU	#3125-EU	#3126-EU	#3127-EU

STŘÍKAČKY A AMPULE PLT PREMIUM**

Dentin

	XWD	WD	A1D	A2D	A3D	A3.5D	A4D
Stříkačky	#3062-EU	#3063-EU	#3057-EU	#3058-EU	#3059-EU	#3060-EU	#3061-EU
PLT	#3152-EU	#3153-EU	#3147-EU	#3148-EU	#3149-EU	#3150-EU	#3151-EU

Enamel

	XWE	WE	A1E	A2E	A3E	A3.5E	A4E
Stříkačky	#3055-EU	#3056-EU	#3050-EU	#3051-EU	#3052-EU	#3053-EU	#3054-EU
PLT	#3145-EU	#3146-EU	#3140-EU	#3141-EU	#3142-EU	#3143-EU	#3144-EU

Translucent

	Clear	Blue	Gray	Amber
Stříkačky	#3064-EU	#3066-EU	#3067-EU	#3065-EU
PLT	#3154-EU	#3156-EU	#3157-EU	#3155-EU

Skutečné barvy se mohou lišit od barev v tisku.

*Každá stříkačka s barvami Classic a Premium obsahuje 3,6 g / 2,0 ml materiálu, každé balení PTL s barvami Classic a Premium obsahuje 20 ampulí po 0,25 g.

**Každá stříkačka s barvami Translucent obsahuje 1,8 g / 0,9 ml materiálu, každá náplň PTL s barvami Translucent obsahuje 10 ampulí po 0,25 g.

