

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

Fantastisk bevaring af glans,
nu i 3 forskellige viskositeter



DEN ENESTE KOMPOSIT, DU NOGENSINDE FÅR BRUG FOR.

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow er af Dental Advisor blevet tildelt Top Award for 9. år i træk og fås nu i 3 forskellige viskositeter. Den er tilpasset efter dine behov, så det er nemt at lave holdbare og æstetiske restaureringer.

- ✓ fantastisk bevaring af glans
- ✓ nem at polere
- ✓ holdbare restaureringer
- ✓ egnet til mange forskellige indikationer
- ✓ 3 viskositeter



3 NIVEAUER AF FLYDEEVNE

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

High

Low

Super Low


FLYDEEVNE



HØJ FLYDEEVNE

- ✓ Fremragende befugtningssevne og adaptation
- ✓ Som bunddækning
- ✓ Til små kaviteter


1 min. efter applicering
(vandret og lodret)

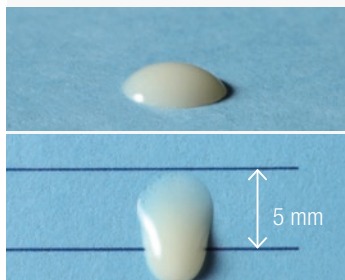

MELLEM FLYDEEVNE

- ✓ Til det bredeste indikationsområde og mange typer anteriore og posteriore restaureringer


1 min. efter applicering
(vandret og lodret)

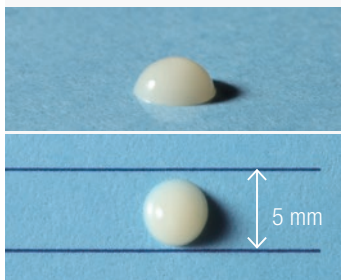

LAV FLYDEEVNE

- ✓ Perfekt til konstruktion af posteriore cuspides og cristae
- ✓ Bevarer formen efter applicering og flyder ikke ud

1 min. efter applicering
(vandret og lodret)

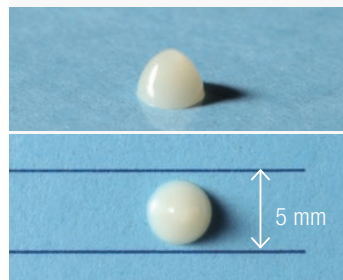

EXCEPTIONELT NEM AT POLERE

EXCEPTIONEL NEM POLERING OG NATURLIG GLANS, SOM OPNÅS MED DET SAMME, OG SOM HOLDER I LANG TID

Glansbevaring er en af de vigtigste egenskaber i kompositrestaurationer. Fillerpartiklerne i CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow er blevet udviklet til at sikre høj glans, som holder i lang tid. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow er ekstremt nem og hurtig at polere på blot få sekunder. Selv ved blot at tørre overfladen med gaze

eller en vatrulle vædet med alkohol kan der opnås et højt glansniveau. Æstetikken forbedres yderligere af de særlige klynger af lysdiffusionsfillere, der sikrer enestående farvetilpasningsegenskaber, så farven smelter glidende sammen med den omgivende tandstruktur.

Glans efter aftørring med ethanol¹



CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow




Filtek Supreme
Ultra Flowable*




Tetric EvoFlow*

GLANS (%)^{1,2}

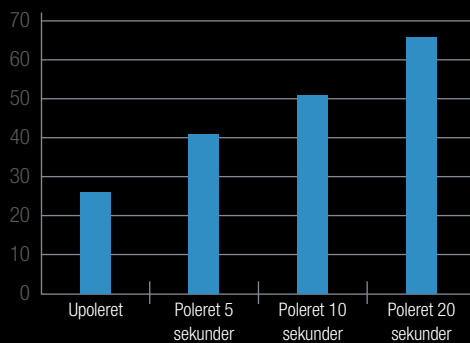

SLIDTEST MED TANDBØRSTE^{1,2}

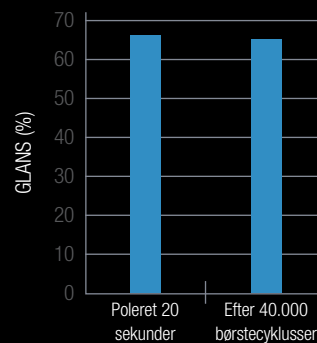



* Ikke et varemærke tilhørende Kuraray Noritake Dental Inc. 1 Datakilde: Kuraray Noritake Dental Inc. 2 Testresultater med CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low



Kilde: Dr. Nicola Scotti. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow low

UOVERTRUFFEN OG NEM HÅNDBTERING

Designet med tanke på de bedste håndteringsegenskaber. Vi anvender vores eget særligt udviklede silankoblingsmiddel til at behandle fillerne. Dette samt den kendsgerning, at vores komposit indeholder både submikron- og klyngefillere (0,18 μm til 3,5 μm), giver pastaen uovertrufne håndteringsegenskaber, som gør den nemmere at applicere, håndtere og forme. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow er en komposit som hverken klistrer eller trækker tråde. Og takket være sprøjtenes særlige design, resulterer det i en boblefri applicering.

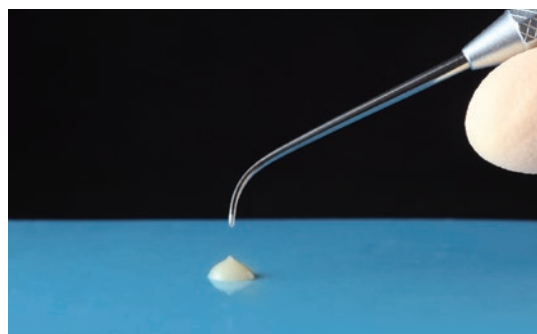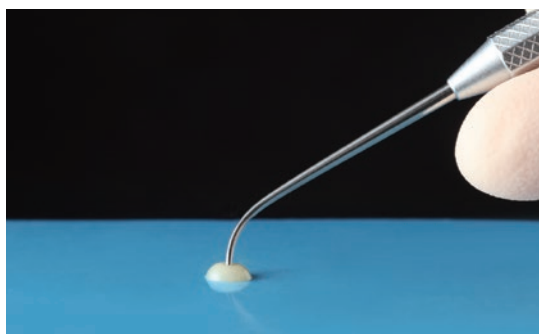


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low



Kilde: Dr. Nicola Scotti. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow low

TIL MANGE FORSKELLIGE INDIKATIONER

- ✓ Velegnet til aligner-behandling
- ✓ Flow-injektionsteknik
- ✓ Direkte restaureringer af alle kavitetsklasser, cervikale læsioner (f.eks. rodoverfladekaries, v-formede defekter), tandslid og tanderosion
- ✓ Bunddækning/liner
- ✓ Korrektur af tandposition og -form
- ✓ Intra-orale reparationer af kompositfyldninger og porcelænsfrakturer
- ✓ Cementering af keramik og komposit inlays/-onlays og facader med en tykkelse på under 2 mm

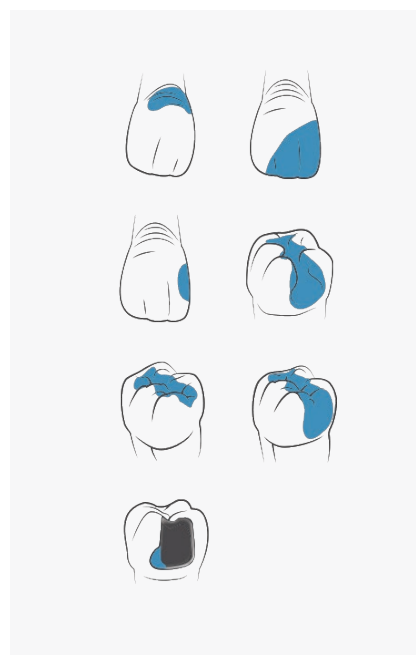

FANTASTISKE MEKANISKE EGENSKABER

Kuraray Noritake Dentals eget silankoblingsmiddel sørger for en høj fillerkoncentration (op til 78 vægt%, 64 volumen%), som giver uovertrufne mekaniske egenskaber, der endda gør CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow velegnet til posteriore restaureringer.


	BØJESTYRKE	TRYKSTYRKE
Super Low	152 MPa	374 MPa
Low	151 MPa	373 MPa
High	145 MPa	358 MPa

I henhold til ISO 4049:2009. Kilde: Kuraray Noritake Dental Inc.



Eksemplet blev udført med CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low. Billeder anvendt med tilladelse fra Dr. Keiichi Hosaka.

SAMMENLIGNING AF BØJESTYRKE

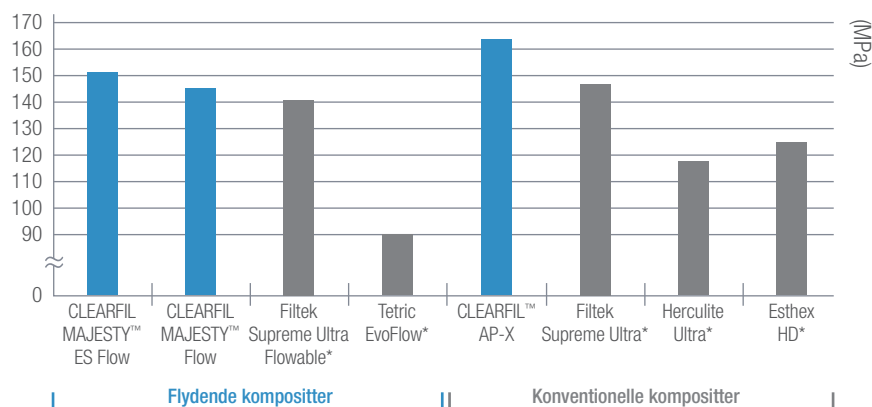

* Ikke et varemærke tilhørende Kuraray Noritake Dental Inc.

Testresultater med CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low. I henhold til ISO 4049:2009. Kilde: Kuraray Noritake Dental Inc.

LYSDIFFUSIONSTEKNOLOGI


Lysdiffusion henviser til et materiales evne til at sprede og reflektere lysstråler i mange forskellige vinkler. Lysdiffusionsteknologien (LD) fra Kuraray Noritake Dental inkorporerer lysdiffusions fillerpartikler, for at forbedre materialets æstetiske egenskaber. Dette gør det muligt at sprede lyset i alle retninger på stort set samme måde som i naturligt tandvæv, således at der opnås en højæstetisk restaurering.

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow leverer en troværdig gengivelse af lysdiffusionsegenskaberne i naturligt tandvæv. Den giver en højere grad af lysdiffusion i de mere opake farver (dentin) og et lavere niveau i de translucente farver. I praksis medfører det et enkelt slutresultat: denne lysdiffusion er det ultimative "redskab" til at skabe restaureringer med en fremtoning, der smelter ubesværet sammen med de omgivende tænder.


LYSDIFFUSIONSTEST

Følgende test viser effekten af lysdiffusion samt forskellen:


På en sort/hvid baggrund

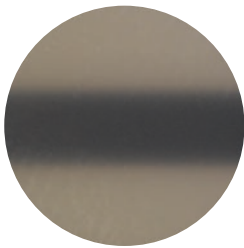

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow
(højeste niveau af lysdiffusion)

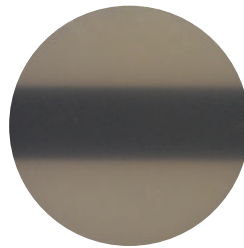

3M ESPE Filtek
Supreme Ultra Flowable*

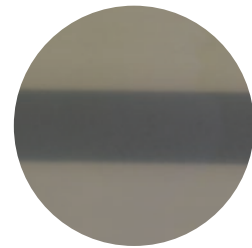

Ivoclar Vivadent
Tetric EvoFlow*

Over en sort/hvid baggrund



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow
(højeste niveau af lysdiffusion)



3M ESPE Filtek
Supreme Ultra Flowable*




Ivoclar Vivadent
Tetric EvoFlow*

* Ikke et varemærke tilhørende Kuraray Noritake Dental Inc.




TILGÆNGELIGE FARVER


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

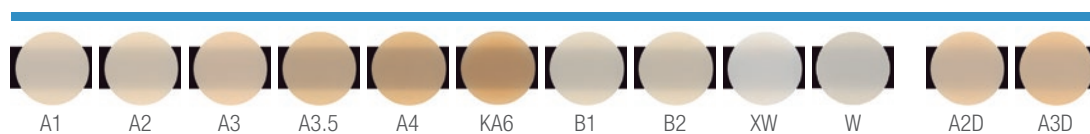

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

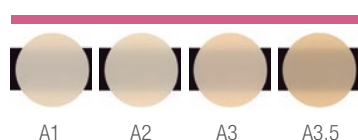

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High

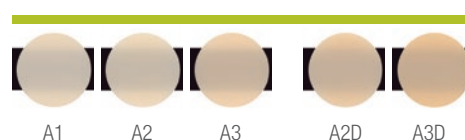

NEMME KLINISKE TRIN




Præparer kaviteten.



Applicer adhæsivet i henhold til producentens anvisninger.



Applicer og form CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow.*

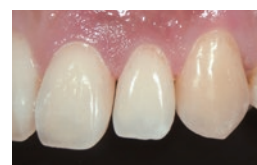

Polér restaureringen.

*Eksemplet blev udført med CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low. Billeder anvendt med tilladelse fra dr. Hirofumi Tashiro.

PRODUKTSORTIMENT

SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

- #3341-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A1)
 - #3342-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A2)
 - #3343-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A3)
 - #3344-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A3.5)
- 1 Sprøjte(2.7g/1.5ml) 15 Nålespidser



SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

- #3301-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A1)
 - #3302-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A2)
 - #3303-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3)
 - #3304-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3.5)
 - #3305-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A4)
 - #3306-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (KA6)
 - #3307-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (B1)
 - #3308-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (B2)
 - #3309-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (XW)
 - #3310-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A2D)
 - #3311-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3D)
 - #3312-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (W)
- 1 Sprøjte(2.7g/1.5ml) 15 Nålespidser



SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High

- #3321-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A1)
 - #3322-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A2)
 - #3323-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A3)
 - #3324-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A2D)
 - #3325-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A3D)
- 1 Sprøjte(2.7g/1.5ml) 15 Nålespidser



CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW NÅLESPIDS

- #3331-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Nålespids (N)
- 20 Nålespidser





Din kontakt

**Kuraray Europe Benelux,
Nordics & Baltics.**

Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nederlandene

Telefon +31 (0)255 523 701

infonordics@kuraray.com

Website www.kuraraynoritake.eu



EU-importør

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany

Telefonnummer +49 (0)69 305 35 835

Faks +49 (0)69 305 98 35 835

www.kuraraynoritake.eu

centralmarketing@kuraray.com

- Inden dette produkt tages i brug skal man sørge for at læse den brugsanvisning, der følger med produktet.
- Specifikationer og produktets udseende kan ændres uden varsel.
- Det endelige farveresultat kan afvige en smule fra den trykte farve.

"CLEARFIL" og "CLEARFIL MAJESTY" er varemærker tilhørende KURARAY CO., LTD



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Websted www.kuraraynoritake.com

