

## ***CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW***

---

Il composito fluido universale,  
da oggi disponibile in 3 livelli di fluidità.



# L'UNICO COMPOSITO DI CUI AVRAI BISOGNO.

## **CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow**

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow, composito fluido universale, è oggi disponibile in tre diversi livelli di fluidità, per adattarsi a tutte le necessità. Per ricostruzioni stabili nel tempo, estetiche e semplici da realizzare.

- ✓ Brillantezza eccezionale e duratura
- ✓ Facile da lucidare
- ✓ Ricostruzioni che durano nel tempo
- ✓ Ampia gamma di indicazioni
- ✓ 3 diversi livelli di fluidità



# 3 DIVERSI LIVELLI DI FLUIDITÀ



**Vincitore per quattro anni consecutivi del Dental Advisor Top Award.** Il nostro composito flow da oggi è disponibile in tre diversi livelli di fluidità, per adattarsi alle tue necessità e realizzare con semplicità restauri di elevato valore estetico.

High

Low

Super Low


FLUIDITÀ



## FLUIDITÀ ELEVATA

- ✓ Bagnabilità e adattamento eccellenti
- ✓ Per cavità di piccole dimensioni
- ✓ Utilizzabile come sottofondo (liner)


1 minuto dopo l'erogazione  
(orizzontale e verticale)

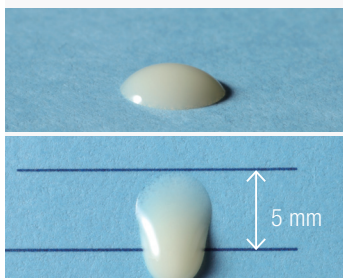

## FLUIDITÀ INTERMEDIA

- ✓ Per un'ampia gamma di ricostruzioni nei settori anteriori e posteriori


1 minuto dopo l'erogazione  
(orizzontale e verticale)

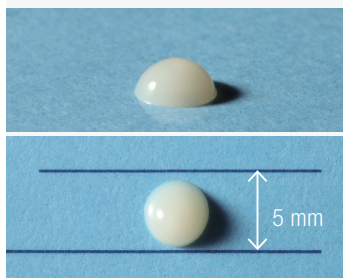

## FLUIDITÀ BASSA

- ✓ Ideale per cuspidi e creste nei settori posteriori
- ✓ Conserva la morfologia desiderata
- ✓ Per cavità di Classe I e V

1 minuto dopo l'erogazione  
(orizzontale e verticale)

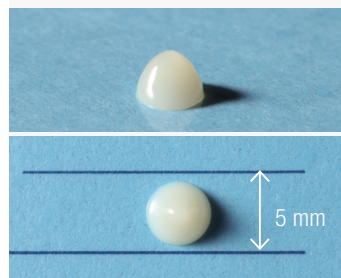

# UNA LUCIDATURA STRAORDINARIAMENTE FACILE

BRILLANTEZZA DOPO LA PULIZIA CON ALCOL<sup>1</sup>



CLEARFIL MAJESTY™  
ES Flow



Filtek Supreme  
Ultra Flowable\*




Tetric EvoFlow\*

## STRAORDINARIAMENTE SEMPLICE DA LUCIDARE, PER UNA BRILLANTEZZA Istantanea E DURATURA


Una brillantezza che duri nel tempo è un requisito indispensabile per il successo di un restauro in composito. Le particelle di riempitivo di CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow sono state progettate per garantire un livello di brillantezza elevato e duraturo. Con CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow, bastano pochi secondi per lucidare, in modo semplice e veloce.

Sarà sufficiente pulire la superficie con una garza o un batuffolo di cotone imbevuti di alcol e il risultato sarà sorprendente. L'effetto estetico è esaltato da speciali cluster di diffusione della luce che garantiscono un adattamento cromatico ideale e una perfetta mimetizzazione con i tessuti dei denti naturali.

### Brillantezza (%)<sup>1,2</sup>

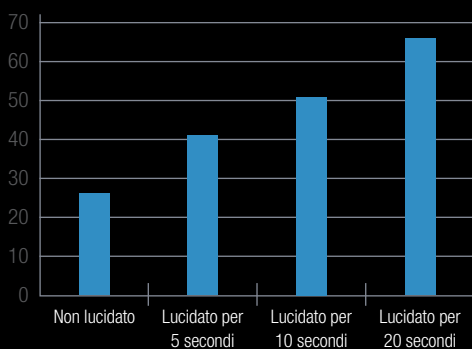

### Resistenza all'abrasione da spazzolamento<sup>1,2</sup>

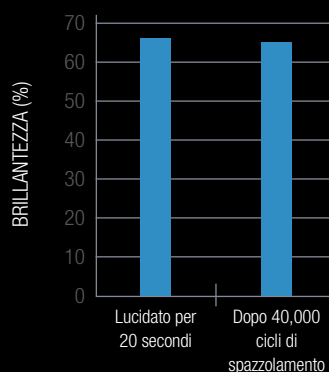


\* Non è un marchio Kuraray Noritake Dental Inc. <sup>1</sup> Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc. <sup>2</sup> Risultati del test condotto con CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low



# UNA MANEGGEVOLEZZA STRAORDINARIA

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow è stato progettato per offrire le migliori caratteristiche di maneggevolezza, grazie al trattamento delle particelle con un esclusivo agente di accoppiamento silanico e alla presenza di filler submicronici e cluster (da 0,18 $\mu$ m a 3,5 $\mu$ m), che ne agevolano l'erogazione, la lavorazione e la modellazione. Il risultato è un prodotto che non si appiccica e si applica con facilità, grazie anche allo speciale design della siringa, che consente un'erogazione priva di bolle.

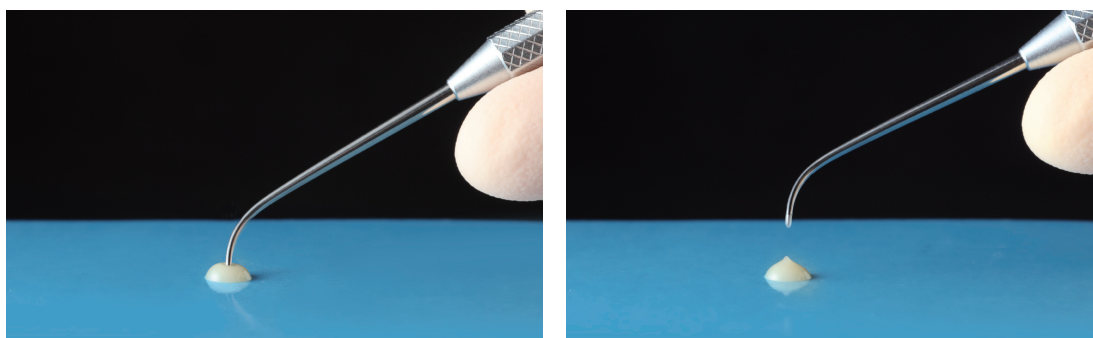


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low



## UN'AMPIA GAMMA DI INDICAZIONI

- ✓ Restauri diretti per tutte le classi cavarie, lesioni cervicali (carie della superficie radicolare, difetti a V), usura o erosione dentale
- ✓ Come base/sottofondo (liner) per restauri diretti
- ✓ Per correggere morfologia e posizione degli elementi posteriori
- ✓ Per la riparazione intraorale di restauri fratturati
- ✓ Per la cementazione di intarsi in ceramica, onlay e faccette di spessore inferiore a 2 mm

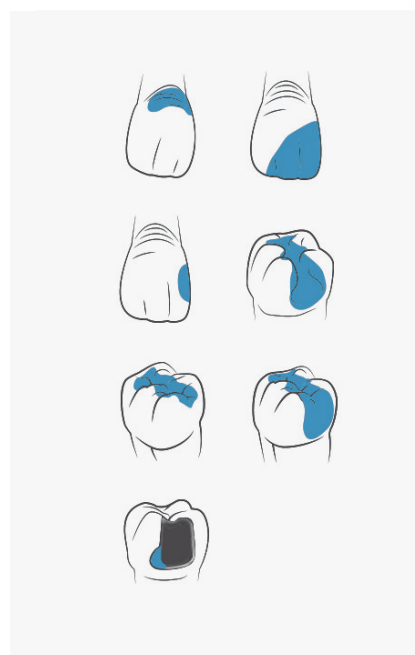


# PROPRIETÀ MECCANICHE SUPERIORI

L'esclusivo agente di accoppiamento silanico di Kuraray Noritake Dental consente un'elevata carica di riempitivo (fino a 78 wt%, 64 vol%), conferendo al nostro composito caratteristiche meccaniche che lo rendono adatto per un utilizzo anche nei settori posteriori.


	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	RESISTENZA ALLA COMPRESIONE
Super Low	152 MPa	374 MPa
Low	151 MPa	373 MPa
High	145 MPa	358 MPa

In conformità con ISO 4049:2009. Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc.

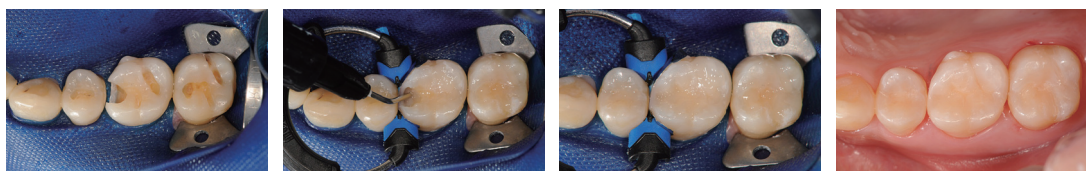

Caso trattato con CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low. Per gentile concessione del Dr. Keiichi Hosaka.

## RESISTENZA ALLA FLESSIONE: COMPARAZIONE

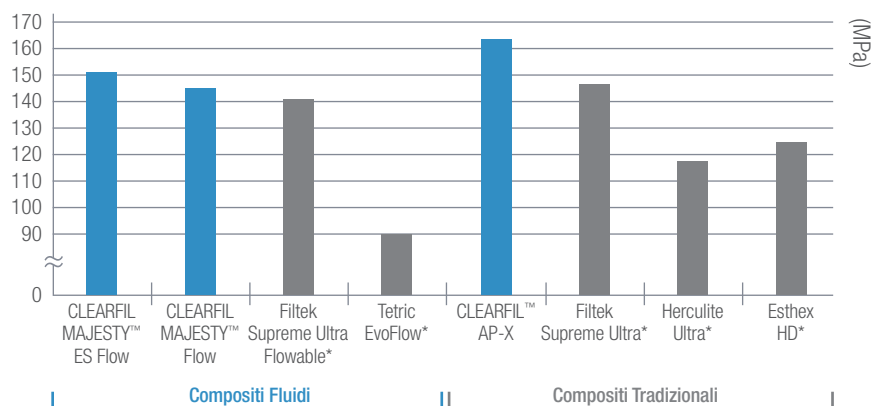


\* Non è un marchio Kuraray Noritake, Dental Inc.  
Risultati del test condotto con CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low. In conformità con ISO 4049:2009. Fonte: Kuraray Noritake, Dental Inc.


# TECNOLOGIA DI DIFFUSIONE DELLA LUCE

La diffusione della luce consiste nella capacità di un materiale di diffondere e riflettere i raggi luminosi in molteplici direzioni. Grazie alla tecnologia di diffusione della luce (LD), le speciali particelle contenute nei compositi Kuraray Noritake Dental esaltano le proprietà estetiche del materiale. In questo modo, la luce viene diffusa in tutte le direzioni, emulando le caratteristiche del dente naturale e consentendo di realizzare restauri di livello estetico superiore.


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow riproduce fedelmente le proprietà dei tessuti dentali, con una maggiore diffusione della luce nelle tonalità più opache (dentina) e una minore in quelle più traslucide. La conclusione è semplice: la tecnologia di diffusione della luce è lo “strumento” ideale per creare restauri che si integrano armoniosamente con la dentatura naturale.

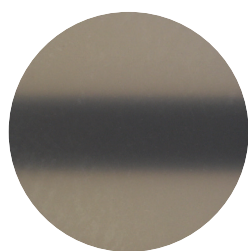

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow  
(massimo livello di diffusione della luce)

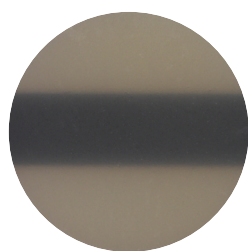

3M ESPE Filtek  
Supreme Ultra Flowable\*

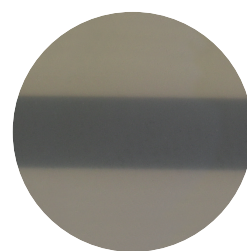

Ivoclar Vivadent  
Tetric EvoFlow\*

## SU CARTA

---



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow  
(massimo livello di diffusione della luce)



3M ESPE Filtek  
Supreme Ultra Flowable\*



Ivoclar Vivadent  
Tetric EvoFlow\*

## NON SU CARTA

---


\*Non è un marchio Kuraray Noritake Dental Inc.






## GAMMA COLORI

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

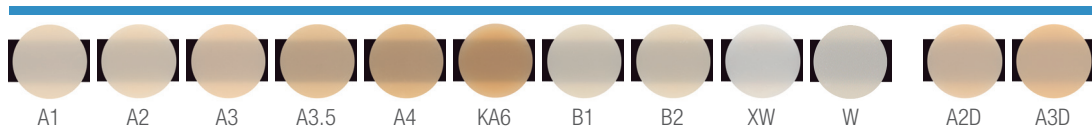

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

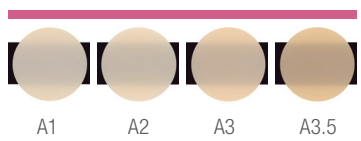

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High



## SEMPLICE PROCEDURA CLINICA



Preparare la cavità.



Applicare l'adesivo seguendo le istruzioni del produttore.



Applicare CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow e modellare.\*



Lucidare il restauro.

\* Caso trattato con CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low. Per gentile concessione del Dr. Hirofumi Tashiro.

## GAMMA PRODOTTO

### CONFEZIONE SINGOLA CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

- #3341-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A1)
  - #3342-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A2)
  - #3343-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A3)
  - #3344-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A3.5)
- 1 Siringa (2,7g/1,5ml) 15 Puntali ad ago



### CONFEZIONE SINGOLA CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

- #3301-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A1)
  - #3302-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A2)
  - #3303-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3)
  - #3304-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3.5)
  - #3305-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A4)
  - #3306-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (KA6)
  - #3307-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (B1)
  - #3308-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (B2)
  - #3309-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (XW)
  - #3310-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A2D)
  - #3311-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3D)
  - #3312-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (W)
- 1 Siringa (2,7g/1,5ml) 15 Puntali ad ago



### CONFEZIONE SINGOLA CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High

- #3321-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A1)
  - #3322-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A2)
  - #3323-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A3)
  - #3324-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A2D)
  - #3325-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A3D)
- 1 Siringa (2,7g/1,5ml) 15 Puntali ad ago



### CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Puntali ad ago

- #3331-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Puntali ad ago (N)
- 20 Puntali ad ago






## CONTATTI

Kuraray Europe Italia S.r.l  
Via G. Boccaccio 21,  
20123 Milano

**Telefono** 02 63471228  
**E-Mail** dental-italia@kuraray.com  
**Web** www.kuraraynoritake.eu/it

 [facebook.com/KurarayNoritakeInLab](https://facebook.com/KurarayNoritakeInLab)  
[facebook.com/KurarayNoritakeInClinic](https://facebook.com/KurarayNoritakeInClinic)

 **Kuraray Noritake Dental Inc.**  
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

- Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di aver letto le Istruzioni d'uso fornite con il prodotto.
- Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a variazione senza preavviso.
- Il colore stampato può differire leggermente dal colore effettivo.

“CLEARFIL” and “CLEARFIL MAJESTY” sono marchi di Kuraray Co., Ltd.