



WSZYSTKO PŁYNNIE

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow to jedyny płynny kompozyt, z którym zrobisz wszystko – od korekty kształtu czy wypełnienia ubytków klasy V, przez cementowanie aż po podniesienie zwarcia. Szybko, wygodnie i bez obaw o efekty.



PŁYNNE PRZEJŚCIE Z TRADYCYJNYCH KOMPOZYTÓW NA WYŻSZY POZIOM ESTETYKI

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow to trzy poziomy gęstości, dzięki którym z łatwością dobierzesz płynny kompozyt do każdego wskazania klinicznego. A do tego największa ilość wypełniacza, wygodna strzykawka eliminująca powstawanie pęcherzyków powietrza i opracowana w laboratoriach Kuraray Noritake technologia Light Diffusion. To sprawia, że każde wypełnienie będzie trwałe i superestetyczne przez długie lata.

- ✓ Trwałe utrzymanie wysokiej jakości połysku
- ✓ Łatwość polerowania
- ✓ Wysoka trwałość wypełnień
- ✓ 3 rodzaje gęstości



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow od 7 lat laureat prestiżowej nagrody Top Award w kategorii kompozyty przyznawanej przez Dental Advisor!

PŁYNNIE DOBIERZ KOMPOZYT DO POTRZEB PACJENTA

Zrozumienie potrzeb lekarzy dentystów to klucz do tworzenia produktów idealnie spełniających Twoje oczekiwania. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow to trzy poziomy gęstości, dzięki którym z łatwością dobierzesz kompozyt do potrzeb wynikających z zastanej sytuacji.


STOPIEŃ PŁYNNOŚCI



WYSOKA PŁYNNOŚĆ

- ✓ Znakomita zwilżalność i adaptacja do tkanek
- ✓ Doskonały do małych ubytków
- ✓ Jako podkład typu liner


1 min. po aplikacji
(w poziomie i w pionie)

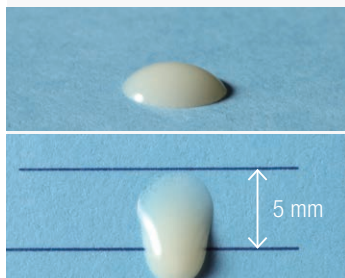

ŚREDNIA PŁYNNOŚĆ

- ✓ Szeroki zakres wskazań, wypełnień w odcinku przednim i bocznym


1 min. po aplikacji
(w poziomie i w pionie)

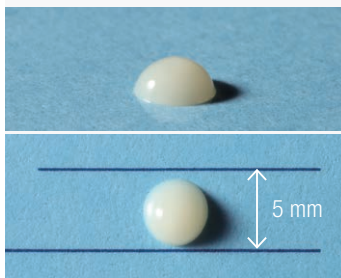

NISKA PŁYNNOŚĆ

- ✓ Zachowuje pożądany kształt
- ✓ Idealny do odbudowy guzków oraz listew brzęznych w odcinku bocznym
- ✓ Do ubytków klas I oraz V

1 min. po aplikacji
(w poziomie i w pionie)

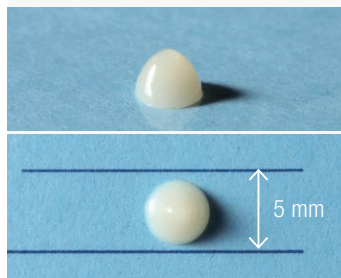

PŁYNNNE POLEROWANIE NA WYSOKI POŁYSK

Połysk tylko po przetarciu etanolem¹



CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow



Filtek Supreme
Ultra Flowable*




Tetric EvoFlow*

PRZEJDŹ PŁYNNIE NA WYŻSZY POZIOM ESTETYKI


Trwałość i estetyka – to dwie najważniejsze determinanty nowoczesnych kompozytów. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow został zaprojektowany tak, aby łatwo osiągnąć wysoki połysk i zachować go wraz z upływem czasu. Spektakularny efekt jest widoczny po kilku sekundach, gdyż materiał wyjątkowo łatwo poddaje się polerowaniu.

Estetyka wypełnienia dodatkowo zyskuje dzięki zjawisku dyfuzji światła wewnątrz struktury klastrowej kompozytu. Takie rozwiązanie powoduje, że materiał idealnie adaptuje się do koloru tkanek otaczających ząb, odwzorowując naturalne właściwości szkliva i zębiny.

Połysk (%)^{1,2}

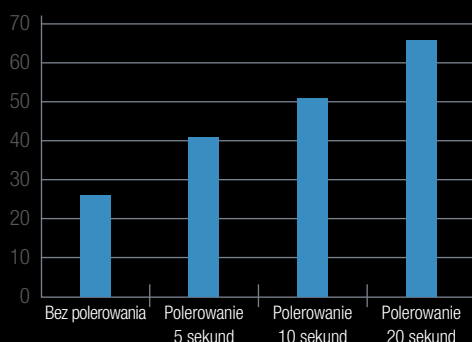

Test ścieralności^{1,2}

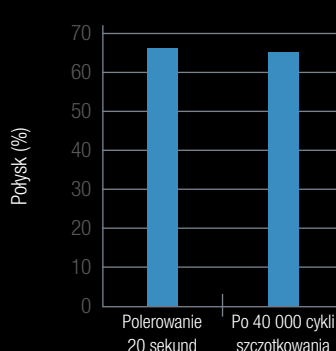


* Nie jest to znak towarowy Kuraray Noritake Dental Inc.

¹ Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc. ² Wyniki testu z użyciem CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low.



PŁYNNIE DOCENISZ JAKOŚĆ

Swoje wyjątkowe właściwości użytkowe CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow zawdzięcza opatentowanej przez Kuraray Noritake technice silanizacji zapewniającej modyfikację powierzchni cząstek wypełniaczy. Kompozyt zawiera wypełniacze submikronowe oraz klastrowe (0,18–3,5 μm), gwarantujące łatwe dozowanie, aplikację i modelowanie. Jednym słowem – CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow to prosty sposób, by płynnie przejść na wyższy poziom wypełniania.

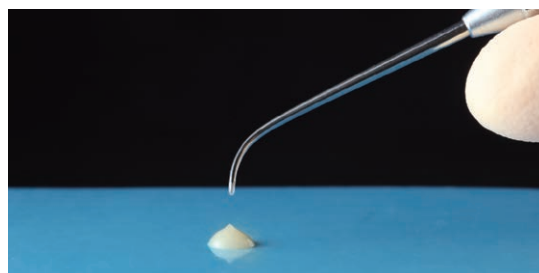


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low



PŁYNNIE WE WSZYSTKICH WSKAZANIACH

- ✓ Bezpośrednia obudowa ubytków wszystkich klas, w tym ubytków przyszyjkowych
- ✓ Technika Injection Flow
- ✓ Podkład typu liner
- ✓ Modelowanie listew brzeżnych
- ✓ Naprawy uzupełnień wewnątrznych
- ✓ Cementowanie ceramicznych i kompozytowych wkładów koronowych typu inlay/onlay oraz licówek o grubości do 2 mm

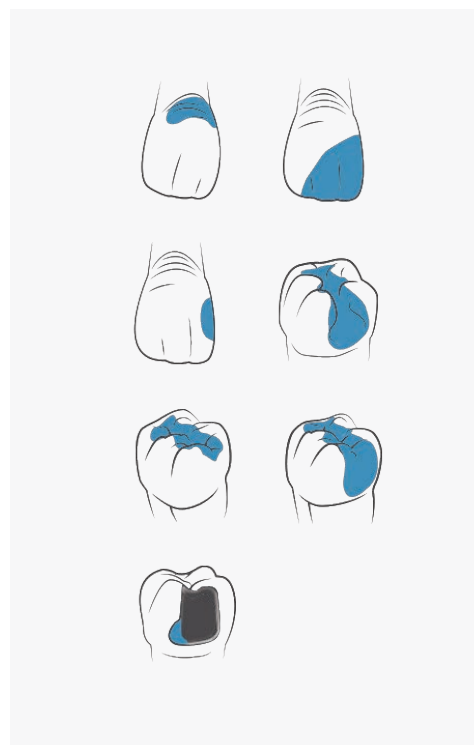

WSZYSTKO PŁYNNIE Z NAJWYŻSZĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ

Silanowy środek sprzęgający firmy Kuraray Noritake Dental pozwala na duże napełnienie kompozytu cząstkami wypełniacza (78% wag., 64% obj.), co pozwala zapewnić najlepsze właściwości mechaniczne. Dzięki temu ten płynny kompozyt jest odpowiedni nawet do odbudowy zębów bocznych.


	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
Super Low	152 MPa	374 MPa
Low	151 MPa	373 MPa
High	145 MPa	358 MPa

Zgodnie z normą ISO 4049:2009. Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc.



Przypadek kliniczny wykonany kompozytem o niskiej płynności. Zdjęcia dzięki uprzejmości Dr. Keichi Hosaka.

PORÓWNANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE

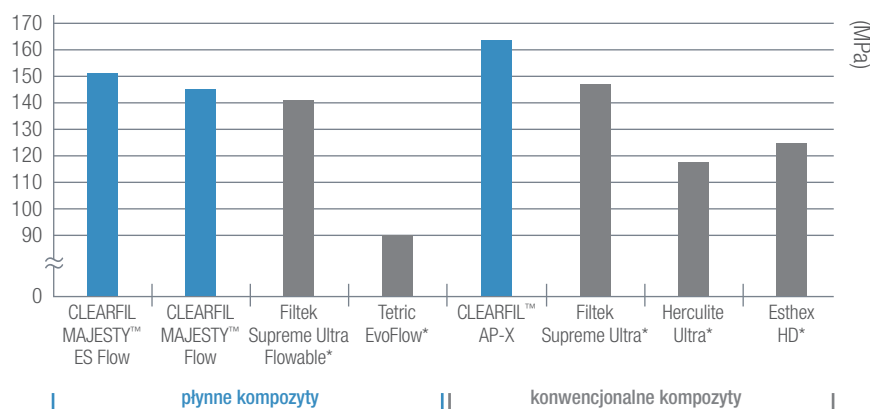

* Nie jest to znak towarowy Kuraray Noritake Dental Inc.


Wyniki testu przy użyciu CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low. Zgodnie z ISO 4049: 2009. Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc.

NATURALNY EFEKT PŁYNNEGO ROZPROSZENIA ŚWIATŁA


O tym, jak ważne dla estetyki wykonania wypełnień jest odwzorowanie naturalnego rozproszenia światła, mówi się od wielu lat. Opatentowana przez Kuraray Noritake i zastosowana w CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow technologia Light Diffusion to rozwiązanie pozwalające uzyskać ten efekt na powierzchni zęba, który jest maksymalnie zbliżony do jego naturalnych i indywidualnych właściwości. Poziom dyfuzji światła będzie wyższy w mniej przejrzystych odcieniach

(zębina) i niższy w bardziej przeziernych, co sprawia, że każde wypełnienie zyskuje doskonałe walory estetyczne, a miejsce łączenia kompozytu z tkankami zęba jest niewidoczne dla ludzkiego oka.


Warto zaznaczyć w tym miejscu, że rezultat kliniczny spełnia pokładane w nim oczekiwania – i to zarówno u wykonującego zabieg, jak i pacjenta.

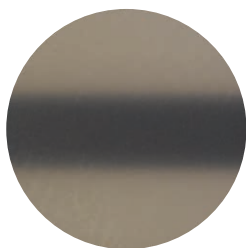

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow
(najwyższy stopień dyfuzji światła)

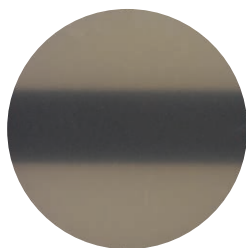

3M ESPE Filtek
Supreme Ultra Flowable*

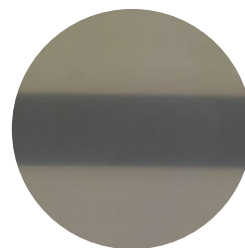

Ivoclar Vivadent
Tetric EvoFlow*

NA PAPIERZE



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow
(najwyższy stopień dyfuzji światła)



3M ESPE Filtek
Supreme Ultra Flowable*



Ivoclar Vivadent
Tetric EvoFlow*


BEZ PAPIERU

* Nie jest to znak towarowy Kuraray Noritake Dental Inc.




DOSTĘPNE ODCIENIE


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

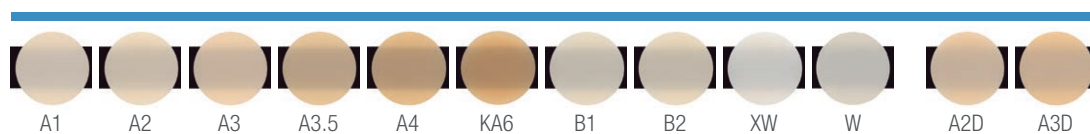

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

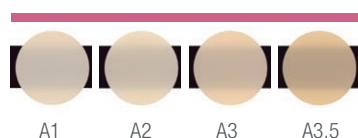

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High

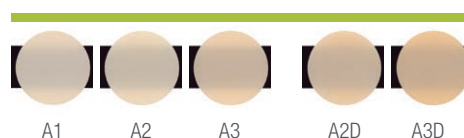

ŁATWE POSTĘPOWANIE KLINICZNE



Opracowanie ubytku



Aplikacja systemu wiążącego
zgodnie z instrukcją producenta



Aplikacja i modelowanie
CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow*



Polerowanie wypełnień

* Przypadek kliniczny wykonany kompozytem o CLEARFIL MAJESTY™ ES flow Super Low. Zdjęcia dzięki uprzejmości Dr. Hirofumi Tashiro.

RODZAJE OPAKOWAŃ

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

#3341-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A1)

#3342-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A2)

#3343-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A3)

#3344-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A3.5)

1 strzykawka (2,7 g/1,5 ml) oraz 15 końcówek aplikacyjnych



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

#3301-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A1)

#3302-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A2)

#3303-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3)

#3304-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3.5)

#3305-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A4)

#3306-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (KA6)

#3307-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (B1)

#3308-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (B2)

#3309-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (XW)

#3310-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A2D)

#3311-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3D)

#3312-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (W)

1 strzykawka (2,7 g/1,5 ml) oraz 15 końcówek aplikacyjnych



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High

#3321-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A1)

#3322-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A2)

#3323-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A3)

#3324-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A2D)

#3325-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A3D)

1 strzykawka (2,7 g/1,5 ml) oraz 15 końcówek aplikacyjnych



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow końcówki aplikacyjne

#3331-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Needle Tip (N)

20 końcówek aplikacyjnych





KONTAKT

Kuraray Europe GmbH

BU Medical Products

Philipp-Reis-Strasse 4

65795 Hattersheim am Main

Niemcy

Tel. +48 662 281 282

E-Mail dental-poland@kuraray.com

Strona www.kuraraynoritake.eu/pl

- Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi.
- Specyfikacje i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Kolor nadruku może nieznacznie różnić się od koloru rzeczywistego.

„CLEARFIL” i „CLEARFIL MAJESTY” są zastrzeżonymi znakami towarowymi Kuraray Co., Ltd.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia

Website www.kuraraynoritake.com