

CLEARFIL™ AP-X

ESTETICKÝ A ODOLNÝ



CLEARFIL™ AP-X je světlem tuhnoucí, rentgenkontrastní univerzální kompozitní pryskyřice, která kombinuje přesné barevné přizpůsobení, vynikající leštitelnost a výjimečné fyzikální vlastnosti. Díky těmto vlastnostem je materiál vhodný jak pro výplně ve frontálních, tak i distálních zubech.

PŘIROZENÁ ESTETIKA

CLEARFIL™ AP-X vykazuje téměř stejnou translucenci a fluorescenci jako sklovina, což znamená, že zub rekonstruovaný materiálem CLEARFIL™ AP-X vypadá jako přirozený zub. U korunkových výplní zvyšují světlejší odstíny translucenci materiálu; u krčkových výplní naopak převládá opacita.

PEVNOST A ODOLNOST

CLEARFIL™ AP-X obsahuje velký podíl jemných částic baryového skla o velikosti 3 µm. Právě tento vysoký obsah plniva je příčinou neobvykle vysoké odolnosti vůči opotřebení a lomu, kterou se CLEARFIL™ AP-X vyznačuje. Kromě toho vynikající rentgenkontrastnost tohoto produktu usnadňuje vyhodnocování rentgenových snímků.

KOMBINACE RŮZNÝCH ODSÍNŮ


CLEARFIL™ AP-X je k dispozici v 11 odstínech VITA®, které doplňují tři speciálně přizpůsobené odstíny – CL, HO a XL – pro větší estetickou univerzálnost. Odstín CL je určen pro krčkové výplně, odstín HO účinně maskuje tmavou nebo diskolorovanou zubní tkáň a odstín XL zvyšuje translucenci výplně. Díky této široké škále odstínů lze snadno splnit nejrůznější klinické a estetické požadavky.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI	CLEARFIL™ AP-X
Pevnost v tlaku (MPa)	412
Pevnost v ohybu (MPa)*	164
Obsah plniva (% hmotnosti)	86
Obsah plniva (% objemu)	71
Odolnost vůči opotřebení, sklovina** (mm ³)	0,03
Sorpce vody* (µg/mm ³)	16,2
Rozpustnost* (µg/mm ³)	0,6

Data Kuraray Noritake Dental Inc.

* (ISO4049)

** Po 40 000 tahů. Konkrétní výsledky testů jsou k dispozici v dokumentaci.

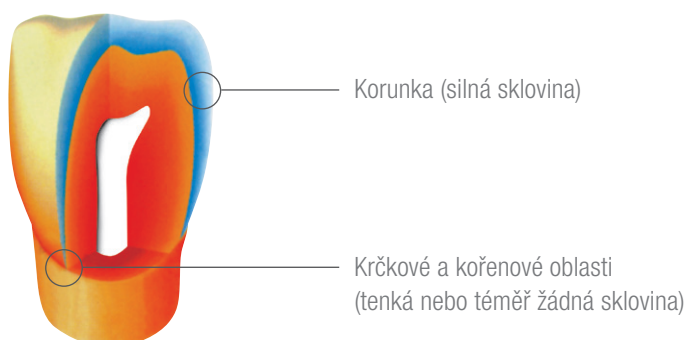

VYSOKÁ LEŠTITELNOST

CLEARFIL™ AP-X je mikrohybridní kompozit obsahující jemné částice baryového skla, které zajišťují vynikající leštitelnost. To je důležitý faktor z estetického hlediska, má však vliv i na hygienické a preventivní aspekty: retence plaku, sekundární kaz a dráždění dásní.

REDUKOVANÉ SMRŠTĚNÍ

Jemné částice o velikosti 3 µm jsou obsaženy ve vysoké hustotě (86 % hmotnosti), čímž se snižuje polymerační smrštění materiálu CLEARFIL™ AP-X.

SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ


Konzistence materiálu CLEARFIL™ AP-X je vhodná pro jakoukoli indikaci. V případě frontálních výplní umožňuje CLEARFIL™ AP-X snadné tvarování pomocí pásky matrice. Navíc se nelepí na nástroje. Naopak v případě distálních výplní má CLEARFIL™ AP-X konzistenci, která umožňuje dobré tvarování.

PRŮVODCE VÝBĚREM ODSŤÍNŮ

Oblast ošetření

	Standardní odstíny			Krčkové odstíny
	A2	A3	A3.5	A4
1 Výplně kavit I., II., IV. třídy	○	↑	↑	
2 Výplně kavit III. třídy	↓	○	↑	
3 Výplně kavit V. třídy	↓	↓	○	
4 Výplně krčkových kavit (WSD) zahrnujících povrch kořene				○

○ Naznačuje optimální použití

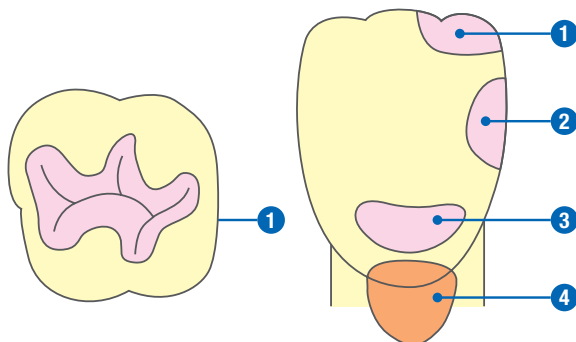



INDIKACE

- Výplně kavit I., II., V. třídy v distálních zubech
- Výplně kavit III., IV., V. třídy ve frontálních zubech
- Výplně krčkových kavit nebo defektů zasahujících povrch kořene

SORTIMENT PRODUKTŮ

CLEARFIL™ AP-X STŘÍKAČKY (4,6 g/2 ml)

#1721-EU	CLEARFIL™ AP-X	A2
#1722-EU	CLEARFIL™ AP-X	A3
#1723-EU	CLEARFIL™ AP-X	A3.5
#1724-EU	CLEARFIL™ AP-X	A4
#1725-EU	CLEARFIL™ AP-X	B2
#1726-EU	CLEARFIL™ AP-X	B3
#1727-EU	CLEARFIL™ AP-X	B4
#1732-EU	CLEARFIL™ AP-X	C1
#1728-EU	CLEARFIL™ AP-X	C2
#1729-EU	CLEARFIL™ AP-X	C3
#1730-EU	CLEARFIL™ AP-X	C4
#1733-EU	CLEARFIL™ AP-X	CL
#1734-EU	CLEARFIL™ AP-X	HO
#1731-EU	CLEARFIL™ AP-X	XL

CLEARFIL™ AP-X KOMPULE PLT (0,2 g)

#1721-E2	CLEARFIL™ AP-X	A2	20 hrotů
#1722-E2	CLEARFIL™ AP-X	A3	20 hrotů
#1723-E2	CLEARFIL™ AP-X	A3.5	20 hrotů
#1724-E2	CLEARFIL™ AP-X	A4	10 hrotů
#1725-E2	CLEARFIL™ AP-X	B2	20 hrotů
#1726-E2	CLEARFIL™ AP-X	B3	20 hrotů
#1734-E2	CLEARFIL™ AP-X	HO	10 hrotů
#1731-E2	CLEARFIL™ AP-X	XL	20 hrotů

Příslušenství

#935-EU	Vzorník odstínů
---------	-----------------



Dovozce do EU

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Německo
Telefon +48 662 281 282
www.kuraraynoritake.eu/cz
dental-EasternEurope@kuraray.com

- Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití, který je součástí balení.
- Technické parametry a vzhled výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Barva na obrázku se může mírně lišit od skutečné barvy.

„CLEARFIL“ je registrovaná obchodní značka nebo obchodní značky společnosti KURARAY CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonsko

CE 0197



06/24 MKA00641