

# ***CLEARFIL™ AP-X***

---

Haute résistance à l'usure

Excellente polissabilité

Faible rétraction de polymérisation

Radio-opaque

Manipulation très facile




## CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES DU CLEARFIL™ AP-X

Haute résistance à l'usure	CLEARFIL™ AP-X est un composite microhybride fortement chargé en charges inorganiques, principalement de fines particules de verre de baryum à haute densité (85% de son poids). C'est l'une des raisons pour lesquelles CLEARFIL™ AP-X présente une résistance à l'usure et à la fracture exceptionnellement élevée. Une valeur vraiment convaincante pour des restaurations postérieures durables.
Excellente polissabilité	Le nombre élevé de charges de petite taille (les plus petites 0,04 µm) offre une excellente polissabilité. Il est donc possible d'obtenir des résultats esthétiques élevés, parfaitement adaptés aux restaurations antérieures difficiles.
Faible rétraction suite à polymérisation	En outre, la densité très élevée des charges est l'une des raisons du très faible retrait de polymérisation de 1,9 %, qui réduit considérablement les forces de contrainte exercées sur les parois de la cavité. Par conséquent, le risque de sensibilités postopératoires et de caries secondaires dues à des fuites marginales est limité.
Radio-opaque	La qualité des joints peut être facilement suivie car le matériau offre une excellente radio-opacité pour les expositions aux rayons X en raison de son pourcentage élevé de particules de verre de baryum.
Manipulation très facile	Grâce à sa formule spéciale non collante, CLEARFIL™ AP-X ne colle à aucun instrument ou matrice et offre également une adaptation pratique aux couches de composite supplémentaires, ce qui le rend parfaitement adapté aux restaurations antérieures. D'autre part, la consistance de CLEARFIL™ AP-X est plus qu'adéquate pour permettre une mise en forme précise dans les zones postérieures.


## INDICATIONS

- ✓ Restaurations des dents postérieures de classes I, II et V
- ✓ Restaurations des dents antérieures de classes III, IV et V
- ✓ Caries cervicales ou défauts des surfaces radiculaires

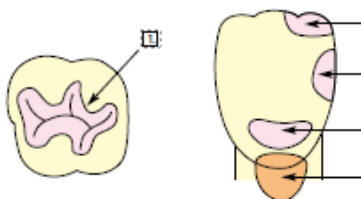

## EFFET CLINIQUE DU CLEARFIL AP-X SUR UN ADHESIF SAM 2

Preuves  
cliniques  
depuis 1993

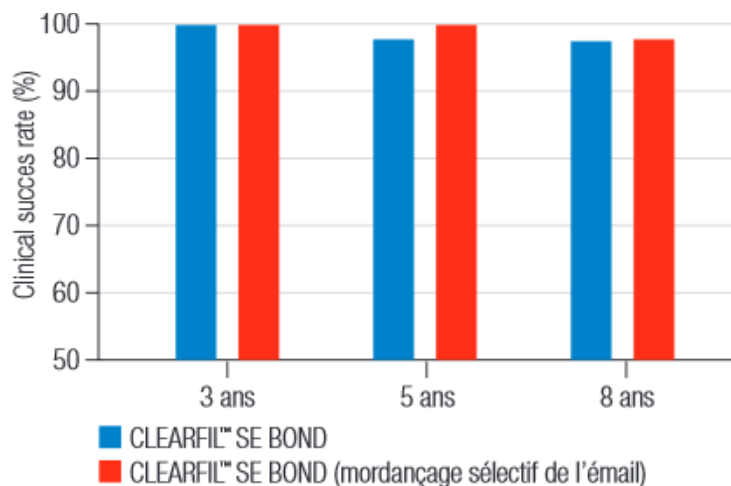

## REFERENCES


Seringues de 4,6g

#1721-EU CLEARFIL TM AP-X (A2)  
#1722-EU CLEARFIL TM AP-X (A3)  
#1723-EU CLEARFIL TM AP-X (A3.5)  
#1724-EU CLEARFIL TM AP-X (A4)  
#1725-EU CLEARFIL TM AP-X (B2)  
#1726-EU CLEARFIL TM AP-X (B3)  
#1727-EU CLEARFIL TM AP-X (B4)  
#1728-EU CLEARFIL TM AP-X (C2)  
#1729-EU CLEARFIL TM AP-X (C3)  
#1730-EU CLEARFIL TM AP-X (C4)  
#1731-EU CLEARFIL TM AP-X (XL)  
#1732-EU CLEARFIL TM AP-X (C1)  
#1733-EU CLEARFIL TM AP-X (CL)  
#1734-EU CLEARFIL TM AP-X (HO)

Compules de 0,2g

#1721-E2 CLEARFIL TM AP-X (A2)  
#1722-E2 CLEARFIL TM AP-X (A3)  
#1723-E2 CLEARFIL TM AP-X (A3.5)  
#1724-E2 CLEARFIL TM AP-X (A4)  
#1725-E2 CLEARFIL TM AP-X (B2)  
#1726-E2 CLEARFIL TM AP-X (B3)  
  
#1731-E2 CLEARFIL TM AP-X (XL)  
  
#1734-E2 CLEARFIL TM AP-X (HO)

**POUR PLUS D'INFORMATIONS  
OU POUR COMMANDER,  
PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC  
LE RESPONSABLE RÉGIONAL  
DE VOTRE SECTEUR**

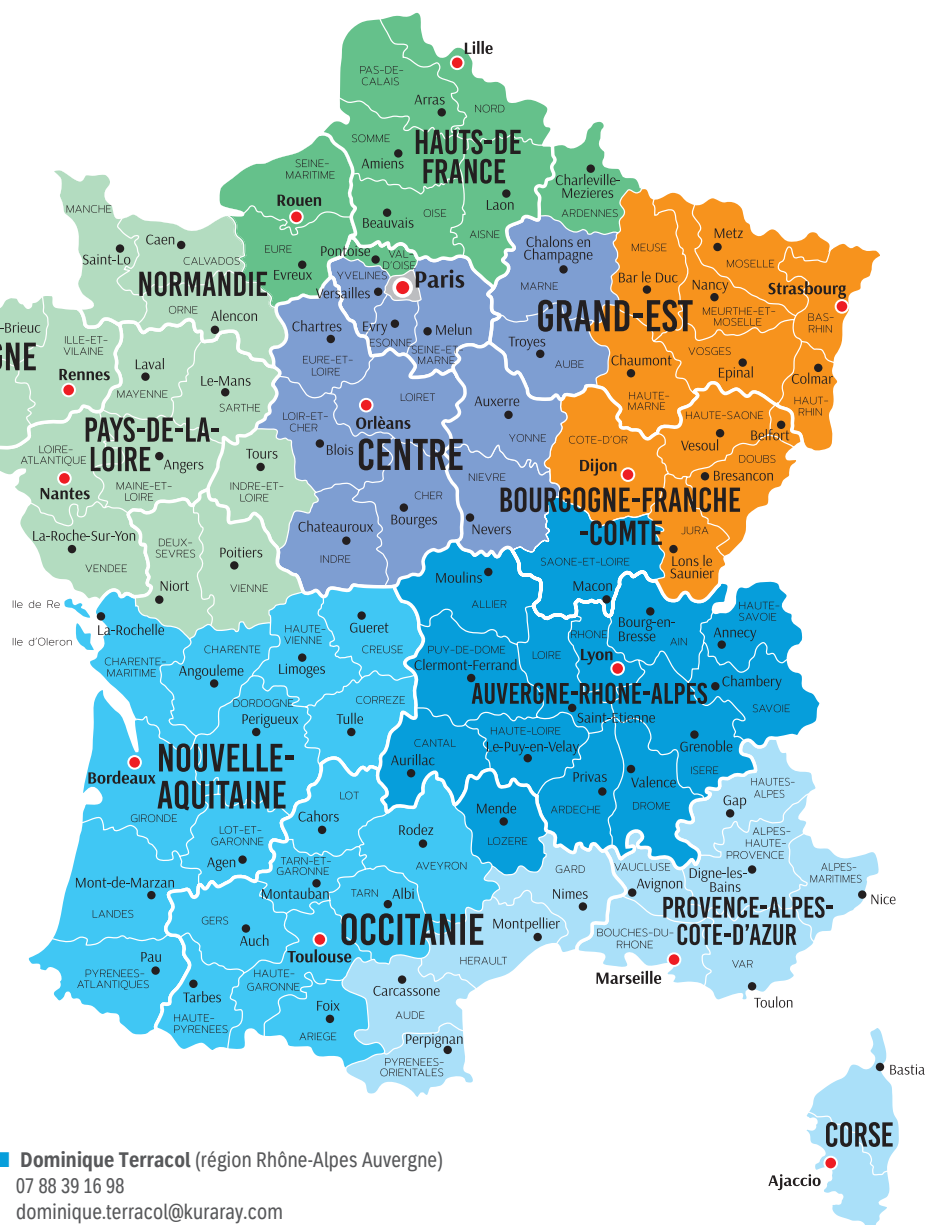

**Raphaële Journal** (région Nord)  
07 88 88 52 49  
raphaele.journal@kuraray.com

**Dominique Terracol** (région Rhône-Alpes Auvergne)  
07 88 39 16 98  
dominique.terracol@kuraray.com

**Axelle d'Aubert** (région Nord Ouest)  
06 76 07 60 09  
axelle.daubert@kuraray.com

**Delphine Bibard** (région Sud Ouest)  
06 31 39 99 26  
delphine.bibard@kuraray.com

**Laura Yerle** (Paris - 92 - 93 - 94)  
06 83 95 66 11  
laura.yerle@kuraray.com

**Joëlle Panter** (région Nord-Est)  
06 31 81 17 79  
joelle.panter@kuraray.com

**Christophe Commaux** (région Sud Est)  
06 80 59 25 53  
christophe.commaux@kuraray.com

**Natacha Ryff** (77-78-91 - Centre)  
07 88 88 61 31  
natacha.ryff@kuraray.com

Votre contact

**Kuraray France**

63 Avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg La Reine,  
France Téléphone +33 (0)1 56 45 12 53  
www.kuraraynoritake.eu/fr  
dental-fr@kuraray.com



EU Importer

**Kuraray Europe GmbH**

Philipp-Reis-Strasse 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany Phone +49 (0)69  
305 35 835  
Fax +49 (0)69 305 98 35 835 www.kuraraynoritake.eu  
centralmarketing@kuraray.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



- Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire le mode d'emploi fourni avec le produit.
- Les spécifications et l'apparence du produit sont sujettes à modification sans préavis.
- La couleur imprimée peut légèrement différer de la couleur réelle.

"PANAVIA" et "CLEARFIL" sont des marques de Kuraray Co., Ltd



**Kuraray Noritake Dental Inc.**  
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan  
Website www.kuraraynoritake.com

CE 0197



01/20  
MKA00559