

CLEARFIL™ AP-X

ESTETYCZNY I TRWAŁY



CLEARFIL™ AP-X to światłoutwardzalny, widoczny na zdjęciach radiologicznych, uniwersalny kompozyt mikrohybrydowy, który łączy precyzyjne dopasowanie koloru, doskonałą podatność na polerowanie oraz bardzo dobre właściwości mechaniczne. Dzięki tym cechom może być stosowany do odbudowy zębów zarówno w odcinku przednim, jak i bocznym.

NATURALNA ESTETYKA

CLEARFIL™ AP-X wykazuje niemal taką samą przezierność i fluorescencję jak naturalne szkliwo, dzięki czemu odbudowywany ząb zachowuje swój naturalny wygląd. W przypadku odbudowy koron zębów jaśniejsze odcienie zwiększają przezierność materiału, natomiast w odbudowach przyszykowych dominuje jego opakowość.

WYTRZYMAŁOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

CLEARFIL™ AP-X charakteryzuje się wysoką zawartością wypełniacza w postaci drobnych (3 µm) cząsteczek szkła barowego. Wysoka zawartość wypełniacza odpowiada za wyjątkową odporność materiału CLEARFIL™ AP-X na ścieranie i pękanie. Ponadto jego wysoka widoczność na zdjęciach RTG ułatwia późniejszą diagnostykę radiologiczną.

ROZBUDOWANA PALETA ODCIENI

CLEARFIL™ AP-X jest dostępny w 11 odcieniach, uzupełnionych o trzy specjalnie dobrane odcienie – CL, HO oraz XL – które zwiększają możliwości estetyczne materiału. Odcień CL został zaprojektowany z myślą o wypełnieniach przyszykowych, HO zapewnia skuteczne maskowanie ciemne lub przebarwione tkanki zęba, a XL zwiększa przezierność odbudowy. Tak szeroka gama kolorystyczna ułatwia spełnienie zróżnicowanych wymagań klinicznych i estetycznych.


WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE	CLEARFIL™ AP-X
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)	412
Wytrzymałość na zginanie (MPa)*	164
Zawartość wypełniacza (% wag.)	86
Zawartość wypełniacza (% obj.)	71
Odporność na ścieranie** (mm ³)	0,03
Sorpcja wody* (µg/mm ³)	16,2
Rozpuszczalność* (µg/mm ³)	0,6

Dane Kuraray Noritake Dental Inc.

* (ISO4049)

** Po 40 000 cykli szczotkowania.

Szczegółowe dane z badań wewnętrznych producenta.

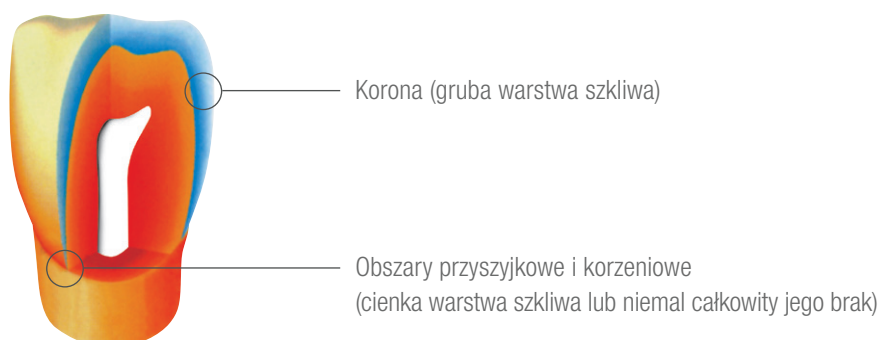

DOSKONAŁA PODATNOŚĆ NA POLEROWANIE

CLEARFIL™ AP-X to mikrohybrydowy materiał kompozytowy zawierający drobne cząsteczki szkła barowego, które umożliwiają uzyskanie gładkiej, estetycznej powierzchni o wysokim połysku. Ma to znaczenie nie tylko dla efektu końcowego odbudowy, lecz także dla higieny i profilaktyki. Odpowiednio wypolerowana powierzchnia sprzyja ograniczeniu retencji płytki nazębnej, ryzyka próchnicy wtórnej oraz podrażnień dziąseł.

OGRANICZONY SKURCZ POLIMERYZACYJNY

Wysoka zawartość wypełniacza – 86% masy – w postaci drobnych cząsteczek o średnicy 3 µm pomaga ograniczyć skurcz polimeryzacyjny materiału CLEARFIL™ AP-X. Przekłada się to na większą przewidywalność odbudowy i stabilność efektu klinicznego.


ŁATWA I KONTROLOWANA APLIKACJA

Konsystencja CLEARFIL™ AP-X została opracowana z myślą o szerokim zakresie wskazań klinicznych. W odbudowach zębów przednich materiał łatwo modeluje się przy użyciu paska formującego i nie przywiera do instrumentów. Ułatwia to precyzyjne kształtowanie odbudowy oraz zapewnia większą kontrolę podczas pracy. Z kolei w odcinku bocznym zapewnia odpowiednią konsystencję, ułatwiając precyzyjne modelowanie odbudowy.

PRZEWODNIK DOBORU ODCIENI

Obszar odbudowy	Standardowe odcienie			Odcień przyszyjkowy
	A2	A3	A3.5	A4
1 Odbudowa ubytków klasy I, II, IV	○	↑	↑	
2 Odbudowa ubytków klasy III	↓	○	↑	
3 Odbudowa ubytków klasy V	↓	↓	○	
4 Odbudowa ubytków przyszyjkowych (WSD) obejmujących powierzchnię korzenia				○

○ Oznacza optymalne zastosowanie.

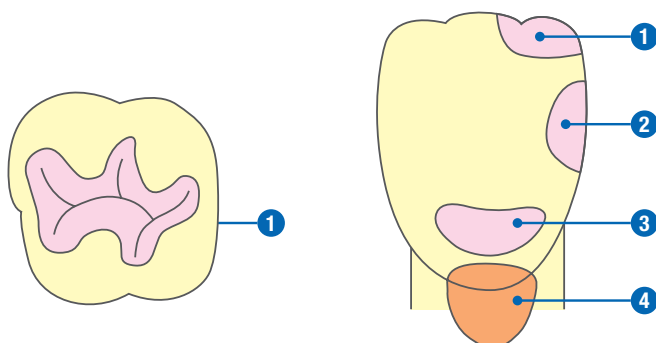



WSKAZANIA

- Odbudowa ubytków klasy I, II, V w zębach bocznych
- Odbudowa ubytków klasy III, IV, V w zębach przednich
- Ubytki przyszyjkowe lub uszkodzenia obejmujące powierzchnie korzeni

ASORTYMENT PRODUKTÓW

CLEARFIL™ AP-X STRZYKAWKA (4,6 g/2 ml)

#1721-EU	CLEARFIL™ AP-X	A2
#1722-EU	CLEARFIL™ AP-X	A3
#1723-EU	CLEARFIL™ AP-X	A3.5
#1724-EU	CLEARFIL™ AP-X	A4
#1725-EU	CLEARFIL™ AP-X	B2
#1726-EU	CLEARFIL™ AP-X	B3
#1727-EU	CLEARFIL™ AP-X	B4
#1732-EU	CLEARFIL™ AP-X	C1
#1728-EU	CLEARFIL™ AP-X	C2
#1729-EU	CLEARFIL™ AP-X	C3
#1730-EU	CLEARFIL™ AP-X	C4
#1733-EU	CLEARFIL™ AP-X	CL
#1734-EU	CLEARFIL™ AP-X	HO
#1731-EU	CLEARFIL™ AP-X	XL

CLEARFIL™ AP-X PLTS (0,2 g)

#1721-E2	CLEARFIL™ AP-X	A2	20 ampułek
#1722-E2	CLEARFIL™ AP-X	A3	20 ampułek
#1723-E2	CLEARFIL™ AP-X	A3.5	20 ampułek
#1724-E2	CLEARFIL™ AP-X	A4	10 ampułek
#1725-E2	CLEARFIL™ AP-X	B2	20 ampułek
#1726-E2	CLEARFIL™ AP-X	B3	20 ampułek
#1734-E2	CLEARFIL™ AP-X	HO	10 ampułek
#1731-E2	CLEARFIL™ AP-X	XL	20 ampułek

Akcesoria

#935-EU	Kolornik
---------	----------



KONTAKT

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Niemcy
Tel. +48 662 281 282
www.kuraraynoritake.eu/pl
dental-poland@kuraray.com

- Przed użyciem tego produktu należy dokładnie zapoznać się z Instrukcją Użycia dostarczoną z wyrobem.
- Specyfikacje oraz wygląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Kolory w druku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych odcieni materiału.

„CLEARFIL” jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakami towarowymi firmy KURARAY CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia



06/24 MKA00641