

ODBUDOWA W RÓWNOWADZE

CLEARFIL™ DC CORE PLUS



CLEARFIL™ DC CORE PLUS to szybka i przewidywalna procedura oraz długi czas pracy. Idealna konsystencja zapewnia łatwość aplikacji, a właściwości dualnego wiązania sprawiają, że to rozwiązanie idealne w miejscach z ograniczonym dostępem światła lampy. To wszystko sprawia, że w każdej odbudowie znajdziesz równowagę.



NAJLEPSZY WYBÓR

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

CLEARFIL™ DC CORE PLUS to materiał dualnie wiążący (polimeryzacja indukowana chemicznie oraz przy użyciu światła). To sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem w miejscach z ograniczonym dostępem do światła lampy polimeryzacyjnej. Specjalna technologia wypełniaczy zastosowana w CLEARFIL™ DC CORE PLUS zapewnia doskonałe właściwości tiksotropowe, stabilność kolorystyczną oraz stosunkowo długi czas pracy. Formuła „non-slumping” gwarantuje, że nałożony materiał pozostaje na swoim miejscu. CLEARFIL™ DC CORE PLUS sprawdzi się zarówno w cementowaniu wkładów koronowo-korzeniowych, jak i odbudowie zrębu zębiny przy zachowaniu 3-minutowego czasu pracy. Uproszczona oraz maksymalnie skrócona procedura aplikacji istotnie ogranicza ryzyko kontaminacji w warunkach klinicznych.

Intuicyjna technika pracy i optymalne przygotowanie materiału, dzięki automatycznemu mieszaniu dwóch past, sprawiają że CLEARFIL™ DC CORE PLUS jest najlepszym kompozytem do zastosowania w warunkach, gdzie wymagana jest szybka i skuteczna aplikacja. Na wszystkich etapach i we wszystkich obszarach pracy podczas odbudowy zęba materiał można nakładać jedną kaniulą samomieszącą – zarówno w kanale korzeniowym, jak i w części koronowej.


ZALETY

- SZYBKA I PRZEWIDYWALNA PROCEDURA
- DUALNIE WIĄŻĄCY
- FORMUŁA „NON-SLUMPING”
- ŁATWA APLIKACJA
- 3-MINUTOWY CZAS PRACY
- STABILNOŚĆ KOLORU



IDEALNIE ZRÓWNOWAŻONE PARAMETRY

Moduł elastyczności materiału CLEARFIL™ DC CORE PLUS jest zbliżony do modułu elastyczności zębiny, co umożliwia równomierne rozłożenie naprężeń czynnościowych w okolicy wierzchołkowej kanału korzeniowego. Pozwala to zminimalizować ryzyko pęknięcia materiałów do odbudowy części korzeniowej i zrębu zęba. Właściwie dobrane parametry techniczne CLEARFIL™ DC CORE PLUS gwarantują trwałość uzupełnienia, zmniejszając przy tym ryzyko utraty retencji (odcementowania) wkładów koronowo-korzeniowych.

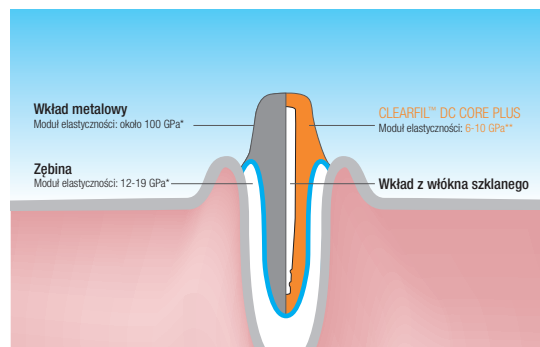


*Źródło: S. Takahashi, T. Hirasawa, et. al, J. J. Dent Material Vol. 16(6), 555-562, 1996.

**Źródło: Kuraray Noritake Dental.

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE

CLEARFIL™ DC CORE PLUS ma znacznie większą wytrzymałość na zginanie niż inne materiały do odbudowy zrębu zęba.

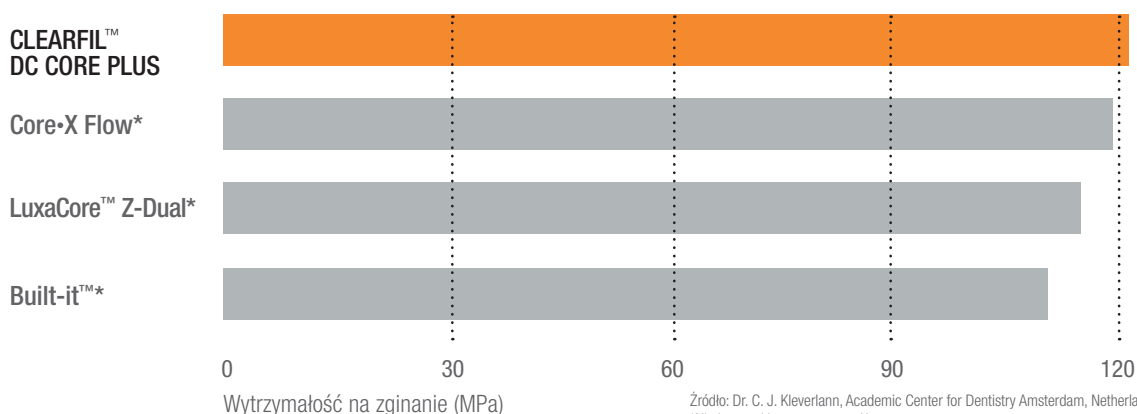


IDEALNA KONSYSTENCJA

Zastosowanie unikalnej technologii wypełniaczy w CLEARFIL™ DC CORE PLUS zapewnia doskonałe właściwości tiksotropowe, co znacząco ułatwia aplikację dwuskładnikowego materiału z jednej strzykawki.



DOSTĘPNE KOLORY

CLEARFIL™ DC CORE PLUS jest dostępny w dwóch odcieniach: dentin i white.

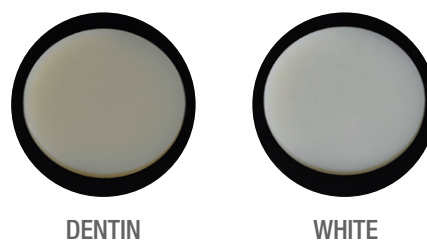



CLEARFIL™ Universal Bond Quick



JEDEN SYSTEM. WSZYSTKIE WSKAZANIA


CLEARFIL™ Universal Bond Quick to uniwersalny, niezawodny system samotrawiący. Wystarczy go tylko nałożyć, osuszyć, naświetlić i to wszystko. Nie ma potrzeby czekania, wcierania czy aplikacji kilku warstw. Upraszczamy więc procedurę i oszczędzamy czas, minimalizując ryzyko błędów podczas aplikacji. Jednocześnie uzyskujemy najwyższe parametry siły wiązania. Zastosowane w tym produkcie rozwiązania technologiczne, kryjące się pod nazwą „Rapid Bond Technology”, umożliwiają uzyskanie silnego, trwałego połączenia adhezyjnego podczas jednej, prostej procedury. Preparat ten może być stosowany w dowolnej technice trawienia, w procedurach cementowania adhezyjnego oraz napraw wewnątrzustnych.

PRAWDZIWIE UNIWERSALNY SYSTEM WIĄŻĄCY

CLEARFIL™ Universal Bond Quick zapewnia doskonałe połączenie adhezyjne dla wszystkich wypełnień bezpośrednich, odbudów zrębu zębinowego oraz uzupełnień pośrednich i wszelkiego rodzaju napraw. Dodatkowo idealnie sprawdza się w sytuacji wszędzie tam, gdzie wymagany jest materiał podwójnie utwardzalny, np. do cementowania wkładów koronowo-korzeniowych. To lekarz decyduje o wyborze techniki trawienia (self-etch, selective-etch czy total-etch). Ze względu na obecność silanu oraz monomeru 10-MDP, system wiążący CLEARFIL™ Universal Bond Quick działa szybko i efektywnie w każdym przypadku.



Aplikacja bez wcierania

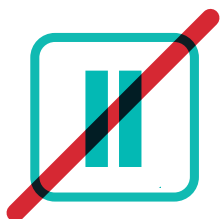

Bez czekania



Suszenie



Naświetlanie

PERFEKCYJNY DUET W RÓWNOWADZE



CEMENTOWANIE WKŁADÓW KORONOWO- -KORZENIOWYCH I ODBUDOWA ZRĘBU ZĘBA

Parametry techniczne systemu wiążącego CLEARFIL™ Universal Bond Quick pozwalają na perfekcyjne połączenie z CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Ze względu na obecność specyficznych akceleratorów polimeryzacji chemicznej, nie musisz stosować dodatkowego katalizatora. Ponadto idealnie sprawdza się w miejscach z ograniczonym dostępem do światła lampy polimeryzacyjnej. CLEARFIL™ Universal Bond Quick tworzy silne połączenie adhezyjne z zębina oraz z wkładem koronowo-korzeniowym w kanale korzeniowym.

PODWÓJNA SIŁA WIĄZANIA DLA TRWAŁEJ ODBUDOWY ZĘBA


CLEARFIL™ Universal Bond Quick może być stosowany w połączeniu z CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Obecność specyficznych akceleratorów w CLEARFIL™ DC CORE PLUS zapewnia znakomite oraz przewidywalne efekty przez wiele lat. Podwójnie wiążący materiał idealnie sprawdza się w miejscach z ograniczonym dostępem do światła lampy polimeryzacyjnej.

Zastosowanie monomeru 10-MDP w systemie wiążącym CLEARFIL™ Universal Bond Quick tworzy silne wiązania chemiczne z hydroksyapatytem, gwarantując natychmiastowe połączenie adhezyjne z tkanką zęba oraz trwałe rezultaty kliniczne.

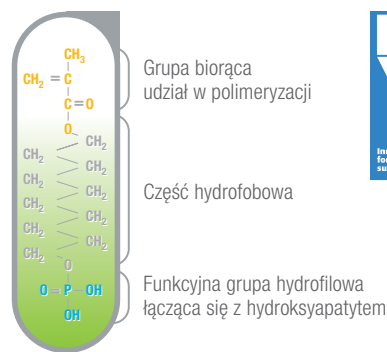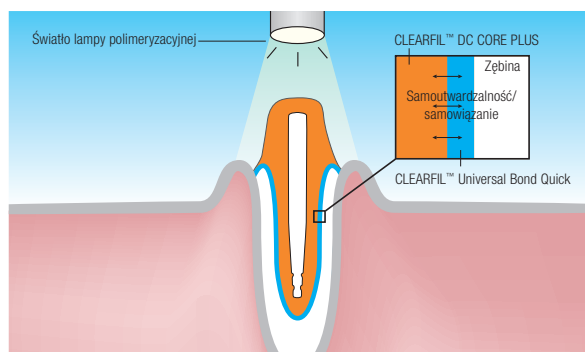


Struktura monomeru MDP


ŁATWA, BEZSTRESOWA I PRZEWIDYWALNA PROCEDURA

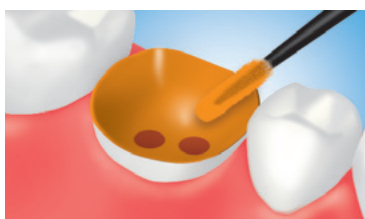



Nanieść bond i wcierać w powierzchnię.
Nie czekać.

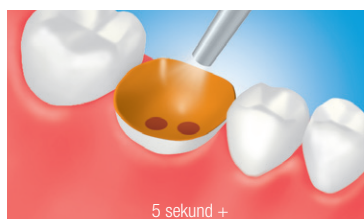

Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.

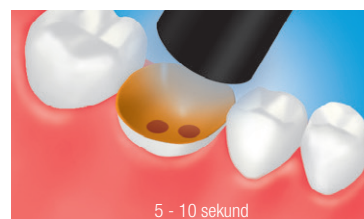

Utwardzać światłem lampy polimerizacyjnej*.

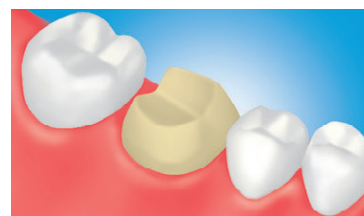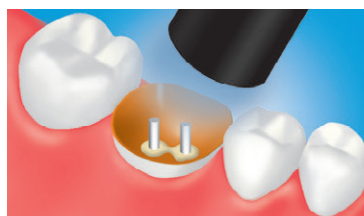

Cementować wkład i odbudować zręb koronowy materiałem CLEARFIL™ DC CORE PLUS zgodnie z instrukcją użycia.

***W obszarach, gdzie dostęp światła jest utrudniony, system wiążący CLEARFIL™ Universal Bond Quick zostanie samoutwardzony w kontakcie z CLEARFIL™ DC CORE PLUS.**



ASORTYMENT PRODUKTÓW

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & Quick Kit

#3580-EU DENTIN

#3581-EU WHITE

Zestaw: CLEARFIL™ DC CORE PLUS (9,0 g),
Końcówki samomieszące (20 szt.), Końcówki L (10 szt.),
Końcówki S (10 szt.). CLEARFIL™ Universal Bond Quick
1 buteleczka (5 ml), Pędzelki do aplikacji (50 szt.),
Płytko do mieszania z pokrywką ochronną.



CLEARFIL™ DC CORE PLUS

#2942-EU DENTIN

#2943-EU WHITE

Opakowanie uzupełniające: 1 strzykawka
(9 ml), Końcówki samomieszące (20 szt.),
Końcówki L (10 szt.), Końcówki S (10 szt.).



CLEARFIL™ Universal Bond Quick Standard Kit

#3571-EU

Zestaw standardowy:
1 buteleczka (5 ml), K-ETCHANT strzykawka (3 ml),
Pędzelki do aplikacji (50 szt.), Końcówki w formie igieł (20 szt.),
Płytko do mieszania z pokrywką ochronną.



CLEARFIL™ Universal Bond Quick

#3572-EU

Opakowanie uzupełniające: 1 buteleczka (5 ml).





KONTAKT

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Niemcy
Tel. +48 662 281 282
www.kuraraynoritake.eu/pl
dental-poland@kuraray.com

- Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia.
- Producent zachowuje prawo do wszelkich zmian.
- Rzeczywista kolorystyka może się różnić od kolorów w druku.

„PANAVIA” i „CLEARFIL” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kuraray Co., Ltd.
„KATANA” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Noritake Co., Ltd.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia

