

kuraray

Noritake

LAMINAČIŲ SPECIALISTAS

PUIKUS ESTETINIS
CEMENTAVIMAS

„**PANAVIA™ Veneer LC**“



PAGAMINTA
JAPONIJOJE

kuraraynoritake.eu

PUIKUS SUNKIOS UŽDUOTIES SPRENDIMAS

Naujoji „PANAVIA™ Veneer LC“ sistema yra būtent tai, ko jums reikia, kad galėtumėte sėkmingai uždėti kelias laminates! Šią sistemą lengva naudoti, ilgas darbo laikas (net 200 sekundžių!) ir ilgalaikė estetika. Būtent dėl šių savybių ir didelio sukibimo stiprumo „PANAVIA™“ cementas yra gerai žinomas!

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

1

INOVATYVI KIETĖJIMO TECHNOLOGIJA

Naudojant „PANAVIA™ V5 Tooth Primer“ dantų praimerį sukurama tvirta ir patvari jungtis – kietėja susilietus su pasta. „PANAVIA™ Veneer LC“ cemento darbo laikas pakankamai ilgas, todėl vienu metu galima pritvirtinti net keletą laminačių. Naudojant šias medžiagas kartu gaunamas tvirtas ir ilgalaikis rezultatas.

2

OPTIMIZUOTAS VALDYMAS

Optimizuotas klampumas ir tiksotropinės savybės padeda lengvai dozuoti ir uždėti. Itin trumpai (angl. tack-cure) (vieną sekundę) pakietinus galima lengvai pašalinti perteklių.

3

PUIKI ESTETINĖ IŠVAIZDA

Dėl plono išstumiamo sluoksnio ir puikių poliravimo savybių gaunami glotnūs kraštai. Galima rinktis iš keturių skirtingų itin stabilių atspalvių, kurie užtikrina ilgalaikę estetiką. Tinkamą atspalvį lengva parinkti naudojant bandomąsias pastas, kurių atspalviai atitinka cemento pastų atspalvius.



INDIKACIJOS

„PANAVIA™ Veneer LC“ cementu gali būti nuolat cementuojamos šios keraminės ir kompozicinės restauracijos:

- laminatės (venyrai);
- mažiau nei 2 mm storio įklotai ir užklotai.

INOVATYVI KIETĖJIMO TECHNOLOGIJA

„Kuraray Noritake Dental Inc.“ pritaikė savo sukurtą inovatyvią „touch-cure“ polimerizacijos technologiją šviesoje kietėjančiam cementui. Užtikrinamas ilgas darbo laikas ir gaunamas ilgalaikis stiprus sukibimas.

„PANAVIA™ Veneer LC“ yra šviesoje kietėjanti dervinio cemento sistema, kuri pasižymi puikiu stabilumu aplinkos šviesoje, todėl galimas net 200 sekundžių darbo laikas*. Todėl vienu metu galima uždėti kelias laminates, nesibaiminant, kad cementas pradės kietėti. Polimerizaciją galima pradėti bet kuriuo metu.

200_{SEK.}
DARBO LAIKAS*

*Darbo laikas aplinkos šviesoje (8000 liuksų): 200 sekundžių.



VIENKOMPONENTIS SAVAIME ĖSDINANTIS PRAIMERIS

Pagerina polimerizaciją surišamų paviršių riboje.

ŠVIESA KIETINAMA CEMENTO PASTA

Puikus stabilumas aplinkos šviesoje.

KIETINIMAS ŠVIESA

Užsandarinkite surišimo su danties audiniais ribą „touch-cure“ polimerizacijos būdu, drauge užtikrindami pakankamą veikimo laiką.



Laminatės

„CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“ keramikos praimeris

„PANAVIA™ Veneer LC“ Paste

„PANAVIA™ V5 Tooth Primer“ dantų praimeris


Danties audiniai

↑ Cheminis polimerizacijos katalizatorius pagerina polimerizaciją.




„PANAVIA™ V5 Tooth Primer“ dantų praimeris yra savaime išsivysčiusis surišiklis danties audiniams (dentinui ir emaliui), kuris patikimai užsandarina surišimo su dantimi ribą iš karto, kai ant jo aplikuojama „PANAVIA™ Veneer LC Paste“ pasta. Ši „touch-cure“ technologija inicijuoja polimerizaciją surišamų paviršių riboje ir sukuria tvirtą sukibimą su emaliu ir dentinu, tačiau neturi įtakos cemento kietėjimo reakcijai. Stiprus sukibimas su restauracinėmis medžiagomis gaunamas naudojant patikrinto veikimo „CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“ keramikos praimerį.

(MPa) ŠLYTIES SUKIBIMO SU ŽMOGAUS DANTIMI STIPRUMAS

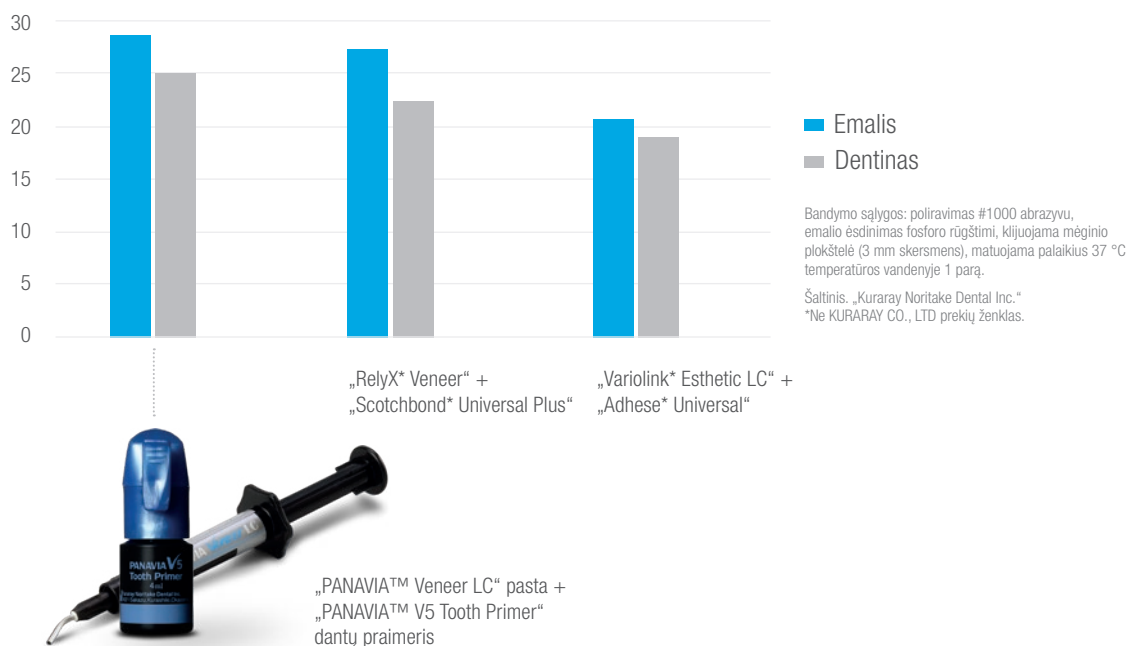

(MPa) ŠLYTIES SUKIBIMO SU PROTEZAVIMO MEDŽIAGOMIS STIPRUMAS

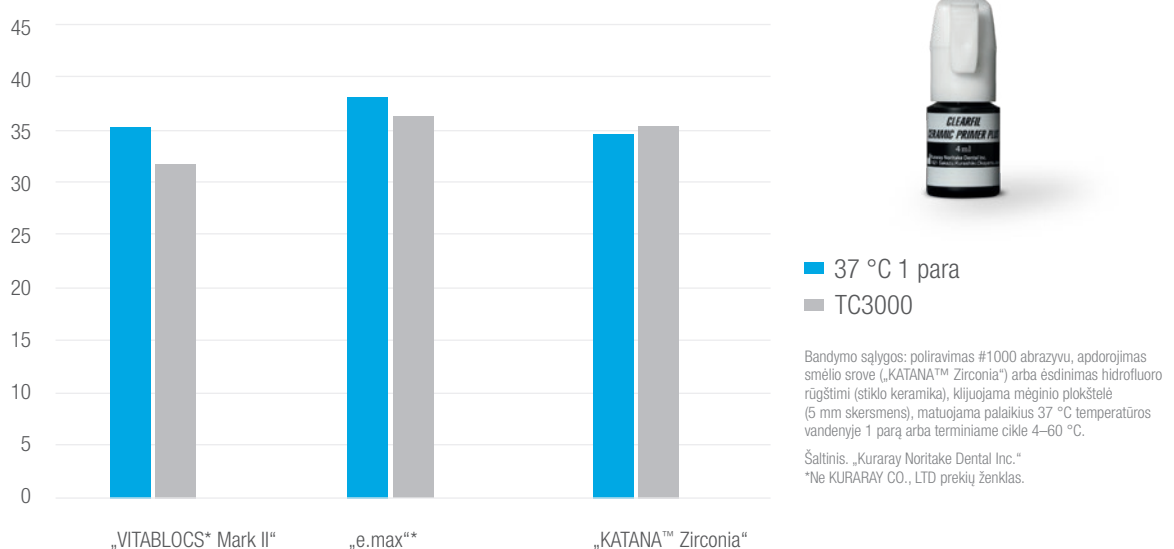



OPTIMIZUOTAS VALDYMAS

Ar įmanoma sutrumpinti laminačių uždėjimo laiką mažiau įdedant pastangų? „PANAVIA™ Veneer LC“ savybės padeda tolygiai aplikuoti cementą, tinkamai išdėstyti laminates, lengvai pašalinti perteklių ir greitai nupoliruoti. „Panavia Veneer LC“ cemento paskleidimą lengva kontroliuoti dėl specialaus dizaino švirkšto ir aplikavimo antgalio.

NELIPNI KONSISTENCIJA

„PANAVIA™ Veneer LC“ nanoklasterinio užpildo technologija neleidžia cementui nutekėti, o idealiai patogi konsistencija leidžia lengvai ir saugiai aplikuoti.

IDEALI KONSISTENCIJA

Dėl tiksotropinių cemento savybių cementas nuteka ir nenuslenka. Puikų valdymą užtikrina naujai sukurti sferiniai silicio oksido užpildai. PANAVIA™ Veneer™ PANAVIA™ Veneer LC“ leidžia kontroliuoti aplikavimą, cementas lieka toje vietoje, kur buvo paskleistas, bet gerai pasiskirsto tekėdamas paviršiumi uždėjus laminatę ant danties.

LENGVA PAŠALINTI PERTEKLIŲ

Visą cemento perteklių galima pašalinti naudojant odontologinį zondą iš karto po vienos sekundės (angl. tack-cure) pakietinimo.

PUIKI ESTETIKA

Dėl minimalaus laminačių storio ir nepaprasto skaidrumo daug įtakos estetinei išvaizdai turi naudojamų cemento atspalvis. „PANAVIA™ Veneer LC“ spalvos yra stabilios, o gaunami kraštai ilgai lieka nepastebimi.



KETURI ITIN ESTETIŠKI ATSPALVIAI

Taikant individualius poreikius atitinkančius atspalvius lengvai pasiekiami tikroviškai atrodantys rezultatai.

„PANAVIA™ Veneer LC Paste“ pasta



Skaidri (Clear)



Universali (Universal)



Balta (White)



Ruda (Brown)

ATSPALVŲ ATITINKANČIOS BANDOMOSIOS PASTOS

„PANAVIA™ V5 Try-In Paste“ bandomosios pastos atitinka „PANAVIA™ Veneer LC“ atspalvius ir padeda imituoti galutinį vaizdą.

„PANAVIA™ V5 Try-In“ bandomoji pasta



Skaidri (Clear)



Universali A2 (Universal, A2)



Balta (White)



Ruda (Brown, A4)

MINIMALUS IŠSTUMIAMAS SLUOKSNIS

ėl savo takumo ir plono išstumiamo sluoksnio „PANAVIA™ Veneer LC“ suformuoja ploną, tolygiai paskirstytą cemento sluoksnį, kuris padeda lengvai, netrukdomai uždėti laminates ir gauti labai estetiškai atrodančius kraštus.


PUIKIOS POLIRAVIMO SAVYBĖS IR IŠLAIKOMAS ŽVILGESYS

Puikios poliravimo savybės ir išlaikomas žvilgesys užtikrina ilgalaikę kraštų estetiką.

Žvilgesio pokytis atlikus nudilimo bandymą.

Puikus žvilgesio patvarumas (žvilgesio išlaikymas) dėl didelio smulkių dalelių užpildų tankio.


(%) ŽVILGESIO IŠLAIKYMAS

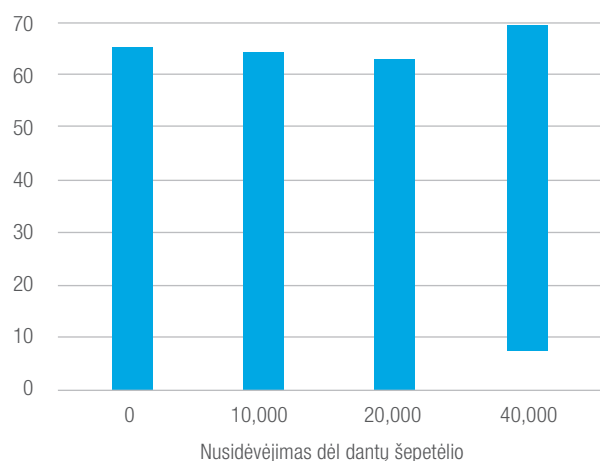

■ „PANAVIA™ Veneer LC“

Šaltinis: „Kuraray Noritake Dental Inc.“

(%) ŽVILGESIO IŠLAIKYMAS

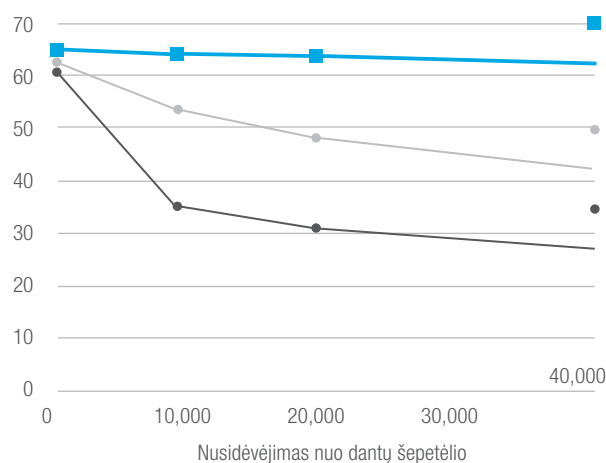

■ „PANAVIA™ Veneer LC“

● „Variolink* Esthetic LC“

● „RelyX* Veneer“

Bandymo sąlygos: bandinys 10 mm skersmens, 2 mm storio.
Išlyginus paviršių vandeniu atspariu #1000–#2500 švitrinio popieriumi, atliekamas galutinis poliravimas šlifuojamąja plėvele.

Pradinė vertė (žvilgesio lygis matuojamas baigus poliruoti*).
Nusidėvėjimas nuo dantų šepetėlio (matuojamas po 40 000 brūkštelėjimų esant 250 g apkrova, 30 brūkštelėjimų per minutę, 10 dantų pastos masės procentų*).

Išmatuota žvilgomačiu VG 2000 („Nippon Denshoku Kogyo“) 60° kampų. Pastaba: Vertės gali skirtis priklausomai nuo matavimo sąlygų.

Šaltinis: „Kuraray Noritake Dental Inc.“

*Ne KURARAY CO., LTD prekių ženklas.

ATSPARUMAS SPALVOS POKYČIAMS

„PANAVIA™ Veneer LC“ gerai subalansuota formulė ir „touch-cure“ polimerizacijos technologija užtikrina atsparumą diskoloracijoms (nusidažymui), taigi garantuoja spalvos stabilumą, o tai yra vienas svarbiausių ilgalaikės estetikos veiksnių.



KLINIKINIS ATVEJIS

Informaciją suteikė gyd. Sato



1. Pradinė būklė prieš preparavimą 6 laminatėms (13–23).



2. Dėl puikios „PANAVIA™ Veneer LC“ konsistencijos ir patogaus pastos klampumo cementą lengva paskleisti, uždėti laminates ir pašalinti perteklių.



3. Kiekvienos srities ir kraštų kietinimas šviesa.



4. Galutinis rezultatas atlikus šešių „KATANA™ Zirconia STML“ laminačių cementavimą.

Išsamios informacijos ieškokite naudojimo instrukcijose.

TIKRAI „PANAVIA™“

Viskas prasidėjo 1983 metais, kai „PANAVIA™ EX“ buvo pristatytas kaip pirmasis dervinis cementas, kurio sudėtyje yra originalusis „KURARAY CO., LTD“ MDP monomeras. Dėl puikių sukibimo savybių PANAVIA™ greitai išpopuliarėjo tarp praktikuojančių odontologų visame pasaulyje. Siekiant sukurti paprastesnes cementavimo procedūras ir užtikrinti puikią estetiką, produkto sudėtis buvo patobulinta įdiegiant visiškai naujoviškas technologijas. Taip atsirado dabartiniai lengvai naudojami ir labai estetiški derviniai cementai, kurie užtikrina aukščiausio lygio sukibimo stiprumą.



UŽSAKYMO INFORMACIJA

„PANAVIA™ Veneer LC“ rinkiniai

- #4500 „Standard Kit Universal“
(standartinis universalus rinkinys) (A2)
- #4501 „Standard Kit Clear“
(standartinis skaidrus rinkinys)

„PANAVIA™ Veneer LC Paste“ pasta (2,6 g / 1,5 ml)

- #4505 „Paste Universal“ (universali pasta) (A2)
- #4507 „Paste Brown“ (ruda pasta) (A4)
- #4506 „Paste Clear“ (skaidri pasta)
- #4508 „Paste White“ (balta pasta)

KITA

- „PANAVIA™ V5 Try-in“ bandomoji pasta (1,8 ml)
- #3621-EU „Universal“ (universali) (A2)
- #3622-EU „Clear“ (skaidri)
- #3623-EU „Brown“ (ruda) (A4)
- #3624-EU „White“ (balta)

- #4513-EU „PANAVIA™ Veneer LC“ aplikavimo antgalis (16 g)
- #3637-EU „CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“
keramikos praimeris (4 ml)
- #3635-EU „PANAVIA™ V5 Tooth Primer“ datų praimeris (4 ml)

Kuraray Europe Benelux, Nordics & Baltics

Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nyderlandai
infonordics@kuraray.com

Matvej Šuldiakov, 8 687 55 111
matvej.suldiakov@kuraray.com
kuraraynoritake.eu

- Prieš naudodami šį gaminį būtinai perskaitykite kartu pateiktą naudojimo instrukciją.
- Gaminio specifikacijos ir išvaizda gali keistis be įspėjimo.
- Gaminio spalva atspausdintame vaizde gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios gaminio spalvos.

„PANAVIA“ ir „CLEARFIL“ yra „KURARAY CO., LTD“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, o „KATANA“ – „NORITAKE CO., LTD“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonija
Interneto svetainė www.kuraraynoritake.com

