


TWIST™ DIA for Zirconia

Sistema de pulido de zirconia de tres pasos

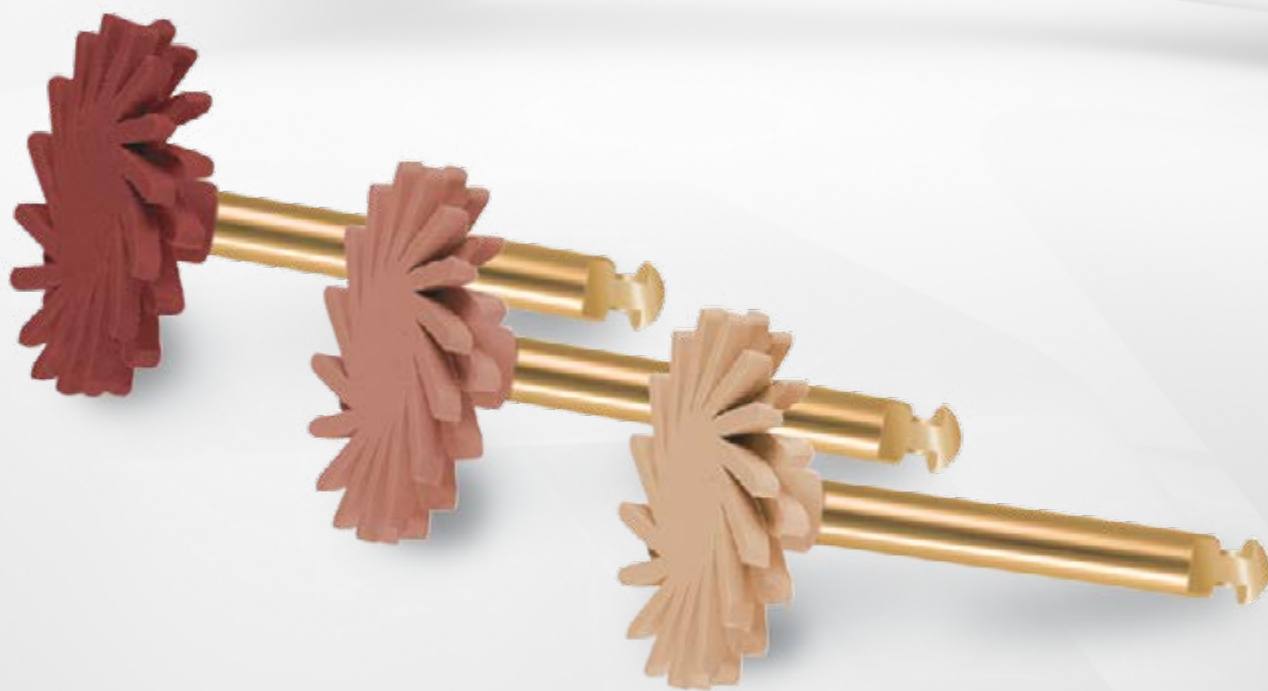

BORN IN JAPAN

Resultados excepcionalmente brillantes sobre la zirconia

El sistema de pulido TWIST™ DIA for Zirconia permite un fácil acceso a las anatomías dentales y reduce la necesidad de utilizar instrumentos de diferentes tipos como puntas, copas, discos y cepillos de dientes. La secuencia de tres pasos, con herramientas de grano grueso a fino, asegura el pulido ideal.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Espirales flexibles en torsión para adaptarse mejor a las superficies dentales
- Espirales con partículas de diamante, esterilizables y reutilizables
- Sistema ideal para el pulido de las superficies oclusales de las restauraciones en zirconia, eficiente y duradero



INCISAL



LABIAL



OCCLUSAL



BUCAL



LINGUAL



PROXIMAL

GRANULOMETRÍA



GRANDE
PRE-PULIDO



MEDIANA
PULIDO



FINA
PULIDO BRILLANTE

VELOCIDAD DE ROTACIÓN

- Velocidad recomendada: 7.000 - 10.000 rpm para Grande/Mediana/Fina
- Velocidad máxima: 20.000 rpm

GAMA DE PRODUCTO

CÓDIGO	PRODUCTO	CONTENIDO
#1301-IP	TWIST™ DIA for Zirconia Intro Kit 14mm	1 herramienta cada uno (grande, mediana, fina)
#1302-IP	TWIST™ DIA for Zirconia Grossa 14mm	10 unidades
#1303-IP	TWIST™ DIA for Zirconia Media 14mm	10 unidades
#1305-IP	TWIST™ DIA for Zirconia Fine 14mm	10 unidades