



Tehnica de Restaurare Directă



1. Curățare | Agent de curățare KATANA™ Cleaner

- ✓ Măsură de siguranță: Curățarea suprafeței pentru o adeziune optimă
- ✓ Aplicare intra- și extra-orală, chiar și în canalul radicular
- ✓ Efect puternic de curățare datorită sării MDP

2. Gravare | Gel demineralizant cu acid fosforic K-ETCHANT Syringe

- ✓ Vâscozitate excelentă pentru aplicare și spălare controlate – utilă în special în timpul gravării selective a smalțului



3. Adeziune | Adeziv universal CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

- ✓ Potrivit pentru toate tehnicile de gravare
- ✓ Tehnologie avansată Rapid Bond, inclusiv monomerul MDP original
- ✓ Fără timp de așteptare după aplicare
- ✓ Minimizează riscul de contaminare
- ✓ Gamă largă de indicații: restaurări directe și indirecte, proceduri de reparare, pivoți, proceduri de reconstrucție a bonturilor (core build-up)




4a. Obturație | Compozit universal CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

- ✓ 1 nuanță pentru posterior
- ✓ 2 nuanțe pentru anterior
- ✓ Nu este necesar opac/blocant
- ✓ Confort excelent în utilizare
- ✓ Finisare excelentă și menținere a luciului

4b. Obturație | Compozit universal fluid CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

- ✓ Avantajul a 2 variante de fluiditate
- ✓ Doar 2 nuanțe pentru toate clasele de cavități
- ✓ Pentru toate clasele de cavități (I până la V)
- ✓ Finisare excelentă și menținere a luciului
- ✓ Nu este nevoie de opac/blocant
- ✓ Confort în utilizare

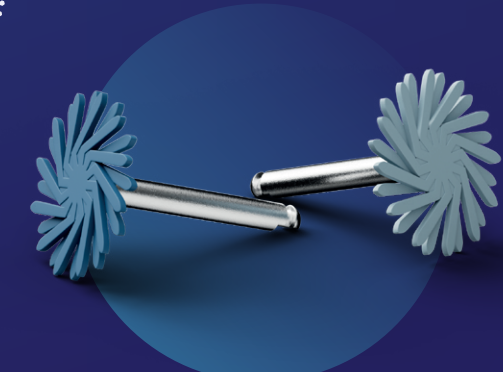

5. Finisare | Gume de finisare TWIST™ DIA pentru compozit

- ✓ Gume flexibile pentru finisare
- ✓ Reutilizabile și autoclavabile
- ✓ Pentru orice suprafață
- ✓ Conțin particule de diamant

Sistemul Universal Excellence



Materiale CAD/CAM compatibile

1a. Selectarea materialelor de restaurare | Bloc de zirconiu KATANA™ Zirconia Block

- ✓ Estetică deosebită: Tranziție integrată a culorii și transluciditate
- ✓ Rezistent: 763 MPa*
- ✓ Flux de lucru eficient: posibilitatea de a finaliza o restaurare unidentară în aproximativ 2 ore
- ✓ Gamă largă de nuanțe
- ✓ Versatil: Potrivit chiar și pentru punți în regiunea molară

* Sursa datelor: Kuraray Noritake Dental Inc.



MULTI LAYERED

1b. Selectarea materialelor de restaurare | Bloc compozit de calitate superioară KATANA™ AVENCIA™ Block

- ✓ Finisare superioară și menținere a luciului
- ✓ Rezistență ridicată la uzură și o uzură minimă a antagoniștilor
- ✓ Proprietăți mecanice excelente
- ✓ Materialul Dumneavoastră preferat pentru coroane parțiale, inlay, onlay și overlay



1c. Selecția materialelor de restaurare | Disc multistrat din zirconiu Seria KATANA™ Zirconia Multi-Layered

- ✓ Discuri din zirconiu cu structură multistrat
- ✓ Transluciditate optimizată pentru o estetică naturală
- ✓ Gamă largă de indicații
- ✓ Calitate superioară datorită procesării interne



MULTI LAYERED

Tehnica de Restaurare Indirectă

2. Curățare | Agent de curățare KATANA™ Cleaner

- ✓ Măsură de siguranță: Curățarea suprafeței pentru o adeziune optimă
- ✓ Aplicare intra- și extra-orală, chiar și în canalul radicular
- ✓ Efect puternic de curățare datorită sării MDP



LCSi

4. Cimentare | Ciment autoadeziv, pe bază de rășină PANAVIA™ SA Cement Universal

- ✓ Versatil: Aderă la zirconiu și vitroceramică
- ✓ Nu necesită primer
- ✓ Formulă autoadezivă, autograntă, cu priză duală
- ✓ Flux de lucru eficient
- ✓ Îndepărtare ușoară a excesului




CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 o completare perfectă pentru PANAVIA™ SA Cement Universal



5. Finisare | Gume de finisare TWIST™ DIA pentru compozit/zirconiu

- ✓ Gume flexibile pentru finisare
- ✓ Reutilizabile și autoclavabile
- ✓ Pentru orice suprafață
- ✓ Conțin particule de diamant

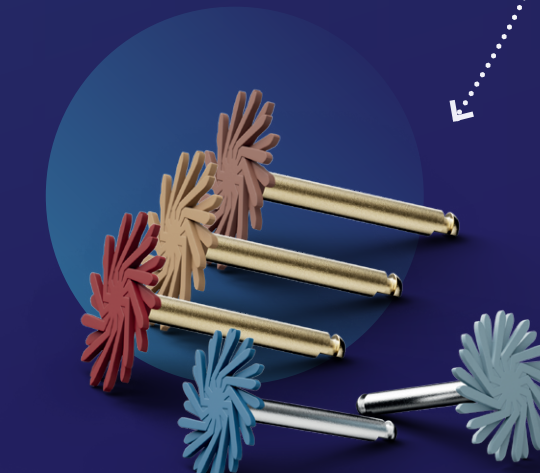

Invitați speciali

Core build-up pe dinți vitali și devitali CLEARFIL™ DC CORE PLUS

- ✓ Material bicomponent de reconstrucție, radioopac, cu priză duală
- ✓ Procedură simplă
- ✓ Automixare cu consistență omogenă



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 a perfect complement of CLEARFIL™ DC Core Plus



O soluție pe termen lung pentru dinți sensibili TEETHMATE™ DESENSITIZER

- ✓ Sigilează tubulii dentinari: Folosește tehnologie avansată pentru a reconstrui hidroxiapatita (HAp)
- ✓ Efect pe termen lung pentru un confort susținut al pacientului
- ✓ Prietenos cu țesuturile și invizibil pe dinți
- ✓ Gust neutru
- ✓ Utilizare ușoară



Revelator de carii CARIES DETECTOR

- ✓ Un ghid vizual pentru îndepărtarea cariilor: Colorează structura dentară carioasă, în roșu, în timpul preparării cavității
- ✓ Ajută la conservarea structurii dentare remineralizate

