



# Procedura odbudowy bezpośredniej



## 1. Oczyszczanie | Preparat do oczyszczania KATANA™ Cleaner

- ✓ Środki bezpieczeństwa: Oczyszczanie powierzchni dla zoptymalizowanej adhezji
- ✓ Zastosowanie wewnątrz- i zewnątrzrustne, nawet w kanale korzeniowym
- ✓ Silny efekt oczyszczający dzięki zawartości soli MDP

## 2. Wytrawianie | Wytrawiacz w formie żelu na bazie kwasu ortofosforowego K-ETCHANT Syringe

- ✓ Doskonała konsystencja zapewniająca kontrolowaną aplikację i łatwe splukiwanie – szczególnie przydatna podczas selektywnego wytrawiania szkliwa.



## 3. System wiążący | Uniwersalny system adhezyjny CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

- ✓ Odpowiedni do wszystkich technik wytrawiania
- ✓ Technologia Advanced Rapid Bond z oryginalnym monomerem 10-MDP
- ✓ Błyskawiczna aplikacja bez konieczności wcierania i czekania
- ✓ Minimalizuje ryzyko ponownego zanieczyszczenia powierzchni
- ✓ Wszechstronność zastosowań: odbudowy bezpośrednie i pośrednie, procedury naprawcze, osadzanie wkładów k-k oraz odbudowa zrębu zęba




## 4a. Wypełnienia | Uniwersalny kompozyt CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

- ✓ 1 odcień dla zębów w odcinku bocznym
- ✓ 2 odcienie dla zębów w odcinku przednim
- ✓ Bez konieczności stosowania blokera (opakera)
- ✓ Doskonałe właściwości użytkowe
- ✓ Wyjątkowa polerowalność i trwałość połysku

## 4b. Wypełnienia | Uniwersalny kompozyt płynny CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

- ✓ Dwa poziomy gęstości Low i Super Low
- ✓ 2 odcienie dla wszystkich klas ubytków (od I do V)
- ✓ Doskonała polerowalność i długotrwały połysk
- ✓ Bez konieczności stosowania blokera
- ✓ Precyzyjna aplikacja

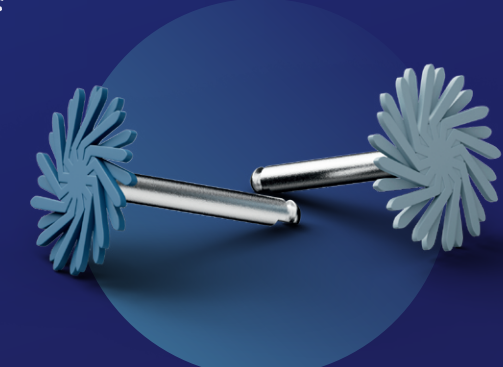

## 5. Polerowanie | Instrumenty polerujące TWIST™ DIA do kompozytów

- ✓ Elastyczne, spiralne dyski polerujące
- ✓ Wielorazowe, nadają się do sterylizacji w autoklawie
- ✓ Do każdej powierzchni
- ✓ Zawierają cząsteczki diamentu

# Universal Excellence w praktyce



## Kompatybilne materiały CAD/CAM

### 1a. Dobór materiału do odbudowy | Bloczek z tlenku cyrkonu KATANA™ Zirconia Block

- ✓ Wysoka estetyka: zintegrowany gradient koloru i przezierności
- ✓ Wytrzymałość: 763 MPa\*
- ✓ Szybkość pracy: możliwość wykonania pojedynczego uzupełnienia w czasie ok 2h
- ✓ Szeroki wybór odcieni
- ✓ Wszechstronność: odpowiedni nawet do mostów w odcinku bocznym


\* Źródło danych: Kuraray Noritake Dental Inc.



MULTI LAYERED

### 1b. Dobór materiału do odbudowy | Wysokowydajny bloczek kompozytowy KATANA™ AVENCIA™ Block

- ✓ Doskonała polerowalność i trwałość połysku
- ✓ Wysoka odporność na ścieranie i bezpieczeństwo dla zębów przeciwstawnych
- ✓ Znakomite właściwości mechaniczne
- ✓ Idealny wybór dla koron, wkładów typu inlay/onlay oraz nakładów overlay i endokoron

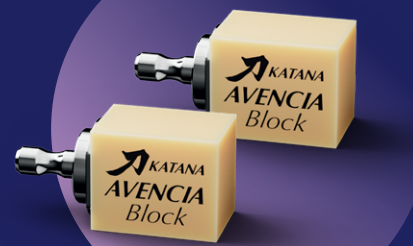

### 1c. Dobór materiału do odbudowy | Wielowarstwowy dysk z tlenku cyrkonu Seria wielowarstwowych dysków KATANA™ Zirconia

- ✓ Dyski cyrkonowe o strukturze wielowarstwowej
- ✓ Zoptymalizowana przezierność dla naturalnej estetyki
- ✓ Wysoka jakość dysków gwarantowana przez zakłady produkcyjne Kuraray Noritake
- ✓ Szeroki zakres wskazań



MULTI LAYERED

# Procedura odbudowy pośredniej

## 2. Oczyszczanie | Preparat do oczyszczania powierzchni KATANA™ Cleaner

- ✓ Środki bezpieczeństwa: oczyszczanie powierzchni dla zoptymalizowanej adhezji
- ✓ Zastosowanie wewnątrz- i zewnątrzrustne, nawet w kanale korzeniowym
- ✓ Silny efekt oczyszczający dzięki zawartości soli MDP



## 3. Wytrawianie | Wytrawiacz w formie żelu na bazie kwasu ortofosforowego K-ETCHANT Syringe

- ✓ Doskonała konsystencja zapewniająca kontrolowaną aplikację i łatwe splukiwanie – szczególnie przydatna podczas selektywnego wytrawiania szkliwa.



## 4. Cementowanie | Samoadhezyjny cement na bazie żywic PANAVIA™ SA Cement Universal

- ✓ Wszechstronny: łączy się z tlenkiem cyrkonu, ceramiką szklaną i stopami metali
- ✓ Nie wymaga stosowania dodatkowych primerów
- ✓ Samoadhezyjna, samotrawiąca, podwójnie utwardzalna formuła
- ✓ Komfortowy i wydajny proces pracy
- ✓ Łatwe usuwanie nadmiarów




Opcjonalnie CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 w połączeniu z PANAVIA™ SA Cement Universal



## 5. Polerowanie | Instrumenty polerujące TWIST™ DIA for Composite / Zirconia


- ✓ Elastyczne spiralne dyski polerujące
- ✓ Wielorazowego użytku, nadają się do sterylizacji w autoklawie
- ✓ Do każdej powierzchni
- ✓ Zawierają cząsteczki diamentu

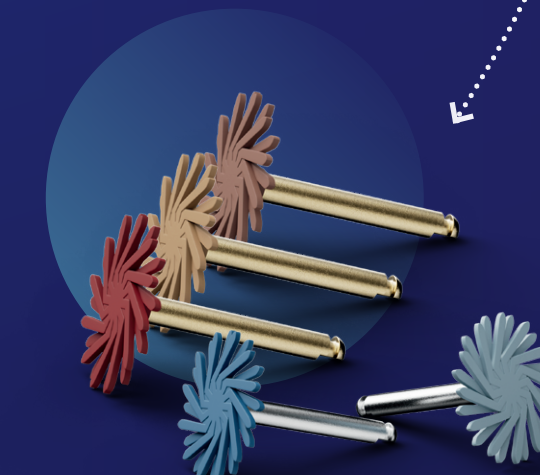

## Goście specjalni

### Odbudowa zrębu pod korony w zębach żywych i martwych CLEARFIL™ DC CORE PLUS

- ✓ Podwójnie utwardzalny, kontrastujący na zdjęciach RTG, dwukomponentowy materiał do odbudowy zrębu pod korony
- ✓ Prosta procedura
- ✓ Aplikacja z końcówki mieszającej (automix)
- ✓ Konsystencja zapobiegająca splywaniu

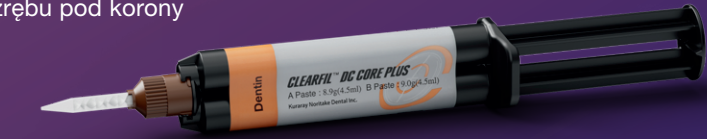

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 to idealne uzupełnienie CLEARFIL™ DC Core Plus



### Trwałe rozwiązanie dla wrażliwych zębów TEETHMATE™ DESENSITIZER

- ✓ Uszczelnia kanaliki zębinowe, wykorzystując zaawansowaną technologię do odbudowy hydroksyapatytu (HAp)
- ✓ Długotrwały efekt zapewniający stały komfort pacjenta
- ✓ Przyjazny dla tkanek i niewidoczny na zębach
- ✓ Neutralny smak
- ✓ Łatwa aplikacja



### Diagnostyka próchnicy CARIES DETECTOR

- ✓ Wizualny marker ułatwiający lokalizację próchnicy – barwi struktury próchnicowe na czerwono podczas preparacji ubytku
- ✓ Pomaga zachować zdolną do remineralizacji zdrową strukturę zębiny

