

PRECYZJA, WYTRZYMAŁOŚĆ I POLEROWALNOŚĆ

Bloczek KATANA™ AVENCIA™

- ✓ Wytrzymałość mechaniczna
- ✓ Doskonała polerowalność
- ✓ Odporność na ścieranie




INNOWACJA, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ


Bloczki KATANA™ AVENCIA™ to nowy typ ceramiki hybrydowej łączący technologię organiczną i nieorganiczną oraz doświadczenie, które zdobyliśmy przez długie lata opracowując i pracując z materiałami do uzupełnień protetycznych. Bloczki mają doskonałe właściwości mechaniczne i wspaniałą odporność na ścieranie, a jednocześnie nie uszkadzają szkliva przeciwstawnych zębów.

WYPRODUKOWANE Z UŻYCIEM INNOWACYJNYCH METOD


Bloczki KATANA™ AVENCIA™ są wytwarzane z wykorzystaniem naszej unikatowej metody produkcji. Nanocząstki wypełniacza gęsto sprasowane w bloczki, są następnie równomiernie infiltrowane żywicą monomerową. Potem żywica jest poddawana polimeryzacji termicznej. Dzięki temu nasz nowy typ ceramiki hybrydowej ma doskonałą wytrzymałość mechaniczną, a także wykazuje doskonałą trwałość polysku.

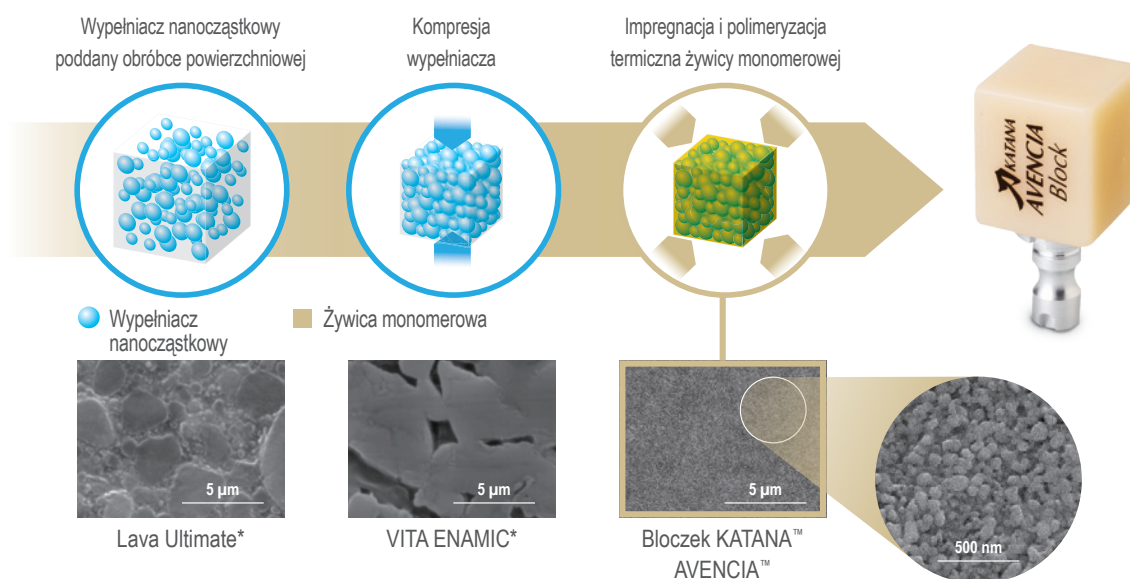

DOSKONAŁA POLEROWALNOŚĆ I DŁUGOTRWAŁY POŁYSK

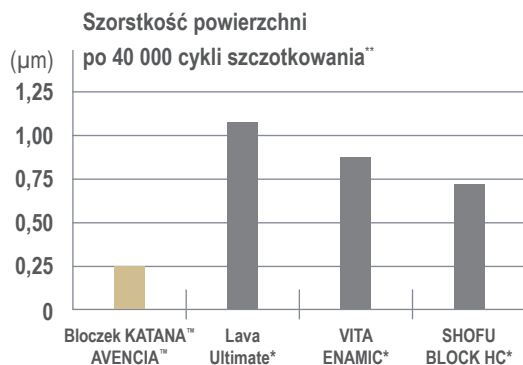

Zdjęcia bloczka KATANA™ AVENCIA™ przed i po 40 000 cykli szczotkowania

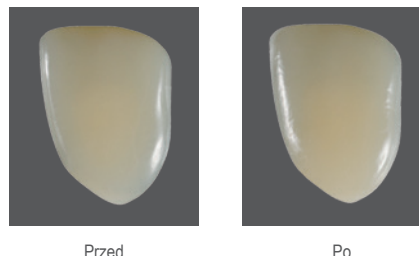

*Nie jest znakiem towarowym firmy Kuraray Noritake Dental Inc. Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc. ** Warunki przeprowadzania badania: Próba ścieralności powierzchni z użyciem szczoteczki i pasty do zębów. Obciążenie: 250 g. Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc. Zdjęcia SEM pokazują mikrostrukturę bloczka KATANA™ AVENCIA™ w porównaniu z innymi materiałami. Bloczki KATANA™ AVENCIA™ mają gęsty i równomiernie rozmieszczony wypełniacz nanocząstkowy.

ZAŁECANE WSKAZANIA I ZASTOSOWANIA




Bloczek KATANA™ AVENCIA™

ROZMIAR I WYBÓR ODCIENI

ROZMIAR BLOCZKA

	a (wysokość)	b (szerokość)	c (długość)
12	10 mm	12 mm	15 mm
14L	14,5 mm	14,5 mm	18 mm

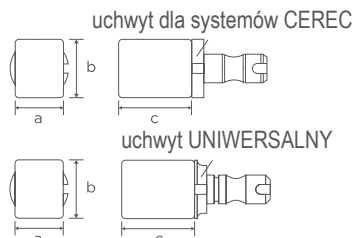

ODCIENIE



NIEZAWODNA ADHEZJA DO KATANA™ AVENCIA™

Niezawodną adhezję do bloczków KATANA™ AVENCIA™ można uzyskać z użyciem cementów PANAVIA™ V5 lub PANAVIA™ SA Cement Universal, który jest najnowszym produktem linii PANAVIA™.

PANAVIA™ V5



PANAVIA™ SA Cement Universal



INFORMACJE O ZAMAWIANIU BLOCZKÓW KATANA™ AVENCIA™

CEREC

Nr katalogowy	Rozmiar	Odcienie STML	Zawartość
#4101-EU	12	A2	5 bloczków
#4102-EU	12	A3	5 bloczków
#4103-EU	12	A3.5	5 bloczków
#4147-EU	14L	A2	5 bloczków
#4148-EU	14L	A3	5 bloczków
#4149-EU	14L	A3.5	5 bloczków

UNIVERSAL

Nr katalogowy	Rozmiar	Odcienie STML	Zawartość
#3650-EU	12	A2	5 bloczków
#3651-EU	12	A3	5 bloczków
#3652-EU	12	A3.5	5 bloczków
#3686-EU	14L	A2	5 bloczków
#3687-EU	14L	A3	5 bloczków
#3688-EU	14L	A3.5	5 bloczków

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową kuraraynoritake.eu/katana-avencia-block

