

SKUTECZNE OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI ZĘBÓW ORAZ UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH PRZED KAŻDĄ PROCEDURĄ ADHEZYJNĄ

KATANA™ Cleaner

do wszystkich stomatologicznych procedur adhezyjnych



KATANA™ Cleaner

Kondycjonowanie powierzchni gwarancją silnej adhezji

Dokładne oczyszczenie uzupełnienia protetycznego, ubytku czy filaru zęba z zanieczyszczeń, powstałych w trakcie preparacji tkanek oraz próbnych przymiarek protetycznych, jest fundamentalne dla uzyskania właściwego połączenia adhezyjnego. **KATANA™ Cleaner** w prosty i skuteczny sposób oczyszcza wszystkie powierzchnie adhezyjne, przygotowując je do procedur bondingu czy cementowania.


KATANA™ Cleaner to jedyny w swoim rodzaju, nieabrazyjny środek dekontaminacyjny, pomagający w osiągnięciu najlepszych warunków adhezyjnych. Preparat zawiera aktywnie działające sole MDP, a dzięki pH o wartości 4,5¹ doskonale nadaje się do kondycjonowania wszystkich powierzchni w warunkach jamy ustnej oraz poza nią.

¹ Metoda pomiaru: JIS Z 8802:2011.

SZEROKI ZAKRES WSKAZAŃ

KATANA™ Cleaner wyróżnia się wartością pH 4,5 dzięki temu wpisuje się na listę łagodnych kondycjonerów, które mogą być stosowane zarówno wewnątrzustnie jak i zewnątrzustnie.

KATANA™ Cleaner to sposób na idealne przygotowanie powierzchni przed cementowaniem lub aplikacją systemu wiążącego.

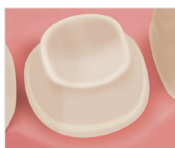

Wewnątrzustnie:

Ubytki, łączniki implantów, kanały korzeniowe, filary zębów.



Zewnątrzustnie:

Ceramika: tlenek cyrkonu, dwukrzemian litu, porcelana dentystyczna.

Materiały na bazie żywic: korony CAD/CAM, kompozyty.

Metale: stopy metali szlachetnych/nieszlachetnych.


Wkłady koronowo-korzeniowe: z włókien szklanych i ze stopów metali.




ŁATWO, SZYBKO I SKUTECZNIE

Wetrzeć, spłukać i osuszyć. To wszystko, co musisz zrobić, aby osiągnąć maksymalną jakość i trwałość połączenia adhezyjnego.

KATANA™ Cleaner wymaga jedynie 10 sekund wcierania, aby skutecznie oczyścić powierzchnię zęba lub korony protetycznej po przymiarce i przygotować je do procedury adhezyjnej.

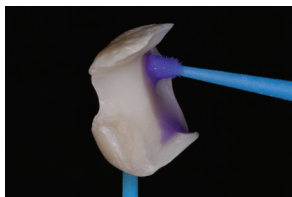

Wcierać przez 10 sekund.

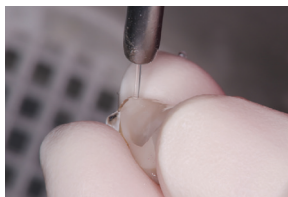

Spłukać i osuszyć.



Cementowanie adhezyjne zgodnie z instrukcją producenta.

Zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości dr Shoji Kato.

PRZEGLĄD PREPARATÓW DO OCZYSZCZANIA*

	KATANA™ Cleaner	IVOCLEAN** (IVOCLEAR VIVADENT)	ZIRCLEAN** (BISCO)
Wewnątrzustnie – tkanki zęba	Tak	Nie	Nie
Wewnątrzustnie – łączniki implantów	Tak	Nie	Nie
Zewnątrzustnie – uzupełnienia protetyczne	Tak	Tak	Tak
Składniki aktywne	Sole MDP (surfaktant)	Wodorotlenek sodu	Wodorotlenek potasu
Wartość pH	4,5	13-13,5	13
Czas aplikacji	10 sekund	20 sekund	20 sekund
Użytkowanie	Bez wstrząsania	Wstrząsnąć przed użyciem	Bez wstrząsania

* Dane zaczerpnięte z oficjalnych instrukcji użycia produktów.

** Nie jest znakiem towarowym Kuraray Noritake Dental Inc.

NUMER KATALOGOWY	NAZWA	POJEMNOŚĆ*
#3970-EU	KATANA™ Cleaner	4,0 ml

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.kuraraynoritake.eu/pl/chairside/katana-cleaner

