

CLEARFIL™ SE BOND

De gouden standaard nu
ook in handige Unit Dose



SPECIAAL INTRODUCTIE-AANBOD: 3+1*

*Bij aanschaf van drie verpakkingen CLEARFIL™ SE BOND 2 Unit Dose één extra verpakking inbegrepen.
Geldig t/m 30/11/2014.

CLEARFIL™ SE BOND 2 - Unit Dose


De vertrouwde CLEARFIL™ SE BOND is nu ook verkrijgbaar als CLEARFIL™ SE BOND 2, in een handige Unit Dose. De CLEARFIL™ 2 SE BOND Unit Dose is direct klaar voor gebruik! Dosereren is niet meer nodig breek simpelweg het dopje van de Unit Dose af en het materiaal is klaar voor gebruik!



HET NUMMER 1 ADHESIEFSYSTEEM

CLEARFIL™ SE BOND hecht superieur aan tandweefsel en vertoont gunstig faalgedrag in klinisch onderzoek¹. Het behoeft geen verdere uitleg dat CLEARFIL™ SE BOND het terechte nummer 1 adhesiefsysteem is!

Jaarlijks falen van adhesieven bij klasse V restauraties (%)

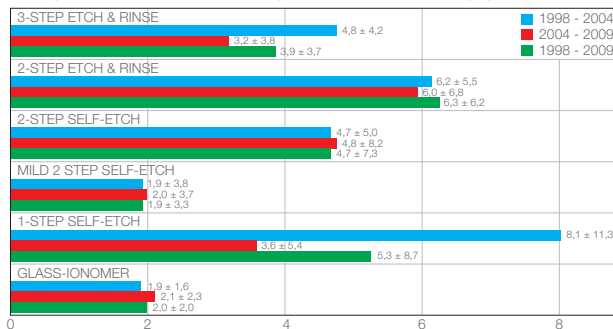

¹ B. Van Meerbeek et al. Review Relationship between bond-strength tests and clinical outcomes. Dent Mater 2009

M. Peumans *et al.* Dent Mater 2010

Eight-year clinical evaluation of a 2-step self-etch adhesive with and without selective enamel etching.

Doel

Het doel van dit onderzoek was het evalueren van de 8-jaars klinische resultaten van een mild zelfetsadhesief (CLEARFIL™ SE BOND) in niet carieuze klasse V-laesies met en zonder selectieve etsing van de glazuurranden van de caviteit.

Resultaat

Na 8 jaar kon 76% van de restauraties worden geëvalueerd. In beide groepen werd 97% van de restauraties als klinisch succesvol beoordeeld.

Significantie

Na acht jaar klinisch functioneren bleef de klinische effectiviteit van CLEARFIL™ SE BOND excellent. Selectief etsen van de glazuurranden had een miniem positief effect op de marginale integriteit en op de afwezigheid van randverkleuring ter plaatse van de glazuur-composietovergang.

N.B.: Dit jaar wordt de 13-jarige follow-up van dit onderzoek gepresenteerd.

Check de resultaten hiervan op www.kuraraydental.nl/clearfil-se-bond/13-jaarsonderzoek.

DE GOUDEN STANDAARD

CLEARFIL™ SE BOND is een mild (pH 2,0) zelfetsend tweestaps adhesiefsysteem voor zowel dentine als glazuur. Onder andere de uitgekiende samenstelling van de zuiverste componenten maakt dat CLEARFIL™ SE BOND steeds de beste resultaten levert. De vele positieve onderzoeksresultaten bevestigen deze resultaten keer op keer. CLEARFIL™ SE BOND is niet voor niets de gouden standaard en het meest gebruikte adhesiefsysteem*.

Kies uw CLEARFIL™ SE BOND verpakking:



CLEARFIL™ SE BOND Kit

- Flesje Primer à 6 ml
- Flesje Bonding à 5 ml
- Intelly-Case
- 2 borstelhouders
- 2 x 50 borsteltjes
- mengschaaltje
- lichtwerend dekseltje



CLEARFIL™ SE BOND 2 Unit Dose

- 50 stuks Primer à 0,1 ml
- 50 stuks Bonding à 0,1 ml
- 100 applicatieborsteltjes

* Marktonderzoek 2013 Indent Nederland

CLEARFIL™ SE BOND vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een ets-en-spoeladhesief (total-etch) en een zelfetsadhesief?

Bij een ets-en-spoeladhesief moet zowel glazuur als dentine vooraf met fosforzuur worden geëtsd. Bij een zelfetsadhesief is de primer een combinatie van een zuur (ets) en een primer. De primer etst en primet het tandweefsel. Daardoor is bij een zelfetsadhesief een aparte etsstap met fosforzuur niet nodig.

De glazuurhechting van zelfetsende systemen is toch minder dan bij ets en spoel systemen?

Door het glazuur te beslijpen wordt de zuurresistente buitenste laag van het glazuur verwijderd en neemt de etsbaarheid toe. Indien glazuur niet beslepen is kan met het etsen met fosforzuur worden volstaan. Het aanbrengen van fosforzuur op alleen glazuur, ook na oppervlakteverruwing met boor of zandstraler, verhoogt de hechting van CLEARFIL™ SE BOND aan glazuur. De hechtwaardes van CLEARFIL™ SE BOND zijn dusdanig hoog, dat dit niet nodig is voor de retentie. Het onderzoek van de vorige pagina laat zien dat er nauwelijks verschil is tussen de restauraties waarbij CLEARFIL™ SE BOND, volgens gebruiksaanwijzing, is aangebracht en waarbij selectief geëtsd is op het glazuur.

Waarom heet de CLEARFIL™ SE BOND in Unit Dose CLEARFIL™ SE BOND 2 Unit Dose?

CLEARFIL™ SE BOND 2 heeft de optie om met een speciale activator ook nog chemisch uit te harden. Deze activator is echter niet in de Benelux verkrijgbaar. In de Benelux-landen wordt voor dual-cure-toepassing meestal gebruik gemaakt van CLEARFIL™ PHOTO BOND of van CLEARFIL™ SE BOND PLUS in combinatie met CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Tevens is het gebruik van CLEARFIL™ LINER BOND 2V of CLEARFIL™ NEW BOND hier mogelijk. CLEARFIL™ SE BOND 2 Unit Dose is uw vertrouwde CLEARFIL™ SE BOND in een handige Unit Dose-verpakking.

Wat doe ik als ik vragen heb over adhesiefsystemen, of wanneer ik (wetenschappelijke) informatie wil ontvangen?

Neem contact op met het CLEARFIL™ Expert Team! (+31 (0) 255 523 701 of +32 (0) 475 61 60 50). Voor alle mogelijke diensten, zie de volgende pagina.





Bent u geïnteresseerd in de Kuraray producten, wilt u ze proberen, de ins en outs bespreken en/of een kennisupdate, individueel of binnen uw IQual/studieclub? Neem dan contact op met het CLEARFIL™ Expert Team. Zij denken graag met u mee over uw tandheelkundige uitdagingen!

- Productinformatie
- Cursussen en hands-on-trainingen
- Kennisdeling aan uw iQual-groep of studieclub
- Productdemonstraties
- Literatuurupdate
- Proceduretechnische vragen

0255 523 701 Nederland

0475 616 050 België

info@kuraraydental.be of info@kuraraydental.nl

Bespreek uw wensen met het CLEARFIL™ Expert Team.

Kuraray Dental Benelux

Nederland: Postbus 299, 1970 AG IJmuiden T: +31 (0)255 523 701 e-mail: info@kuraraydental.nl www.kuraraydental.nl

België: T: +32 (0)475 616 050 e-mail: info@kuraraydental.be www.kuraraydental.be