


Universal Excellence

—
CLEARFIL MAJESTY™
ES-2 Universal



—
KATANA™
Cleaner

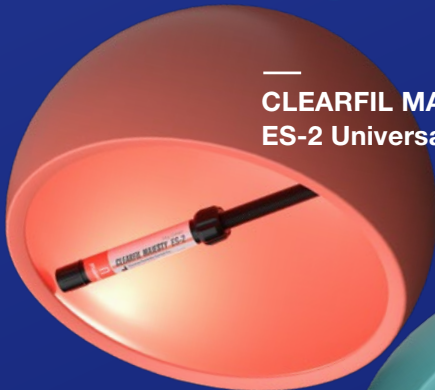

—
CLEARFIL™
Universal Bond Quick 2



—
CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow Universal



—
PANAVIA™
SA Cement
Universal



Smart med effektive løsninger

Færre komponenter
Enkel
Effektive prosedyrer

Hos Kuraray Noritake Dental Inc. forstår vi kravene i moderne tannlegepraksis. Å balansere komplekse prosedyrer, stramme tidsplaner og pasientbehov er ingen enkel oppgave. Derfor har vi gjort en utrettelig innsats og jobbet målrettet med å forenkle, forbedre og finjustere hvert steg i arbeidsprosessen din. Vår visjon er klar: en verden der dine materialer og verktøy fungerer sømløst i dine hender, der kompleksitet minimeres, og der du får nok tid til å fokusere på det som betyr mest – de individuelle ønskene og behovene til hver enkelt pasient. Dette er tannlegens fremtid, og sammen gjør vi den til virkelighet.






Mindre kompleksitet

Hvorfor universelle produkter?

Vi er klar over at det ikke er noen enkel oppgave å balansere effektivitet med kvalitet. Derfor er vi dedikert til å utvikle løsninger som forener begge deler — uten problemer. Våre samstemte produkter, utviklet med banebrytende teknologi, gir intuitiv håndtering og konsekvent pålitelige resultater. Målet? Å frigjøre deg slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe.

Dette er Universell Excellence!

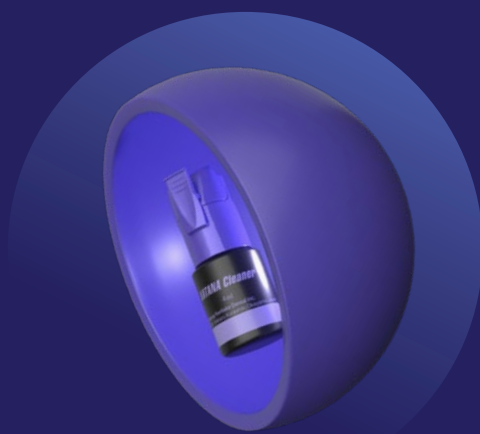


KATANA™
Cleaner

Effektiv
rengjøring



CLEARFIL™
Universal Bond Quick 2


Bonding
gjort enkelt

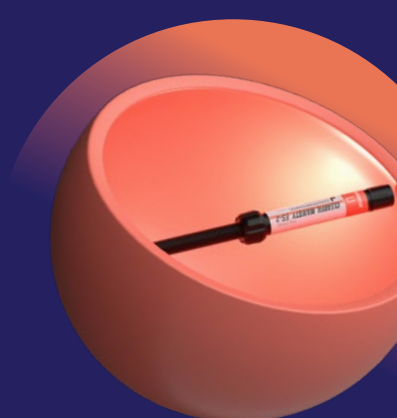

CLEARFIL MAJESTY™
ES-2 Universal

Naturlig
enfargede
restaureringer

Mer selvtillit

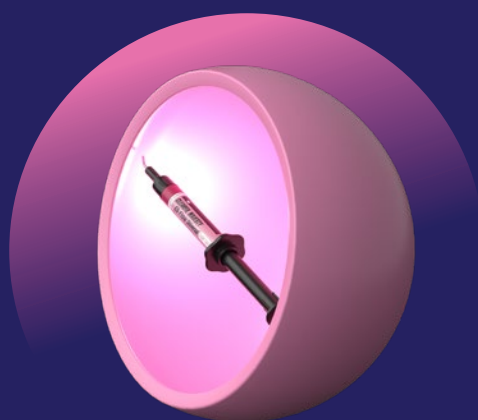

CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow Universal

**Inuitiv
fargeadaptasjon**



PANAVIA™ SA Cement
Universal

**Effektiv
sementering**

Hvorfor universelle prosedyre- løsninger?

Hvert av våre universelle produkter er nøye utformet for å integreres sømløst i arbeidsflyten din.

Men det er synergien mellom disse materialene som virkelig gir de største fordelene. Derfor jobber våre utviklingsteam i Japan tett sammen — for å sikre at hvert produkt er perfekt tilpasset.



Samkjørt teknologi

Våre produkter er laget for å fungere sammen og designet for å arbeide i harmoni. Dette frigjør tankene dine fra komplekse prosedyrer og lar deg fokusere på pasientbehandlingen.

Intuitivt og fleksibelt

Våre Universal Excellence-produkter er enkle å behandle og krever få steg. De enkelte produktene er også compatible med andre Kuraray Noritake-produkter. Velg fritt og effektiviser ditt daglige arbeid med Universal Excellence.

Støtter minimalt invasive teknikker

Vi utvikler løsninger som støtter skånsomme, defektorienterte behandlinger – alltid med pasientens velvære i fokus.

Effektiv lagerstyring, mindre avfall

Med færre komponenter å lagre vil teamet ditt enkelt kunne håndtere lagerbeholdningen, samtidig som du bidrar positivt til miljøet ved å redusere avfall.

Direkte tannbehandling

Færre komponenter, maksimal effektivitet

Enten du skal restaurere en anterior eller en posterior kavitet, har vi den riktige produktkombinasjonen for deg. Den er tilpasset dine preferanser samtidig som den støtter dine beslutninger. Slik effektiviserer våre produkter dine restaureringsprosedyrer:

Forberedelse

Etter tannpreparering, bruk KATANA™ Cleaner for å fjerne forurensninger. Den gir en høy rengjøringseffekt takket være MDP-saltet.

Bonding

Påfør CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 med ønsket etsningsteknikk. Ett lag — ingen ventetid — reduserer risikoen for kontaminering og skaper en sterk, jevn binding uten ansamlinger.

Fylling

For kavitetrestaurering tilbyr CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal en universell paste-type løsning med et smart fargekonsept og god håndtering. Alternativt kan du bruke CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal for utmerket fargetilpasning med kun to nyanser. Den har mekaniske egenskaper som matcher paste-kompositter.

Avslutning og polering

Avslutning og polering av restaureringer fra CLEARFIL MAJESTY™ ES-serien er raskt og enkelt takket være avansert filler-teknologi. TWIST™ DIA for Composite er det perfekte verktøyet for å oppnå høy glans.

Protetisk tannbehandling

Sterk binding, lang levetida

Levetiden til indirekte restaureringer med lav eller begrenset retensjon fra prepareringen avhenger i stor grad av kvaliteten på bindingen. Adhesive sementering er derfor veien å gå. Selv i situasjoner hvor adhesiv sementering ikke er påkrevd, er det ofte likevel fordelaktig – spesielt når prosedyren er enkel og ukomplisert. Vår selvadhesive PANAVIA™ SA Cement Universal tilbyr en rekke fordeler i den daglige sementeringsprosedyren.

Forberedelse

Utfør nødvendige forberedelser og ta ditt (digitale) avtrykk. Velg ønsket materiale for den indirekte restaureringen. For eksempel kan KATANA™ Multi-Layered Zirconia brukes monolittisk – selv i den estetiske sonen – enten alene eller i kombinasjon med mikrolag-påføring.

Prøveinnsetting og rengjøring


Etter prøveinnsetting kan restaureringen være kontaminert. Det er best praksis å starte forbehandlingen for adhesiv sementering på dette tidspunktet. Dersom forbehandling allerede er utført av tanntekniker før prøveinnsetting, er KATANA™ Cleaner en effektiv løsning for å fjerne eventuell kontaminasjon fra protesen. Gni rengjøringsmiddelet inn i den adhesive flaten i ti sekunder, skyll godt og tørk.

Sementering

Etter rengjøring sementeres restaureringen med PANAVIA™ SA Cement Universal. Denne gir sterk binding til både zirkoniumdioksid og glasskeramer takket være de proprietære LCSi- og MDP-monomerene. Ingen separate primere er nødvendig. Bruk CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 for å forsterke bindingen til tannsubstans.




Fem produkter - i detalj

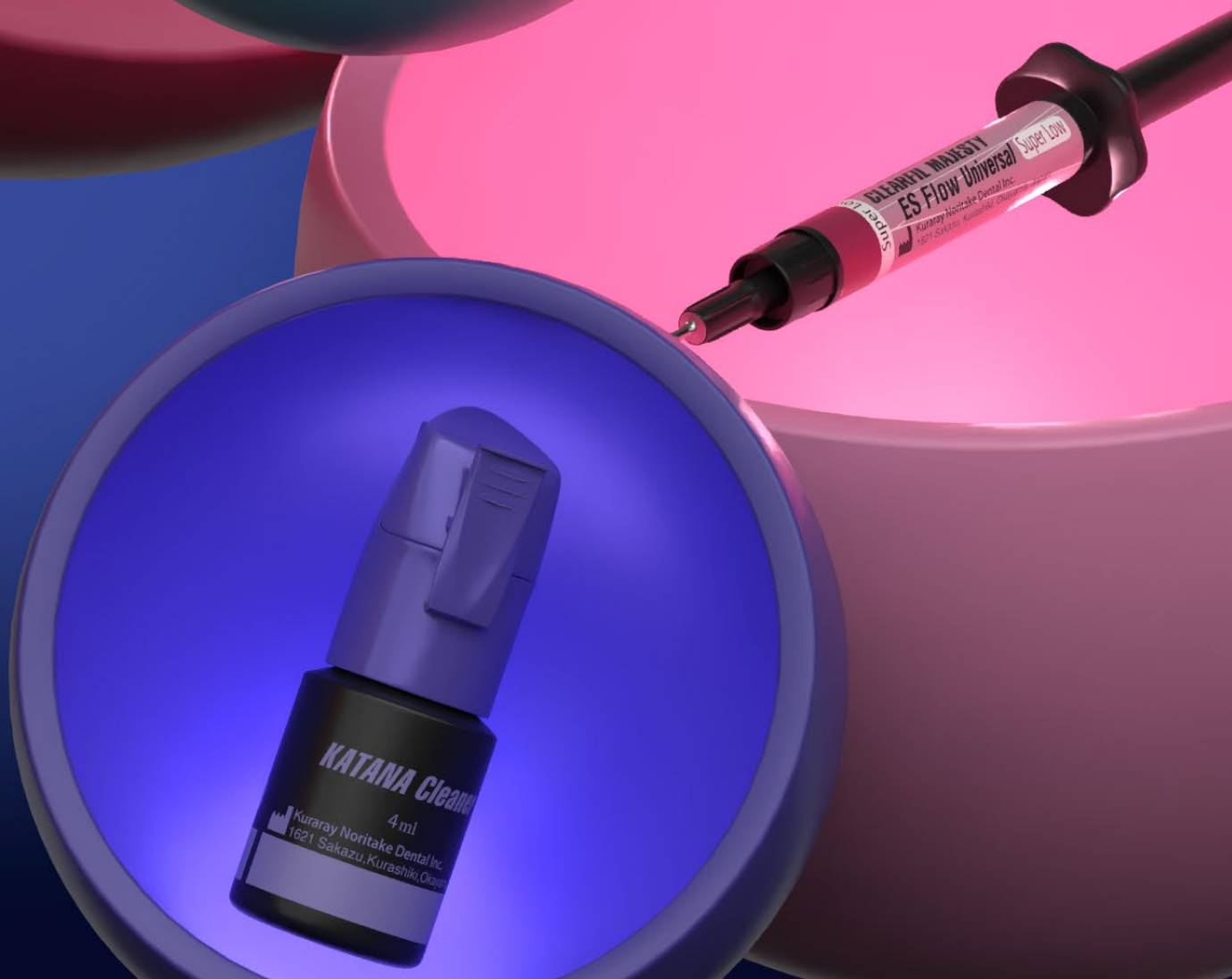

KATANA™ Cleaner

Effektiv rengjøring

En ren overflate er avgjørende for optimal adhesjon. KATANA™ Cleaner er spesielt utviklet for raskt og effektivt å fjerne kontaminanter fra både tannoverflater og restaureringer. Det overflateaktive MDP-saltet, som stammer fra originalt MDP, virker etter bare 10 sekunder med aktiv påføring og gjenoppretter en ren, høyenergetisk bindingsflate. Den raskeste veien til en sterk og pålitelig binding.

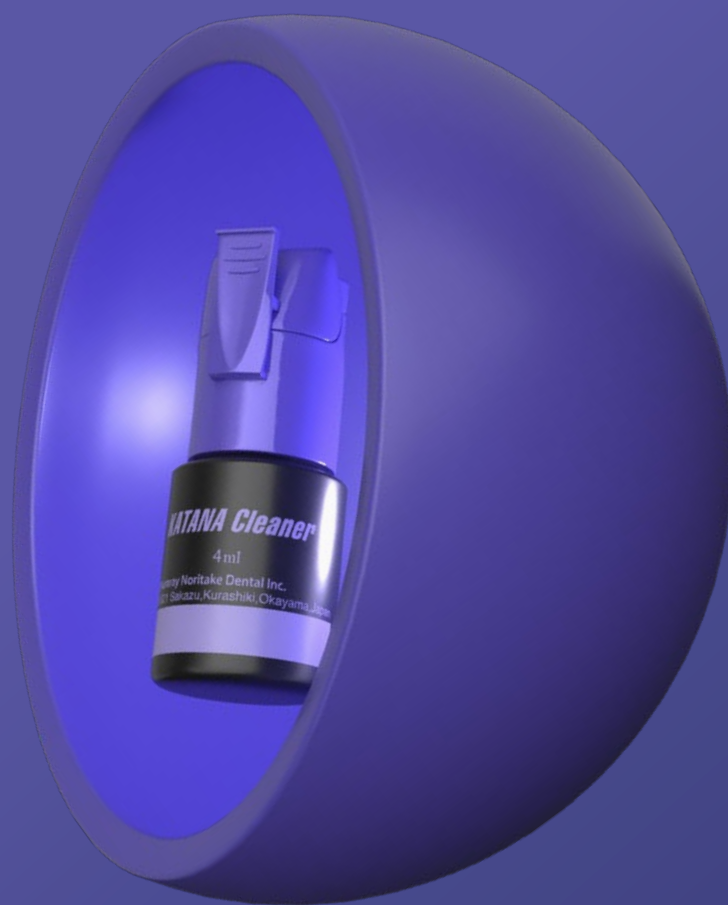

Rask og effektiv

Bruk KATANA™ Cleaner når du trenger en enkel og hurtig rengjøringsprosess som klargjør overflaten for bonding eller sementering. Påfør og gni i 10 sekunder, skyll og tørk – så er overflaten klar for sementering.

Intra- og ekstraoralt bruk

I motsetning til andre rengjøringsmidler har KATANA™ Cleaner en pH-verdi på 4,5, noe som gjør at den trygt kan brukes både intraoralt og ekstraoralt.

Allsidig på ulike underlag

Enten det gjelder rengjøring av tannoverflater eller restaureringsmaterialer, bidrar KATANA™ Cleaner til en pålitelig binding.

Nøkkelpåkomponenten bak den høye renseeffekten

KATANA™ Cleaner inneholder MDP-salt, basert på 10-Methacryloyloxydecyl Dihydrogen Phosphate. Når det påføres en kontaminert overflate, rengjør det effektivt og grundig. Med en rask og enkel prosedyre gjenoppretter KATANA™ Cleaner optimale bindingsforhold både på tannoverflaten og restaureringen.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

**Alt-i-ett
bonding**

Utviklet for å forbedre arbeidsflyten din, CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 gir pålitelig ytelse i en rekke kliniske situasjoner. Dette moderne universelle ett-trinns adhesivet er kjernen i Universal Excellence-porteføljen. Det er svært raskt og enkelt å bruke: Appliser, tørk og herde. Bruk det til både direkte og indirekte adhesjonsprosedyrer, i kombinasjon med lys- og dualherdende resinbaserte materialer.



Rask prosedyre

Uten ventetid er påføringen rask og forenkler arbeidsflyten.

Konsistent sterk og holdbar binding

Ved bruk av avansert monomerteknologi skaper adhesivet en forbedret binding til emalje, dentin og kompositt, noe som gir langvarige restaureringer.

Forbedret flytbarhet

Forbedret flytbarhet skaper et tynt, jevnt bindelag. Dette minimerer risikoen for oppsamling og bevarer den nøyaktige morfologien til preparasjonen.

Hemmeligheten bak hastighet, pålitelighet og allsidighet: Avansert monomerteknologi

Original MDP-monomer Ansvarlig for en sterk og varig binding til hydroksyapatitt og et bredt spekter av restaureringsmaterialer.


Amid-monomer Gir rask gjennomtrengning i tannstrukturen og danner et stabilt, hydrofobt kryssbundet nettverk under polymerisering.

Uretan Tetra Metakrylat (UTMA)-monomer Etablerer et spesielt tynt, sterkt og stabilt bindingslag, og forbedrer styrken i bindingslaget. Dette resulterer i økt motstand mot krympingskrefter.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

**Optimaliserer
restaureringer
med én farge**

CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal ble utviklet for å eliminere behovet for nyansevalg og øke klinisk effektivitet – uten å gå på bekostning av estetiske resultater. Serien består av kun tre nyanser. Forbedret Light Diffusion-teknologi gjør at kompositten naturlig blander inn i tannstrukturen, noe som reduserer antall valg og gir økt trygghet for et vellykket resultat.

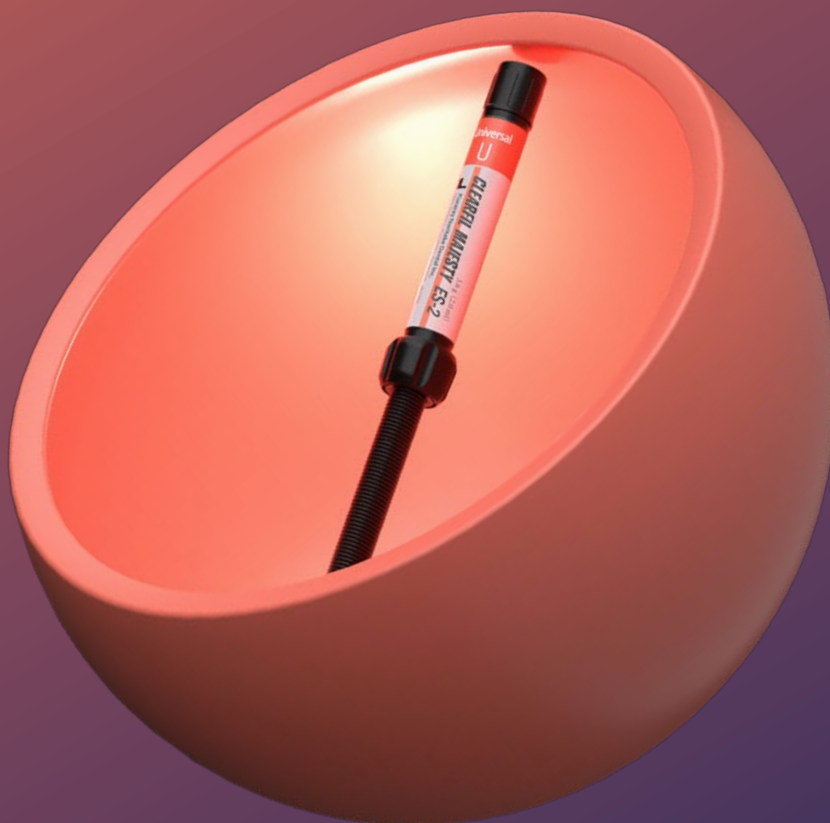

Forenklet arbeidsflyt

Takket være et redusert antall nyanser kan du skape vakre restaureringer med minimal innsats.

Problemfri håndtering

Kompositten har enkel formbarhet, kleber ikke og gir lang arbeidstid – effektiv og lett å jobbe med.

Varig ytelse

Siden de fleste direkte kompositter plasseres i det posteriore området, er god ytelse avgjørende. CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal har utmerket slitasjemotstand, lav polymerisasjonsstress og naturlig optisk integrasjon. Den poleres lett og beholder en høyglanset, emaljelignende overflate – selv etter langvarig tannbørsting.

Nøkkelen til god nyansetilpasning og mekaniske egenskaper

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal benytter egenutviklet Light Diffusion-teknologi som gjør at materialet blander sømløst inn i den omkringliggende tannstrukturen. Den optimale balansen mellom submikronfyllstoffer, fyllstoffinnhold, resinmatrise og egen silanteknologi gir en velavstemt kombinasjon av mekaniske og optiske egenskaper.

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

**Intuitiv
nyansetilpasning
i flytende form**

Denne innovative flytende kompositten, tilgjengelig i to flyteevner, gjør nyansetilpasning til en enkel oppgave — uten behov for fargeguide! Med bare to komplementære nyanser, U og UD, blander den sømløst inn med den omkringliggende tannstrukturen, og gir deg mulighet til å lage vakre restaureringer med minimalt arbeid. Dens mange egenskaper og fordeler åpner for et bredt spekter av bruksområder.



Uanstrengte resultater

Med kun to nyanser tilgjengelig og naturlige blandingsegenskaper, er det bare noen få enkle steg for å oppnå eksepsjonelle resultater.

Behagelig flyteegenskaper

Tilpass flyten etter ditt spesifikke tilfelle – velg mellom Lav eller Super Lav flyt. Begge variantene sikrer enkel dosering og lett modellering, noe som gjør arbeidet ditt til en fornøyelse.

Bredt indikasjonsområde

Takket være mekaniske egenskaper som kan måle seg med paste-type kompositter, egner denne flytende kompositten seg godt også i belastede områder, som okklusalflaten.

Velbalansert fargematching og styrke

En smart kombinasjon av emaljelignende translucens, dentinlignende kromatisitet og Light-Diffusion-teknologi gjør det mulig å oppnå imponerende fargekombinasjoner til tross for det begrensede nyanseutvalget. Samtidig er Submikron Filler-teknologien hemmeligheten bak den imponerende styrken og glansbevaringen.

PANAVIA™ SA Cement Universal

Effektiv sementer

PANAVIA™ SA Cement Universal, som representerer essensen av smarte løsninger, forenkler sementeringsprosessen ved å fjerne unødvendige steg. Det er ikke behov for en egen primer – påfør bare sementen og fortsett med restaureringen. Utformet for å fungere utmerket med ulike restaureringsmaterialer, inkludert glasskeramikk, gir denne sementen økt trygghet i resultatene.



Ett-trinns sement

Utviklet for å binde til zirconia, metall, kompositt og glasskeramikk, og eliminerer behovet for ekstra primer, noe som gjør arbeidsflyten din enklere enn noen gang.

Enkel i bruk

Mens produktet forenkler prosessen, gir det også lett håndtering, enkel dosering og ukomplisert fjerning av overskudd for en problemfri opplevelse.

Frihet til å velge

Ønsker du å øke bindingen til tannstrukturen i enkelte situasjoner, kan du gjerne bruke CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 for ekstra styrke.

Formelen for suksess med færre trinn og høy ytelse

Den unike LCSi-monomeren i PANAIA™ SA Cement Universal danner en robust kjemisk binding med resin-kompositter, porselen og silikatkeramikk som litiumdisilikat. Samtidig er Original MDP-monomeren ansvarlig for sterk kjemisk adhesjon til tannsubstans, zirkoniumdioksid og metall. Denne smarte kombinasjonen av monomerer gjør at det selvadhesive, dualherdende resinsementet gir en kraftig og holdbar binding – uten behov for separat primer.



Bestillingsinformasjon

KATANA™ Cleaner

#3970-EU 4.0 ml x 1 bottle

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

#4042-EU Bottle Refill 5.0 ml x 1 bottle

#4044-EU Bottle Value Pack 5.0 ml x 3 bottles

#4046-EU Unit Dose Standard Pack 0.1 ml Unit Dose x 50, applic. brush fine silver x 50 pcs

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

#4600-EU Low (U) 1 syringe 1.5 ml, 15 needle tips

#4601-EU Low (UD) 1 syringe 1.5 ml, 15 needle tips

#4620-EU Super Low (U) 1 syringe 1.5 ml, 15 needle tips

#4621-EU Super Low (UD) 1 syringe 1.5 ml, 15 needle tips

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

#3181-EU Universal (U) 1 syringe 2.0 ml

#3183-EU Universal Light (UL) 1 syringe 2.0 ml

#3184-EU Universal Dark (UD) 1 syringe 2.0 ml

#3182-EU Universal White (UW) 1 syringe 2.0 ml

#3191-EU Universal (U) 20 PLT's 0.25 g

#3193-EU Universal Light (UL) 20 PLT's 0.25 g

#3194-EU Universal Dark (UD) 20 PLT's 0.25 g

#3192-EU Universal White (UW) 20 PLT's 0.25 g

PANAVIA™ SA Cement Universal

#4202-EU Handmix Universal (A2) 1 syringe 5.0 ml

#4203-EU Handmix White 1 syringe 5.0 ml

#4204-EU Handmix Translucent 1 syringe 5.0 ml

#4212-EU Automix Universal (A2) 1 syringe 8.2 g, 20 Mixing tips

#4213-EU Automix White 1 syringe 8.2 g, 20 Mixing tips

#4214-EU Automix Translucent 1 syringe 8.2 g, 20 Mixing tips



Smartere
løsninger
i praksis



UE Universal
Excellence

Your contact

**Kuraray Europe Benelux,
Nordics, Baltics, UK & Ireland**

Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, The Netherlands
PO-box 299, 1970 AG IJmuiden, The Netherlands
info@kireland@kuraray.com
Website www.kuraraynoritake.eu



EU Importeur

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone +49 (0)69 305 35 835
Fax +49 (0)69 305 98 35 835
www.kuraraynoritake.eu
centralmarketing@kuraray.com

- Før bruk av disse produktene, sørg for å lese bruksanvisningen som følger med produktet.
- Spesifikasjoner og utseende på produktet kan endres uten varsel.
- Trykket farge kan avvike noe fra faktisk farge.

"CLEARFIL" "PANAVIA" and "CLEARFIL MAJESTY" are trademarks of KURARAY CO., LTD.
"KATANA" is a trademark of NORITAKE CO., LIMITED.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Website www.kuraraynoritake.com

CE 0197

