

CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW



- ✓ **TRWAŁY POŁYSK**
- ✓ **ŁATWOŚĆ POLEROWANIA**
- ✓ **WYTRZYMAŁOŚĆ WYPEŁNIEŃ**
- ✓ **DO WSZYSTKICH KLAS UBYTKÓW**


WSKAZANIA

- ✓ Bezpośrednia odbudowa ubytków wszystkich klas, w tym: przyszyjkowych, starc oraz uszkodzeń erozyjnych
- ✓ Podkład typu base/liner
- ✓ Korekta kształtu i pozycji zęba
- ✓ Wewnątrzustne naprawy wypełnień
- ✓ Cementowanie ceramicznych i kompozytowych wkładów koronowych typu inlay, onlay oraz licówek o grubości do 2 mm

WYJĄTKOWA ŁATWOŚĆ POLEROWANIA ORAZ TRWAŁOŚĆ POŁYSKU

Specjalne submikronowe cząstki wypełniacza łączą się i pozostają zwarte, dzięki opatentowanemu silanowi firmy Kuraray Noritake Dental. Dzięki temu wypełnienia wykonane materiałem CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow uzyskują znakomity połysk powierzchni, a samo polerowanie staje się niezwykle efektywne i łatwe. Zjawiska optyczne, powstające na skutek rozpraszania światła przez klastrowy rodzaj wypełniaczy, zapewniają doskonałą adaptację kolorów, idealne dopasowywanie się do koloru tkanki zęba co umożliwia tworzenie wysoce estetycznych uzupełnień.

Wyjątkowy połysk oraz trwale gładka powierzchnia*

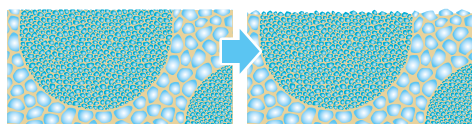

Po polerowaniu

Po ścieraniu

* schemat

3 RÓŻNE PŁYNNOŚCI

Ten sprawdzony i ceniony kompozyt jest dostępny w trzech, różnych konsystencjach. Dzięki temu możesz dobrać produkt doskonale dostosowany do Twoich potrzeb – zapewniający trwałe, estetyczne i łatwe do wykonania wypełnienia.



MATERIAŁ TYPU FLOW O WYTRZYMAŁOŚCI TRADYCYJNEGO KOMPOZYTU


Opatentowany przez Kuraray Noritake Dental silan, użyty jako środek sprzęgający, warunkuje dużą ilość cząstek wypełniacza (do 78% wag., 64% obj.) w materiale typu flow. Zapewnia tym samym doskonałe właściwości mechaniczne, dzięki czemu ten płynny kompozyt jest odpowiedni nawet do odbudowy zębów bocznych.

NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Specjalnie zaprojektowany kształt i wielkość cząsteczek zapewniają precyzyjną aplikację i łatwe modelowanie, co czyni z CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow kompozyt o doskonałych właściwościach użytkowych.


- ✓ Materiał nie klei się do narzędzi
- ✓ Dzięki specjalnej konstrukcji wewnętrznej strzykawki, zminimalizowano możliwość powstawania pęcherzyków powietrza podczas aplikacji

Połysk (%)¹

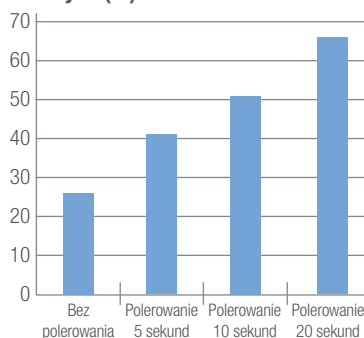

¹ Źródło: Kuraray Noritake Dental. Dane dotyczą wyników uzyskanych na grupie kompozytów płynnych.

Test ścieralności¹

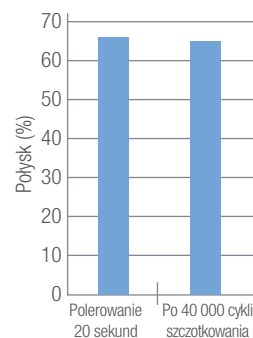

STOPIEŃ PŁYNNOŚCI



NISKA PŁYNNOŚĆ

- ✓ Zachowuje pożądany kształt
- ✓ Idealny do odbudowy guzków oraz listew brzęchnych w odcinku bocznym
- ✓ Do ubytków klas I oraz V



ŚREDNIA PŁYNNOŚĆ

- ✓ Do szerokiego zakresu wskazań, wypełnień w odcinku przednim i bocznym



WYSOKA PŁYNNOŚĆ

- ✓ Doskonała zwilżalność tkanek oraz adaptacja
- ✓ Do małych ubytków
- ✓ Jako podkład typu liner



WYPEŁNIENIE NAPRAWA CEMENT

CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW



Wysoka płynność (High)

Średnia płynność (Low)

Niska płynność (Super Low)

KOREKTA KSZTAŁTU? UBYTEK KLASY V?

CEMENTOWANIE? A MOŻE PODNIESIENIE ZWARCIA?

JEDYNY FLOW, KTÓRY MOŻE WSZYSTKO.

Uniwersalny kompozyt o płynnej konsystencji przeznaczony do wszystkich klas ubytków. Dostępny w trzech różnych gęstościach. Ilość wypełniacza równa materiałom o tradycyjnej konsystencji warunkuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i estetykę. Konsystencja typu flow ułatwia aplikację.

