
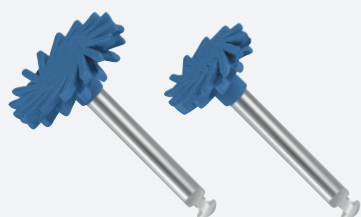



LUSTRIRE CU

TWIST™ DIA pentru Compozite

Luciu natural în doar 2 pași

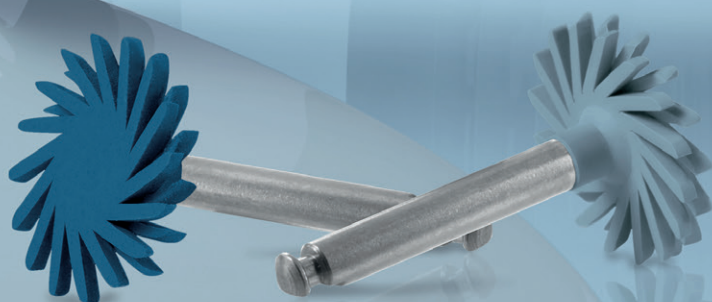

● **MEDIE**
PRE-LUSTRIRE

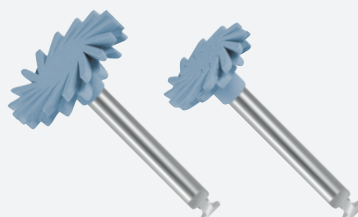

● **FINĂ**
LUCIU SUPERIOR

CEA MAI SIMPLĂ MODALITATE DE A CREA UN LUCIU NATURAL

TWIST™ DIA este indicat pentru toate tipurile de compozite. Guma „pre-lustruire” creează forma finală din orice unghi imaginabil. Cu guma „high-shine”, puteți obține un rezultat natural cu un luciu intens în câteva secunde. TWIST™ DIA este autoclavabil și, prin urmare, reutilizabil. Combinația de componente flexibile și particule de diamant vă oferă un rezultat cu un luciu intens fără precedent, la fiecare utilizare!

BENEFICII

- Procedură ușoară de lustruire cu numai 2 gume de lustruit
 - Guma „pre-lustruire” pentru netezirea suprafeței
 - Guma „high-shine” pentru a crea un luciu natural
- Sterilizabil și reutilizabil
- Eficiență economică datorită durabilității crescute și reutilizării
- Conține 100% granule de diamant – fără înlocuitori sau particule abrazive mai ieftine



**SCANAȚI PENTRU A VEDEA
INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE**



Ocluzal



Incizal



Vestibular



Vestibular



Lingual



Interproximal

VITEZE DE ROTAȚIE RECOMANDATE ȘI MAXIME

Viteză recomandată: 3.000 – 8.000 rpm pentru Mediu/Fin

Viteză maximă: 20.000 rpm

TWIST™ DIA pentru Compozite

Sistem de finisare și lustruire compozit

#1201-IP Kit introductiv 14mm (6 buc)

#1202-IP Rezervă "pre-lustruire" 14mm (10 buc)

#1203-IP Rezervă "high-shine" 14mm (10 buc)

#1204-IP Testare 14mm (2 buc)

#1211-IP Kit introductiv 10mm (6 buc)

#1212-IP Rezervă "pre-lustruire" 10mm (10 buc)

#1213-IP Rezervă "high-shine" 10mm (10 buc)

#1214-IP Testare 10mm (2 buc)

#1221-IP Kit combinat "pre-lustruire" (10 buc)

#1222-IP Kit combinat "high-shine" (10 buc)

LUSTRUIȚI ZIRCONIU CU TWIST™ DIA

Forma inovatoare cu lamele flexibile de lustruire oferă medicului stomatolog diverse beneficii de aplicare pentru rezultate excelente de lustruire. Aflați mai multe: kuraraynoritake.eu/twist-dia

Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că ați citit Instrucțiunile de utilizare ale produsului.

Specificațiile și aspectul produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă. Culoarea imprimată poate fi ușor diferită de culoarea reală.

Distribuit de:

Kuraray Europe GmbH, BU Medical Products, Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Germania, +48 662 281 282, dental-EasternEurope@kuraray.com, www.kuraraynoritake.eu/ro



06/2021